

**NOWY
MODEL
2018**



CZYSTA INNOWACJA

Nowa wersja modelu S320TR została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampa pola pracy VENUS MCT z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym; cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta, wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia; bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylenie podajnika na boki oraz panel stereo-


wania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Poza nowościami unit został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok stojący na podłożu z niezależnie pracującym fotelem.

Opcjonalnie w wyposażeniu unitu mogą znaleźć się takie elementy jak: mikrosilnik endodontyczny z funkcją obsługi instrumentów o ruchu oscylacyjnym (RECIPROC®/WAVEONE®), zintegrowany endometr, pompa perystaltyczna z mikrosilnikiem z funkcją IMPLANT, miękka tapicerka z pamięcią kształtu, zintegrowana kamera wewnątrzustna w jakości HD, zintegrowany rentgen punktowy i radiografia cyfrowa marki MYRAY.

DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI



OPARCIE DO WYBORU

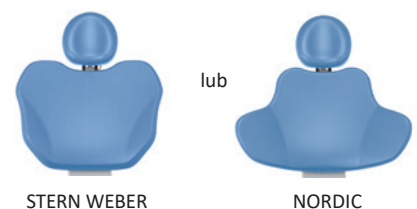

Standardowa konfiguracja unitu Stern Weber S320 TR Continental - nowy model 2018

■ Nowa konsola lekarza z rękawami od góry wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED CEFLA z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)



- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- opcjonalnie: 6 instrument z lewej strony konsoli: radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-X lub kamera MYRAY C-U2 lub lampa polimeryzacyjna T-LED

■ Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA - dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnątrzustną MYRAY C-U2 (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej



■ Nowy elektromechaniczny fotel dentystyczny STERN WEBER 320P TR (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
- dwa typu oparcia: klasyczne STERN WEBER i nowe NORDIC dedykowane do pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka
- ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka



■ Nowa diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT (regulowana temperatura barwowa od 4300K do 5600K):

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe - 4300K, światło neutralne - 5000K, światło zimne - 5600K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

■ Nowy blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- konsola asystencka z podwójnym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta



POWYŻSZE WYPOSAŻENIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM, KTÓRE MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONE. ZAPRASZAMY DO SALONU FIRMOWEGO, GDZIE NASI SPECJALIŚCI ZAPREZENTUJĄ PRODUKTY I DORADZĄ NAJLEPSZE DLA PAŃSTWA ROZWIĄZANIA.



STERN WEBER POLSKA

ul. Kosmatki 26 ■ 03-982 Warszawa ■ tel.: 22 395 56 00 ■ e-mail: sternweber@sternweber.pl
www.sternweber.pl ■ www.facebook.com/sternweberpolska