


KRZESŁO DENTYSTYCZNE SUPPORT

Mamy przyjemność przedstawić Państwu jeden z najbardziej wygodnych, funkcjonalnych i zdrowych stołków dentystycznych. Projektantem stołków firmy SUPPORT DESIGN o nazwie SUPPORT (ang. podparcie) jest profesor Bruno Mathsson z Uniwersytetu Chalmers w Göteborgu w Szwecji. Stołki SUPPORT zostały specjalnie zaprojektowane dla stomatologów.

Mając na uwadze dużą liczbę chorób zawodowych dentystów oraz często nienaturalną pozycję pracy, wygodny i ergonomiczny stołek staje się bezcenny. Krzesło SUPPORT eliminuje kłopoty z kręgosłupem. Dźwignia, znajdującą się w łatwo dostępnym miejscu, pozwala nie tylko unieść i opuścić siedzisko stołka, ale również wyregulować kąt oparcia i głębokość pozycji lekarza. Oparcie może być ustawione w funkcji podążania za ruchem pleców operatora (pochylenie w kierunku pacjenta i prostowanie) wraz z płynną zmianą kąta położenia siedziska. Dzięki „kubelkowemu” kształtowi siedziska lekarz siedzi pewnie i nie zsuwa się nawet przy pochyleniu. Oparcie posiada również regulację wysokości. Powyższe cechy pozwoliły na maksymalnie indywidualne określenie pozycji pracy przy fotelu w sposób szybki i wygodny. Dwa rozmiary średnicy podstawy stołka umożliwiają pracę zarówno na godzinie 9., jak i 12. Moment zmęczenia na stołku SUPPORT pojawia się znacznie później niż podczas pracy na tradycyjnym krzeselku. Dostępne są również akcesoria do stołków, takie jak: nierdzewne okrągłe oparcie pod stopy, nożny regulator wysokości siedziska i różne rodzaje podłokietników. Na szczególną uwagę zasługuje podłokietnik RELAX, który podtrzymując ramię lekarza pozwala na swobodny ruch w poziomie, redukując jego ciężar do minimum.

Stołki SUPPORT oferowane są z tapicerką skórzaną bądź winylową w 34 kolorach. Stołki SUPPORT zdobyły ogromne uznanie na całym Świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Niemczech.

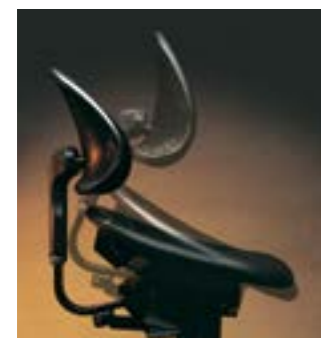

Aktywne oparcie i siedzisko gwarantują optymalne podparcie lędźwiowe w każdej pozycji pracy



Podłokietnik RELAX minimalizuje zmęczenie operatora



Możliwość wyboru wysokości teleskopu



Support
Tapicerka skórzana



Support
Tapicerka winylowa



Support
Tapicerka winylowa Stern Weber

NAJLEPSZY PRZYJACIEL TWOICH PLECÓW

Dlaczego „Support”?



- 1 Aktywne oparcie stołka gwarantuje optymalne podparcie lędźwiowe w każdej pozycji pracy.
- 2 Zmiana kąta nachylenia siedziska eliminuje ucisk krawędzią siedziska na naczynia krwionośne nóg.
- 3 Średnica (62 cm) podstawy stołka pozwala na pracę z boku lub z tyłu pacjenta.
- 4 Trzy wysokości teleskopu pozwalają na dostosowanie stołka do wzrostu użytkownika.
- 5 Podłokietniki dostępne w kilku wariantach, podtrzymując ramię operatora, redukują jego ciężar do minimum.
- 6 Wszystkie funkcje stołka wywołuje się tylko jedną dźwignią.

Twoje zdrowie jest najważniejsze!

krzesła dentystyczne	cena (PLN)
SUPPORT (tapicerka winylowa kolor ciemnoszary) PROMOCJA	4200
SUPPORT (tapicerka winylowa)	5400
SUPPORT (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	6600

KRZESŁO DENTYSTYCZNE STATERA

Statera **NOWOŚĆ**

Nowatorskie rozwiązanie łączące ergonomię siodła z wygodą użytkownika klasycznego krzesła.

**Mechanizm**

Trwały metalowy mechanizm, z bezstopniową regulacją pozycji oparcia oraz siedziska. Osobne dźwignie zlokalizowane pod siedziskiem.

Siedzisko i Oparcie

Wyposażone w elastyczną gąbkę. Siedzisko z regulacją wysokości i kąta pochylecia. Oparcie z regulacją wysokości i głębokości.

Tapicerka

Dostępna wersja skórzana, winylowa oraz winylowa STERN WEBER. Wyposażona w elastyczną piankę. Obicie można samodzielnie zdjąć.

Teleskop

Dostępny w trzech rozmiarach. Bezobsługowy gazowy siłownik, wypełniony obojętnym azotem.

Kółka

Osadzone na pięcioramiennym metalowym stelażu, cichobieżne kółka. Wymienne, wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Krzesło może posiadać oparcie: OBŁE podpierające plecy lub CORE+ obejmujące dodatkowo talię. Jest także dostępne bez oparcia w formie taboretu.

POŁĄCZENIE TRADYCYJNEGO KRZESŁA I SIODŁA

Statera to najnowsza propozycja szwedzkiego producenta ergonomicznych krzeseł Support Design. Opatentowane siedzisko zaprojektowano z myślą o długim siedzeniu w wymagających warunkach. Siedzisko zawiera cechy siodła sprzyjające zachowaniu poprawnej postawy, przy jednoczesnej wygodzie klasycznego krzesła. Pomaga użytkownikowi zająć pozycję zmniejszającą napięcie statyczne szyi, ramion i pleców.

Regulacja położenia siedziska i oparcia odbywa się niezależnie i bezstopniowo. Każda ruchomość zwalniana osobną i łatwo dostępną dźwignią. Mechanizm, tapicerka i układ jezdny są najwyższej jakości co zapewnia komfortowe, bezawaryjne i długie użytkowanie.

Do wyboru są dwa rodzaje oparcia oraz kolor tapicerki.

Dostępna jest również nożna dźwignia zmiany wysokości.

W razie potrzeby, w każdej chwili istnieje możliwość wyposażenia krzesła w stałe lub dynamiczne podłokietniki lub podpory łokci znane z krzeseł asystenckich.



Specyfikacja techniczna

Wysokość siedziska	regulowana: 41-56 / 49-68 / 57-81 cm (patrz tabela poniżej)
Głębokość i szerokość siedziska	34x40 cm
Wymienne kółka	Tak
Średnica podstawy	50 cm
Rodzaje obicia	Skóra skandynawska lub winyl
Wymienne obicie	Tak
Waga	9 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

Dostępne akcesoria (opcje)

Cena

Okrągła metalowa obręcz / podpora stóp	700
Nożny regulator wysokości siedziska	900
Tapicerowany podłokietnik asystencki SWING	1800/2500 (skóra)
Tapicerowany podłokietnik asystencki SWING MINI	1800/2500 (skóra)
Podłokietnik aktywny RELAX	1500 (sztuka)
Para podłokietników stałych FIXED	1700 (para)

Dostępne rozmiary teleskopów

Wzrost użytkownika	Teleskop	Wysokość siedziska
< 165 cm	4FH	41-56 cm
165 – 185 cm	4C	49-68 cm
> 185 cm	4A	57-81 cm

krzesła dentystyczne	cena (PLN)
STATERA (tapicerka 121 szary antracyt Stern Weber) PROMOCJA PROMOCJA	5200 4200
STATERA (tapicerka winylowa kolor do wyboru)	4200
STATERA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber do wyboru)	5200

SIODŁA DENTYSTYCZNE

Od lat użytkownicy na całym świecie cieszą się z licznych korzyści płynących z ergonomicznego siedzenia na stołkach typu siodło. Siodła firmy Support Design ułatwiają utrzymanie prawidłowej postawy i są stworzone dla profesjonalistów, którzy chcą zmniejszyć zmęczenie i potencjalne niedogodności towarzyszące długim zabiegom.



Classic
Model ten sprzyja utrzymaniu zdrowej postawy, tworząc pomiędzy kręgosłupem a biodrami kąt rozwarty, pomagając w ten sposób zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa.

Advanced
Siodło wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk. Wersja ta została opracowana w celu wspierania męskiej anatomii.

Lite
Opracowany na bazie Classic model Lite dysponuje mniejszą średnicą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję pracy drobniejszym użytkownikom. Odpowiedni szczególnie dla użytkowników niższego wzrostu.

Lite Advanced
Siodło wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk. Lite Advanced dysponuje mniejszą średnicą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję pracy drobniejszym użytkownikom.

Lite Hybrid
Opracowany na bazie Lite model ten posiada specjalną sprężynę, umieszczoną pod siedziskiem, która umożliwia jego ruch we wszystkich kierunkach. Podąża ono za ciałem użytkownika wzmacniając mięśnie odcinka lędźwiowego. Wysokość siedziska regulowana podnośnikiem nożnym.

Lite Hybrid Advanced
Model ten posiada technologię identyczną z Lite Hybrid. Siedzisko zamontowane na sprężynie podąża za ciałem użytkownika wzmacniając mięśnie odcinka lędźwiowego. Wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk.

siodła dentystyczne	cena (PLN)
CLASSIC (tapicerka winylowa)	3500
CLASSIC (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4200
ADVANCED (tapicerka winylowa)	3700
ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4500
LITE (tapicerka winylowa)	3400
LITE (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	3900
LITE ADVANCED (tapicerka winylowa)	3700
LITE ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4500
LITE HYBRID (tapicerka winylowa)	4600
LITE HYBRID (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5400
LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka winylowa)	4800
LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5600

TABORETY I KRZESŁA DENTYSTYCZNE



Prisma
Jest to najbardziej kompaktowy taboret z oferty firmy Support Design. Jego niewielki rozmiar umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie go w miejscu pracy. Regulowanie wysokości odbywa się przy użyciu dźwigni umieszczonej pod płaskim siedziskiem.

Taburett
Model ten jest połączeniem kompaktowego designu z wysoce komfortowym siedziskiem pozwalającym na osiągnięcie zdrowej, naturalnej pozycji kręgosłupa w czasie pracy. Krzeselko może być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez regulację kąta nachylenia oraz wysokości siedziska.

Akka
Krzesło to jest połączeniem tradycyjnego wyglądu z nowoczesnym i ergonomicznym designem. Regulacja wysokości, a także kątów oparcia oraz siedziska pozwala na ustawienie optymalnej pozycji. Wygodne oparcie w połączeniu z nieznacznie wyprofilowanym siedziskiem zapewnia komfortową pracę.

taborety i krzesła dentystyczne	cena (PLN)
PRISMA (tapicerka winylowa)	2200
PRISMA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	2900
TABURETT (tapicerka winylowa)	3200
TABURETT (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	3900
AKKA (tapicerka winylowa)	3700
AKKA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5000

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

akcesoria do krzeseł, siodel i taboretów dentystycznych	cena (PLN)
podłokietnik RELAX z regulowaną wysokością i zakresem ruchu w poziomie	1500 (sztuka)
dwa podłokietniki FIXED	1700 (para)
tapicerowany podłokietnik asyntencki SWING	1800/2500 (skóra)
tapicerowany podłokietnik asyntencki SWING MINI	1800/2500 (skóra)
podparcie lędźwiowe CORE+	1200/1700 (skóra)
podparcie lędźwiowe MINI	MINI lub OVAL 1200/1700 (skóra)
okrągła metalowa obręcz / podpora stóp	700
nożny regulator wysokości siedziska	900

