



Zestaw promocyjny „Twój nowy gabinet”



na zdjęciu: Anthos A3



RTG RX DC

ZEN-Xi

SW-17

OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH KONFIGURACJI UNITU ANTHOS



A3

W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesółko dentystyczne
- zamiana na lampę MCT
- podwójne ramię asysty

unit ANTHOS A3
gotowy do pracy

65 500 PLN

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC
wersja przewodowa

+ 10 000 PLN

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi
wersja unitowa

+ 6 500 PLN

+ autoklaw SW klasy B, pojemność: 17 l
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ 11 000 PLN

CENA ZESTAWU:

93 000 PLN
(rata 1090 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE
Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 96 miesięcznych rat, WIBOR 3,79%)

Zaawansowane systemy oświetlenia LED w unitach z oferty Stern Weber Polska

W ofercie Stern Weber Polska dostępne są cztery zaawansowane modele diodowych lamp, które zapewniają optymalne warunki pracy – niezależnie od charakteru i zakresu wykonywanych zabiegów.

W portfolio znajdują się zarówno znany i ceniony model **MCT**, jak i trzy nowe warianty: **SCT**, **SCT COMPOSITE** oraz **MCT VIEW**. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach klinicznych – od standardowego oświetlenia, przez tryby pracy z materiałami kompozytowymi, aż po rozwiązania z wbudowaną kamerą do dokumentacji zabiegów.

Wszystkie lampy łączą nowoczesne technologie LED, wysoką jakość odwzorowania barw (CRI >90), bezdźwiękową obsługę i pełną kompatybilność z unitami z oferty Stern Weber Polska.



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT
Podstawowy wariant



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT COMPOSITE
Podstawowy wariant



VENUS PLUS - MCT
Sprawdzony i ceniony model



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - MCT VIEW
Wbudowana kamera do dokumentacji zabiegów

Nowe kolory tapicerek

Estetyka, komfort i indywidualny charakter Twojego unitu

Wygląd unitu stomatologicznego ma znaczenie – zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Nowoczesne gabinety to przestrzenie nie tylko funkcjonalne, ale też estetyczne. Dlatego paleta kolorów tapicerek dostępnych w ofercie Stern Weber Polska została rozszerzona o pięć eleganckich, starannie dobranych odcieni.



NOWOŚĆ
Brazilian Brown (140/170 MF)
Papyrus Beige (141/171 MF)
Anatolian Hazelnut (142/172 MF)
Arabian Gold (143/173 MF)
Ruby Red (144/174 MF)

Nowe warianty kolorystyczne są dostępne zarówno w wersji klasycznej, jak i w opcji Memory Foam – tapicerki z pamięcią kształtu, która dopasowuje się do sylwetki pacjenta i zapewnia wyjątkowy komfort nawet podczas długich zabiegów.

NEWTOM
CONE BEAM 3D IMAGING

30 LAT



PIONIER TOMOGRAFII CBCT

NEWTOM od 30 lat wyznacza standardy w diagnostyce obrazowej. W 1996 roku marka jako pierwsza na świecie wprowadziła technologię CBCT do stomatologii, otwierając nowy rozdział w precyzyjnym obrazowaniu 3D.

Dziś rozwiązania NEWTOM są cenione przez specjalistów na całym świecie za najwyższą jakość obrazowania, innowacyjność, ale przede wszystkim za troskę o bezpieczeństwo pacjentów.

30-lecie NEWTOM to nie tylko okazja do świętowania dotychczasowych osiągnięć, ale potwierdzenie niezmiennej misji marki: dostarczania przełomowych technologii, które pomagają specjalistom podejmować trafne decyzje diagnostyczne i kształtują przyszłość diagnostyki obrazowej na całym świecie.

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA

NOWOCZESNY
DETEKTOR DC'''

NEWTOM
CONE BEAM 3D IMAGING



SZEROKI ZAKRES PÓŁ OBRAZOWANIA
- OD 4X4 CM DO 17X18 CM

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGANE SZTUCZNĄ
INTELIGENCJĄ

FUNKCJA FACE SCAN

PEŁNA 24-MIESIĘCZNA GWARANCJA
I WSPARCIE SERWISOWE

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ZESPOŁU

NEWTOM GiANO HR FullView


SPIS TREŚCI

01	Stern Weber Polska - informacje o firmie	8
	Centrum Serwisowo-Szkoleniowe	10
	Centrum Szkoleń Nowość	12
	Gabinet Wzorcowy Nowość	14
	Prezentacja działalności firmy	22
	Stern Weber Projekty	30
	Stern Weber Sklep Online	32
	Magazyn	34
	Cefla s.c. - informacje o firmie	36
	Zespół Stern Weber Polska	38
	Serwis Stern Weber Polska	44
	Założenia techniczne montażu unitów	46
	Prezentacja zespołów serwisowych	48
	Przeglądy techniczne unitów	52
	Podstawowe informacje dotyczące unitów	54
	Stern Weber Kredyt - finansowanie	55

02	Unity Stern Weber	
	Oferta 2026 – Stern Weber	57
	Nowości – Stern Weber	58
	Stern Weber S200	60
	Stern Weber S200 z pakietem „PLUS”	62
	Stern Weber S210 LR	64
	Stern Weber S300	66
	Stern Weber S300 z pakietem „PLUS”	68
	Stern Weber S220 TR	70
	Stern Weber S320 TR	72
	Stern Weber S280 TRc	74
	Stern Weber S380 TRc	76
	Unity Stern Weber – wyposażenie	80
	Unity Stern Weber – multimedia	86
	Opcje wyposażenia	87

03	Unity Anthos	
	Oferta 2026 – Anthos	91
	Nowości – Anthos	92
	Anthos A3 PLUS	94
	Anthos A5	96
	Anthos A6 PLUS/L6	98
	Anthos A7 PLUS	100
	Anthos L9	102
	Anthos R7	104
	Unity Anthos – wyposażenie	106
	Unity Anthos – multimedia	110
	Opcje wyposażenia	111


04	Unity Castellini	
	Oferta 2026 – Castellini	115
	Nowości – Castellini	116
	Castellini Puma Eli R	118
	Castellini Puma Eli A R	120
	Castellini Skema 5	122
	Castellini Skema 6	124
	Castellini Skema 8	126
	Unity Castellini – wyposażenie	128
	Unity Castellini – multimedia	130
	Opcje wyposażenia	131

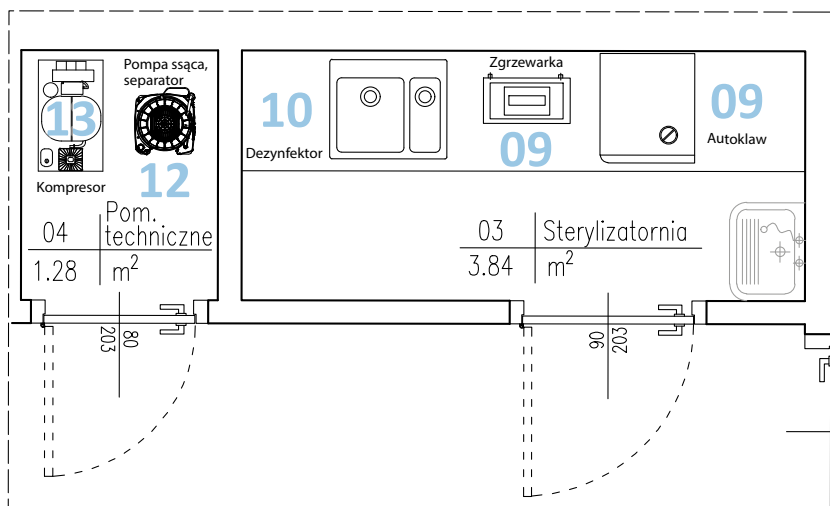

05	Unity Mocom	
	Oferta 2026 – Mocom	135
	Mocom M10	136
	Mocom F10	138
	Opcje wyposażenia	142

06	Stern Weber Radiologia	
	Oferta 2026 – zestawy	145
	Aparaty RTG punktowe/radiografie cyfrowe	
	Aparat RTG Stern Weber RX DC	146
	Aparat RTG RX DC EXTEND	148
	Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE	150
	Radiografia ZEN-X/Stern Weber X-VS	152
	Radiografia ZEN-X E	154
	Radiografia ZEN-X DCiS	156
	Skaner płyt obrazowych MyRay Hy-Scan	158
	Kamera wewnątrzustna C-U2	159
	Skaner płyt obrazowych Vista Scan	160
	Pantomografy/Tomografy CBCT	
	Proxima X6 Nowość	162
	NewTom Giano HR FullView Nowość	168
	NewTom VGi EVO	176
	NewTom 5G XL	178
	NewTom 7G	180
	Oprogramowanie	182
	Usługi radiologiczne	186
	Fantom RTG	189

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO W OFERCIE FIRMY STERN WEBER POLSKA

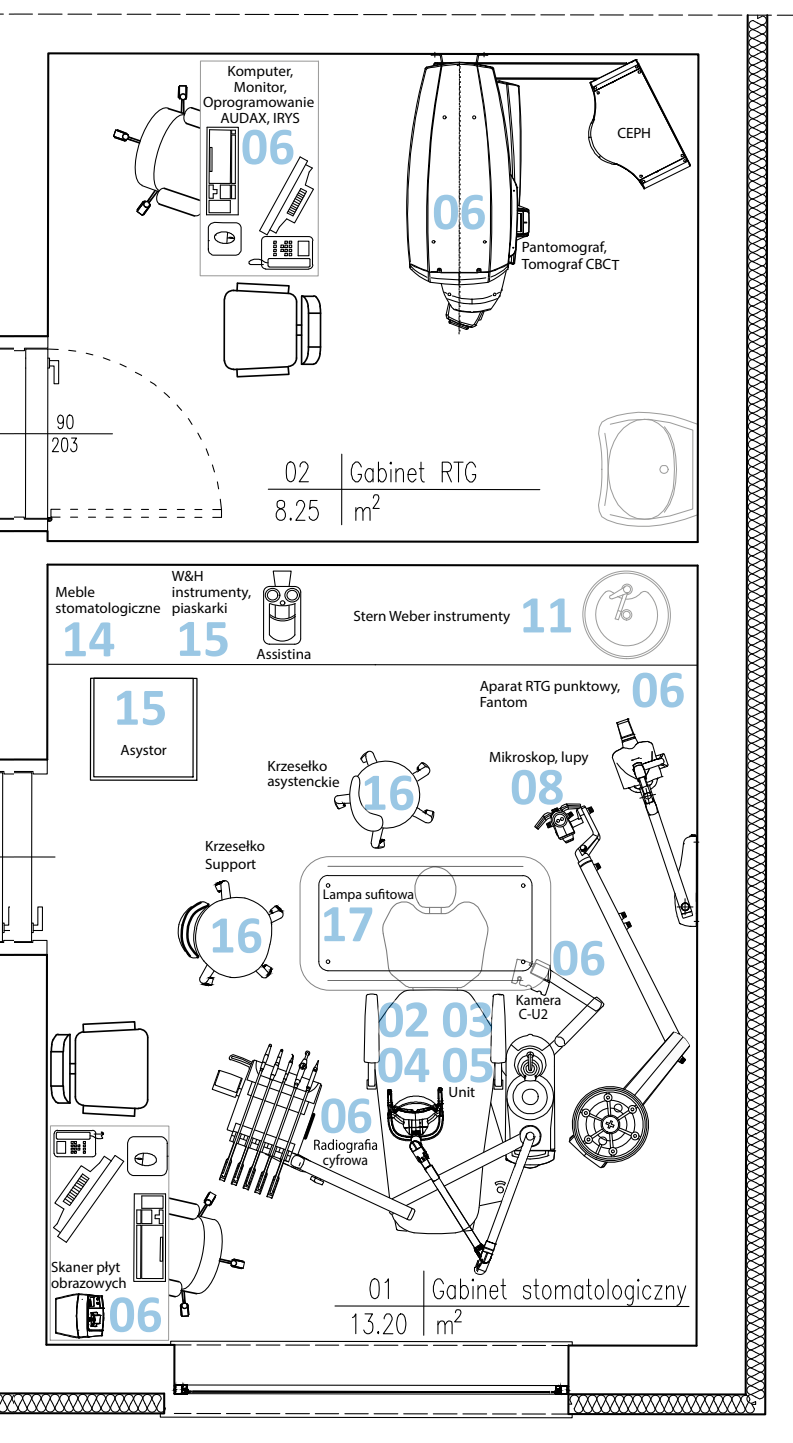

07	Stomatologia cyfrowa	
	skaner wewnętrzny Nowość	190
	skaner wewnętrzny + stolik	
	ZESTAW SPECJALNY	194
08	Zeiss	
	mikroskopy operacyjne	196
	lupy operacyjne	202
09	zgrzewarki	204
	autoklawy	205
	Stern Weber – Autoklawy	206
	Mocom – Autoklawy	212
10	Tethys – myjnie - dezynfektory	218
11	Stern Weber – instrumenty	
	turbiny	220
	kątnice i prostnice	221
12	Metasys	
	pompy ssące i separatory	222
13	4TEK, MGF, Ekom, Metasys, Dürr Dental	
	pompy ssące i kompresory	222
14	Loran – meble i asystory	226
15	Support Design	
	krzeselka i siodła dentystyczne	230
16	D-Tec – systemy oświetleniowe	236
	Lako – systemy oświetleniowe	238

STERN WEBER POLSKA

jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy Cefla Medical Equipment, producenta unitów Stern Weber, Anthos, Castellini i Mocom oraz sprzętu radiologicznego NewTom i MyRay.

- Stern Weber Polska to **Twój profesjonalny partner**, dla którego priorytetem jest **bezpieczeństwo i ciągłość pracy Klienta**.
- **Wszystkie nasze działania** (negocjacje z dostawcami sprzętu, minimalizowanie kosztu spedycji) są **ukierunkowane na obniżenie ceny dla odbiorcy finalnego** przy zachowaniu **najwyższej jakości** sprzętu i usług serwisowych.
- **Zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę:**
 - ✓ **pomagamy w wyborze optymalnego wyposażenia unitu**, kierując się zasadą minimalizacji wydatków Lekarza (unit Stern Weber można doposażyć w każdym momencie);
 - ✓ **nadzór w przygotowaniu gabinetu do montażu (wizje lokalne, spotkania z wykonawcami)**, co gwarantuje Lekarzowi ergonomiczne umiejscowienie unitu i optymalne doprowadzenie mediów;
 - ✓ **specjalny program finansowania zakupu Stern Weber Kredyt** (również sprzętu niemedycznego, w ramach współpracy z Siemens Finance) **to minimum formalności, cyfrowy proces i niskie koszty** (więcej informacji: **887 700 456**);
 - ✓ **fachowy montaż dokonany przez autoryzowany serwis** przeszkolony w fabryce producenta;
 - ✓ **bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje regularnie szkolony serwis centralny i ponad 100 punktów serwisu lokalnego oraz magazyn części zamiennych** (natychmiastowa stuprocentowa dostępność części do sprzedawanych unitów);
 - ✓ **profesjonalne wsparcie techniczne dla użytkowników i serwisu lokalnego:** od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, **tel. 22 395 56 03**.
 - ✓ **dedykowane szkolenia dla personelu gabinetu stomatologicznego w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzeń stomatologicznych i radiologicznych w Centrum Szkoleń Stern Weber Polska tel. 533 514 123**.
- **Prowadzimy program lojalnościowy**, który umożliwia Klientom naszej firmy **zakup dodatkowego sprzętu stomatologicznego w radykalnie obniżonych cenach**.
- **Lista referencyjna obejmująca ponad 12 500 sprzedanych unitów jest naszą najlepszą rekomendacją.**

PONAD 12 500 SPRZEDANYCH UNITÓW

LICZBA SPRZEDANYCH UNITÓW W DANYM ROKU:

1993 – 96	2002 – 138	2011 – 454	2020 – 509
1994 – 99	2003 – 109	2012 – 444	2021 – 726
1995 – 111	2004 – 145	2013 – 473	2022 – 845
1996 – 89	2005 – 157	2014 – 487	2023 – 781
1997 – 73	2006 – 221	2015 – 480	2024 – 758
1998 – 109	2007 – 300	2016 – 495	2025 – 799
1999 – 156	2008 – 445	2017 – 561	2026 – 356
2000 – 174	2009 – 410	2018 – 582	(do 30.08)
2001 – 150	2010 – 421	2019 – 602	

PONAD 90% UNITÓW SPRZEDAJEMY Z REKOMENDACJI UŻYTKOWNIKÓW.

STRUKTURA FIRMY STERN WEBER POLSKA



STERN WEBER POLSKA współpracuje z renomowanymi europejskimi dostawcami sprzętu stomatologicznego:

Zeiss - mikroskopy i lupy,
W&H - końcówki,
NSK - końcówki stomatologiczne,
4TEK - kompresory,
Ekom - kompresory i pompy ssące,
Metasys - pompy ssące i separatory,
Dürr Dental - pompy ssące i kompresory,
Support Design - krzesła dentystyczne,
D-TEC - lampy gabinetowe,
Loran - meble i asystory stomatologiczne,
Lako - oświetlenie.

ZADZWOŃ! 22 395 56 00

Stern Weber Polska sp. z o.o.
 ul. Kosmatki 26, 03-982 Warszawa
 NIP: 952-220-29-54
 Numer konta: 40 1130 1017 0200 0000 0005 1097



Zapraszamy do salonu firmowego. Jesteśmy do Państwa usług!



Siedziba firmy Stern Weber Polska

Centrum Serwisowo-Szkoleniowe

Pozycja lidera rynku, coraz więcej klientów i tym samym większa odpowiedzialność sprawiły, że dotychczasowa przestrzeń siedziby – 1400 m² przy ul. Kosmatki 26 stała się za mała na potrzeby firmy. Od września 2023 roku siedziba Stern Weber Polska powiększyła się aż o 660 m² dodatkowej powierzchni użytkowej dla pracowników i klientów, tak aby sprostać coraz większej liczbie zadań. W nowo powstałej części zostało otwarte Centrum Szkoleń Stern Weber Polska, w której specjaliści prowadzą bezpłatne szkolenia dla stomatologów, higienistek i studentów kierunków lekarsko-dentystycznych. Większą przestrzeń zyskała również obsługa serwisowa i sklep z częściami zamiennymi.



Nowoczesne warsztaty serwisowe

Na parterze nowej części budynku znajduje się przestronna recepcja serwisowa, pięciostanowiskowa obsługa posprzedażowa, punkt sprzedaży części zamiennych oraz nowoczesne warsztaty serwisu stacjonarnego. Każde z tych miejsc zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa, że w awaryjnej sytuacji firma jest w stanie szybko i profesjonalnie zareagować, a pracownikom daje komfortową przestrzeń do pracy. Niezwykle usterki, jeśli pozwala na to czas i możliwości serwisowe, mogą być naprawione od razu.



Staramy się na każdym etapie współpracy z klientami być blisko ich potrzeb – od zakupu, przez opiekę posprzedażową i gwarancyjną, aż po konserwację sprzętu. Niezmiennie również służymy pomocą w szybkim dostarczaniu części zamiennych. Ponadto na piętrze budynku znajdują się zespoły serwisowe zapewniające klientom zdalne wsparcie techniczne z zakresu radiologii i unitów, a także zespół IT pracujący nad cyfrowymi rozwiązaniami zarówno dla klientów, jak i pracowników.

Centrum Szkoleń Stern Weber Polska

Pozycja lidera rynku daje poczucie dumy, ale jednocześnie nakłada pewne zadania, które Stern Weber Polska chętnie podejmuje. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wiedzy, ale także narzędzi do osiągnięcia sukcesu. Stąd też sercem nowej części budynku jest Centrum Szkoleń Stern Weber Polska, na które została przeznaczona powierzchnia 100 m². Nowoczesna sala szkoleniowa jest wyposażona w cztery unity stomatologiczne, tomograf CBCT oraz aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych. Część konferencyjna z 86-calowym monitorem zapewnia wygodne miejsca do nauki dla 20 uczestników. Sala szkoleniowa powstała z myślą o lekarzach dentystach, higienistkach, menadżerach placówek medycznych i studentach kierunków lekarsko-dentystycznych. To wszystko czeka na uczestników szkoleń całkowicie bezpłatnie.



Cieszę się, że możemy przedstawić ofertę bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów Stern Weber Polska. Chcemy, aby nasze Centrum Szkoleń stało się miejscem spotkań, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz doskonalenia umiejętności potrzebnych lekarzom czy osobom pracującym w gabinetach stomatologicznych.



Krzysztof Błażejczyk
Prezes Zarządu
Stern Weber Polska



Centrum Szkoleń Stern Weber Polska



>100 m²

Powierzchnia sali

20 osób

Max. liczba uczestników

4 unity

Wypożyczenie

Tomograf

Wypożyczenie



Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji **BEZPŁATNYCH** szkoleń w siedzibie Stern Weber Polska. Centrum Szkoleń Stern Weber Polska to miejsce, gdzie dostarczamy wartościową wiedzę dla lekarzy dentyków, personelu gabinetów stomatologicznych (higienistek czy asystentek).





Dogodna lokalizacja Warszawa, ul. Kosmatki 26

Nasza sala szkoleniowa mieści się w samym sercu Warszawy, przy ul. Kosmatki 26. To doskonałe miejsce ze względu na dogodną lokalizację komunikacyjną oraz bliskość hotelu. Część konferencyjna z 86-calowym monitorem zapewnia wygodne miejsca do nauki dla 20 uczestników.



Punkty edukacyjne

Za szkolenie z Konserwacji i użytkowania sprzętu stomatologicznego przyznajemy punkty edukacyjne dla higienistek, asystentek stomatologicznych i techników sterylizacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne.



Szeroki zakres szkoleń stomatologicznych

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres szkoleń z zakresu stomatologii, począwszy od zasad doboru urządzeń, poprzez konserwację sprzętu, aż do omawiania kwestii finansowania. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną, w wybranych obszarach.

UDOGODNIENIA



Nowoczesny sprzęt
stomatologiczny



Bezpłatny
parking



Mobilny
ekran 86 cali



Klimatyzacja
i wentylacja



Ładowarka samocho-
dów elektrycznych



Dogodna
lokalizacja



Kawa/Herbata



Bliskość
hotelu

Od momentu otwarcia Centrum Szkoleń w październiku 2023 roku przeszkoliliśmy ponad 800 uczestników. Regularnie odwiedzają nas przedstawiciele gabinetów stomatologicznych (lekarze, higienistki, asystentki) z którymi dzielimy się naszą wiedzą i najlepszymi praktykami związanymi z obsługą urządzeń stomatologicznych.

Każde spotkanie odbywa się w bardzo miłej atmosferze, a przekazywanie wiedzy sprawia ekspertom Stern Weber Polska olbrzymią satysfakcję - dodatkowo w przypadku całodniowych szkoleń proponujemy lunch.



Jeśli jesteś zainteresowany organizacją dedykowanego szkolenia dla gabinetu stomatologicznego, zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu - jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę do konkretnych oczekiwań!

Aleksandra Stańczyk
Kierownik ds. marketingu i PR
+48 533 514 123
aleksandra.stanczyk@sternweber.pl

GABINET WZORCOWY



W listopadzie 2023 roku ekspozycja Stern Weber Polska została rozbudowana o Gabinet Wzorcowy o powierzchni 20 m². Jest to unikatowe miejsce, które stanowi doskonałą symulację autentycznego gabinetu stomatologicznego, oferując wszystkim klientom możliwość doświadczenia realnych warunków pracy lekarza dentysty. Gabinet Wzorcowy jest nie tylko miejscem prezentacji sprzętu - odwiedzający mogą z bliska ocenić zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

Gabinet Wzorcowy został wyposażony w unit, tomograf, mikroskop, aparat RTG, autoklaw, myjnię, oraz skaner płyt obrazowych. Jest to przestrzeń, która umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z oferowanymi produktami przez Stern Weber Polska w autentycznym środowisku, co przekłada się na rzetelną prezentację możliwości poszczególnych elementów wyposażenia. Każda osoba może ocenić kompleksowość naszej oferty i sprawdzić funkcjonalność urządzeń przed podjęciem decyzji zakupowej.



Zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji Stern Weber Polska przy ulicy Kosmatki 26, poszerzonej o Gabinet Wzorcowy – oferujemy organizację spersonalizowanych prezentacji, dostosowanych do konkretnych potrzeb i zainteresowań każdego klienta.



**UNIT STOMATOLOGICZNY
STERN WEBER S200
Z PAKIETEM "PLUS"**



**TOMOGRAF CBCT
NEWTOM GIANO HR
FULL VIEW**



**MIKROSKOP OPERACYJNY
ZEISS EXTARO 300**



**APARAT RTG
RX DC EXTEND**



**AUTOKLAW
STERN WEBER SW-17**




**ASYSTOR
LORAN LOOK**



**SKANER PŁYT OBRAZOWYCH
VISTASCAN MINI EASY 2.0**



**SKANER PŁYT OBRAZOWYCH
NEWTOM X-PSP**

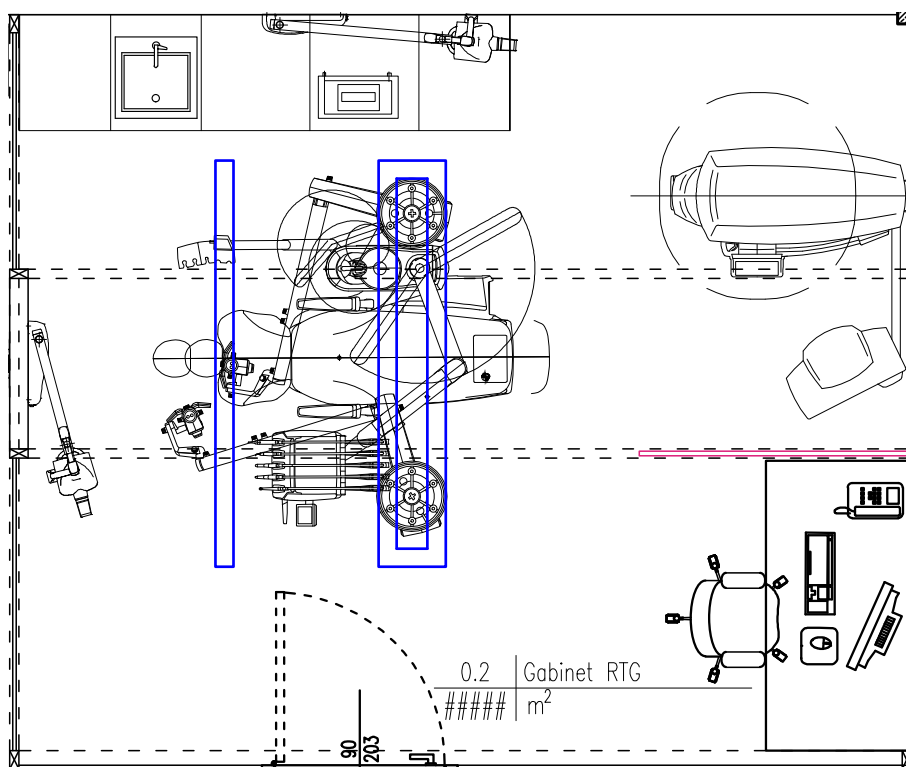

Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że odwiedzający ekspozycję klienci cenią sobie możliwość sprawdzenia i obejrzenia na żywo sprzętu podczas podejmowania decyzji zakupowych. Ta nowa przestrzeń z pewnością będzie stanowić inspirację dla osób odwiedzających ekspozycję i szukających funkcjonalnych rozwiązań.



Na zdjęciach reklamowych wszystkie unity wyglądają podobnie. Zapraszamy do naszego salonu na profesjonalne prezentacje sprzętu, gdzie stała ekspozycja 19 zestawów unitów pozwoli dostrzec różnice.





**SALON FIRMOWY
STERN WEBER POLSKA
03-982 WARSZAWA
UL. KOSMATKI 26**







Szanowni Państwo,

Marka Stern Weber, obecna na polskim rynku już 33 lata, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej ocenianych przez stomatologów.

Dynamiczny rozwój firmy Cefla s.c. (producenta marek Stern Weber, Anthos, Castelli-ni, Mocom, NewTom i MyRay), nowe modele unitów, nowoczesna radiologia stomatologiczna to wynik wspólnego wysiłku grupy projektantów, inżynierów, pracowników fabryki i biura, jak również dystrybutorów w 70 krajach całego świata.

Grupa Cefla jest jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego na świecie, a Stern Weber Polska został po raz kolejny najlepszym dealerem firmy Cefla s.c. w roku 2024 z blisko 50-procentowym udziałem w polskim rynku, dzięki 758 sprzedanym unitom.



18 marca 2020 roku Stern Weber Polska mógł z radością ogłosić swoje dołączenie do silnego zespołu grupy Cefla. Takie połączenie możliwe było dzięki zbudowaniu wzajemnego zaufania oraz docenieniu rzetelnej pracy polskiego zespołu ekspertów. Dołączenie do grupy Cefla pozwala nie tylko spoglądać w przyszłość z poczuciem stabilności, ale gwarantuje również szereg korzyści każdemu Klientowi, który zaufał Stern Weber Polska:

- jeszcze korzystniejsze ceny unitów Stern Weber oraz innych urządzeń stomatologicznych i radiologicznych produkowanych przez grupę Cefla,
- dostęp do innowacji technologicznych w dziedzinie stomatologii,
- profesjonalny serwis regularnie szkolony przez producenta oraz pomoc w codziennej obsłudze sprzętu dzięki pracy naszych serwisantów, którzy obecni są praktycznie w każdym miejscu w Polsce,
- regularne dostawy części zamiennych, dzięki czemu do minimum ograniczony jest czas oczekiwania na serwis czy konserwację urządzeń,
- gwarancja dostępności części zamiennych do każdego urządzenia przez minimum dziesięć lat od zaprzestania produkcji danego modelu.

Wszystkie te osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci.

Koncentrujemy się na urządzeniach i rozwiązaniach, które pozwalają stworzyć nowoczesne, optymalnie wyposażone i ergonomiczne stanowisko pracy zespołu stomatologicznego. W naszej ofercie są wyłącznie „duże” urządzenia stomatologiczne renomowanych producentów: CEFLA S.C. (unity oraz aparaty RTG), Zeiss (mikroskopy i lupy), W&H i NSK (końcówki stomatologiczne), 4Tek (kompresory), Ekom (kompresory i pompy ssące), Metasys (pompy ssące i separatory), Dürre Dental (pompy ssące i kompresory), Support Design (ergonomiczne krzesła dentystyczne), D-TEC (lampy sufitowe), Loran (meble i asystory stomatologiczne), Lako (oświetlenie).

Stern Weber Polska to firma, która pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia, podejmując szereg działań prospołecznych i proekologicznych.

Firma, która istnieje tylko dla siebie i zysku, w dzisiejszych czasach nie jest uznawana przez coraz bardziej wymagające społeczeństwo za wiarygodnego i godnego zaufania partnera czy dostawcę.

Stern Weber Polska jest odpowiedzialną społecznie firmą, której koncepcja zarządzania polega na długotrwałym, świadomym i zrównoważonym działaniu, zorientowanym przede wszystkim na oczekiwania Klientów, ale również pracowników firmy, dostawców i kontrahentów.



Fakultet Stern Weber Polska

Stern Weber Polska w okresie od marca do czerwca 2023 roku we współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zorganizował dla studentów IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego zajęcia fakultatywne: "Zasady prowadzenia praktyki stomatologicznej" (łącznie 15 godzin zajęć).

Ideą zajęć było przekazanie uczestnikom fakultetu jak największego zakresu praktycznej wiedzy z obszaru otwierania gabinetu stomatologicznego w oparciu o case studies czy konkretne przykłady i wskazówki.

Za realizację fakultetu odpowiadali eksperci pracujący na co dzień w Stern Weber Polska oraz w firmach partnerskich m. in. (W&H Polska) - swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z otwieraniem gabinetu stomatologicznego podzielili się również lekarze praktycy.

Nikt wcześniej w Polsce nie podjął się realizacji takiego projektu!



Konkurs stypendialny „Stern Weber Polska studentom stomatologii”

„Stern Weber Polska studentom stomatologii” to konkurs stypendialny organizowany przez firmę Stern Weber Polska we współpracy z Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, skierowany do studentów IV i V roku.



Edycja 2024



Edycja 2025

Każda edycja konkursu poświęcona jest określonemu tematowi. Ostatnia odbyła się pod hasłem „Przychodzi senior do dentysty”. Uczestnicy mogą wybrać formę pracy, od prezentacji i eseju po przygotowanie materiałów edukacyjnych, takich jak ulotki. Zadanie mogą realizować indywidualnie lub w zespołach od 2 do 4 osób. Finał konkursu i ogłoszenie wyników odbywają się podczas uroczystej kolacji z udziałem uczestników, przedstawicieli Uczelni oraz pracowników Stern Weber Polska.

Szkolenia w Centrum Szkoleń Stern Weber Polska

W 2023 roku nasza siedziba została rozbudowana - dzięki temu zyskała nowe warsztaty serwisowe, nowoczesną przestrzeń biurową oraz salę szkoleniową, w której na co dzień dzielimy się wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów.

Szkolenia prowadzą serwisanci mający stały kontakt z gabinetami stomatologicznymi, dzięki czemu przekazują praktyczną wiedzę gotową do wykorzystania w codziennej pracy. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę, dlatego wprowadzamy nowe tematy i doskonalimy dotychczasowe szkolenia.



Od lipca 2026 za szkolenie z “Konserwacji i użytkowania sprzętu stomatologicznego” przyznajemy punkty edukacyjne dla higienistek, asystentek stomatologicznych i techników sterylizacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne.

Jubileusz 30-lecia firmy



Działalność charytatywna



Szkolenia dla gabinetów stomatologicznych



Szkolenia dla autoryzowanych serwisantów



Dni Targowe



OPINIE KLIENTÓW



Pierwszy unit stomatologiczny Stern Weber (model 220 TR Hybrid) zakupiłem w roku 2014. Przez blisko 10 lat fotel nie miał żadnej awarii uniemożliwiającej pracę kliniczną! Firma zapewnia coroczne przeglądy i szybki dostęp do części zamiennych, które wymagają wymiany w wyniku codziennej eksploatacji. Szczególnie polecam lampę zabiegową z wbudowanym filtrem polimeryzacji (pomarańczową) oraz miękką tapicerkę i pneumatyczny zagłówek. Stern Weber to dla mnie synonim spokojnej pracy w ergonomicznym fotelu.

lek. dent. Janusz Studziński
Stomatologia Studziński, Kłodzko



Wybierając sprzęt stomatologiczny do gabinetu szukałam unitu, który zagwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Stern Weber spełnił moje oczekiwania w 100%. Skorzystałam z atrakcyjnego finansowania na zakup sprzętu. Decydując się na radiografię cyfrową udzielono mi pomocy przy zaprojektowaniu pomieszczenia, uruchomieniu urządzenia oraz objęto rzetelną opieką Inspektora Ochrony Radiologicznej. Wiem, że zawsze mogę liczyć na profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy.

lek. dent. Ewelina Janczewska
Eweldent Stomatologia Rodzinna, Ostrołęka



Firma Stern Weber Polska to nie tylko dobry sprzęt, ale przede wszystkim ludzie, którzy za nią stoją. Każdy sprzęt (nawet najdroższy) może się popsuć. I co w takiej sytuacji...? Tylko w kryzysowych sytuacjach można poznać jakość i profesjonalizm firmy, która dostarcza sprzęt do gabinetu, a ludzie pracujący w Stern Weber Polska nigdy nas nie zawiedli i za to im dziękuję! Minęło już kilka lat współpracy i jedno, co mogę powiedzieć, to to, że następny sprzęt również wybiorę ze Stern Weber Polska. Dobra jakość za rozsądną cenę poparta świetnymi ludźmi. Oby się nie zmieniali :).

lek. dent. Małgorzata Gryszkiewicz
Stomatologia Q-Dent, Warszawa



Od początku mojej kariery stomatologicznej marka Stern Weber kojarzyła mi się z nienaganną jakością, niezawodnością i ergonomią. Wiedziałem, że któregoś dnia wyposażę własną praktykę w „Sterny”, bo najlepsi, których znałem, również na nich pracowali. I tak się stało, a ja nie zawiodłem się.

Cała obsługa klienta od pierwszego spotkania po zakup, montaż i serwis to pełen profesjonalizm, a firma Stern Weber Polska to dla mnie już nie tylko dostawca sprzętu i kontrahent, ale również przyjaciel...

lek. dent. Andrzej Wawrzyniak
Stomatologia Dental Art, Swarzędz



Stern Weber Polska to nie tylko firma dostarczająca sprzęt wysokiej jakości, ale przede wszystkim ludzie, którym można zaufać. Pracownicy firmy podczas projektowania gabinetu, zakupu wyposażenia oraz obsługi posprzedażowej zapewniają wsparcie na najwyższym poziomie. Dzięki temu z przyjemnością mogę koncentrować się wyłącznie na moich pacjentach.

lek. dent. Agnieszka Górnicka
SENSIDENT, Warszawa

Ponad 90% sprzętu sprzedajemy z rekomendacji użytkowników!

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Gotowi do pomocy na każdym etapie inwestycji!

Wyposażenie gabinetu stomatologicznego to nie tylko zakup poszczególnych urządzeń - to proces, który wymaga fachowego doradztwa, precyzyjnego projektu, a także skutecznego wdrożenia i niezawodnego wsparcia technicznego. Stern Weber Polska od lat dostarcza lekarzom dentystom nie tylko najwyższej jakości urządzenia, ale przede wszystkim kompleksową obsługę, dzięki której gabinety w całej Polsce funkcjonują sprawnie i w zgodzie z aktualnymi standardami.

Naszym celem nie jest jednorazowa transakcja – budujemy długofalowe relacje, w których zaufanie, jakość i dostępność mają kluczowe znaczenie. To właśnie dlatego tak wielu lekarzy dentystów decyduje się powierzyć nam całościowe wyposażenie swojego gabinetu – od doboru urządzeń po wieloletni serwis i wsparcie techniczne.



Najlepszy stosunek jakości do ceny

Dzięki bezpośredniemu modelowi sprzedaży, dużemu wolumenowi zamówień i niskim kosztom operacyjnym możemy zaoferować urządzenia o wysokiej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Każda złotówka trafia w jakość sprzętu, nie w koszty dystrybucji. Dla lekarza oznacza to rozsądną inwestycję i przewidywalność kosztów na każdym etapie.



Profesjonalna prezentacja urządzeń

Na naszej stałej ekspozycji w Warszawie prezentujemy 20 modeli unitów stomatologicznych, aparaty RTG i inne urządzenia gabinetowe. To jedna z największych tego typu przestrzeni w Europie. Każde urządzenie jest przygotowane do demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistego gabinetu. To najlepszy sposób na świadomy wybór sprzętu – bez ryzyka nietrafionej decyzji.



Pomoc w optymalnym doborze sprzętu

Doradzamy tylko takie konfiguracje, które są rzeczywiście potrzebne w codziennej pracy - bez nadmiaru funkcji, które nie będą wykorzystywane. Zawsze kierujemy się zasadą minimalizacji wydatków. Unit z oferty Stern Weber Polska można rozbudowywać etapami – inwestycję da się dostosować do bieżących potrzeb. Dzięki temu lekarz inwestuje mądrze, bez ryzyka przepłacenia.



Projekt gabinetu

Przygotowujemy projekty gabinetów jedno- i wielostanowiskowych, zgodnie z obowiązującymi normami - również z uwzględnieniem Projektów Ośłon Stałych. Uwzględniamy specyfikę konkretnego lokalu i potrzeby zespołu. Nasze projekty zapewniają właściwe rozmieszczenie urządzeń i mediów. Gotowy projekt można wykorzystać przy rozmowie z wykonawcą.





Nadzór nad przygotowaniem gabinetu

Nasi serwisanci wykonują wizje lokalne jeszcze przed złożeniem zamówienia, aby dokładnie ocenić warunki techniczne w gabinecie. Na miejscu analizujemy dostępność instalacji oraz możliwości ustawienia urządzeń. W razie potrzeby spotykamy się również z wykonawcami odpowiedzialnymi za instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne czy wentylacyjne, by ustalić szczegóły realizacji.



Certyfikowane Laboratorium Badawcze

Laboratorium Badawcze Stern Weber wykonuje testy specjalistyczne aparatów RTG i monitorów wszystkich producentów. Laboratorium działa w oparciu o certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, co stanowi gwarancję rzetelności i zgodności procedur z normami krajowymi. Obsługujemy gabinety na terenie całej Polski, zapewniając kompleksowe przeprowadzanie testów.



Atrakcyjne finansowanie – Stern Weber Kredyt

Oferujemy jeden z najlepszych na rynku programów finansowania zakupu sprzętu stomatologicznego. Możliwe jest również finansowanie urządzeń spoza naszej oferty. Umowę można podpisać w pełni elektronicznie lub bezpośrednio w dniu montażu, bez konieczności wizyt w banku czy składania dodatkowych zabezpieczeń.



Montaż wykonany przez autoryzowany serwis

Instalacją zajmują się technicy przeszkoleni w fabryce producenta. Montaż odbywa się w terminie uzgodnionym z Klientem – punktualnie, rzetelnie i zgodnie z wytycznymi. Każda instalacja jest przeprowadzana zgodnie z procedurami bezpieczeństwa. To gwarancja bezproblemowego uruchomienia i pracy sprzętu od pierwszego dnia.



Rzetelna opieka gwarancyjna i pogwarancyjna

Dysponujemy własnym magazynem części zamiennych z natychmiastową dostępnością wszystkich kluczowych komponentów. Współpracujemy z ponad 150 autoryzowanymi technikami serwisowymi w całym kraju. Dzięki temu reagujemy szybko, niezależnie od lokalizacji gabinetu. Każdy serwisant jest regularnie szkolony i ma dostęp do oryginalnych części.



Bezpłatne szkolenia w Centrum Szkoleń

Każdy Klient otrzymuje zaproszenie na szkolenie z obsługi zakupionych urządzeń. Szkolenia prowadzone są w naszym Centrum Szkoleń i obejmują zarówno lekarzy, jak i cały personel gabinetu. Dzięki temu cały zespół może czuć się pewnie i pracować efektywnie. Szkolenie to także okazja do poznania praktycznych wskazówek użytkowania i konserwacji sprzętu.


Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości pracy dla lekarza dentysty

PROJEKTOWANIE GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH

Ergonomia, funkcjonalność, zgodność z przepisami

Kluczowym elementem inwestycji w nowy gabinet stomatologiczny jest prawidłowe zaplanowanie przestrzeni – zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i wymogów formalnych. Projekt powinien uwzględniać wymagania sanitarne, przepisy prawa budowlanego, zalecenia BHP oraz zasady ergonomii. Błędy popełnione na etapie projektowym mogą prowadzić do konieczności kosztownych zmian, opóźnień w inwestycji lub trudności przy odbiorze lokalu przez właściwe instytucje. Stern Weber Polska od lat wspiera lekarzy dentystów w procesie projektowania gabinetów stomatologicznych zgodnych z przepisami.

1700+ projektów gabinetów **14 lat** doświadczenia w branży **2000+** zadowolonych klientów

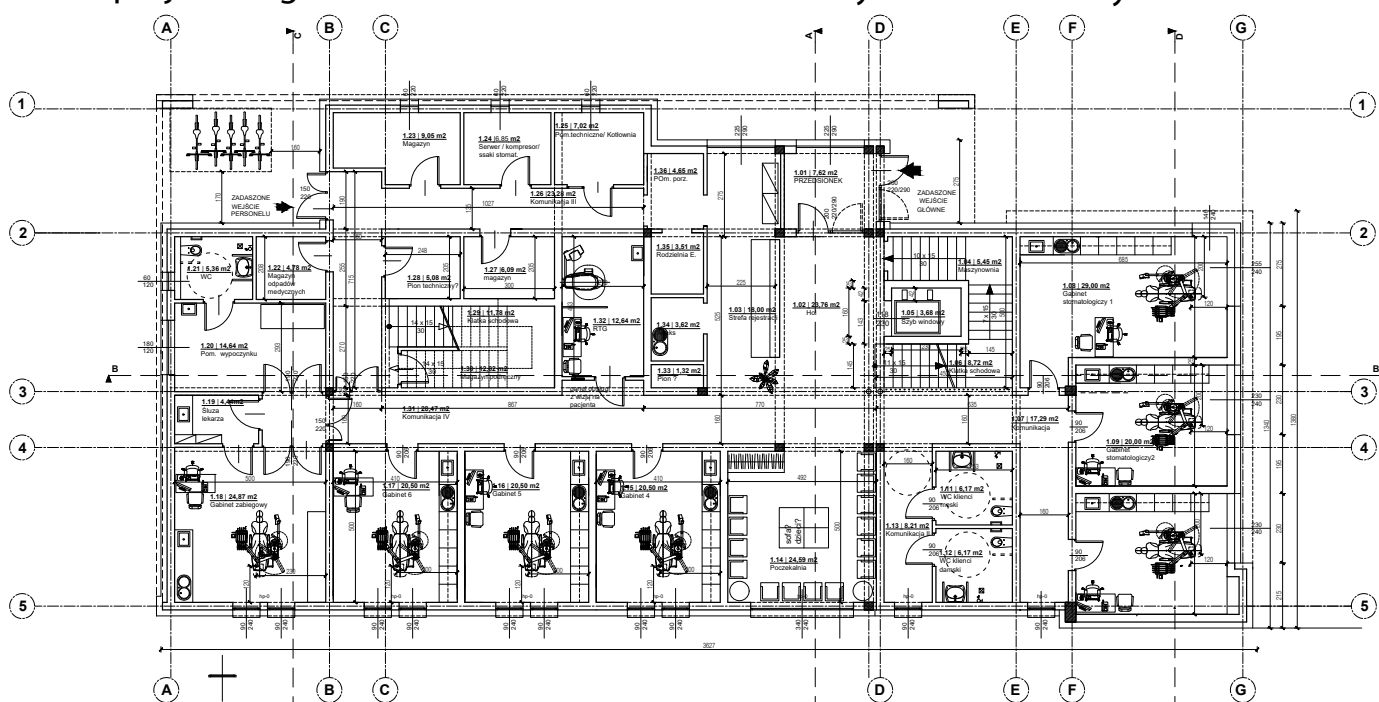

Przykładowy rzut gabinetu wielostanowiskowego



Mariusz Bożek
Projektant
Kierownik Komórki
Ochrony Radiologicznej

Skanuj kod QR
i sprawdź aktualny cennik




Projekty gabinetów przygotowywane są przez Kierownika Komórki Ochrony Radiologicznej, inż. Mariusza Bożka, posiadającego ponad 14 lat doświadczenia w branży stomatologicznej oraz wspieraniu inwestycji naszych Klientów.

Legitymuje się on również uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R (medycyna ogólna i stomatologia) oraz IOR – 1R. Dzięki jego wiedzy i znajomości branży już ponad 1600 projektów osłon uzyskało pozytywną opinię SANEPID-u, a ponad 2000 Klientów skorzystało z pomocy w zaprojektowaniu ergonomicznego gabinetu.

☎ **22 439 95 58** ✉ **mariusz.bozek@sternweber.pl**

Szczegółowe informacje na temat wsparcia projektowego, aktualny cennik oraz zakres świadczonych usług dostępne są na stronie internetowej Stern Weber Polska. Udostępniono tam również pliki w formatach architektonicznych (DWG i PDF), które ułatwiają prace projektowe architektom.

www.sternweber.pl/projekty/

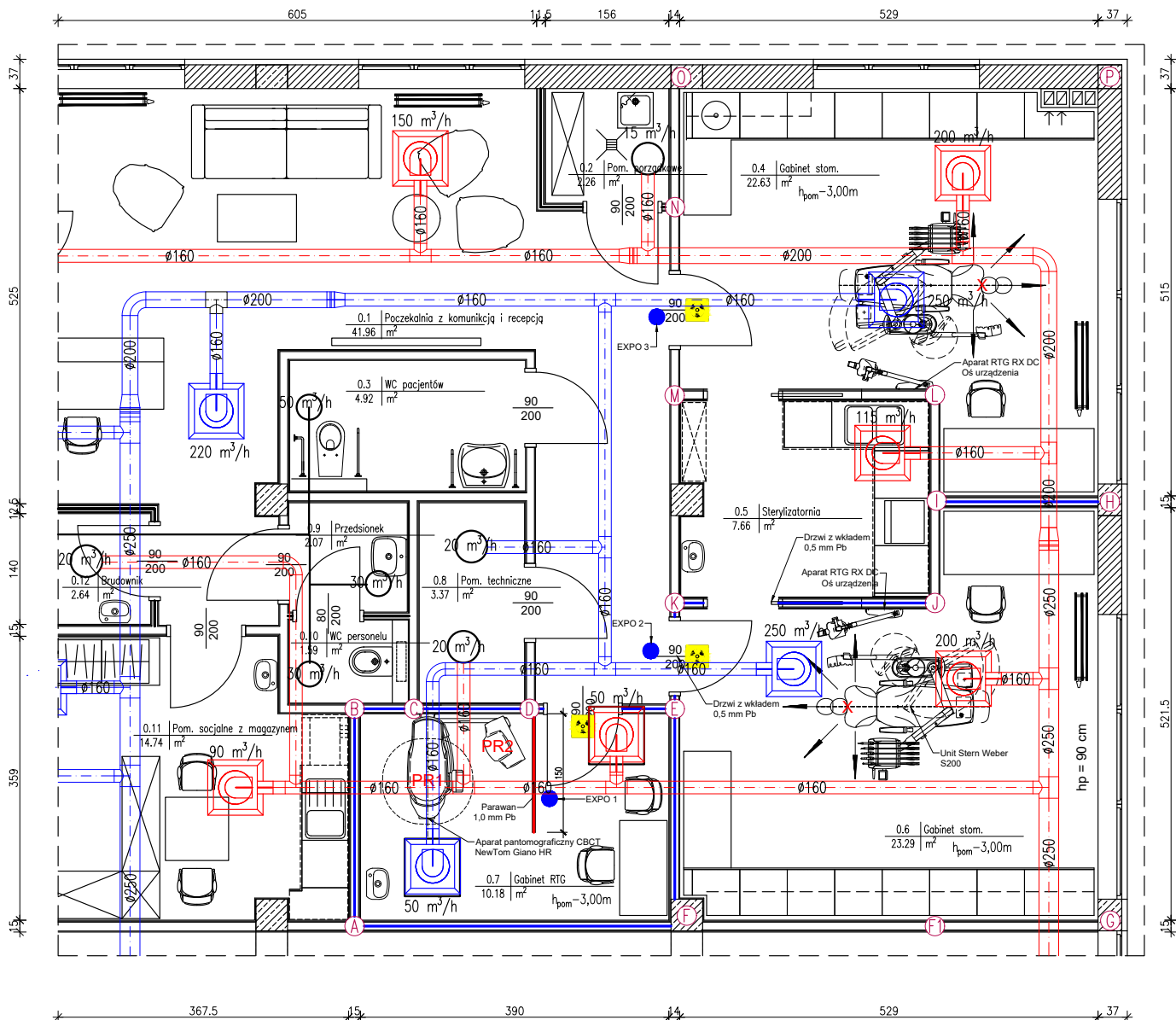

Przykładowy rzut gabinetu dwustanowiskowego wraz z pracownią RTG

Dlaczego warto skorzystać z pomocy projektowej Stern Weber Polska?



Konsultacje na etapie koncepcji

Już na wczesnym etapie inwestycji analizowane są plany lokalu pod kątem kluczowych aspektów: ergonomii pracy, dostępności mediów, zgodności z przepisami sanitarnymi oraz planowanego wyposażenia. Dzięki temu możliwe jest opracowanie projektu funkcjonalnego, zgodnego z wymogami i dopasowanego do rzeczywistych warunków technicznych. Takie podejście pozwala uniknąć błędów, zbędnych kosztów oraz zmian w trakcie realizacji.



Projekty osłon stałych

Dla gabinetów, w których planowane jest zastosowanie stomatologicznych aparatów RTG, Stern Weber Polska oferuje przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej osłon radiologicznych. Projekty uwzględniają aktualne normy prawne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co znacząco zwiększa szanse na ich szybkie zatwierdzenie bez konieczności wprowadzania poprawek.



Świadomość realiów pracy w gabinecie

Projekty tworzone są z myślą o codziennej pracy lekarza i zespołu. Układ pomieszczeń, ustawienie unitu, ergonomia asysty – każdy detal ma znaczenie. Dzięki znajomości sprzętu i realiów pracy w gabinecie, przygotowywane rozwiązania są praktyczne i funkcjonalne. Niezależnie od tego, czy plan dotyczy gabinetu jednoosobowego, kliniki wielostanowiskowej, czy modernizacji istniejącej praktyki – wsparcie projektowe jest dostosowywane do konkretnego etapu i potrzeb inwestora.

SKLEP INTERNETOWY STERN WEBER POLSKA

Części zamienne, końcówki, środki konserwujące - wszystko w jednym miejscu

W Stern Weber Polska stawiamy na kompleksową obsługę – nie tylko w momencie zakupu wybranych urządzeń, ale przez cały okres ich użytkowania. Rozumiemy, że sprawne funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego wymaga wygodnego i sprawnego dostępu do części zamiennych czy akcesoriów.

Nasz sklep internetowy z każdym miesiącem zyskuje nowych, zadowolonych użytkowników. Oferujemy pełną dostępność **części zamiennych, końcówek stomatologicznych, środków do konserwacji urządzeń oraz zestawów przeglądowych** - wszystko w atrakcyjnych cenach i z błyskawiczną realizacją zamówień.

sklep.sternweber.pl

**Dlaczego warto kupować w sklepie internetowym Stern Weber Polska?**

- **Stały rabat 5%** – każdy zarejestrowany użytkownik sklepu otrzymuje rabat na cały asortyment.
- **Szybka wysyłka** – zamówienia złożone do godziny 14:00 (dni robocze) wysyłamy tego samego dnia.
- **Doradztwo** – opiekunowie klienta służą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

**Sklep internetowy Stern Weber Polska w programie Trusted Shops**


Zakupy w naszym sklepie internetowym są nie tylko wygodne, ale też w pełni bezpieczne. Jesteśmy uczestnikiem programu Trusted Shops, który gwarantuje najwyższe standardy obsługi klienta oraz możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia transakcji.

Ponad 1100 opinii od klientów to dowód na to, że można na nas liczyć. Wszystkie recenzje są publicznie dostępne - warto sprawdzić, jak oceniane są nasze produkty, obsługa i proces zakupowy.


ZAKUPY ONLINE - TERAZ JESZCZE WYGODNIEJSZE!

Nowa wersja sklepu internetowego Stern Weber Polska

Nowy wygląd sklepu to przede wszystkim czytelniejszy układ i odświeżony interfejs, który pozwala błyskawicznie odnaleźć potrzebne produkty. Strona bardzo dobrze działa również w wersji mobilnej.

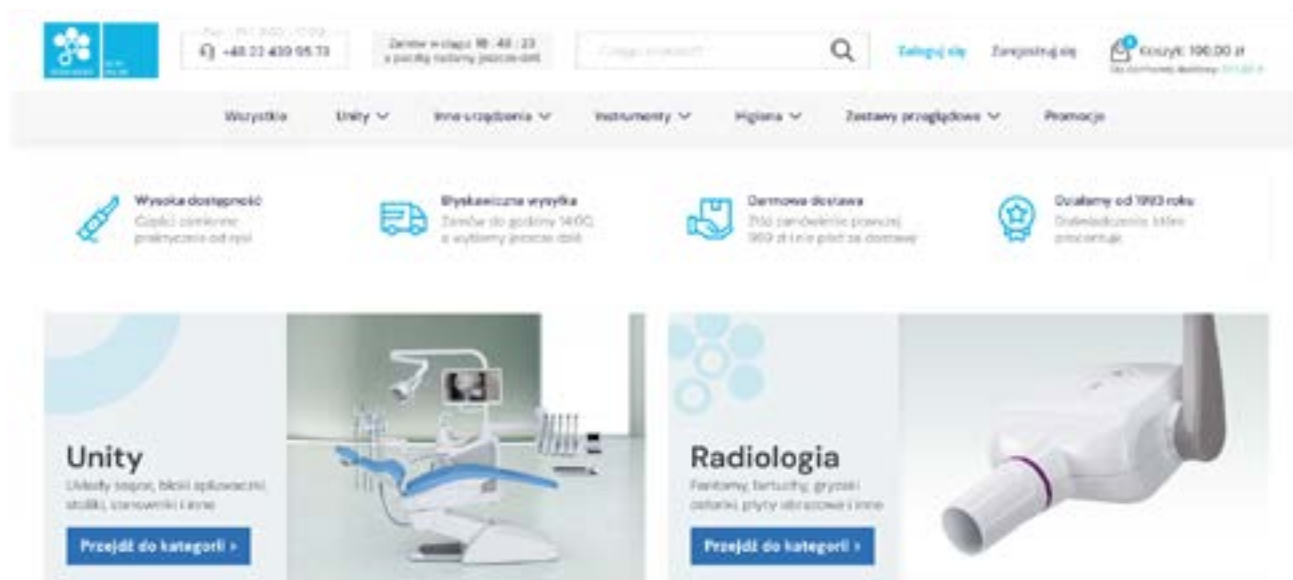

Największa zmiana funkcjonalna to nowy wygląd menu – zmieniliśmy układ kategorii, by szybciej docierać do poszukiwanych produktów. Zamiast klasycznego podziału – bardziej intuicyjne grupy i czytelne sekcje.

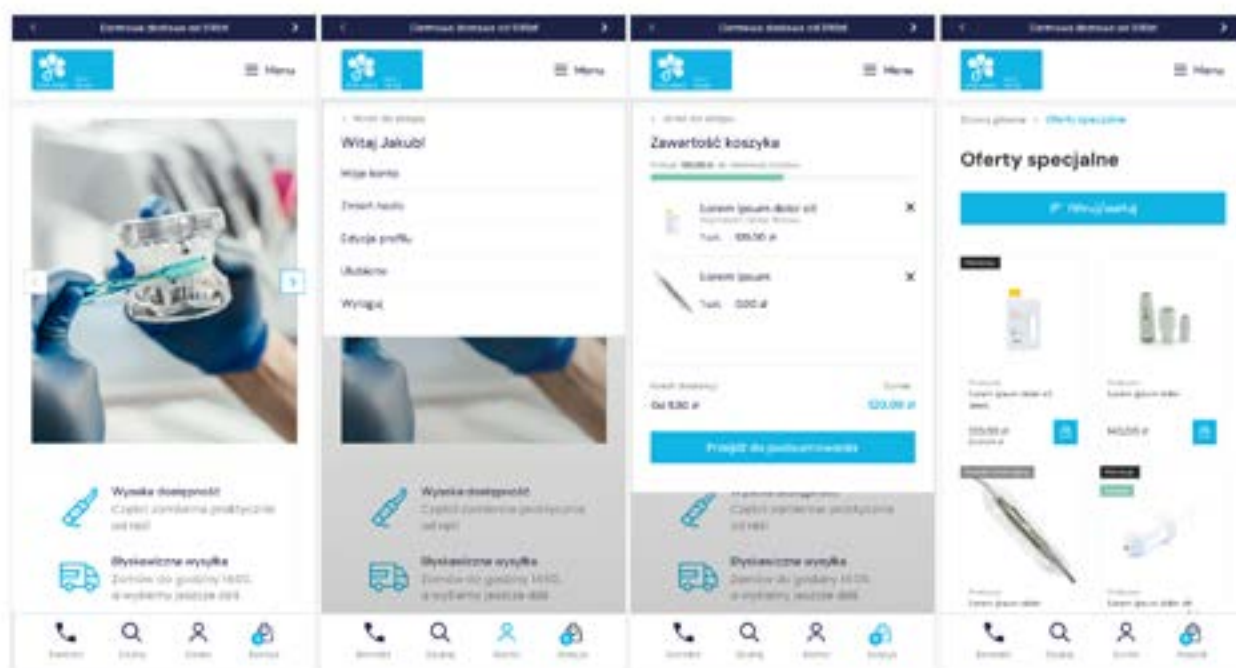

Dopracowany widok mobilny – sklep działa płynnie na smartfonie, z czytelnym układem, większymi przyciskami i uproszczoną nawigacją.

MAGAZYN URZĄDZEŃ - NASZE ZAPLECZE LOGISTYCZNE


Jeden z kluczowych filarów niezawodności obsługi Stern Weber Polska

Sprzęt stomatologiczny oferowany przez Stern Weber Polska trafia do klientów z jednego, starannie zorganizowanego miejsca – magazynu, który pełni kluczową rolę w całym łańcuchu dostaw. To tutaj trafiają urządzenia bezpośrednio z włoskiej fabryki Cefla oraz od innych producentów, zanim zostaną dostarczone do gabinetów w całej Polsce.

Własny magazyn o powierzchni ponad 700 m² to namacalny dowód skali działalności Stern Weber Polska i jeden z elementów, który realnie wyróżnia firmę na tle konkurencji. Magazyn ten jest integralną częścią struktury operacyjnej firmy i jednym z filarów jej niezawodności.



Zajrzyj za kulisy
i obejrzyj wideo!

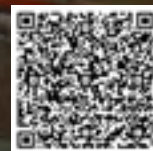**Dlaczego własny magazyn wyróżnia Stern Weber Polska na tle konkurencji?**

- **Niższe koszty logistyczne** - Dobrze zaplanowany import z fabryk Cefla i bezpośrednie zarządzanie stanami magazynowymi pozwalają ograniczyć niepotrzebne pośrednictwo i zbędne koszty transportu, gwarantując oszczędności dla klienta.
- **Pełna kontrola nad stanami magazynowymi** - Zespół Stern Weber Polska na bieżąco monitoruje poziom zapasów i może elastycznie reagować na wzrost popytu lub sezonowe potrzeby rynku. Stała dostępność najpopularniejszych modeli unitów czy urządzeń radiologicznych w magazynie pozwala nam działać sprawnie i bez zbędnej zwłoki.
- **Możliwość bezpiecznego przechowywania sprzętu przed montażem** - W przypadku opóźnień związanych z przygotowaniem lokalu, firma zapewnia możliwość magazynowania już zamówionych urządzeń do czasu zakończenia prac. To rozwiązanie, które eliminuje ryzyko uszkodzenia sprzętu na placu budowy.


Posiadanie nowoczesnej infrastruktury magazynowej to nie tylko kwestia logistyki – to wyraz dojrzałości operacyjnej i strategicznego podejścia do obsługi rynku. Dzięki największemu w Polsce wolumenowi zamówień u producentów (unitów, kompresorów, pomp ssących i końcówek) prowadzimy niezwykle skuteczne negocjacje i uzyskujemy poziom rabatów niedostępny dla firm sprzedających znacznie mniej sprzętu, co skutkuje atrakcyjną ofertą dla lekarza.

MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Komponenty dostępne od ręki – bez oczekiwania na dostawy z zagranicy

Realnym wyróżnikiem Stern Weber Polska na tle konkurencji jest własny, w pełni wyposażony magazyn części zamiennych, który zapewnia natychmiastowy dostęp do komponentów niezbędnych w procesie serwisowym. Dzięki utrzymywaniu stałych stanów magazynowych jesteśmy w stanie reagować szybko i skutecznie – bez konieczności oczekiwania na dostawy od producentów.

Ta infrastruktura minimalizuje ryzyko przestojów, co w przypadku awarii kluczowego sprzętu, jak unity stomatologiczne, ma bezpośredni wpływ na ciągłość pracy gabinetu. Szybka dostępność części oznacza mniej odwołanych wizyt, brak strat finansowych i większy spokój dla zespołu medycznego. To konkretna wartość dodana, która przekłada się na komfort codziennej pracy lekarzy dentystów współpracujących z naszą firmą.

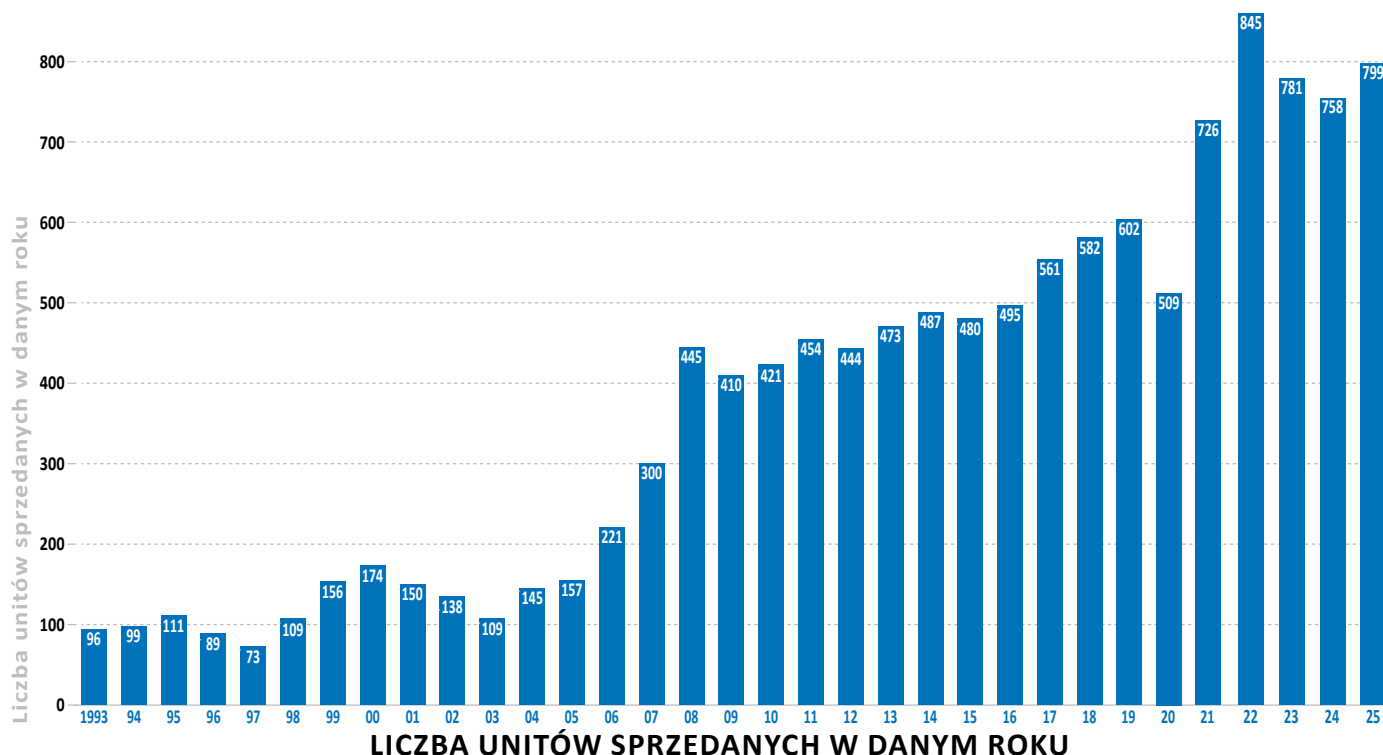

ZAUFANIE JAKOŚĆ ERGONOMIA MARKA
RELACJA NIEZAWODNOŚĆ SERWIS 33 LATA
ROZPOZNAWALNOŚĆ GWARANCJA SOLIDNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ INSPIRACJA FINANSOWANIE



12500 SPRZEDANYCH UNITÓW ROZWÓJ DOSTĘPNOŚĆ
50% UDZIAŁU W RYNKU PROFESJONALIZM
ELASTYCZNOŚĆ KREATYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA
SATYSFAKCJA RZETELNOŚĆ STERN WEBER

HISTORIA FIRMY STERN WEBER / CEFLA

Stern Weber to wiodąca marka w portfolio naszej firmy, którą wyróżnia bogata historia oraz unikalność tworzonych produktów. Początki Stern Weber sięgają 1958 roku, kiedy to szwajcarska firma produkująca zegarki wykorzystała swój potencjał do wykonywania precyzyjnych urządzeń, tworząc dział dentystyczny.

Stern Weber szybko zyskał uznanie i dzięki swoim pionierskim propozycjom wypracował sobie silną pozycję rynkową. W 1967 roku Stern Weber wyprodukował pierwszy unit stomatologiczny z instrumentami zamontowanymi na końcu odpowiednio wyważonego, przegubowego ramienia. Od tego czasu Stern Weber zawsze dostarcza sprzęt z innowacyjnymi rozwiązaniami, zaprojektowanymi z myślą o indywidualnych potrzebach każdego eksperta w dziedzinie stomatologii.

Wartościami, na których swoją działalność opiera Stern Weber, są technologia, entuzjazm dla innowacji oraz siła prawdziwej nowości. Ma to odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju całej firmy i każdym kolejnym projektowanym urządzeniu. Dzięki tym wartościom Stern Weber wyróżnił się na tle innych europejskich firm produkujących unity dentystyczne i otrzymał szansę przystąpienia w 1999 roku do grupy Cefla.

Cefla została założona w 1932 roku we włoskiej Imoli, gdzie do dzisiaj znajduje się jej główna siedziba i kilka zakładów produkcyjnych. Firma na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwijała się w obszarze systemów inżynierskich, elektrycznych i termohydraulicznych, dążąc do stworzenia grupy biznesowej z ugruntowaną pozycją nie tylko na europejskim, ale również światowym rynku. Jedną z najprężniej działających jednostek firmy jest Cefla Medical Equipment, prekursor w dziedzinie medycyny i rozwiązań stomatologicznych.

Cefla skupia uznane marki unitów takie jak Stern Weber, Anthos, Castellini, Mocom oraz NewTom czy MyRay w obszarze radiologii. Dzięki tak silnej grupie możliwa jest ciągła współpraca ekspertów polegająca na łączeniu doświadczeń z dziedziny nauki czy technologii, ale również projektowania, certyfikacji i całego procesu dystrybucji. Prowadzi to do uzyskania najwyższej jakości oraz obniżenia kosztów produkcji przy stale poszerzającej się ofercie urządzeń. Wpływa to na obniżkę cen dla każdego Stomatologa szukającego wygodnego i skutecznego narzędzia pracy.

Fabryka Stern Weber w 1958 roku.



Unit Stern Weber z lat 70.



Nowoczesna fabryka unitów Stern Weber, Anthos, Castellini i Mocom oraz sprzętu radiologicznego MyRay i NewTom w miejscowości Imola



CO DECYDUJE O BEZKONKURENCYJNEJ JAKOŚCI NASZYCH UNITÓW?

- ✓ **wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska**
- ✓ **wielokrotna kontrola jakości**
- ✓ **staranny dobór materiałów o najwyższej wytrzymałości**



Hale produkcyjne w fabryce unitów Stern Weber, Anthos, Castellini i Mocom w Imoli



Nasi Klienci podczas wizyty w pomieszczeniach ekspozycyjnych w fabryce



SPRZEDAŻ

Krzysztof Błażejczyk
Prezes Zarządu

601 217 700
22 439 95 51
sternweber
@sternweber.pl



Cezary Franczuk
Menadżer ds. sprzedaży

534 160 735
cezary.franczuk
@sternweber.pl



Michał Pudlis
Konsultant ds. kluczowych
klientów

603 303 737
22 439 95 52
michal.pudlis
@sternweber.pl



Bartłomiej Gryta
Konsultant ds. sprzedaży

883 223 443
22 439 95 57
bartlomiej.gryta
@sternweber.pl



Tomasz Pawelski
Konsultant ds. sprzedaży

530 695 995
22 439 95 53
tomasz.pawelski
@sternweber.pl



Kamil Kobosko
Konsultant ds. sprzedaży
Specjalista ds. radiologii

577 117 223
22 439 95 54
kamil.kobosko
@sternweber.pl



Marcin Skrzecz
Konsultant ds. finansowych

887 700 456
marcin.skrzecz
@sternweber.pl



REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Agnieszka Augustyniak
Kierownik Komórki
Realizacja Zamówień

22 395 56 04
agnieszka.augustyniak
@sternweber.pl



Beata Borecka
Zastępca Kierownika
Komórki

22 439 95 61
beata.borecka
@sternweber.pl



Katarzyna Skorupska
Koordynator zamówień

22 456 70 15
katarzyna.skorupska
@sternweber.pl



Monika Rulko
Koordynator zamówień

22 456 70 12
monika.rulko
@sternweber.pl



Małgorzata Krajewska
Koordynator zamówień

22 439 95 65
malgorzata.krajewska
@sternweber.pl



ADMINISTRACJA BIURA

Angelika Dorochowicz
Kierownik Biura

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Joanna Wileńska
Administrator Biura

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Anna Racka
Kierownik Komórki
Obsługa Posprzedażowa

22 439 95 74
anna.racka
@sternweber.pl



Maria Jarosz
Opiekun klienta

22 439 95 66
was
@sternweber.pl



Katarzyna Podolska
Opiekun klienta

22 439 95 77
was
@sternweber.pl



SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SKLEP INTERNETOWY

Dariusz Zawadzki
Koordynator zamówień

22 395 56 01
sklep
@sternweber.pl



Beata Kołacińska
Koordynator zamówień

22 395 56 01
sklep
@sternweber.pl



OCHRONA RADIOLOGICZNA

Mariusz Bożek
Kierownik Komórki
Ochrona Radiologiczna

22 439 95 58
mariusz.bozek
@sternweber.pl



Alicja Brylińska
Specjalista ds. Ochrony
Radiologicznej

22 456 70 10
alicja.brylinska
@sternweber.pl



LABORATORIUM BADAWCZE

Magdalena Klimek
Kierownik
Laboratorium Badawczego

722 027 222
22 439 95 59
magdalena.klimek
@sternweber.pl



Paweł Dziekański
Konsultant ds. technicznych
Testy Specjalistyczne

887 700 004
22 439 95 59
pawel.dziekanski
@sternweber.pl



SZKOLENIA RADIOLOGICZNE

Maksymilian Gąsiński
Elektrodiagnosta

536 864 610
maksymilian.gasinski
@sternweber.pl



SERWIS STACJONARNY

Wojciech Łubowicz
Kierownik Komórki
Serwis Stacjonarny

22 456 70 08
naprawa
@sternweber.pl



Sebastian Gańko
Inżynier Serwisu

22 456 70 08
naprawa
@sternweber.pl



Sebastian Pełka
Inżynier Serwisu

22 456 70 08
naprawa
@sternweber.pl



Mateusz Majcher
Inżynier Serwisu

22 456 70 08
naprawa
@sternweber.pl



Nenad Petkanić
Konsultant ds. serwisu

22 456 70 08
naprawa
@sternweber.pl



Volodymyr Stusiak
Inżynier Serwisu

22 439 95 60
naprawa
@sternweber.pl



Ernest Kozak
Inżynier Serwisu

22 439 95 60
naprawa
@sternweber.pl



SERWIS RADIOLOGII

Sławomir Każuch
Kierownik Komórki
Serwis Radiologii

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



Karolina Szymańska
Doradca techniczny

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



Konrad Porębski
Doradca techniczny

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



Radosław Dorochowicz
Inżynier Serwisu

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



Przemysław Gwizdak
Doradca techniczny

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



Marcin Leszczuk
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



SERWIS RADIOLOGII

Rafał Celiński
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 00
serwis.radiologia
@sternweber.pl



SERWIS OGÓLNY

Rafał Matyjasek
Kierownik Komórki
Serwis Ogólny

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Marek Kurzyński
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Maciej Koseski
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Szymon Wiechowski
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Aleksander Suchodolski
Inżynier Serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Mirosław Wątroba-Sikorski
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Mariusz Matyjasek
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Bohdan Siubar
Konsultant ds. serwisu

22 395 56 03
serwis
@sternweber.pl



Daniel Cybulak
Konsultant ds. serwisu

600 526 296
serwis
@sternweber.pl



Daniel Domański
Konsultant ds. serwisu

888 323 964
serwis
@sternweber.pl



Piotr Kamiński
Konsultant ds. serwisu

669 999 906
serwis
@sternweber.pl



Piotr Kowalewski
Konsultant ds. serwisu

500 370 267
serwis
@sternweber.pl



SERWIS
OGÓLNY

Michał Lach
Konsultant ds. serwisu

513 196 167
serwis
@sternweber.pl



Rafał Janasz
Konsultant ds. serwisu

505 777 922
serwis
@sternweber.pl



Krzysztof Sadyński
Konsultant ds. serwisu

602 319 803
serwis
@sternweber.pl



Grzegorz Tkacz
Konsultant ds. serwisu

501 134 207
serwis
@sternweber.pl



MAGAZYN
I LOGISTYKA

Marcin Litwiński
Kierownik Komórki
Magazyn i Logistyka

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Piotr Burzec
Magazynier

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Tomasz Sujewicz
Magazynier

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Hubert Mormol
Magazynier

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Andrzej Lejtkowski
Magazynier

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Tomasz Karczmarczyk
Kierowca

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



KSIĘGOWOŚĆ
I KADRY

Elżbieta Janczewska
Główny Księgowy

22 439 95 70
elzbieta.janczewska
@sternweber.pl



Iwona Metera
Księgowy

22 439 95 69
iwona.metera
@sternweber.pl



Iwona Błotnicka
Księgowy

22 439 95 64
iwona.blotnicka
@sternweber.pl



Dorota Sobota
Księgowy

22 456 70 07
dorota.sobota
@sternweber.pl



PRAWNICY

Dominika Cedrońska
Prawnik

534 554 245
dominika.cedronska
@sternweber.pl



Anna Kielbasa
Młodszy Prawnik

22 456 70 16
anna.kielbasa
@sternweber.pl



MARKETING I PR

Aleksandra Stańczyk
Kierownik Komórki
Marketing i PR

533 514 123
aleksandra.stanczyk
@sternweber.pl



Gabriela Darmochwał
Młodszy specjalista
ds. marketingu

534 982 225
gabriela.darmochwal
@sternweber.pl



IT

Łukasz Kurzyński
p. o. Kierownik Komórki
IT

22 395 56 00
sternweber
@sternweber.pl



Piotr Garus
Grafik

22 395 56 00
piotr.garus
@sternweber.pl



Łukasz Humin
Informatyk / Administrator IT

22 395 56 00
lukasz.humin
@sternweber.pl



KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Krzysztof Błażejczyk
Prezes Zarządu

601 217 700
sternweber
@sternweber.pl



Cezary Zbierchowski
Dyrektor operacyjny

531 114 221
cezary.zbierchowski
@sternweber.pl



Renata Bartczak
Menadżer ds. operacyjnych

534 518 354
renata.bartczak
@sternweber.pl



Jakub Błażejczyk
Menadżer ds. finansowych

534 959 882
jakub.blazejczyk
@sternweber.pl



Jacek Błotnicki
Menadżer ds. technologii

669 693 333
jacek.blotnicki
@sternweber.pl



Cezary Franczuk
Menadżer ds. sprzedaży

534 160 735
cezary.franczuk
@sternweber.pl



SERWIS CENTRALNY I LOKALNY



WSPARCIE TECHNICZNE

Radiologia:
22 395 56 00
serwis.radiologia@sternweber.pl

Unity i pozostałe urządzenia:
22 395 56 03
serwis@sternweber.pl



AUTORYZOWANI SERWISANCI LOKALNI

Prezentujemy Państwu wykaz serwisantów lokalnych uprawnionych do montażu, przeglądów i naprawy urządzeń dystrybuowanych przez firmę Stern Weber Polska.

MAZOWIECKIE	WARSZAWA	Daniel Cybulak	600 526 296	OPOLSKIE	OPOLE BRZEG	Marcin Niewiora	604 655 982
		Daniel Domański	888 323 964			Rafał Wasilewski	508 259 488
		Piotr Kamiński	669 999 906				
		Piotr Kowalewski	500 370 267				
		Rafał Janasz	505 777 922				
		Krzysztof Sadzyński	602 319 803				
		Grzegorz Tkacz	501 134 207				
		Sławomir Tkacz	601 941 606				
		Dawid Domański	577 702 952				
		Marcin Brachacki	604 299 137				
	OTWOCK RADOM	Marcin Romaniuk	604 626 888	PODKARPACKIE	RZESZÓW DĘBICA KROSNO	Janusz Czeakański	696 309 041
		Sebastian Gałat	790 304 103			Jakub Czeakański	724 755 946
		Dariusz Czekaj	602 581 129			Jacek Knych	600 858 954
		Robert Kostka	601 361 326			Artur Knych	739 445 681
		Wojciech Paduchowski	697 619 546			Zbigniew Niemczyk	504 774 223
	SIEDLCE PŁOCK	Michał Lach	513 196 167	PODLASKIE	BIALYSTOK ŁOMŻA	Mieczysław Szydlik	604 222 943
		Zbigniew Żurek	602 756 017			Adam Ossoliński	604 497 774
		Filip Żurek	664 004 634			Krzysztof Zapert	502 565 121
		Andrzej Malin	601 178 849			Mariusz Szmigiel	604 855 085
		Karol Firasiewicz	791 259 229				
		Adam Krzykwa	502 298 337				
DOLNOŚLĄSKIE	WROCŁAW	Damian Maksalio	788 764 448	POMORSKIE	GDAŃSK	Maciej Balon	669 868 769
		Jacek Dubaniowski	697 333 582			Jacek Balon	501 582 513
		Arkadiusz Sałamaj	690 666 303			Konrad Benetkiewicz	697 281 100
		Robert Jasion	507 390 559			Piotr Giedo	793 575 201
		Arkadiusz Kala	602 288 903			Szymon Piątkowski	669 868 769
		Franciszek Skrętkowicz	660 462 532			Grzegorz Hajdukiewicz	501 677 406
		Mariusz Rex	602 461 731			Dariusz Barcikowski	791 031 191
		Jacek Herrgesell	691 795 775				
		Piotr Wiącek	696 496 412				
	BIELAWA BOLESŁAWIEC DZIERŻONIÓW JELENIA GÓRA			ŚLĄSKIE	GDAŃSK STAROGARD GDAŃSKI	Łukasz Koper	509 822 612
KUJAWSKO- -POMORSKIE	BYDGOSZCZ TORUŃ	Adam Maślanka	607 230 940		KATOWICE BIELSKO-BIAŁA CZĘSTOCHOWA MIERZĘCICE MIKOŁÓW RUDA ŚLĄSKA LUBLINIEC	Tomasz Bartosiewicz	500 571 943
		Krzysztof Pietryga	663 941 177			Jan Rogóż	602 271 081
		Krzysztof Pietryga	663 941 177			Andrzej Rajchel	601 282 753
		Dawid Pietryga	607 464 492			Zdzisław Rzepecki	506 045 908
						Waldemar Hampel	798 529 471
						Łukasz Hampel	798 529 257
						Przemysław Redzimski	798 529 257
						Krystian Witt	604 368 794
LUBELSKIE	LUBLIN CHEŁM PUŁAWY	Grzegorz Rubaszka	600 802 156	ŚWIĘTOKRZYSKIE	KIELCE	Rafał Dziób	608 488 155
		Ireneusz Kowalczyk	514 777 703				
		Kamil Kowalczyk	519 730 505				
		Rafał Błażejczyk	530 774 100				
		Artur Tużnik	606 714 080				
LUBUSKIE	GORZÓW WIELKOPOLSKI KROSNO ODRZAŃSKIE	Jacek Pająk	502 953 107	WARMIŃSKO- -MAZURSKIE	OLSZTYN	Zbigniew Szczeszek	601 626 011
		Marek Koryluk	602 137 132			Jacek Zarzeczny	501 601 517
		Krzysztof Plaga	602 143 553			Jakub Zarzeczny	509 722 594
						Andrzej Taranowicz	501 470 297
						Dariusz Lewczuk	604 464 572
						Janusz Lewkowicz	604 660 285
ŁÓDZKIE	ŁÓDŹ BEŁCHATÓW PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SKIERNIEWICE	Mariusz Zakrzewski	602 744 451	WIELKOPOLSKIE	POZNAŃ KOŚCIAN OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZŁOTÓW	Łukasz Łukowiak	605 254 069
		Piotr Andrzejczak	501 067 417			Jakub Kaczmarek	605 254 069
		Roman Taborowski	601 269 800			Mikołaj Handke	883 383 501
		Łukasz Juśkiewicz	517 522 393			Grzegorz Jaźwiec	604 349 471
		Zbigniew Kamiński	601 815 018			Dariusz Kułaczowski	603 775 505
MAŁOPOLSKIE	KRAKÓW	Michał Kontek	535 000 289	ZACHODNIO- -POMORSKIE	SZCZECIN	Tomasz Kazubski	535 566 270
		Jacek Jaskot	601 456 345			Marian Kazubski	601 757 852
		Artur Freyer	602 665 301			Miroslaw Małecki	601 762 715
		Marcin Bartyzel	792 716 098			Mateusz Całka	503 185 762
		Paweł Gradzi	535 000 289				
	MYŚLENICE NOWY TARG NOWY SĄCZ	Adrian Bodziony	535 000 289		MYŚLIBÓRZ KOSZALIN SZCZECINEK	Kuba Drabik	502 744 703
		Krzysztof Siuta	605 096 701			Paweł Siedlecki	603 974 007
		Krzysztof Kulpa	501 672 985			Michał Marcinkowski	693 918 539
						Radosław Żydałowicz	500 464 839

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW - skrót

Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę STERN WEBER POLSKA przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Przed przystąpieniem do przygotowania gabinetu do montażu unitu prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

1. Przed montażem klient jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie następujących przyłączy (według dołączonej dokumentacji):
2. Nasze unity stomatologiczne wymagają przytwierdzenia do podłoża za pomocą śrub wkręcanych w podłogę o długości 10 cm (w miejscach wskazanych w dokumentacji, o której mowa poniżej) lub stabilizacji za pomocą płyty montażowej.
3. Instalację odpływową-kanalizację
4. Instalację ssącą
UWAGA: Instalacja ssąca przebiega od unitu do pompy ssącej (nie wolno połączyć instalacji ssącej z kanalizacją), przewód sterujący nie jest podłączony do sieci 230V i przebiega tak, jak rura ssąca.
5. Instalację sprężonego powietrza
6. Instalację wody zimnej
 - 6.1. OPCJONALNIE: Instalacja wody zdemineralizowanej
UWAGA: Do unitu oprócz wody zdemineralizowanej należy zawsze doprowadzić wodę wodociągową.
7. Instalację elektryczną
8. Instalację multimedialną
9. Większość z naszych unitów posiada możliwość sterowania urządzeniem zewnętrznym w postaci zamka elektromagnetycznego w drzwiach, sterowania brzęczykiem lub lampką wezwania asysty ewentualnie załączaniem napisu nad wejściem do gabinetu, w związku z tym pomiędzy unitem a odpowiednim sterownikiem urządzenia należy umieścić przewód elektryczny 2 x 0,75 mm².
10. W przypadku montażu aparatu RTG RX DC Hypersphere na unicie należy do skrzynki przyłączeniowej doprowadzić drugi przewód zasilający 3 x 1,5 mm² 230V zabezpieczony bezpiecznikiem B10A. Należy pozostawić min 50 cm przewodu od strony unitu.
11. W przypadku zakupu urządzenia Assistina do konserwacji końcówek firmy W&H należy przewidzieć wykonanie podłączenia sprężonego powietrza od kompresora w pobliżu miejsca postawienia urządzenia zakończonego zaworem kulowym z gwintem wewnętrznym 0,5 cala.
12. W przypadku aparatów RTG punktowych RX DC:
 - przewód zasilający 3 x 2,5 mm (prąd nominalny 10A, znamionowy 16A typ D)
 - przewód F/utp kategoria 5e do ekspozytora (tylko dla aparatów z ekspozytorem przewodowym)

URZĄDZENIE	WYMIARY (szer. x gł. x wys.)
kompresor: 4TEK MIRAGE 100E MGF 24/10 GENESI M Ekom DK50-10Z/M Durr Dental Tornado 1	400 mm x 522 mm x 620 mm 500 mm x 420 mm x 600 mm 330 mm x 580 mm x 570 mm 630 mm x 600 mm x 840 mm
pompa ssąca: Metasys EXCOM hybrid 1s Dürr Dental VS 300 S	350 mm x 320 mm x 530 mm 320 mm x 320 mm x 400 mm
URZĄDZENIE	POBÓR MOCY
unit (zależnie od modelu)	1200W – 1800W
kompresor	850W
pompa ssąca	580W
autoklaw	2500W

PEŁNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS, CASTELLINI I MOCOM DOSTĘPNE SĄ na stronie www.sternweber.pl w zakładce INFORMACJE/Przygotowanie gabinetu do montażu www.sternweber.pl/przygotowanie-gabinetu-do-montazu



W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI LUB PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM

TEL: 22 439 95 67



E-MAIL: serwis@sternweber.pl

Z chwilą złożenia zamówienia STERN WEBER POLSKA oferuje pomoc merytoryczną w przygotowaniu gabinetu do montażu, czego elementem jest przeprowadzenie wizji lokalnej.



PRZYKŁADOWE WYMIARY URZĄDZEŃ

Przykładowe wymiary urządzeń (mm):

unit S300 Continental

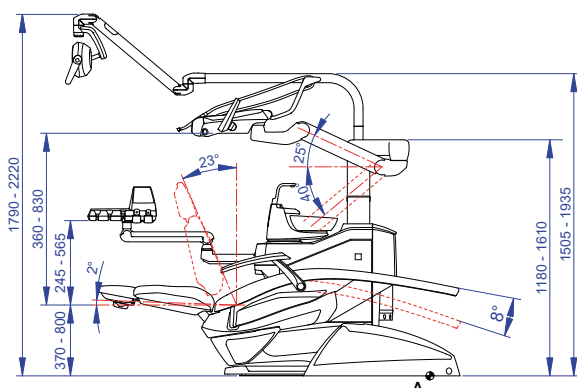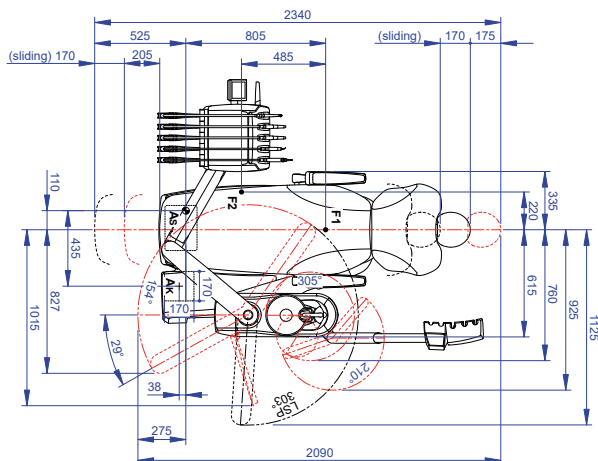

aparat RTG RX DC

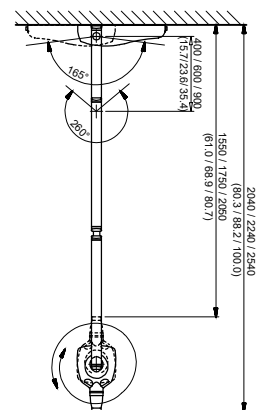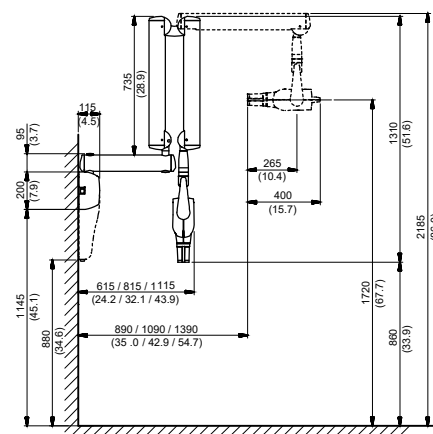

Płyta montażowa stabilizująca



**Płyta montażowa w sposób minimalny
i akceptowalny powiększa obrys podstawy fotela**

W ofercie Stern Weber Polska dostępna jest płyta montażowa stabilizująca, która stanowi praktyczne rozwiązanie w sytuacjach, gdy nie ma możliwości bezpośredniego zakotwienia unitu stomatologicznego do podłoża.

Tego typu przypadki często występują w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, w gabinetach o nieznanym przebiegu instalacji lub w wynajmowanych lokalach.

Płyta zapewnia odpowiednią stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, spełniając wszystkie wymagania techniczne.

Cena katalogowa: **3500 PLN**

SERWIS OGÓLNY


Serwis ogólny unitów stomatologicznych, mikroskopów, autoklawów, pomp i kompresorów

W Stern Weber Polska tworzymy specjalistyczny zespół serwisowy, który codziennie dba o niezawodne działanie urządzeń stomatologicznych – od unitów, przez pompy i kompresory aż po autoklawy. Jesteśmy tu po to, aby diagnozować, doradzać i rozwiązywać problemy techniczne, dbając o zapewnienie ciągłości pracy i komfortu lekarza.

Nasz serwis to przede wszystkim osoby z wieloletnim doświadczeniem, którzy znają od podszewki urządzenia wszystkich marek z portfolio Stern Weber Polska. Dzięki temu jesteśmy w stanie trafnie rozpoznać źródło problemu i zaproponować skuteczne rozwiązanie – zawsze w oparciu o oryginalne części i zalecenia producenta. Na zgłoszenia codziennie czeka 6 inżynierów/ekspertów wsparcia technicznego - tak liczna i wyspecjalizowana grupa serwisowa to realne wyróżnienie na tle branży!

W przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia – wystarczy do nas zadzwonić. Przeprowadzimy wstępną diagnozę i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie:

- **Jeżeli problem da się rozwiązać zdalnie** – serwisant udzieli użytkownikowi instrukcji krok po kroku.
- **Jeżeli potrzebna będzie interwencja serwisowa** – zostanie oddelegowany inżynier serwisu z naszej ogólnopolskiej sieci Serwisu Autoryzowanego.
- **W przypadku bardziej złożonych usterek** – zalecimy dostarczenie urządzenia do naszego serwisu stacjonarnego, z możliwością otrzymania urządzenia zastępczego (autoklawy, pompy lub kompresory)

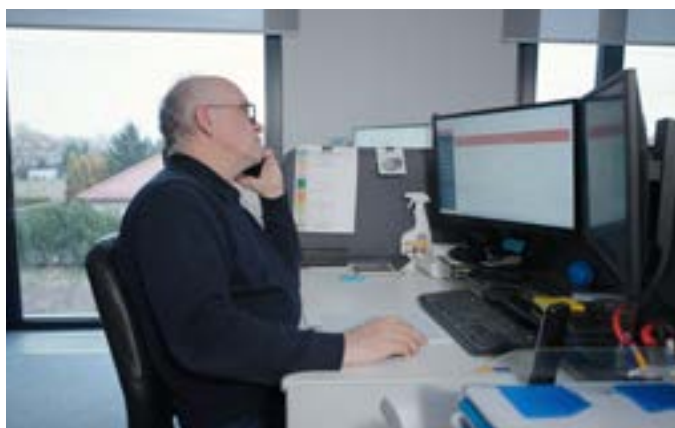**Szybka reakcja na awarie unitu stomatologicznego**

W przypadku awarii unitu stomatologicznego wystarczy jeden telefon – nasz zespół serwisowy natychmiast podejmuje działania. Każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie, dokładnie analizując objawy usterki oraz charakter problemu, aby jak najszybciej przywrócić sprawność urządzenia.

■ Pomoc zdalna

W wielu przypadkach możemy zaproponować szybkie i skuteczne rozwiązanie bez konieczności wizyty serwisanta. Konsultacja telefoniczna z naszym inżynierem pozwala zdiagnozować problem i krok po kroku przeprowadzić użytkownika przez podstawowe czynności naprawcze. Oszczęda to czas i przyspiesza przywrócenie unitu do pracy.

■ Wsparcie na miejscu

Jeśli sytuacja wymaga interwencji technicznej, bezzwłocznie organizujemy wizytę Serwisanta Autoryzowanego. Dzięki obecności naszych specjalistów w różnych regionach Polski możemy zapewnić szybką reakcję i skuteczną naprawę, bez zbędnej zwłoki. Każdy technik pracuje na oryginalnych częściach zamiennych i według standardów producenta, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność wykonywanych usług.

Centrum Serwisowe Stern Weber Polska jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00.

☎ **Telefon: 22 395 56 03** ✉ **E-mail: serwis@sternweber.pl**

SERWIS RADIOLOGII


Diagnostyka urządzeń radiologicznych z portfolio Stern Weber Polska

Nie wszystkie problemy wymagają fizycznej wizyty serwisanta. Wiele zgłoszeń – zwłaszcza tych dotyczących urządzeń radiologicznych – może zostać rozwiązanych zdalnie, szybko i bez konieczności przerywania pracy gabinetu. Dzięki możliwościom zdalnego wsparcia technicznego zespół serwisu radiologii skutecznie weryfikuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem pantomografów i tomografów oraz oprogramowania diagnostycznego.

Zdalna diagnostyka urządzeń radiologicznych umożliwia skrócenie czasu reakcji serwisu i przywrócenie ciągłości pracy bez konieczności oczekiwania na serwisanta w gabinecie. Zespół tworzy 6 inżynierów/ekspertów wsparcia radiologicznego, w tym 2 dyplomowanych elektroradiologów. Choć wiele usterek da się zidentyfikować i rozwiązać zdalnie, w razie potrzeby wysyłamy specjalistów bezpośrednio do gabinetu, aby zapewnić skuteczną pomoc na miejscu.

Co można zrobić zdalnie?

- **Wstępna diagnostyka usterek i błędów komunikacyjnych** – szybka analiza objawów technicznych oraz weryfikacja podstawowych parametrów pracy urządzenia, pozwalająca na określenie przyczyny problemu.
- **Rozwiązanie problemów z komunikacją urządzenia z komputerem** – identyfikacja i usunięcie błędów połączenia, konfiguracji portów, sterowników lub sieci.
- **Korekta ustawień jakości obrazu RTG** – dostosowanie parametrów ekspozycji, ostrości i kontrastu w celu poprawy jakości zdjęć wykonywanych przez urządzenie.
- **Instalacja lub aktualizacja oprogramowania diagnostycznego** – przeprowadzana zgodnie z wymaganiami producenta, zapewnia prawidłowe działanie systemów i pełną funkcjonalność urządzeń.

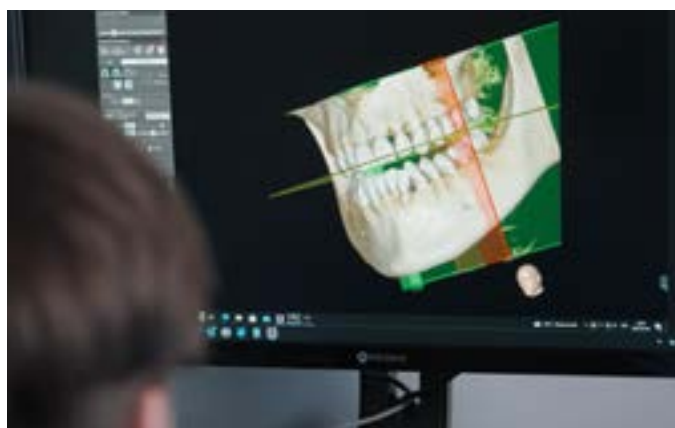

Jak wygląda pomoc zdalna?

Pomoc zdalna to wygodne i szybkie rozwiązanie, szczególnie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji konfiguracyjnej. Po przesłaniu zgłoszenia i uruchomieniu programu TeamViewer, możliwe jest bezpieczne nawiązanie połączenia z komputerem użytkownika w celu diagnozy lub korekty ustawień.

Wsparcie zdalne realizowane jest przez zespół serwisowy Stern Weber Polska od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00–17:00.

Potrzebujesz wsparcia technicznego lub chcesz zgłosić naprawę?

Skontaktuj się z nami!

☎ **Telefon: 22 395 56 00**

✉ **E-mail: serwis.radiologia@sternweber.pl**

Zajrzyj za kulisy
i obejrzyj wideo!



WARSZTAT NAPRAWCZY INSTRUMENTÓW STOMATOLOGICZNYCH

Pełna diagnoza. Profesjonalna naprawa. Dbłość o każdy detal.

Niezawodność instrumentów stomatologicznych ma kluczowe znaczenie w codziennej praktyce – dlatego w naszym dziale serwisowym każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie i z najwyższą starannością. Dzięki konsekwentnie realizowanym standardom jakości oraz jasno określonym procedurom serwisowym, możliwe jest sprawne diagnozowanie usterek, ich efektywne usuwanie oraz przeprowadzanie pełnej konserwacji instrumentów stomatologicznych.

Każda naprawa realizowana jest z zachowaniem wysokiej precyzji i dbałości o szczegóły, niezależnie od tego, czy dotyczy sprzętu objętego gwarancją, czy urządzeń serwisowanych w trybie pogwarancyjnym. Dzięki wiedzy techników, odpowiedniemu zapleczu serwisowemu oraz wieloletniemu doświadczeniu, możliwe jest skuteczne przywracanie pełnej sprawności końcówek i instrumentów, które po naprawie są gotowe do dalszego, bezpiecznego użytkowania.

Serwis instrumentów stomatologicznych działający przy Stern Weber Polska oferuje:

- **Bezpłatna ekspertyza** - bez opłat za sprawdzenie i przygotowanie kosztorysu
- **Stała cena robocizny** - niezależnie od rodzaju naprawy
- **Rabat 15% na części zamienne** - dla klientów posiadających unity zakupione w firmie Stern Weber Polska
- **Wygodna wysyłka** – instrumenty można bezpłatnie odesłać za pośrednictwem usługi InPost Szybkie Zwroty



Co wyróżnia warsztat instrumentów stomatologicznych Stern Weber Polska?

■ Indywidualna diagnostyka każdego instrumentu

Każdy instrument przekazany do serwisu przechodzi szczegółową ocenę techniczną. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest pełny kosztorys naprawy, który trafia do klienta przed podjęciem jakichkolwiek działań.

■ Profesjonalna konserwacja i testy końcowe

Przed wykonaniem naprawy wszystkie końcówki są dokładnie czyszczone, konserwowane – a po naprawie poddawane testom weryfikującym ich pełną sprawność. Tylko sprawdzone i w pełni funkcjonalne instrumenty są kierowane do zwrotu.

■ Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Serwis instrumentów stomatologicznych Stern Weber Polska realizuje naprawy zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej upływie – z zachowaniem tych samych standardów jakości i staranności. Każda naprawa przebiega zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz zaleceniami producentów.

Potrzebujesz wsparcia technicznego lub chcesz zgłosić naprawę?

Skontaktuj się z nami!

Telefon serwisowy: 22 439 95 60, E-mail: naprawa@sternweber.pl

Zajrzyj za kulisy
i obejrzyj wideo!



WARSZTAT NAPRAWCZY AUTOKLAWÓW, POMP I KOMPRESORÓW

Bezpieczeństwo pracy zaczyna się od skutecznego serwisu

Autoklawy, pompy i kompresory to urządzenia, bez których codzienne funkcjonowanie gabinetu stomatologicznego jest niemożliwe. Odpowiadają one za podstawowe procesy: bezpieczną sterylizację narzędzi, odsysanie płynów ustrojowych oraz stałe dostarczanie sprężonego powietrza do unitu. Ich awaria przekłada się bezpośrednio na pracę całego zespołu – powodując opóźnienia wizyt, zakłócenia w przebiegu zabiegów, a w skrajnych przypadkach całkowity przestój w działaniu gabinetu. Dlatego tak istotne jest szybkie wykrycie usterki i profesjonalna interwencja serwisowa, która przywróci urządzeniom pełną sprawność i pozwoli uniknąć długotrwałych przerw w pracy gabinetu stomatologicznego.

W serwisie stacjonarnym Stern Weber Polska funkcjonują dedykowane stanowiska naprawy urządzeń, takich jak autoklawy, pompy i kompresory. Trafiają tu urządzenia wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, dostępu do profesjonalnych narzędzi diagnostycznych oraz indywidualnego podejścia serwisowego.



Każda naprawa jest potwierdzona kosztorysem i dokumentacją, a klient otrzymuje pełną informację o możliwych rozwiązaniach. Dzięki dostępowi do oryginalnych części zamiennych oraz zaplecza magazynowego większość napraw wykonywana jest w krótkim czasie, co minimalizuje ryzyko przestojów w pracy gabinetu. Serwis zapewnia sprzęt zastępczy na czas naprawy, co pozwala kontynuować pracę do momentu jej zakończenia.

Co wyróżnia warsztat naprawczy autoklawów, pomp i kompresorów stomatologicznych Stern Weber Polska?

■ Sprzęt zastępczy na czas naprawy

Umożliwiamy kontynuację pracy bez przestojów i odwoływania wizyt pacjentów.

■ Transparentny proces serwisowy

Każda naprawa jest potwierdzona kosztorysem i dokumentacją, klient ma pełen wgląd w zakres prac.

■ Obsługa door-to-door

Odbieramy sprzęt bezpośrednio z gabinetu, dostarczamy oraz montujemy urządzenie zastępcze - po zakończeniu naprawy odwozimy oryginalne urządzenie na miejsce.

■ Oryginalne części i sprawdzone rozwiązania

Korzystamy wyłącznie z oryginalnych części zamiennych i sprawdzonych rozwiązań serwisowych.

Potrzebujesz wsparcia technicznego lub chcesz zgłosić naprawę?

Skontaktuj się z nami!

E-mail: naprawa@sternweber.pl

Zajrzyj za kulisy
i obejrzyj wideo!



PRZEGLĄDY TECHNICZNE UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Przeglądy techniczne unitów stomatologicznych to nie tylko wymóg prawny, ale kluczowy element zapewnienia dbałości o bezpieczeństwo zarówno lekarza, jak i pacjentów. Regularne badania techniczne wraz z wymianą zużytych elementów pozwalają na uniknięcie nagłych awarii, wydłużają żywotność urządzenia oraz zapewniają ciągłość pracy w gabinecie.



Unity stomatologiczne, jak każde urządzenie medyczne, muszą przechodzić przeglądy techniczne przynajmniej raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta.

Każdy przegląd powinien obejmować szczegółowe sprawdzenie wszystkich kluczowych podzespołów:

- elementów mechanicznych i ruchomych,
- połączeń pneumatyczno-hydraulicznych,
- układu elektrycznego wraz z badaniem bezpieczeństwa elektrycznego,
- poprawności działania instrumentów,
- systemów ssących oraz odprowadzania odpadów,
- ogólnego stanu technicznego unitu.

Kompleksowa usługa przeglądu technicznego w Stern Weber Polska obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich kluczowych podzespołów przez Autoryzowanego Serwisanta,
- wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych zawartych w pakiecie przeglądowym,
- wpis do paszportu technicznego.

PAKIETY PRZEGLĄDOWE UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

Aby zapewnić jak najwyższy standard pracy oraz niezawodność unitów stomatologicznych, firma Stern Weber Polska opracowała specjalne pakiety przeglądowe. Pakiety te zawierają starannie wyselekcjonowane części zamienne i eksploatacyjne, które nie tylko wydłużają żywotność sprzętu, ale także pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu higieny pracy.

Gotowy zestaw przeglądowy to duża oszczędność w porównaniu do konieczności zakupu pojedynczych komponentów.

Prezentacja zawartości zestawu przeglądowego



Zestawy przeglądowe dostępne są w sklepie internetowym Stern Weber Polska: **sklep.sternweber.pl**


Każdy klient sklepu internetowego otrzymuje rabat w wysokości 5%.

Części zawarte w zestawie przeglądowym przedstawione są na schemacie powyżej.

Więcej informacji udzielają nasi eksperci wsparcia technicznego, **tel. 22 395 56 03**

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UNITÓW PREZENTOWANYCH W KATALOGU

- podane ceny to ceny brutto, obejmujące koszt transportu, montażu i szkolenia;
- wszystkie modele unitów STERN WEBER / ANTHOS / CASTELLINI / MOCOM są tak samo wyposażone:

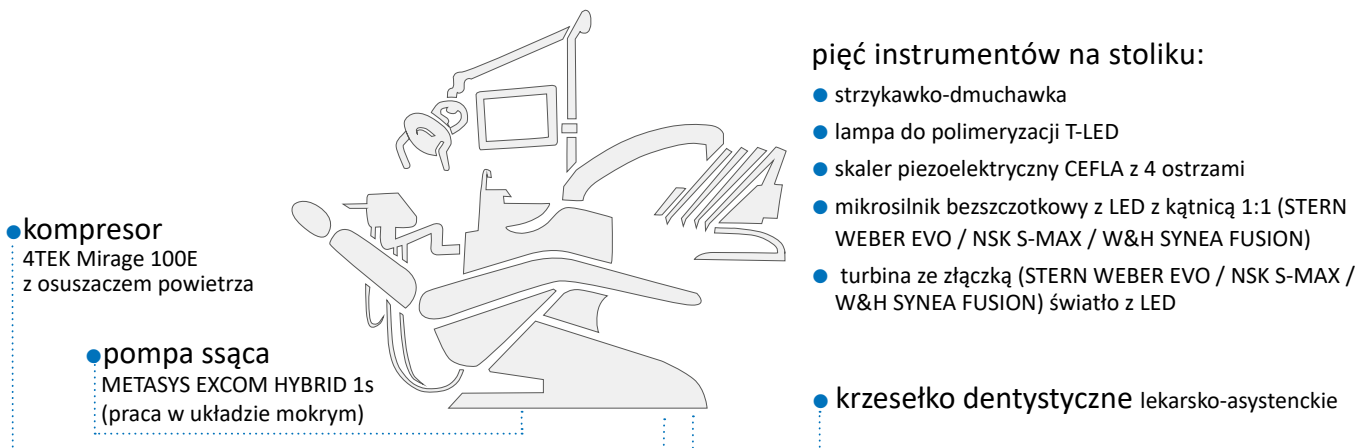

- modele unitów różnią się między sobą liczbą funkcji (swoistych dla danego modelu i szczegółowo opisanych w cennikach dotyczących danego modelu) oraz mogą się różnić dodatkami: końcówkami (STERN WEBER EVO / NSK S-MAX / W&H SYNEA FUSION), lampą operacyjną (VENUS PLUS - SCT, VENUS PLUS - SCT COMPOSITE, VENUS PLUS - MCT, VENUS PLUS - MCT VIEW), zagłówkiem (mechaniczny / pneumatyczny), mikrosilnikiem (z funkcją endo lub bez), ramieniem asysty pojedyncze / podwójne / podwójne regulowane (góra-dół);
- standardowe wyposażenie można dowolnie modyfikować;
- obok cen podano orientacyjną wysokość raty przy finansowaniu Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, w 84 miesięcznych ratach, przy WIBOR1M 3,79%);
- wyposażenie unitów przedstawionych na zdjęciach wykorzystanych w katalogu nie musi odpowiadać ofercie handlowej;
- do dowolnego modelu unitu STERN WEBER / ANTHOS / CASTELLINI / MOCOM można dokupić zestaw radiologii STERN WEBER / MYRAY (aparat RTG DC wersja ścienna + radiografia – jako szósty instrument przy stoliku lekarza) w cenie od 20 000 PLN i autoklaw STERN WEBER SW-17 w cenie od 13 000 PLN;
- do unitów STERN WEBER / ANTHOS / CASTELLINI / MOCOM można dokupić zestaw profesjonalnej kamery wewnątrzustnej MYRAY C-U2 HD + monitor 24" Full HD i uchwytem za 11 000 PLN;
- na wszystkie modele unitów firma Stern Weber Polska udziela 2-letniej gwarancji, w tym: 1. rok – pełna gwarancja, 2. rok – na części zamienne.



STERN WEBER POLSKA zastrzega sobie możliwość zmiany cen katalogowych bez uprzedzenia. Urządzenia na zdjęciach mogą różnić się elementami wyposażenia od oferowanego w danym modelu. Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Teraz unity Stern Weber / Anthos / Castellini / Mocom nawet z 5-letnią gwarancją!

Istnieje możliwość zamówienia unitu nawet z 5-letnią gwarancją. Warunkiem wydłużenia gwarancji o kolejne lata, tzn. na 3., 4. lub 5. rok, jest dodatkowa opłata, wnoszona w momencie zamawiania sprzętu, w wysokości 3900 PLN (brutto) za każdy kolejny rok gwarancji.

FINANSOWANIE DLA STOMATOLOGÓW

STERN WEBER KREDYT – PROSTY SPOSÓB NA REALIZACJĘ PLANÓW INWESTYCYJNYCH

Blisko 50% sprzętu stomatologicznego firma STERN WEBER POLSKA sprzedaje w ramach specjalnego programu pożyczek celowych Stern Weber Kredyt, który powstał we współpracy z Siemens Finance – liderem rynku finansowania medycyny wśród firm leasingowych. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą o lekarzach dentytach planujących rozwój gabinetu i inwestycje w nowoczesny sprzęt.

Formalności ograniczone do minimum

- Finansowanie zakupów o wartości do 250 000 EURO (tj. ok. 1 057 625 PLN) bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych (ZUS, US).
- Do przygotowania umowy wystarczą podstawowe informacje przesłane mailem:
 - Numer Prawa Wykonywania Zawodu
 - NIP
 - dane z dowodów osobistych pożyczkobiorcy i współmałżonka
- Umowę pożyczki można podpisać podczas montażu sprzętu lub podpisem elektronicznym (całkowicie online do 1 000 000 PLN).
- Zabezpieczeniem pożyczki jest umowa przewłaszczenia oraz ewentualnie – przy niektórych transakcjach ze spółkami prawa handlowego – dodatkowo weksel własny.

Elastyczne warunki finansowania

- Finansowanie nawet do 100% wartości brutto sprzętu (wpłata własna nie jest obligatoryjna)
- Okres spłaty można dopasować do możliwości i planów rozwoju gabinetu – od roku do 8 lat.
- Możliwość karencji w spłacie kapitału lub całkowite odroczenie pierwszej raty nawet o 6 miesięcy.

Przejrzyste zasady

- Brak obowiązkowej wpłaty własnej.
- Brak dodatkowych opłat, zaliczek czy kaucji.
- Jedynym dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie sprzętu zapewniające szeroki zakres ochrony (oparte o zasadę "wszystkich ryzyk").



Finansowanie
zapewnia
Siemens Financial Services

Więcej niż zakup sprzętu

- Pożyczka Stern Weber Kredyt umożliwia korzystne połączenie zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
- Klienci zawierający umowę pożyczki na sprzęt medyczny mogą jednocześnie sfinansować zakup wyposażenia wspierającego funkcjonowanie gabinetu, takie jak meble, sprzęt komputerowy czy samochody. Mają również możliwość skorzystania z pożyczki gotówkowej do 50% wartości transakcji na dowolny cel (np. remont gabinetu), bez konieczności dokumentowania wydatków.

Spłata w dowolnym momencie

Pożyczkę można spłacić wcześniej, w całości lub w części. W takim wypadku naliczone odsetki są odpowiednio pomniejszane, a rozliczeniu podlega jedynie pozostała do spłaty kwota kapitału. W przypadku wcześniejszej spłaty umowy obowiązuje opłata administracyjna (od 1% do 4% wartości pożyczki, zależnie od terminu spłaty).

Własność i rozliczanie sprzętu

- W przypadku pożyczki przedsiębiorca pozostaje właścicielem zakupionego sprzętu od momentu zakupu.
- Dla pożyczkobiorcy kosztem uzyskania przychodu mogą być odsetki (ew. koszty związane z finansowaniem) oraz amortyzacja sprzętu (ew. odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu).

Marcin Skrzecz
Konsultant
ds. finansowych

887 700 456
marcin.skrzecz@
sternweber.pl

W 2025
roku w ramach
finansowania
Stern Weber Kredyt
podpisaliśmy
245 umów
pożyczki

W ciągu 23 lat współpracy
z Siemens Finance
Firma Stern Weber Polska
udzieliła ponad 4 200 pożyczek
dla lekarzy dentytów
na rozwój praktyki

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ! PONIŻEJ WYBRANE PRODUKTY Z PRZYKŁADOWĄ RATĄ.

STERN WEBER S200 Continental



rata: 1090 PLN*
75 000 PLN

PROXIMA X6 2D



rata: 1150 PLN*
79 000 PLN

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D
13x10 CEPH



rata: 4330 PLN*
299 000 PLN

ZEISS OPMI PICO 180° LED



rata: 1000 PLN*
69 000 PLN



Więcej szczegółów
u Marcina Skrzcza

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Udzielenie finansowania wymaga każdorazowo przeprowadzenia przez Siemens Finance analizy kredytowej i wydania decyzji.

* rata brutto Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

S200



S200 Continental



S200 International



S200 Continental
z pakietem PLUS



S200 International
z pakietem PLUS

S210



S210 LR Continental



S210 LR International



S210 LR Cart

S300



S300 Continental



S300 International



S300 Continental
z pakietem PLUS



S300 International
z pakietem PLUS

S220 TR



S220 TR Continental



S220 TR International



S220 TR Continental Hybrid



S220 TR Cart



S220 TR Side Delivery

S320 TR



S320 TR Continental



S320 TR International



S320 TR Continental
z pakietem hybrydowym



S320 TR Side Delivery

S280 TRc



S280 TRc Continental



S280 TRc International

S380 TRc



S380 TRc Continental



S380 TRc International



S380 TRc Continental
z pakietem hybrydowym

OFERTA 2026



na zdjęciu: unit S200 Continental



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW STERN WEBER



unit STERN WEBER S200 Continental **75 000 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 10 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l **+ 13 000 PLN**

CENA ZESTAWU: 108 000 PLN
(rata 1570 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)



EASYCHECK - ZDALNA DIAGNOSTYKA

Stern Weber zapewnia łączność internetową dla swoich urządzeń, co umożliwia korzystanie z opcjonalnych usług cyfrowych. Po podłączeniu do sieci przez Easy Check możliwa jest zdalna diagnostyka i wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym. Dodatkowo wirtualny asystent Di.V.A. monitoruje wykorzystanie instrumentów i wspiera optymalizację pracy, ułatwiając zarządzanie obciążeniem urządzeń i planowanie czynności konserwacyjnych.



INTERAKTYWNY LED

Moduł LED, który sygnalizuje status wybranych funkcji unitu za pomocą kolorowych diod. Informuje m.in. o trybie pracy skalera, przebiegu cyklu higieny, a podczas leczenia kanałowego – o odległości od wierzchołka korzenia (kolor diod zmienia się od zielonego do czerwonego). W trybie stopera pierścieni stopniowo gaśnie i miga po zakończeniu odliczania.



ŁĄCZNOŚĆ NFC

Dzięki modułowi NFC tylko wskazane osoby mają dostęp do unitu i swoich spersonalizowanych ustawień. Wystarczy zbliżyć silikonową opaskę do modułu lekarza, aby aktywować wcześniej skonfigurowane parametry instrumentów, fotela, lampy oraz interfejsu.



MIKROSILNIK FLUO

Mikrosilnik z opcją oświetlenia fluorescencyjnego (FLUO) umożliwia natychmiastową detekcję materiałów kompozytowych w trakcie ich usuwania. Zastosowanie oświetlenia fluorescencyjnego wspomaga dokładność oczyszczenia pola pracy przed ponownym wypełnieniem.



STEROWANIE GŁOSOWE

Sterowanie głosowe umożliwia bezdotykową obsługę wybranych funkcji unitu, m.in. lampy operacyjnej – jej włączanie, wyłączenie oraz wybór trybu „kompozytowego”. Po podłączeniu unitu do komputera komendy głosowe pozwalają również sterować oprogramowaniem MyRay Irys, w tym zapisywać zdjęcia wykonane kamerą C-U2 HD lub sensorem Zen-X HD.



LAMPA POLIMERYZACYJNA T-LED

Lampę wyposażono w ergonomiczny uchwyt oraz intuicyjny interfejs, ułatwiający codzienną obsługę. Zmienny kształt rękojeści (prosty/pośredni/łamany) pozwala dopasować lampę do preferencji użytkownika oraz sytuacji klinicznej. Do dyspozycji jest siedem programów pracy (max 3400 mW/cm²).

UWAGA! Przedstawione powyżej elementy wyposażenia mogą nie wchodzić w skład standardowej konfiguracji poszczególnych modeli unitów. Szczegóły i dostępność wybranych opcji należy skonsultować z przedstawicielem handlowym.

NOWOŚCI

Lampy pola pracy – VENUS PLUS



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT
Podstawowy wariant



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT COMPOSITE
Podstawowy wariant



VENUS PLUS - MCT
Sprawdzony i ceniony model



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - MCT VIEW
Wbudowana kamera do dokumentacji zabiegów

Konsola lekarza:

Konsola lekarza ma lżejszą konstrukcję i bardziej kompaktowy kształt, co ułatwia ustawienie jej w dogodnej pozycji. Hamulec pneumatyczny uruchamiany przyciskiem w uchwycie (opcjonalny wariant), umożliwia łatwą regulację wysokości. Zmniejszono również wysokość ramienia narzędzi, aby ograniczyć ryzyko kolizji z lampą w polu zabiegowym.

- Podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex (opcjonalnie)
- Odłączalne rękawy instrumentów
- Hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (czujnik dotykowy)
- Zdejmowany, sterylizowalny uchwyt (nasadka)
- Obrotowa i demontowalna taca z silikonową podkładką montowana w uchwycie pod konsolą lekarza
- Silikonowa podkładka pod instrumenty, nadająca się do sterylizacji
- Szósty instrument z lewej strony konsoli (opcjonalnie) - do wyboru:
 - radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi
 - kamera MYRAY C-U2 HD
 - lampa polimeryzacyjna T-LED



Konsola lekarza ma bardziej kompaktową formę i niższą wagę, co ułatwia jej ustawienie

Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- Dotykowy panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD, wertykalny lub horyzontalny układ 5 obr./min.
- Możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- Obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia RECI-PROC® (opcjonalnie)
- Obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- Współpraca z kamerą wewnątrzstanną MyRay C-U2
- Włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- Napełnianie kubka pacjenta oraz splotywanie misy spluwaczki
- Pełne sterowanie lampą operacyjną oraz sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- Możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- Wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej



Ekran dotykowy o przekątnej 7 cali pozwala na przeglądanie plików (w tym zdjęć RTG) i powiększanie obrazów

UNIT STERN WEBER S200


 nawet
5 LAT
 gwarancji

Dostępne z
easycheck



WAŻNY JEST KAŻDY DETAL



dotykowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy i zintegrowanym negatoskopem




lampa VENUS PLUS – SCT



zagiówek z blokadą mechaniczną



krzeselko asystenckie lub lekarskie

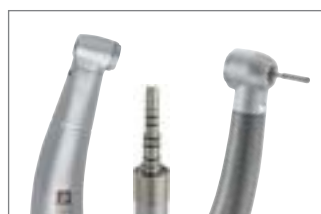

końcówki STERN WEBER EVO ze światłem



skaler Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS - SCT

(Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, optukowanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

66 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

75 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1090 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S200 Z PAKIETEM „PLUS”

nowe
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



DOPRACOWANY W SZCZEGÓŁACH

Unit S200 z pakietem „PLUS” to rozbudowana wersja unitu Stern Weber S200. W skład pakietu „PLUS” wchodzi: **ramię konsoli lekarskiej o estetyce modelu S300, panel sterowania z dużym wyświetlaczem LCD, lampa pola pracy VENUS LED, hamulec pneumatyczny stolika lekarza, dwuprzegubowe ramię asysty z regulacją w pionie.**

Wyselekcjonowany wybór dodatków w obniżonej pakietowo cenie powoduje, że unit S200 z pakietem „PLUS” jest atrakcyjnym i wygodnym stanowiskiem pracy. Regulowanie parametrów pracy instrumentów oraz sterowanie unitem jest intuicyjne, a 4 profile użytkownika podnoszą komfort użytkowania w większym zespole.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzeselko
asystentkie lub lekarskie

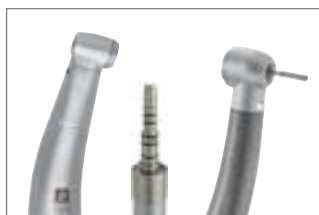

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skaler Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental z pakietem „PLUS”

- Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu S300:**
 - moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (przycisk)**
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
 - możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
 - funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
 - zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta
 - splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
 - wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P (zakres ruchu: 37–80 cm, udźwig: 190 kg):**
 - zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayeru w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik fotela
 - bezszwowa tapicerka
- Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS - SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):**
 - źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
 - praca głowicy w trzech płaszczyznach
 - płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny
 - color Rendering Index (CRI) >90
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU:

71 500 PLN

- + 2500 PLN* **Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L**
- + 2500 PLN* **Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry**
- + 2500 PLN* **Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza**
- + 1000 PLN* **Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER**

CENA ZESTAWU:

80 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1160 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S210 LR

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



zamiana na unit S210 LR CART
(rękawki od dołu)

+ 4000 PLN = 91 500 PLN



zamiana na unit S210 LR INTERNATIONAL
(rękawki od dołu)

+ 1000 PLN = 91 000 PLN

WAŻNY JEST KAŻDY DETAL

Unit stomatologiczny S210 LR to rozbudowana wersja najpopularniejszego modelu S200. Unit zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu zarówno przez leworęcznych jak i praworęcznych użytkowników. Jest to najnowsza propozycja STERN WEBER uzupełniająca unity w wersach HYBRID (możliwość ustawienia konsoli lekarza i asysty po obu stronach pacjenta). Unit ten posiada kolejną funkcjonalność – jaką jest przestawianie w zaledwie kilka chwil całego bloku spluwaczki z lewej na prawą stronę fotela. Wszystko to bez udziału serwisu. Konstrukcja pozwala również na samodzielne przełożenie panelu sterowania lekarza z prawej na lewą stronę konsoli. Dostępne 4 profile użytkowników z indywidualnymi pozycjami zerowymi, spluwaczkowymi i 4 zabiegowymi sprawiają, że model ten w pełni zmienia się dla praworęcznego i leworęcznego operatora.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiłówek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

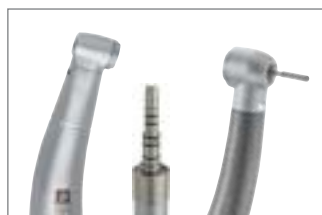

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skaler Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S210 LR

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta
- moduł tryfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (przycisk)
- zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- ustawna po lewej lub prawej stronie konsoli lekarza
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S210P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 160 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC polecane przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- dwa podłokietniki fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta:

- ustawny po lewej lub prawej stronie pacjenta
- wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

81 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

90 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1300 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S300

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



zamiana na unit S300 INTERNATIONAL
(rękawcy od dołu)
+ 1000 PLN = 95 000 PLN

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ

Model S300 to najbardziej zaawansowana platforma wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy cichy (SOFT-MOTION), płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia oraz panel sterowania FULL TOUCH CLINIC o przekątnej 7 cali.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzeselko
asystenckie lub lekarskie

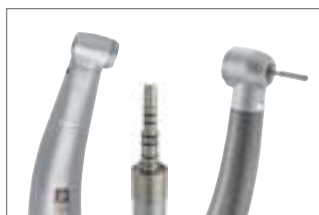

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S300 Continental

- Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):**
 - moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
 - blokada położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (sensor) zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza-Panel FULL TOUCH CLINIC – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, obsługujący m.in.:
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej
- Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):**
 - cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
 - dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
 - płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
 - zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
- Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS - SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):**
 - źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
 - praca głowicy w trzech płaszczyznach
 - płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny
 - color Rendering Index (CRI) >90
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- Konsola asystencka z podwójnym łamaniem ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, optukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU:

85 500 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

94 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1360 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części
+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S300 Z PAKIETEM „PLUS”

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



zamiana na unit S300 INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 107 000 PLN

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ

Model S300 został wyposażony w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym, cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylenie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem HD




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzeselko
asystenckie lub lekarskie

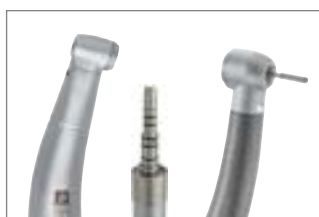

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S300 Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- **moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm**
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- **podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex**
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (sensor) zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, **jakość HD obsługujący m.in.:**

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek **ATLAXIS** z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- **interaktywny LED**
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- **podgrzewanie wody w kubku pacjenta**

5. Konsola asystencka z podwójnym łamaniem ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługę funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

97 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

106 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1540 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S220 TR

nowe
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



zamiana na unit S220 TR INTERNATIONAL
(rękawki od dołu)
+ 1000 PLN = 86 000 PLN



zamiana na unit S220 TR CONTINENTAL HYBRID
(rękawki od góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 5000 PLN = 90 000 PLN



zamiana na unit S220 TR CART
(rękawki od dołu)
+ 7000 PLN = 92 000 PLN



zamiana na unit S220 TR SIDE DELIVERY
(rękawki od dołu)
+ 6000 PLN = 91 000 PLN

SOLIDNY I WYTRZYMAŁY



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiówek
z blokadą mechaniczną



krzeselko
asystenckie lub lekarskie

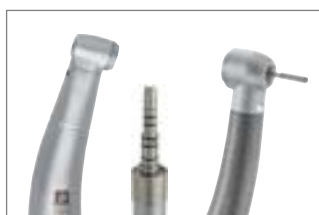

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Stern Weber S220 TR Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu S300:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skamera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łaman, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (przycisk)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skamera z dokładnością: 1% - turbina i skamera; 10 obr./min - mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skamera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywołanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S320P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0” oraz wywołanie i odwołanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony

w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywołanie i odwołanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

76 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

85 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1230 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S320 TR

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



dołożenie pakietu hybrydowego
(rękawy od góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 5000 PLN = 116 000 PLN



zamiana na unit S320 TR SIDE DELIVERY
(rękawy od dołu)
+ 6000 PLN = 117 000 PLN



zamiana na unit S320 TR INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 112 000 PLN

CZYSTA INNOWACJA

Wersja modelu S320 TR została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym. Cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylenie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Model S320 TR został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok stojący na podłożu z niezależnie pracującym fotelem.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLASIS



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

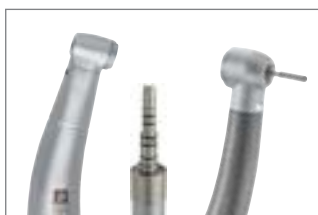

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S320 TR Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skamera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (sensor) zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skamera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycji pracy dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S320P TR (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- Interaktywny LED
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

102 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

111 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1610 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN


Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S280 TRC

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

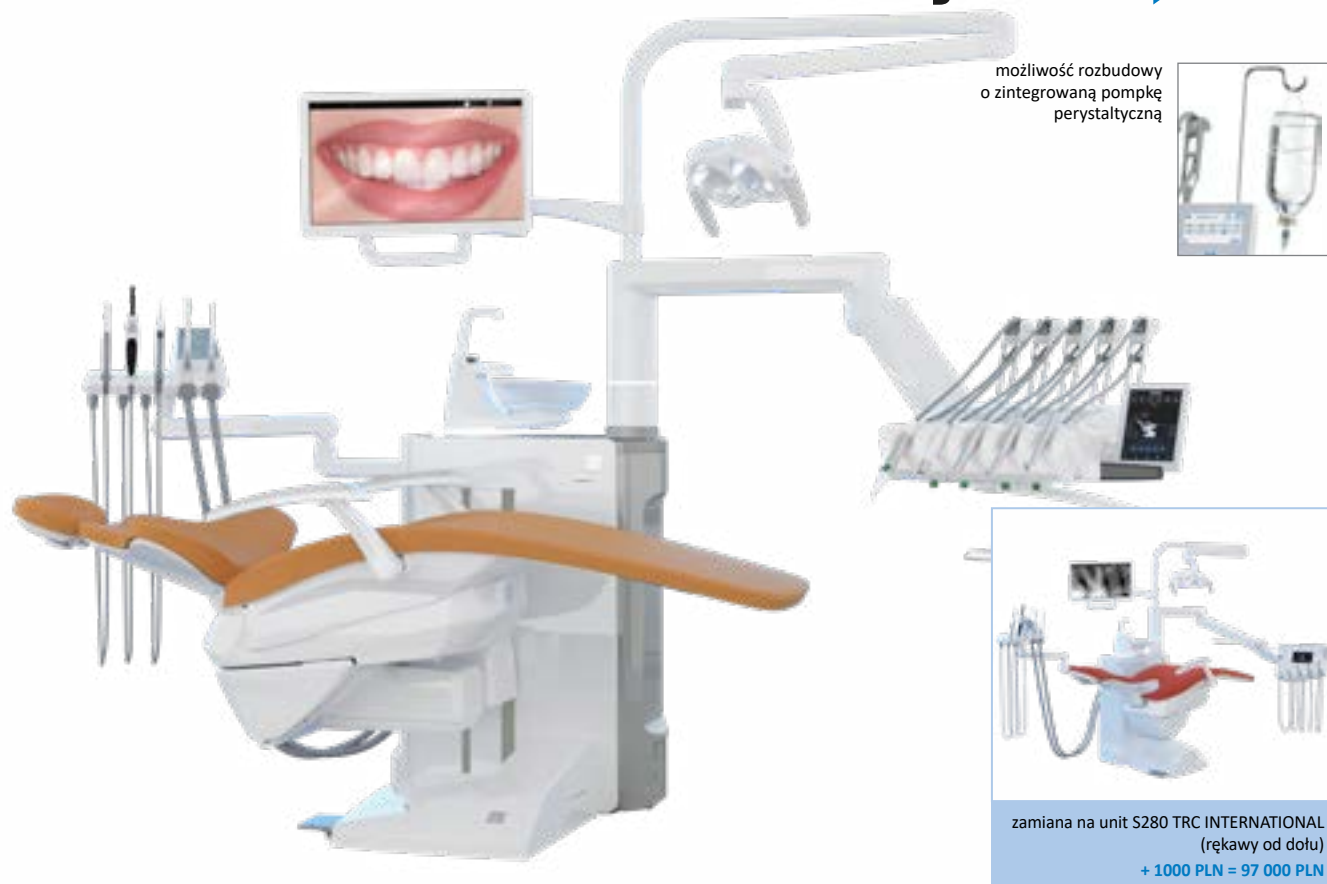

NIEZAWODNY I FUNKCJONALNY

Unit S280 TRC jest unitem z fotelem zawieszonym na bloku spluwaczki, co stymuluje płynną współpracę pomiędzy lekarzem a asystą oraz oferuje większą przestrzeń pracy. Regulacja pionowa położenia fotela umożliwia dopasowanie do całego personelu. Ustawienie instrumentów na stoliku, którego położenie może być zmieniane bez wysiłku, umożliwia przyjęcie przez lekarza komfortowej pozycji w zakresie pomiędzy 9 h i 1 h. Zrównoważona konstrukcja unitu S280 TRC zwiększa wolną przestrzeń wokół pacjenta i umożliwia ergonomiczną pracę, redukuje zmęczenie i związaną z nim utratę koncentracji. Możliwość rozbudowy o mikrosilnik z funkcją endo, elektryczny napęd misy spluwaczki, multimedia, system radiografii cyfrowej z aparatem RTG i laser zapewnia stworzenie zintegrowanego centrum zabiegowego.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiówek
z blokadą mechaniczną



krzeselko
asystenckie lub lekarskie

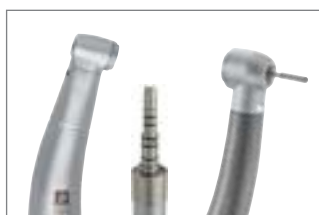

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skaler Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S280 TRc Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

- z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):**
- moduł sześćofunkcyjnej strzykawki w obudowie metalowej do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min; 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max. 3400 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (sensor) zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
 - Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spłuwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania po 4 pozycji pracy dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej” oraz ratunkowej
 - Aseptyczna klawiatura sterowania parametrami pracy przy stole lekarza obsługująca:**
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spłuwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania 12 pozycji pracy (po 4 dla 3 użytkowników); wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S280P TRC

- (zakres ruchu: 39–79 cm, udźwieg: 190 kg):**
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprysku w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spłuwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik fotela, bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE

- (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):**
- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
 - praca głowicy w trzech płaszczyznach
 - płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny
 - color Rendering Index (CRI) >90
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spłuwaczki stojący na podłożu wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spłuwaczkowej”), instalację ssaków (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

87 500 PLN

- + 2500 PLN* **Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L**
- + 2500 PLN* **Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry**
- + 2500 PLN* **Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza**
- + 1000 PLN* **Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER**

CENA ZESTAWU:

96 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1390 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stole lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na uście lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S380 TRC

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



zamiana na unit
S380 TRC INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 120 000 PLN



dokończenie pakietu hybrydowego
(rękawy od góry, dla użytkowników
prawo- i leworęcznych)
+ 2000 PLN = 121 000 PLN



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

EKSKLUZYWNA INNOWACJA

Unit S380 TRc to unikalny fotel, pełen funkcji dostosowanych do stylu pracy tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia i podparcia nóg, wysuwany automatycznie podnóżek - każda funkcja jest przeznaczona do zapewnienia wyjątkowego komfortu w każdej pozycji. Wszechstronność fotela zapewnia wiele możliwości przekształcenia jego pozycji z obszaru chirurgicznego do funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji indywidualnego planu leczenia. Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadanie i zsiadanie.




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

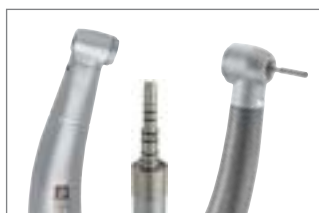

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S380 TRc Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu
 - obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec pneumatyczny konsoli lekarza (sensor) zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spłuwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S380P

(zakres ruchu: 39-79 cm, udźwig: 190 kg):

- niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek
- fotel obracany o 90 stopni, składany do pozycji krzesła
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączenie i wyłączenie pompy ssaka poprzez nacisnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spłuwaczki stojący na podłożu, wyposażony

w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- Interaktywny LED
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

110 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU:

119 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1720 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Ekskluzywne innowacje

S380 TRc to unikalny fotel pełen funkcji dostosowanych do stylu pracy tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia i podparcia nóg, wysuwany automatycznie podnóżek – każda funkcja jest przeznaczona do zapewnienia wyjątkowego komfortu w każdej pozycji. Każdy ruch jest sterowany przez dotykowy panel sterowania. Urządzenie może zapamiętać do 4 indywidualnych ustawień pracy dla każdego z 4 operatorów. Pozycja spoczynkowa pacjenta i pozycja spluwackowa również mogą być spersonalizowane. Oprogramowanie kontroluje również dwie pozycje: pozycja chirurgiczna i pozycja Trendelenburga.

**Wsparcie komunikacji**

Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadanie i zsiadanie. W trakcie omawiania sytuacji zdrowotnej pacjenta, doskonała ergonomia fotela ułatwia zespołowi stomatologicznemu efektywny dialog z pacjentem i sprawia, że pacjent spędza mniej czasu w pozycji leżącej w trakcie leczenia. Fotel jest idealny dla wszystkich form leczenia stomatologicznego, a pozycja siedząca może być regulowana w dowolnej wysokości.



Unit **S380 TRc** wersja International (rękawki od dołu) jako Zintegrowane Centrum Diagnostyczne, z radiografią **MYRAY ZEN-Xi** mocowaną na stoliku lekarskim jako szósty instrument oraz aparatem RTG **RX DC HYPERSPHERE** mocowanym na unicie.

Przekształcanie pracy

Wszechstronność fotela zapewnia wiele możliwości przekształcenia jego pozycji z obszaru chirurgicznego do funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji indywidualnego planu leczenia. Funkcjonalność **S380 TRc** może być uzupełniona poprzez dodatkową funkcję, która umożliwia umieszczenie konsoli lekarskiej po stronie asystenckiej (pakiet **hybrydowy**).



ASEPTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

HIGIENA AKTYWNA



Bezpieczeństwo, na którym można polegać

Aby ułatwić codzienne obowiązki, Stern Weber doprowadził do perfekcji automatyczne systemy, umożliwiające zagwarantowanie spełnienia higienicznych standardów przy zredukowaniu do minimum pracy ręcznej. Niektóre systemy są dostępne tylko w wersjach cyfrowych unitu, inne w ramach wyposażenia standardowego. Każdy system zapewnia całkowite bezpieczeństwo i maksymalny spokój umysłu.

SANASPRAY (standard)

System SANASPRAY zawiera duży zbiornik na wodę destylowaną (z płynami czyszczącymi, jeżeli są konieczne) używaną we wszystkich instrumentach i strzykawce. Zbiornik umieszczono na zewnątrz korpusu unitu, aby ułatwić dostęp przy obsłudze.

AWDS - automatyczne czyszczenie układu ssakowego (opcja)

Automatyczny system AWDS przepłukuje i czyści kaniule płynem wlewany do specjalnego zbiornika. Ponieważ cykl czyszczenia trwa tylko jedną minutę, można go stosować w przerwie pomiędzy kolejnymi pacjentami.

WHE SYSTEM DEZYNFEKCI WODY (opcja)

System zgodny z EN1717 (DVGW)

Ciągły system dezynfekcji z odseparowaniem od wody miejskiej zgodny ze standardem EN1717. Urządzenie Typu A zapewnia przerwę pomiędzy zasilaniem w wodę miejską, a układem wodnym unitu, dzięki czemu spełnione są najnowsze standardy ochrony przed skażeniem wody. System zawiera zbiornik mieszający w układzie unitu wodę utlenioną (stężenie 0,06%) z wodą wodociągową w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego.

System BIOSTER (opcja)

System ten zapewnia dezynfekcję układu sprayu w instrumentach. Automatycznie sterowany system wykonuje następujące czynności:

- przedmucha powietrzem przewody układu
- napełnia przewody środkiem dezynfekującym
- zapewnia obieg wody ze środkiem czyszczącym przez zadany czas
- opróżnia sprężonym powietrzem przewody układu
- napełnia przewody wodą destylowaną lub z sieci zasilającej

HIGIENA PASYWNA



Podwójne filtry

Podwójne filtry układu ssakowego umieszczone są na korpusie unitu. Rozległa strefa filtrowania zapewnia maksymalną efektywność i redukuje częstotliwość opróżniania wkładu filtrującego. Unit jest wyposażony w zawory selekcyjne wyboru pracy rękawa ssakowego. Rolkowe prowadnice, po których przesuwają się przewody ssakowe, można łatwo zdjąć do dezynfekcji i czyszczenia.

Specjalnie dobrane powierzchnie

Tapicerka jest bezzszwowa, a wyeksponowane elementy nie posiadają żadnych zagłębień, łatwo jest więc czyścić wszystkie powierzchnie i ryzyko zakażenia jest ograniczone. Łatwo zdejmowalna tapicerka umożliwia prostą i efektywną dezynfekcję. Jej powierzchnie pokryte są poliuretanową powłoką lub wykonane z technopolimerów o wysokiej odporności na agresywne chemikalia.

Moduł instrumentów

Wykonana z miękkiego silikonu podkładka pod instrumenty może być zdjęta i sterylizowana w autoklawie. Dla zapewnienia właściwego czyszczenia i dezynfekcji rękawy instrumentów są odłączalne, a plastikowa osłona stolika lekarza – zdejmowalna.

Folie ochronne

Panele sterowania lekarza i asysty są łatwe do czyszczenia i wyposażone w folie ochronne jednorazowego użytku.

Łatwy dostęp

Osłona zakrywająca główne podzespoły unitu znajduje się w tylnej części korpusu i umożliwia szybki i łatwy dostęp w czasie wykonywania czynności obsługowych.

ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE z głowicą pracującą w trzech płaszczyznach z możliwością montażu na unicie

Swobodny obrót na połączeniu kulowym umożliwia ustawienie tubusa w dowolnej pozycji, łącznie z pionową. Automatyczna blokada dotykowa umożliwia szybką zmianę ustawienia pomiędzy kolejnymi zdjęciami.

Precyzyjny i bezpieczny

Zaprojektowana z myślą o uzyskiwaniu znakomitych, cyfrowych zdjęć oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta, stałonapięciowa głowica RTG z najmniejszym osiągalnym punktem ogniskowej (0,4 mm) za każdym razem wykonuje ostre zdjęcia.

12-calowy kolimator (30 cm) poprawia równoległość wiązki promieniowania, co skutkuje jeszcze bardziej ostrymi i dokładnymi zdjęciami.

Bezprzewodowe sterowanie

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE wyposażony jest w bezprzewodowy panel zdalnego sterowania, pozwalający na prosty i szybki wybór optymalnego programu ekspozycji. Aparat automatycznie dobiera właściwe parametry pracy do wybranego przez obsługującego urządzenie obszaru anatomicznego.



Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej MYRAY ZEN-Xi na stoliku lekarza jako szósty instrument



Większe możliwości diagnostyczne

Zamocowany bezpośrednio na unicie, bez niedogodności związanych z oddzielną instalacją, z dodatkową przewagą wynikającą z posiadania zaawansowanego, ale zajmującego niewielką powierzchnię urządzenia RTG, RX DC z technologią HYPERSPHERE, razem z sensorem MYRAY ZEN-Xi i monitorem LCD tworzą zintegrowane centrum diagnostyczne, a razem z unitem – zintegrowane centrum zabiegowe. Krótszy czas, natychmiastowy rezultat, stała skuteczność.



KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc, S380 TRc)

Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).

Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.

Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNICA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4.

MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®

Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNICA 4:1


Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.

Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH. Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.


Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.

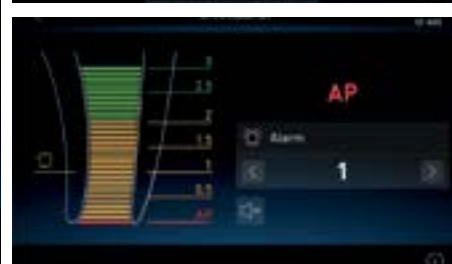

KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII

Zintegrowana pompka perystaltyczna (dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc, S380 TRc)

W przypadku zamontowania pompki perystaltycznej, dentysta może za pomocą bezszczotkowego mikrosilnika Stern Weber przeprowadzać również zabiegi chirurgii szczękowej oraz implantologiczne. Dzięki nowemu wyświetlaczowi lekarz może komfortowo śledzić status podłączonego systemu. Oprócz dostarczania informacji o działaniu systemów higienicznych na ekranie wyświetlane są wszystkie parametry pracy mikrosilnika.

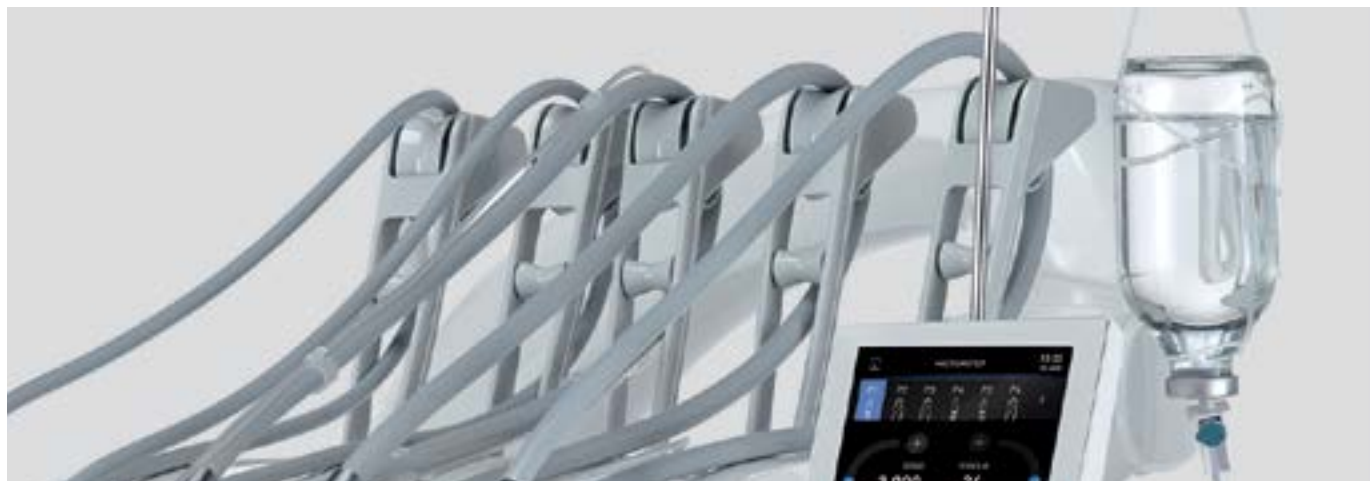

Wykres momentu

Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzędzia implantologicznego. Unit bardzo dokładnie i precyzyjnie pobiera zmierzoną wartość, przetwarzając ją za pomocą dedykowanych filtrów i odpowiednich współczynników mnożenia wybranej kątnicy, a wykryte w ten sposób wartości dostarczają dentyście klinicznych wskazań i informacji. Podana wartość momentu obrotowego jest związana z „oporem” napotykanym przez wiertło/wkładkę/implant, a zatem pośrednio również z gęstością kości w miejscu implantacji.

Opcja ta pozwala na:

- precyzyjne monitorowanie momentu obrotowego dostarczanego przez mikrosilnik,
- dokładny raport aktywacji narzędzia i wykonanych faz implantacji,
- TAGowanie danych (wprowadzono innowacyjną możliwość „zaznaczenia” na wykresie zidentyfikowanego wyjątkowego punktu, który wiąże wykrytą wartość z głębokością wskazaną przez wiertło)

Dane są eksportowane w formacie PDF, CSV, PNG:

- pliki PDF idealnie nadają się do przechowywania raportów w folderze pacjenta
- pliki CSV są idealne do analiz statystycznych i akademickich
- pliki PNG są doskonałe do szybkiej wizualizacji leczenia, nawet na tej samej konsoli multimedialnej Full Touch. Zebrane dane dostarczają informacje użyteczne dla dowolnej późniejszej obróbki sąsiednich oraz przeciwstawnych zębów. Moment dokręcania implantu można łatwo zarejestrować i dodać do dokumentacji leczenia pacjenta (ważne informacje, szczególnie w przypadku natychmiastowego obciążenia)



Tryb chirurgiczny

Nowa interaktywna elektronika i kolorowy, dotykowy wyświetlacz zapewniają wszelkie osiągi, niezbędne w chirurgii szczękowej.

W trybie chirurgicznym mikrosilnika Stern Weber regulowana jest prędkość, moment obrotowy oraz wydajność pompki perystaltycznej.



WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Sterownik nożny

Wielofunkcyjny sterownik nożny dostępny jest w trzech wersjach przewodowych: z dźwignią z wychyleniem horyzontalnym i w dwóch naciskowych oraz w wersji bezprzewodowej.

Wszystkie podstawowe funkcje i sterowanie można aktywować poprzez sterownik nożny, co poprawia higienę zabiegu, daje oszczędność czasu i pozwala skupić się na pacjencie.

Sterownik nożny może być używany do wywołania ruchu fotela, aktywowania przedmuchu powietrzem i sprayem, uruchomienia podniesionego instrumentu (ze sprayem lub bez). Jeżeli kamera wewnętrzna jest podniesiona, można użyć sterownika nożnego do zatrzymania obrazu (stopklatka).



1 wychylany STANDARD

2 naciskowo-wychylany PUSH

3 progresywno-naciskowy POWER



Zatrzymanie pracy pompy ssącej VACUUM STOP

Przewody ssakowe można aktywować i wyłączać za pomocą przycisku nożnego zamontowanego w podstawie unitu, dostępnego dla lekarza i dla asysty.

TAPICERKA

STERN WEBER
(klasyczne)

LUB

NORDIC



Memory Foam

Tapicerka Memory Foam gwarantuje pacjentowi maksymalny komfort.



DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI



STANDARD

198 Atlantic blue	115 Scottish salmon	142 Anatolian Hazelnut
106 Mediterranean blue	103 Nevada yellow	141 Papyrus Beige
113 Pacific blue	123 Polynesian green	143 Arabian Gold
136 Indian blue	101 Caribbean green	140 Brazilian Brown
132 Blueberry violet	137 Bright silver	144 Ruby Red
134 Japanese wisteria	121 Anthracite grey	
135 Venetian red	130 Graphite black	

MEMORY FOAM

198 Atlantic blue	195 Scottish salmon	172 Anatolian Hazelnut
196 Mediterranean blue	182 Nevada yellow	171 Papyrus Beige
183 Pacific blue	193 Polynesian green	173 Arabian Gold
186 Indian blue	197 Caribbean green	170 Brazilian Brown
192 Blueberry violet	187 Bright silver	174 Ruby Red
184 Japanese wisteria	199 Anthracite grey	
194 Venetian red	180 Graphite black	

KRZESEŁKA

Krzeselka STERN WEBER

Ergonomiczne krzeselka STERN WEBER eliminują niepotrzebne napięcia pleców i minimalizują nacisk na dolną część ud, zmniejszając w ten sposób zmęczenie narastające w trakcie dnia roboczego.



standardowe krzeselka dla asysty i lekarza
cena katalogowa: **2500 PLN**



ergonomiczne siodło STERN WEBER T9
cena katalogowa: **3500 PLN**
cena katalogowa MF: **4500 PLN**

OŚWIETLENIE

VENUS PLUS - SCT

Lampa VENUS PLUS - SCT to podstawowy wariant oświetlenia. Wyposażona jest w cztery źródła światła LED oraz charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI >90), co zapewnia naturalne postrzeganie kolorów. Jasność można bezdotykowo regulować w zakresie od 3 000 do 50 000 luksów. Rączki lampy można łatwo zdemontować - są przystosowane do sterylizacji.



VENUS PLUS - SCT COMPOSITE

W wariantcie COMPOSITE, oprócz czterech standardowych źródeł światła, zastosowano dwa dodatkowe źródła centralne emitujące światło o długości fali ograniczającej przedwczesną polimeryzację materiałów kompozytowych, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego oświetlenia pola zabiegowego. Tryb ten można aktywować w dowolnym momencie.



VENUS PLUS - MCT

Głowica lampy pracuje w trzech płaszczyznach. Czujnik zbliżeniowy pozwala na bezdotykową obsługę lampy - włączanie/wyłączanie oraz płynną regulację natężenia światła do 50 000 luksów (również za pomocą potencjometru). Model oferuje regulację temperatury barwowej: ciepła (4 300 K), neutralna (5 000 K), zimna (5 500 K). Duże pole operacyjne (225 mm x 95 mm przy 1 200 luksach) równomiernie doświetla cały obszar zabiegowy.



VENUS PLUS - MCT VIEW

Lampa VENUS PLUS - MCT VIEW wyposażona jest w kamerę 4K oraz oprogramowanie do rejestracji obrazu i wideo w wysokiej rozdzielczości. System Smart Focus z płynną soczewką zapewnia szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości. Kamera może być wykorzystywana m.in. do komunikacji lekarz-pacjent, dokumentacji leczenia, celów szkoleniowych i transmisji multimedialnych.



MULTIMEDIA



Kamera wewnątrzustna C-U2

Przyjazna i prosta w użyciu, obsługiwana również przez sterownik nożny unitu, całkowicie zautomatyzowana kamera generuje jasny i wyraźny obraz. Komunikacja z pacjentem poprzez pokazywanie zdjęć jest prosta i bezpośrednia. Zastosowanie zintegrowanego systemu medialnego zwiększa zaangażowanie pacjenta na każdym etapie zabiegu, motywując go do podjęcia leczenia. Prostota urządzenia i sposobu komunikacji oraz jego bezpośredniość zwiększają świadomość pacjenta i ułatwiają dialog z lekarzem.

Parametry urządzenia:

- Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
- Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia
- Kąt widzenia: 90° (diagonal)
- Głębokość ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 µm)

Monitor
NEOVO X-17PMonitor do zastosowań
medycznych FULL HD 22" *

Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki STERN WEBER z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multimedialnymi w technologii LED. Posiada możliwość instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszcie unitu z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 17 cali
- Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
- Ekran zabezpieczony szkłem ochronnym

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 22 cale
- Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080
- Ekran zabezpieczony szkłem ochronnym
- Wbudowany układ poprawiania obrazu
- Rozmiar piksela 0.248 mm

* Dostępny model monitora: Barco 22" lub Neovo 22", w zależności od dostępności.

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ Monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22" montowany na statywie lampy opera-
cyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN

Monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22" montowany na statywie lampy operacyjnej za
pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
Sterowanie głosowe	–	–	–	7500	7500	–	7500	7500	7500
Łączność NFC	–	–	–	1500	1500	–	1500	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Interaktywny LED	–	–	–	2500	●	2500	●	2500	●
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Płyta montażowa (stabilizująca, eliminująca potrzebę mocowania unitów do podłoża)	3500	3500	3500	3500	3500	–	–	3500	3500
Stolik lekarza	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana panelu sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametru pracy na panel z wyświetlaczem LCD	2500	●	●	–	–	●	–	–	–
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M900L, PTLCL-LED, M25L)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skatera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skatera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skatera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną	800	800	800	●	●	800	●	●	●
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	3500	3500	3500	●	3500	●	3500	●
dodatkowy (drugi) moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (bez funkcji endo)	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	11000	11000	–	11000	11000	11000
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500	●	●	●	●	1500	●	●	●
taca boczna do modelu International	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900	900	900	900	900	900	900	900
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	7500	–	7500	7500	7500

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

* wymaga konsultacji z działem sprzedaży

Stolik lekarza	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	7500	–	7500	7500	7500
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900	900	900	900	900
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2500	2500	–	2500	2500	2500
kątnica 4:1 GOLDSPEED EVO E4	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
diodowa lampa VENUS PLUS - SCT	●	–	–	–	–	–	–	–	–
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT COMPOSITE	2800	●	●	●	–	●	–	●	–
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT	5600	2800	2800	2800	●	2800	●	2800	●
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT VIEW	17 600	14 800	14 800	14 800	12 000	14 800	12 000	14 800	12 000
lampa sufitowa zamiast lampy montowanej na unicie	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
dodatkowa półka montowana na statywie lampy*	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Blok spluwaczki i układ ssący	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana misy szklanej na ceramiczną	700	700	700	700	700	700	700	700	700
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	1500	1500	1500	●	●	1500	●	1500	●
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	1300	●	1300	●	●	●
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	2200	2200	2200	●	●	2200	●	●	●
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
separator amalgamatu DÜRR DENTAL do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
separator amalgamatu METASYS do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
zawór spluwaczkowy (podpięcie spluwaczki do pompy)	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
system AWDS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
system WHE i BIOSTER	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

* wymaga konsultacji z działem sprzedaży

Fotel	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLA- XIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3900	3900	3900	3900	•	3900	•	3900	•
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	•
lewy podłokietnik fotela	•	•	•	•	•	•	•	•	•
folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostęp- ne dla MEMORY FOAM)	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Stolik asysty	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
dokozenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
dokozenie sześciofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
dokozenie modułu rękawa turbinowego " ze świa- tlem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dokozenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dokozenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
dokozenie modułu skalera bez światła	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny łamaną z regulacją w pionie	1400	•	•	•	•	•	•	•	•
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	950	950	950	950	950	950	950	950	950
uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty w panelu asysty	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Kompresor	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor DÜRR DENTAL Tornado 1	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
Monitor	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pozostałe	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S300 z pakietem "Plus"	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie STERN WEBER	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
dodatkowe siodło z miękką tapicerką T9	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

A3 PLUS



A3 PLUS Continental



A3 PLUS International

A5



A5 Continental



A5 International



A5 Cart

A6 PLUS



A6 PLUS Continental



A6 PLUS International

L6



L6 Continental



L6 Side Delivery



L6 Continental z pakietem
hybrydowym

A7 PLUS



A7 PLUS Continental



A7 PLUS International

L9



L9 Continental



L9 International



L9 Side Delivery



L9 Continental z pakietem
hybrydowym

R7



R7 Continental



R7 International



R7 Cart

OFERTA 2026



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW ANTHOS



A3 PLUS

W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesółko dentystyczne

unit ANTHOS A3 PLUS

65 500 PLN

gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC

+ 10 000 PLN

wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi

+ 10 000 PLN

jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l

+ 13 000 PLN

CENA ZESTAWU:

98 500 PLN

(rata 1430 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

NOWOŚCI

Lampy pola pracy – VENUS PLUS



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT
Podstawowy wariant



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT COMPOSITE
Podstawowy wariant



VENUS PLUS - MCT
Sprawdzony i ceniony model



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - MCT VIEW
Wbudowana kamera do dokumentacji zabiegów

Nowa konsola lekarza:


- nowy kompaktowy kształt stolika
- podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- mała, kompaktowa taca po stronie asysty (opcjonalnie)
- Szósty instrument z lewej strony konsoli:
radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2
lub lampa polimeryzacyjna T-LED (opcjonalnie)



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endometru
- timer

Nowy elektromechaniczny fotel Anthos w modelu A7

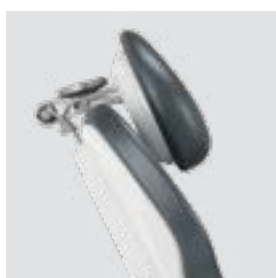

- zakres ruchu: 37–80 cm
- udźwig: 190 kg
- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
- oparcie do wyboru spośród 3 typów:
 - KLASYCZNE ANTHOS (wąskie),
 - (opcjonalnie) SZEROKIE ANTHOS (eliptyczne),
 - (opcjonalnie) NORDIC (poszerzane przy siedzisku i zwężane przy zagłówku)
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka (ciągłe oświetlenie pola zabiegowego)
- lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- nowa, bardziej elastyczna bezszwowa tapicerka



UNIT ANTHOS A3 PLUS

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



PO PIERWSZE: JAKOŚĆ

A3 PLUS to podstawowy model rodziny unitów ANTHOS. Posiada trójpolowy, cyfrowy wyświetlacz na panelu lekarza, umożliwiający programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Cechuje go prosta obsługa, ergonomia, zwarta konstrukcja (blok spluwaczki zawieszony na fotelu pacjenta), fotel pacjenta o udźwigu 190 kg i wysoka jakość materiałów.



panel sterowania
z trójpolowym wyświetlaczem
parametrów pracy




lampa Venus E LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

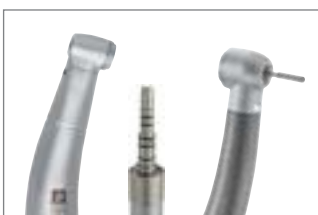

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A3 PLUS Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 46 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos
- z płynną regulacją obrotów (100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm)
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/tamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A1.3

(możliwość wyboru oparcia: szerokie lub wąskie):

- udźwig 190 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 37-80 cm
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS E LED

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła: 7000 - 40 000 [lux]
- pole oświetlenia: 80 x 160 [mm]
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów, bardzo łatwy dostęp do butelki)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

57 000 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

65 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 950 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako sztyty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN


Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A5

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

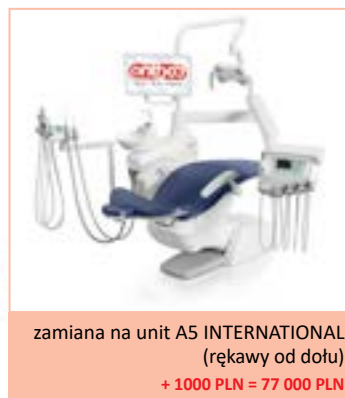

SZYTY NA MIARĘ DLA TWOJEGO STYLU PRACY

Unit A5 posiada wyświetlacz LCD na panelu lekarza, umożliwiający programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Unit A5 występuje w wersjach z rękawami od góry i od dołu oraz w wersji Cart. Unit A5 ma możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS PLUS – SCT



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

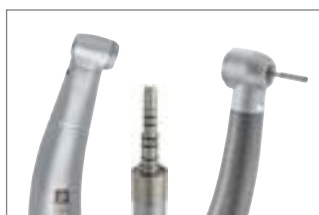

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A5 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skalera; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.5

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwignie: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS - SCT (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona w: panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

68 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

77 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1120 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A6 PLUS / L6

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

ANTHOS A6 PLUS

ANTHOS L6



**KOLOROWE WYKOŃCZENIE
OBUDÓW BLOKU HIGIENICZNEGO
I FOTEŁA**
- wg wskazań w folderze modelu
+ 3200 PLN



zamiana na unit A6 PLUS INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 85 000 PLN



dokończenie pakietu hybrydowego (rękawy od
góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 2000 PLN = 86 000 PLN



zamiana na unit L6 SIDE DELIVERY
(rękawy od dołu)
+ 2000 PLN = 86 000 PLN

PRAKTYCZNY I STYLOWY

Unity A6 PLUS i L6 posiadają wyświetlacz LCD na panelu lekarza, umożliwiając programowanie parametrów pracy oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera. Występują w wersjach z rękawami od góry i od dołu. Unity A6 PLUS i L6 mają możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela. Unit Anthos L6 posiada nową konstrukcję fotela i bloku higienicznego.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

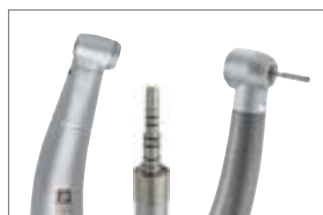


końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skaler Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED

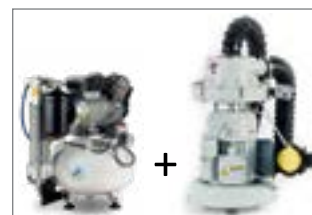

kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Anthos A6 PLUS / L6 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu A7:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos
- z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza**
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- **Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
 - możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
 - funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
 - zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta
 - splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
 - wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE

(Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssawką (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

75 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

84 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1220 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stole lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS A7 PLUS

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



zamiana na unit A7 PLUS INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)

+ 1000 PLN = 109 000 PLN

**KOLOROWE WYKOŃCZENIE OBUDÓW
BŁOKU HIGIENICZNEGO I FOTEŁA**
- wg wskazań w folderze modelu
+ 3200 PLN

TECHNOLOGIA, KTÓREJ OCZEKujesz

Cyfrowy wyświetlacz unitu A7 PLUS umożliwia programowanie pracy instrumentów z wielką dokładnością (10 obr./min dla mikrosilnika i 1% dla turbiny i skalera). W standardzie wyposażenia znajduje się podświetlany bezszczotkowy mikrosilnik wysokiej mocy z funkcją endo (regulacja momentu obrotowego, autorewers i autoforward). Istnieje możliwość wyboru wąskiego lub szerokiego oparcia fotela.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

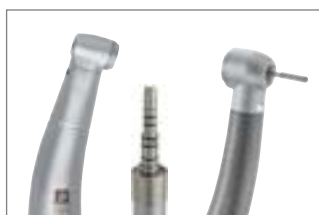

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Anthos A7 PLUS Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A2.7

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne klasyczne ANTHOS lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- **Interaktywny LED**
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługę funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

99 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

108 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1570 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS L9

nawet
5 LAT
gwarancji

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



Dostępne z
easycheck



dołożenie pakietu hybrydowego (rękaw od góry,
dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 2000 PLN = 116 000 PLN



zamiana na unit L9 SIDE DELIVERY
+ 1000 PLN = 115 000 PLN

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Unit L9 to rozbudowana wersja unitu L6 z mikrosilnikiem z funkcją endo wzbogacona o diodową lampę operacyjną Venus LED (zakres: 3000–50 000 lux), zagłówek z blokadą pneumatyczną Atlaxis, sześćofunkcyjną strzykawkę, możliwość montażu zestawu pompki perystaltycznej, programowanie dla 3 użytkowników, hamulec elektromagnetyczny stolika lekarza, dwa kolektory ssaka, elektryczny napęd misy spluwaczki i różnice w estetyce. Dodatkowo wyposażony jest w automatycznie składane podparcie nóg i automatycznie wysuwany podnóżek. Rozwiązanie to ułatwia wsiadanie i zsiadanie z fotela.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

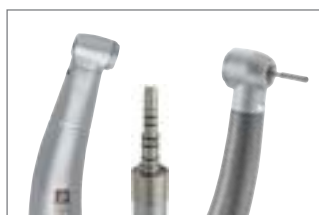

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Anthos L9 Continental

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny A3.0

(zakres ruchu: 39-79 cm, udźwigny: 190 kg):

- niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek
- fotel składany do pozycji krzesła
- dwa typy oparcia: klasyczne ANTHOS lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- **Interaktywny LED**
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamaniem ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssaków (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

105 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesło asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

114 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1650 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT ANTHOS R7

Dostępne z
easycheck

nawet
5 LAT
gwarancji



zamiana na unit R7 CART
+ 4000 PLN = 100 000 PLN



zamiana na unit R7 INTERNATIONAL
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 97 000 PLN

PERFEKCYJNA ADAPTACJA DO POTRZEB TWOJEJ PRAKTYKI

Unit Anthos R7 pozwala na błyskawiczną zmianę przez użytkownika ustawienia stolika lekarza i bloku spluwaczki odpowiednio dla lekarza prawo- lub leworęcznego. Pełna mobilność wymienionych elementów pozwala na uzyskanie nieograniczonej przestrzeni zabiegowej. Unit R7 występuje w wersji z rękawami od góry i od dołu oraz w wersji Cart. Istnieje możliwość doposażenia unitu w mikrosiłnik z funkcją endo.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiówek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystentkie lub lekarskie

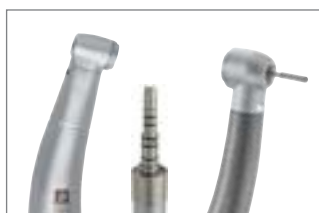

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Anthos z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 15

Konfiguracja unitu Anthos R7 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta
- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Anthos
- z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Anthos z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec pneumatyczny konsoli lekarza
- zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawczy/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny R1.0

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 160 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne ANTHOS lub NORDIC polecane przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- dwa podłokietniki fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta:

- ustawny po lewej lub prawej stronie pacjenta
- wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- 5. **Konsola asystencka** z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

87 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie ANTHOS

CENA ZESTAWU:

96 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1390 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

ANTHOS R7 - JEDEN UNIT, STO ROZWIĄZAŃ

Szyty na miarę

Konstrukcja modułowa unitu R7 umożliwia dentyście dopasowanie go do specyficznego miejsca pracy oraz do swoich indywidualnych potrzeb.

Różnorodność możliwych rozwiązań umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni gabinetu, zapewniając swobodne przemieszczanie się wokół fotela pacjenta i w całym gabinecie.

Quickswitch Concept

Możliwość szybkiej zmiany położenia stolika lekarza i bloku spluwaczki po prawej lub lewej stronie fotela w trzech krokach:



W swojej kompletnej wersji wyposażenia, z modułem spluwaczki, stolikiem lekarza i stolikiem asysty unit R7 może być za pomocą kilku szybkich ruchów przekształcony z unitu dla praworęcznych na unit dla leworęcznych.

W pierwszej kolejności użytkownik przestawia zespół spluwaczki i stół asysty z prawej strony na lewą. Następnie poprzez zwykły obrót stół lekarza przesuwa się na przeciwną stronę fotela pacjenta. Przekształcenie kończy przestawienie panelu sterującego na przeciwną stronę stolika lekarza.

Ergonomiczna elastyczność

Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji zestawu stomatologicznego: niezależny fotel, fotel z lampą operacyjną, fotel ze stolikiem lekarza na ramieniu lub na wózku, fotel bez bloku spluwaczki z panelem asysty zainstalowanym w tylnej części fotela.



HIGIENA AKTYWNA I PASYWNA



Podkładka pod instrumenty przystosowana do sterylizacji w autoklawie



Samoprzylepne osłonki ochronne na panel lekarza i asysty



Odłączalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe przewodnice rękawów ssakowych



Odłączalne do termodezynfekcji rękawy instrumentów




Łatwe w demontażu i utrzymaniu czystości elementy stolika lekarza i elementy tapicerowane fotela



TAPICERKA

Wcięty profil siedziska fotela umożliwiający bliższy dostęp do pacjenta

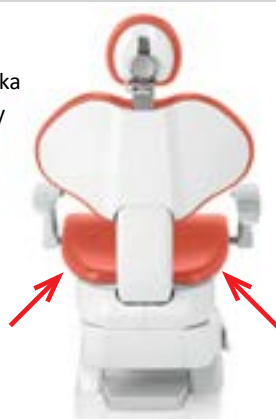

Dostępne oparcia:
wąskie, szerokie,
NORDIC
(opcjonalnie)



Tapicerka Memory Foam
gwarantująca pacjentowi
maksymalny komfort



STANDARD

- 102 Atlantic blue
- 106 Mediterranean blue
- 113 Pacific blue
- 136 Indian blue
- 132 Blueberry violet
- 134 Japanese wisteria
- 135 Venetian red

- 115 Scottish salmon
- 103 Nevada yellow
- 123 Polynesian green
- 101 Caribbean green
- 137 Bright silver
- 121 Anthracite grey
- 130 Graphite black

- 142 Anatolian Hazelnut
- 141 Papyrus Beige
- 143 Arabian Gold
- 140 Brazilian Brown
- 144 Ruby Red

MEMORY FOAM

- 198 Atlantic blue
- 196 Mediterranean blue
- 183 Pacific blue
- 186 Indian blue
- 192 Blueberry violet
- 184 Japanese wisteria
- 194 Venetian red

- 195 Scottish salmon
- 182 Nevada yellow
- 193 Polynesian green
- 197 Caribbean green
- 187 Bright silver
- 199 Anthracite grey
- 180 Graphite black

- 172 Anatolian Hazelnut
- 171 Papyrus Beige
- 173 Arabian Gold
- 170 Brazilian Brown
- 174 Ruby Red

KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitu A7 PLUS, R7 i L9)**Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny****MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD**

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).

Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.

Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNICA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4**MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®**

Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNICA 4:1

Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.

Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH.

Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.

Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.

**NOWOŚĆ!**

Przydatny w stomatologii zachowawczej, protetycznej i implantologii, dysponujący maksymalnym momentem obrotowym 4,5 Ncm i zakresem prędkości od 100 do 40 000 obr./min, funkcją autorewersu i autoforwardu i regulacją momentu obrotowego.

Dostępny jest w wersji ze światłem LED.

Wymiary: Ø 22 x 47,5 mm

Waga: 82 g



Bezszczotkowy mikrosilnik Anthos z funkcją endo



KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII (dla unitu A7 PLUS, R7 i L9)



Zintegrowana pompka perystaltyczna

W przypadku zamontowania pompki perystaltycznej, dentysta może za pomocą bezszczotkowego mikrosilnika Anthos przeprowadzać również zabiegi chirurgii szczękowej oraz implantologiczne. Dzięki nowemu wyświetlaczowi lekarz może komfortowo śledzić status podłączonego systemu. Oprócz dostarczania informacji o działaniu systemów higienicznych na ekranie wyświetlane są wszystkie parametry pracy mikrosilnika.

Tryb chirurgiczny

Nowa, interaktywna elektronika i kolorowy, dotykowy wyświetlacz zapewniają wszelkie osiągnięcia niezbędne w chirurgii szczękowej. W trybie chirurgicznym mikrosilnika Anthos regulowana jest prędkość, moment obrotowy oraz wydajność pompki perystaltycznej.



OŚWIETLENIE

VENUS PLUS - SCT

Lampa VENUS PLUS - SCT to podstawowy wariant oświetlenia. Wyposażona jest w cztery źródła światła LED oraz charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI >90), co zapewnia naturalne postrzeganie kolorów. Jasność można bezdotykowo regulować w zakresie od 3 000 do 50 000 luksów. Rączki lampy można łatwo zdemontować - są przystosowane do sterylizacji.



VENUS PLUS - SCT COMPOSITE

W wariantcie COMPOSITE, oprócz czterech standardowych źródeł światła, zastosowano dwa dodatkowe źródła centralne emitujące światło o długości fali ograniczającej przedwczesną polimeryzację materiałów kompozytowych, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego oświetlenia pola zabiegowego. Tryb ten można aktywować w dowolnym momencie.



VENUS PLUS - MCT

Główica lampy pracuje w trzech płaszczyznach. Czujnik zbliżeniowy pozwala na bezdotykową obsługę lampy - włączanie/wyłączanie oraz płynną regulację natężenia światła do 50 000 luksów (również za pomocą potencjometru). Model oferuje regulację temperatury barwowej: ciepła (4 300 K), neutralna (5 000 K), zimna (5 500 K). Duże pole operacyjne (225 mm x 95 mm przy 1 200 luksach) równomiernie doświetla cały obszar zabiegowy.



VENUS PLUS - MCT VIEW


Lampa VENUS PLUS - MCT VIEW wyposażona jest w kamerę 4K oraz oprogramowanie do rejestracji obrazu i wideo w wysokiej rozdzielczości. System Smart Focus z płynną soczewką zapewnia szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości. Kamera może być wykorzystywana m.in. do komunikacji lekarz-pacjent, dokumentacji leczenia, celów szkoleniowych i transmisji multimedialnych.



PROSTA I SKUTECZNA DIAGNOSTYKA



Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej ZEN-Xi na stoliku lekarza jako szósty instrument

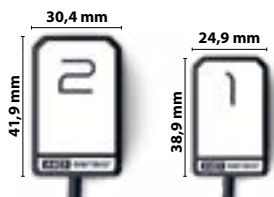

MULTIMEDIA



Możliwość montażu kamery wewnątrzustnej C-U2 na stoliku lekarza lub asysty

Możliwość montażu monitora do zastosowań medycznych w wybranym rozmiarze na maszcie lampy operacyjnej



ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22" montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN

Monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22"

montowany na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
Sterowanie głosowe	–	–	–	7500	7500	7500
Łączność NFC	–	–	–	1500	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Interaktywny LED	–	–	–	2500	–	–
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Płyta montażowa (stabilizująca, eliminująca potrzebę mocowania unitów do podłoża)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Stolik lekarza	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	–	800	•	•	•	•
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	3500	3500	•	•	3500
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos ze światłem LED (bez funkcji endo)	7500	7500	7500	7500	7500	7500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Anthos ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	11000	11000	11000
krótsze ramię konsoli lekarskiej	0	–	–	–	–	–
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500	1500	•	•	•	1500
taca boczna do modelu International	1600	1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900	900	900	900	–
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	7500	–
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	7500	–
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	–	–	–	3500	3500	–
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2000	2000	–
kątnica GOLDSPEED EVO E4	–	–	–	2000	2000	–
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900	900

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT	2800	●	–	–	–	–
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT COMPOSITE	5600	2800	●	–	–	●
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT	8400	5600	2800	●	●	2800
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT VIEW	20 400	17 600	14 800	12 000	12 000	14 800
lampa sufitowa zamiast lampy montowanej na unicie	2400	2400	2400	2400	2400	2400
dotatkowa półka montowana na statywie lampy*	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Blok spluwaczki i układ ssący	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana misy szklanej na ceramiczną	700	700	700	700	700	700
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczko-wej”)	1500	1500	1500	1500	●	1500
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	●	●	1300
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600	2600	2600	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2900	2900	2900	2900	2900	2900
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800	3800	3800	3800	3800
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	13900	13900	13900	13900	13900	13900
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900	2900	2900	2900	2900
system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	–	2400	2400	2400	2400	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	4800	4800	4800	4800	4800	4800
zamiana pojedynczego kolektora ssącego na podwójny (niezależny wybór rękawa ssącego)	–	–	1000	1000	●	–
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400	–
system BIOSTER/S (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	–	–	–	–	–	3800
system WHE i BIOSTER	9500	9500	9500	9500	9500	–
Monitor	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000	1000

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

(*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Fotel	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3900	3900	3900	●	●	3900
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	–	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1700	1700	1700	1700	●	●
lewy podłokietnik fotela	●	●	●	●	●	●
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nie dostępne dla MEMORY FOAM)	650	650	650	650	650	650
wychyłanie fotela pacjenta o 30 stopni w lewo i w prawo od osi z blokadą pneumatyczną	–	–	–	–	–	1200
Stolik asysty	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200	1200
dołożenie sześćfunkcyjnej strzykawki w module asysty	–	–	2000	2000	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	–	3400	3400	3400	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	–	5500	5500	5500	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	–	7500	7500	7500	7500	7500
dołożenie modułu skalera bez światła	–	5800	5800	5800	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	–	–	–	–	–
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	–	1500	–	–	–	–
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny łamany z regulacją w pionie	–	–	●	●	●	–
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	950	950	950	950	950	950
uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty w panelu asysty	750	750	750	750	750	750
Kompresor	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900	4900	4900	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor DÜRR DENTAL Tornado 1	5900	5900	5900	5900	5900	5900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100	8100	8100	8100	8100
Pozostałe	A3 PLUS	A5	A6 PLUS/L6	A7	L9	R7
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie ANTHOS	2500	2500	2500	2500	2500	2500
dodatkowe siodło z miękką tapicerką T9	3500	3500	3500	3500	3500	3500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

PUMA ELI R



PUMA ELI R



PUMA ELI R CP



PUMA ELI R ORTHO



PUMA ELI R CART

PUMA ELI A R



PUMA ELI A R



PUMA ELI A R CP

SKEMA 5



SKEMA 5



SKEMA 5 CP



SKEMA 5 ORTHO

SKEMA 6



SKEMA 6



SKEMA 6 CP



SKEMA 6 CART

SKEMA 8




SKEMA 8 RS



SKEMA 8 CP



na zdjęciu: SKEMA 5

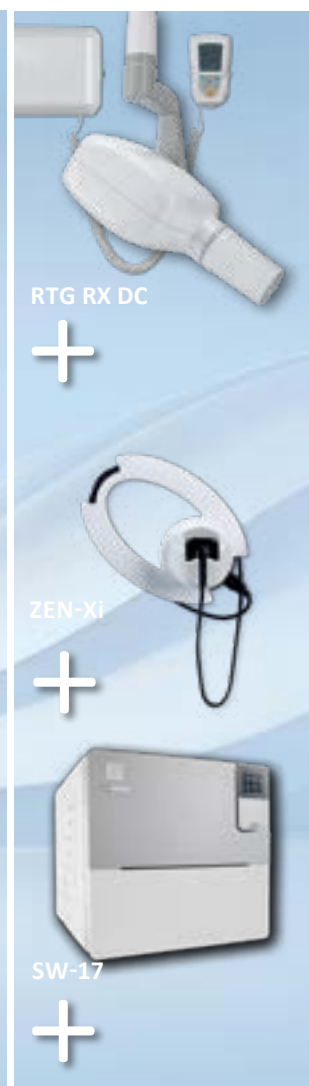

OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW CASTELLINI



PUMA ELI R

W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesółko dentystyczne

unit CASTELLINI PUMA ELI R **68 000 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 10 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l **+ 13 000 PLN**

CENA ZESTAWU: 101 000 PLN
(rata 1460 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

NOWOŚĆ

Lampy pola pracy – VENUS PLUS



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT
Podstawowy wariant



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT COMPOSITE
Podstawowy wariant



VENUS PLUS - MCT
Sprawdzony i ceniony model



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - MCT VIEW
Wbudowana kamera do dokumentacji zabiegów



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endometru
- timer

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnątrzustną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej





Konsola lekarza:

- kompaktowy kształt stolika
- podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- mała, kompaktowa taca po stronie asysty (opcjonalnie)
- Szósty instrument z lewej strony konsoli:
radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2
lub lampa polimeryzacyjna T-LED (opcjonalnie)

Elektromechaniczny fotel dentystyczny SKEMA:

- zakres ruchu: 37–80 cm
- udźwig: 190 kg
- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
- dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka (ciągłe oświetlenie pola zabiegowego)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)
- nowa, bardziej elastyczna bezszwowa tapicerka



UNIT CASTELLINI PUMA ELI R

nawet
5 LAT
gwarancji


Dostępne z
easycheck



zamiana na UNIT PUMA ELI R CP
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 69 000 PLN



zamiana na unit PUMA ELI R ORTHO
- 6000 PLN = 62 000 PLN

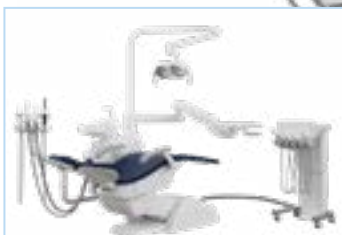

zamiana na unit PUMA ELI R CART
+ 4000 PLN = 69 500 PLN

KWINTESENCJA PROSTOTY

PUMA ELI R to unit z intuicyjnym sterowaniem parametrami pracy instrumentów. Uniwersalna technologia gwarantuje bardzo niską awaryjność i łatwość obsługi, co predestynuje go do zastosowań w gabinetach zarówno jedno-, jak i wielostanowiskowych. Unit występuje w wersji z rękawami od góry i od dołu. Standardem wyposażenia jest bezszczotkowy mikrosilnik wysokiej mocy oraz lampa operacyjna z głowicą pracującą w trzech płaszczyznach.



panel sterowania
z trójpolowym wyświetlaczem
parametrów pracy




lampa Venus E LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

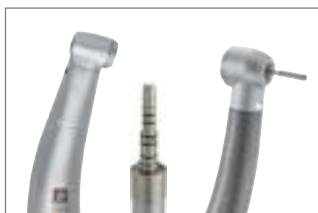

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Puma Eli R

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- odłączany uchwyt konsoli (do dezynfekcji)
- obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny Dama:

- udźwig 190 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 40-81 cm
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączenie i wyłączenie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS E LED

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła: 7000 - 40 000 [lux]
- pole oświetlenia: 80 x 160 [mm]
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

59 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU:

68 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 990 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT CASTELLINI PUMA ELI A R

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



zamiana na unit PUMA ELI A R CP
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 79 000 PLN

JEDEN UNIT, WIELE MOŻLIWOŚCI

Wersja A R to rozbudowana wersja modelu PUMA ELI R, umożliwiającą ustawienie konsoli bloku higienicznego unitu dla użytkowników prawo- i leworęcznych w dowolnym momencie bez potrzeby wzywania serwisu. Unit cechuje intuicyjne sterowanie parametrami pracy instrumentów.



panel sterowania
z trójpółowym wyświetlaczem
parametrów pracy




lampa VENUS PLUS – SCT



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

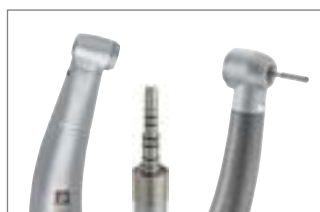

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Puma Eli A R

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- odłączany uchwyt konsoli (do dezynfekcji)
- obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny Dama A:

- udźwig 160 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 38–82 cm
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayeru w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS - SCT (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

69 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU:

78 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1130 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN


Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem


UNIT CASTELLINI SKEMA 5


 nawet
5 LAT
 gwarancji

Dostępne z
easycheck

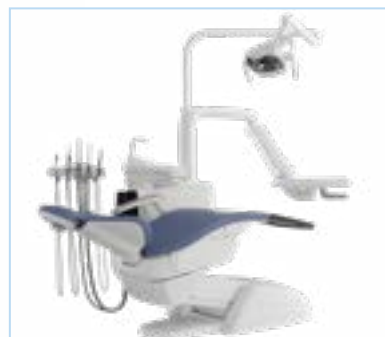

zamiana na unit SKEMA 5 ORTHO
 (rękawy od dołu)
 - 6000 PLN = 78 000 PLN

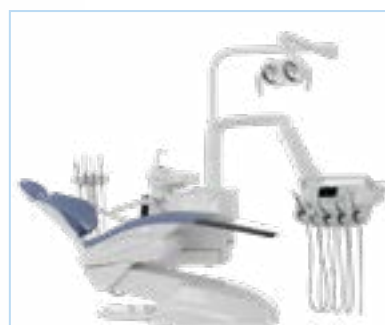

zamiana na unit SKEMA 5 CP
 (rękawy od dołu)
 + 1000 PLN = 85 000 PLN

TRADYCYJNIE DOSKONAŁY

Solidna konstrukcja i funkcjonalność to podstawowe zalety unitów SKEMA 5. Poprawa ergonomii pracy lekarza i asysty, wyposażenie unitu w zaawansowane systemy higieny, ułatwienie codziennego czyszczenia oraz zastosowanie instrumentów o doskonałych osiągnięciach to fundamentalne cechy dla unitu odzwierciedlającego tradycyjne, 80-letnie zaangażowanie firmy CASTELLINI w rozwój technologii stomatologicznej. SKEMA 5 jest kompletnym, wielofunkcyjnym stanowiskiem roboczym integrującym najnowocześniejsze systemy.



panel sterowania
 z wyświetlaczem LCD




lampa
 VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiłówek
 z blokadą mechaniczną



krzesółko
 asystenckie lub lekarskie

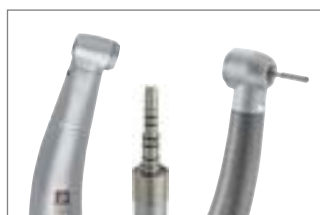

końcówki STERN WEBER EVO
 ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 5

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu SKEMA 6:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza**
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S.

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwign: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE (Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssawką (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

75 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU:

84 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1220 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT CASTELLINI SKEMA 6

nawet
5 LAT
gwarancji

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



Dostępne z
easycheck



zamiana na unit SKEMA 6 CP
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 97 000 PLN



zamiana na unit SKEMA 6 CART
+ 4000 PLN = 100 000 PLN

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

W unicie SKEMA 6 zastosowano zaawansowane technicznie instrumenty, zaprojektowane specjalnie do osiągania parametrów i spełniania funkcji, które pozwalają lekarzowi wykonać bez cienia obawy każde zadanie. Podczas fazy projektowania dokonano analizy różnych przypadków klinicznych, jakie mogą wystąpić w gabinecie w trakcie typowego dnia pracy, uwzględniając wykonywanie zabiegów z asystą, jak również samodzielną pracę. Ergonomiczna koncepcja unitu SKEMA 6 oparta jest na tej analizie i bazuje na wielu praktycznych rozwiązaniach technicznych, które pozwalają spełnić wszelkie wymagania stomatologów.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa
VENUS PLUS – SCT COMPOSITE



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

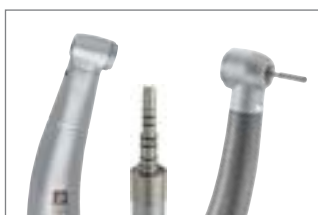

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 6

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S.

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwąg: 190 kg):

- dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – SCT COMPOSITE

(Temperatura barwowa w trybie standardowym: 4 600 K):

- źródło światła: 4 diody LED + 2 diody LED (do materiałów kompozytowych)
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony

w ceramiczną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

- 5. **Konsola asystencka** z podwójnym łamany ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

87 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU:

96 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1390 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT CASTELLINI SKEMA 8

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



UKIERUNKOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Nowa wersja modelu SKEMA 8 została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT (z regulowaną temperaturą barwową, filtr przeciwpolimeryzacyjny), cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylanie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Nowy model SKEMA 8 został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok zintegrowany z fotelem pacjenta.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS PLUS – MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzesółko
asystenckie lub lekarskie

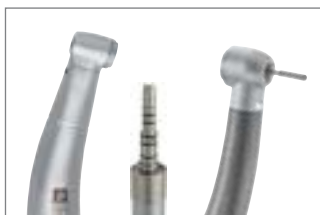

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 8 RS

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona

w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
- podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S.

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwigny: 190 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
- VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS – MCT (Zmienna temperatura barwowa: 4 300 K (ciepła), 5 000 K (neutralna), 5 500 K (zimna)):

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła (od 5000 do 50 000 luksów)
- tryb przeciwpolimeryzacyjny
- color Rendering Index (CRI) >90
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony

w ceramiczną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamaniem ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągów) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU:

99 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU:

108 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1570 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

KOMPLETNY SYSTEM HIGIENY AKTYWNEJ



Podkładki pod instrumenty i rękawy przystosowane do sterylizacji w autoklawie



Odłączalne do termodezynfekcji rękawy instrumentów



Autosteril (opcja) – metoda dezynfekcji układu wodnego unitu



Łatwo dostępne filtry ssaka



Odłączalne i rozbieralne rękojeści ssaka do sterylizacji



Wylewki wody i misa spłuwaczki mogą być odłączone od unitu w celu ułatwienia ich czyszczenia



Łatwe w demontażu i utrzymaniu czystości elementy stołka lekarza i elementy tapicerowane fotela



Odłączalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe prowadnice rękawów ssakowych



Łatwa w demontażu i utrzymaniu czystości podkładka pod stopy pacjenta

TAPICERKA

Paleta kolorów



STANDARD

102 Atlantic blue	115 Scottish salmon	142 Anatolian Hazelnut
106 Mediterranean blue	103 Nevada yellow	141 Papyrus Beige
113 Pacific blue	123 Polynesian green	143 Arabian Gold
136 Indian blue	101 Caribbean green	140 Brazilian Brown
132 Blueberry violet	137 Bright silver	144 Ruby Red
134 Japanese wisteria	121 Anthracite grey	
135 Venetian red	130 Graphite black	

MEMORY FOAM

198 Atlantic blue	195 Scottish salmon	172 Anatolian Hazelnut
196 Mediterranean blue	182 Nevada yellow	171 Papyrus Beige
183 Pacific blue	193 Polynesian green	173 Arabian Gold
186 Indian blue	197 Caribbean green	170 Brazilian Brown
192 Blueberry violet	187 Bright silver	174 Ruby Red
184 Japanese wisteria	199 Anthracite grey	
194 Venetian red	180 Graphite black	

Oparcie do wyboru



OD STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ DO ZAAWANSOWANEJ ENDODONCJI I CHIRURGII (dla unitów SKEMA 6 i SKEMA 8)


Funkcje mikrosilnika Implantor LED

Panel sterujący

Kolorowy wyświetlacz jasno i czytelnie pokazuje informacje, pozwalające intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje unitu.

Wszystkie parametry pracy instrumentów mogą być zaprogramowane przez trzech niezależnych operatorów. Każdy z operatorów może szybko wybrać jedno z czterech ustawień parametrów mikrosilnika dla każdego z trzech możliwych trybów pracy (stomatologia zachowawcza, endodoncja, chirurgia).

Endodoncja:

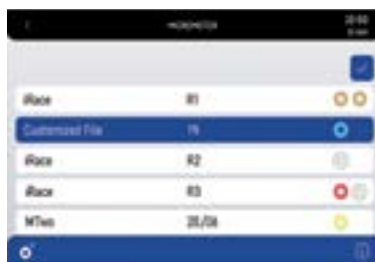

- moment obrotowy ustawiany w zakresie od 0,05 do 5 Ncm (z kątnicą E16)
- funkcje NORM, REV, AUTOREV
- zintegrowany lokalizator położenia końca narzędzia kanałowego LAEC (opcja)
- zewnętrzne chłodzenie

Implantologia:



- moment obrotowy ustawiany w zakresie do 55 Ncm (z kątnicą R20-L)
- prędkość obrotowa ustawiana w zakresie od 10 do 2500 obr./min (z kątnicą R20-L)
- zewnętrzne chłodzenie płynem ze sterylnej zbiornika (opcja)

Stolik lekarza

- doskonale dobrana długość rękawów oraz wysokość wieszaków instrumentów pozwoliły uzyskać duży zakres możliwych ustawień stolika bez ryzyka kolizji z lampą operacyjną
- opcjonalnie montowane hamulce wieszaków zwiększają swobodę ruchu lekarza
- łatwo dostępne, dobrze wyważone instrumenty minimalizują napięcie i zmęczenie nadgarstka w trakcie wykonywania zabiegu
- ustawienie przymocowanej do ramienia stolika tacki na instrumenty może być dopasowane do każdej pozycji roboczej
- zwiększony zakres pionowej regulacji położenia stolika umożliwia dopasowanie jego wysokości do każdego rodzaju zabiegu



Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy takich jak: prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD). Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®. Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNICA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

MODUŁ ENDODONTYCZNY

- z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®
Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNICA 4:1

Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy. Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH. Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi. Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.



NOWOŚĆ!

MULTIMEDIA



Kamera wewnątrzustna C-U2

Przyjazna i prosta w użyciu, obsługiwana również przez sterownik nożny unitu, całkowicie zautomatyzowana kamera generuje jasny i wyraźny obraz. Komunikacja z pacjentem poprzez pokazywanie zdjęć jest prosta i bezpośrednia. Zastosowanie zintegrowanego systemu medialnego zwiększa zaangażowanie pacjenta na każdym etapie zabiegu, motywując go do podjęcia leczenia. Prostota urządzenia i sposobu komunikacji oraz jego bezpośredniość zwiększają świadomość pacjenta i ułatwiają dialog z lekarzem.

Parametry urządzenia:

- Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
- Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia
- Kąt widzenia: 90° (diagonal)
- Głębokość ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 µm)

Monitor
NEOVO X-17PMonitor do zastosowań
medycznych FULL HD 22" *

Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki STERN WEBER z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multimedialnymi w technologii LED. Posiada możliwość instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszynie unitu z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 17 cali
- Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
- Ekran zabezpieczony szkłem ochronnym

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 22 cale
- Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080
- Ekran zabezpieczony szkłem ochronnym
- Wbudowany układ poprawiania obrazu
- Rozmiar piksela 0.248 mm

* Dostępny model monitora: Barco 22" lub Neovo 22", w zależności od dostępności.

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22" montowany
na statywie lampy operacyjnej za pomocą
fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN

Monitor do zastosowań medycznych FULL HD 22" montowany na statywie lampy operacyjnej
za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
Sterowanie głosowe	–	–	–	7500	7500
Łączność NFC	–	–	–	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500	1500	1500	1500
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500	3500	3500	3500
Płyta montażowa (stabilizująca, eliminująca potrzebę mocowania unitów do podłoża)	3500	3500	3500	3500	3500
Stolik lekarza	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną	800	800	800	●	●
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	–	3500	●	●
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (bez funkcji endo)	7500	7500	7500	7500	7500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	11000	11000
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	●	●	●	●	●
taca boczna do modelu International	1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900	900	900	900
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	7500
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	7500
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	–	3500	●	●
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	–	–	4000	4000	4000
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątницы GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2500	2500
kątница 4:1 GOLDSPEED EVO E4	–	–	–	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT	2800	●	–	–	–
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT COMPOSITE	5600	2800	●	●	–
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT	8400	5600	2800	2800	●
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT VIEW	20 400	17 600	14 800	14 800	12 000
lampa sufitowa zamiast na unitowej	2400	2400	2400	2400	2400
dotatkowa półka montowana na statywie lampy*	2000	2000	2000	2000	2000
Blok spluwaczki i układ ssący	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylenie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	–	–	–	●	●
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	●	●
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	–	–	–	●	●
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600	2600	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2900	2900	2900	2900	2900
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800	3800	3800	3800
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000	7000	7000	7000	7000
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900	2900	2900	2900
system SHD (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	2400	2400	2400	2400	2400
system MWB (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	–	5500	5500	5500
system AUTOSTERIL A (automatyczna wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400
system MWB i AUTOSTERIL A	9500	–	9500	9500	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej

(●) opcja w zestawie podstawowym

(–) opcja niedostępna

(*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

Fotel	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówek STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówek w 3 płaszczyznach)	3900	3900	3900	3900	●
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1700	1700	1700	1700	1700
lewy podłokietnik fotela	●	1250	●	●	●
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nie dostępne dla MEMORY FOAM)	480	480	480	480	–
Stolik asysty	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200
dołożenie sześćofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000	2000	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	–	–	3400	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	–	–	5500	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	–	–	7500	7500	7500
dołożenie modułu skalera bez światła	–	–	5800	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	800	●	–	–
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	–	1500	1500	●	●
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	950	950	950	950	950
Kompresor	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900	4900	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor DÜRR DENTAL Tornado 1	5900	5900	5900	5900	5900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100	8100	8100	8100
Monitor	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000
Pozostałe	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
dodatkowe krzesiśko lekarskie lub asystenckie CASTELLINI	2500	2500	2500	2500	2500
dodatkowe siodło z miękką tapicerką T9	3500	3500	3500	3500	3500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży



OFERTA 2026



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH KONFIGURACJI UNITU MOCOM



unit MOCOM M10 **70 000 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja unitowa

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 10 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw B Classic klasy B, pojemność: 17 l **+ 13 000 PLN**

CENA ZESTAWU: 103 000 PLN
(rata 1490 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

UNIT MOCOM M10



 nawet

5 LAT

 gwarancji

Dostępne z

easycheck



zamiana na unit M10 INTERNATIONAL
 (rękawy od dołu)
 + 1000 PLN = 71 000 PLN

GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ

Unit M10 to unit w linii MOCOM. łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Unit M10 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Można wyposażać go w dotykowy graficzny wyświetlacz FULL TOUCH MULTIMEDIA umożliwiającą integrację funkcji ENDO z modułem RECIPROC oraz funkcji IM-PLANT z pompą perystaltyczną.



panel sterowania
 z wyświetlaczem LCD




lampa Venus E LED



zagłówek
 z blokadą mechaniczną



krzeselko
 asystenckie lub lekarskie

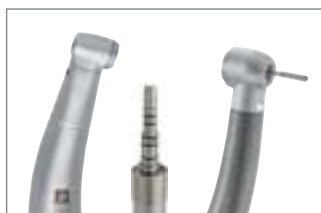

końcówki STERN WEBER EVO
 ze światłem



skalier Mocom z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Mocom M10 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Mocom z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Mocom z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rekojeści: prosty/tamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwigny: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechnianiem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS E LED

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła: 7000 - 40 000 [lux]
- pole oświetlenia: 80 x 160 [mm]
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:

- panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

61 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie MOCOM

CENA ZESTAWU:

70 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1010 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na unie lub ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Dostępne z
easycheck

 zamiana na unit F10 INTERNATIONAL
 (rękawami od dołu)
 + 1000 PLN = 75 000 PLN

GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ

Unit F10 to najnowszy unit w linii MOCOM. Łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Unit F10 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Można wyposażać go w dotykowy graficzny wyświetlacz FULL TOUCH MULTIMEDIA umożliwiający integrację funkcji ENDO z modułem RECIPROC oraz funkcji IMPLANT z pompą perystaltyczną.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa Venus E LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzeselko
asystenckie lub lekarskie

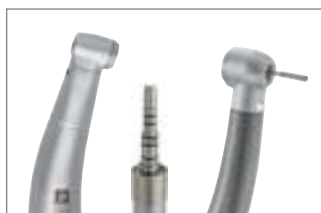

końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Mocom z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Mocom F10 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Mocom z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Mocom z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rekojeści: prosty/tamany, 7 programów pracy, max 3400 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P

(zakres ruchu: 37–80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS E LED

- źródło światła: 6 diod LED
- praca głowicy w trzech płaszczyznach
- płynna regulacja natężenia światła: 7000 - 40 000 [lux]
- pole oświetlenia: 80 x 160 [mm]
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony

- w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:

- panel sterowania (napełnianie kubka, oplukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty (opcjonalnie 3)

CENA UNITU:

65 500 PLN

+ 2500 PLN*

Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN*

Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN*

Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN*

Krzesiwo asystenckie lub lekarskie MOCOM

CENA ZESTAWU:

74 000 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1070 PLN

10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na unie lub ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17 klasa B, pojemność 17 l

14 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

13 000 PLN

cena poza promocją: 17 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Lampy pola pracy – VENUS PLUS



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT
Podstawowy wariant



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - SCT COMPOSITE
Podstawowy wariant



VENUS PLUS - MCT
Sprawdzony i ceniony model



NOWOŚĆ
VENUS PLUS - MCT VIEW
Wbudowana kamera do dokumentacji zabiegów



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endometru
- timer

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnętrzną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spławaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej



OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	M10	F10
Sterowanie głosowe	* 7500	* 7500
Łączność NFC	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500
Płyta montażowa (stabilizująca, eliminująca potrzebę mocowania unitów do podłoża)	3500	-
Stolik lekarza	M10	F10
zamiana podstawowego panelu z negatoskopem na panel sterowania z LCD i profilami dla czterech użytkowników	2500	2500
zamiana podstawowego panelu z negatoskopem na zaawansowany FULL TOUCH MULTIMEDIA (graficzny dotykowy panel sterowania umożliwiający zaawansowaną obsługę fotela i instrumentów, pozwalający na zintegrowanie funkcji ENDO z modułem RECIPROC i funkcji IMPLANT z pompą perystaltyczną)	9000	9000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	800	800
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	3500	3500
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom ze światłem LED (bez funkcji endo)	7500	7500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom ze światłem LED (z funkcją endo)	11000	11000
krótsze ramię konsoli lekarskiej	0	0
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500	1500
taca boczna do modelu International	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900
pompka perystaltyczna	7500	7500
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	7500	7500
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)
 (^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	M10	F10
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	4000	4000
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	2500	2500
kątnica GOLDSPEED EVO E4	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	M10	F10
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT	2800	2800
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - SCT COMPOSITE	5600	5600
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT	8400	8400
zamiana na diodową lampę VENUS PLUS - MCT VIEW	20 400	20 400
lampa sufitowa zamiast lampy montowanej na unicie	2400	2400
dodatkowa półka montowana na statywie lampy^	2500	2500
Blok spluwaczki i układ ssący	M10	F10
zamiana misy szklanej na ceramiczną	700	700
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	1500	1500
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	2200	2200
ślinociąg wodny	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2900	2900
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	13900	13900
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900
system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssących)	2400	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	5500
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400
system WHE i BIOSTER	9500	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)
 (^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Fotel	M10	F10
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3900	3900
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychyłany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1700	1700
lewy podłokietnik fotela	•	•
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nieдоступny dla MEMORY FOAM)	650	650
Stolik asysty	M10	F10
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200
dołożenie sześćofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	6900	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	1500	1500
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	950	950
uchwyt na dodatkowy instrument w panelu asysty	750	750
Kompresor	M10	F10
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor DÜRR DENTAL Tornado 1	5900	5900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100
Monitor	M10	F10
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000
Pozostałe	M10	F10
dodatkowe krzeselko lekarskie lub asystenckie MOCOM	2500	2500
dodatkowe siodło z miękką tapicerką T9	3500	3500

(*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)

(cena) dopłata do ceny podstawowej (•) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna

(^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

APARATY RTG



STERN WEBER RX DC



RX DC EXTEND



RX DC HYPERSPHERE

RADIOGRAFIE CYFROWE



ZEN-X / STERN WEBER X-VS



ZEN-X E



ZEN-Xi



ZEN-X DCIS

SKANERY PŁYT OBRAZOWYCH



Hy-Scan



VISTASCAN MINI EASY



VISTASCAN MINI VIEW

PANTOMOGRAFY/ TOMOGRAFY CBCT



PROXIMA X6



GIANO HR FULLVIEW



VGI EVO



5G XL



7G

OPROGRAMOWANIE



IRYS



NEOWISE

KAMERA STOMATOLOGICZNA / FANTOM RTG



C-U2



Pro-Dent

OFERTA 2026

PROMOCYJNE CENY ZESTAWÓW radiografii cyfrowej z aparatami RTG

ZESTAW: radiografia ZEN-X
+ aparat RTG STERN WEBER RX DC



cena promocyjna zestawu:
22 000 PLN
(rata 320 PLN*)

ZESTAW: radiografia ZEN-X
+ aparat RTG RX DC EXTEND



cena promocyjna:
24 000 PLN
(rata 350 PLN*)

ZESTAW: radiografia ZEN-X
+ aparat RTG RX DC HYPERSPHERE



cena promocyjna:
28 000 PLN
(rata 410 PLN*)

CENA PROMOCYJNA ZESTAWU OBEJMUJE:

KOSZT TRANSPORTU I MONTAŻU, FARTUCH OCHRONNY, POZYCJONERY, SZKOLENIE Z OBSŁUGI URZĄDZENIA!

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Aparat RTG STERN WEBER RX DC



TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE INNOWACJI

Obrazowanie wysokiej jakości, niska dawka promieniowania, uniwersalna i ergonomiczna konstrukcja – to wszystko oferuje najlepsza technologia. Stern Weber RX DC jest zaawansowanym technicznie aparatem RTG, zaprojektowanym w celu maksymalnej efektywności zabiegów.


RX DC umożliwia obrazowanie z najwyższej półki, niezmiennie szczegółowe, dzięki zastosowaniu stałonapięciowego generatora wysokiej częstotliwości (DC). **Lampa RTG o ognisku wynoszącym zaledwie 0,4 mm optymalizuje wydajność urządzenia i dostosowuje emisję promieniowania rentgenowskiego do konkretnych potrzeb badania.**

Stern Weber RX DC ułatwia codzienną diagnostykę lekarza przez wysokiej jakości dostarczany obraz. To wszystko przy jednoczesnym komforcie pacjenta, który otrzymuje znacznie mniejszą dawkę promieniowania, na pochłonięcie której jest narażony podczas badania.



AUTOMATYCZNE PARAMETRY

Automatyczny dobór parametrów ekspozycji do pola naświetlania gwarantuje bezpieczeństwo pacjentowi, minimalizując dawkę promieniowania, na którą jest narażony podczas badania.

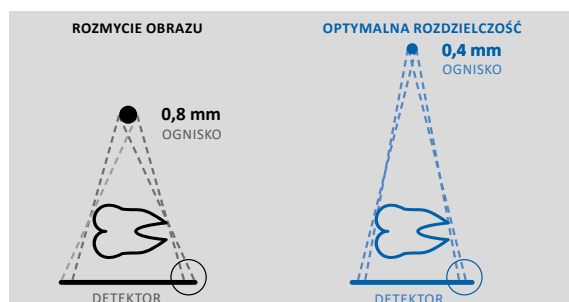

OBRAZY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

- duża szczegółowość
- doskonała rozdzielczość obrazu
- ostre krawędzie
- dawka promieniowania dostosowana do pacjenta

Im mniejsze ognisko i większa odległość od lampy RTG, tym ostrzejsze zdjęcia.

Dokładna diagnostyka

RX DC – najnowocześniejszy aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości, skonstruowany przez Stern Weber, wykorzystuje najnowsze technologie w celu uzyskania najlepszych rozwiązań w dziedzinie radiografii cyfrowej. Uniwersalność połączona z wysoką jakością zdjęć powodują, że RX DC jest wszechstronnym i pewnym aparatem RTG oferującym możliwość precyzyjnej diagnostyki. Wysokie, stałe napięcie głowicy połączone z najmniejszą ogniskową (0,4 mm) gwarantuje niezmienną ostrość zdjęć.

Bezpieczny dla pacjenta

RX DC, ze stałym wysokim napięciem głowicy RTG, emituje znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi aparatami. Dzięki generatorowi o wysokiej sprawności zostało prawie całkowicie wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie, a dzięki 30 cm, prostokątnemu tubusowi zminimalizowano rozmiar naświetlanej powierzchni oraz uzyskano równoległość wiązki promieni. Umożliwia to lepszą jakość zdjęć oraz większe bezpieczeństwo dla pacjenta.

Inteligentne sterowanie

Moduł sterujący z dużym wyświetlaczem umożliwia szybki i przyjazny użytkownikowi wybór najbardziej odpowiedniego programu do pozyskiwania obrazów RTG oraz weryfikowanie podawanej dawki promieniowania. Na pilocie jest wyświetlana temperatura lampy głowicy, co pozwala na bieżąco ją kontrolować.



UNIERSALNY I PROSTY W INSTALACJI

Aparat rentgenowski posiada aluminiowe ramię ze zintegrowanym mechanizmem samobalansującym, zapewniającym możliwość ustawienia w 4 kierunkach – dostępne długości ramienia: 40, 60 i 90 cm. Dzięki wyskalowanemu kątomierzowi pozycjonowanie lampy rentgenowskiej jest łatwe i powtarzalne.

Dane techniczne	
Generator	Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo
Częstotliwość robocza	145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)
Ognisko	0,4 mm (IEC 336)
Filtracja całkowita	2,0 mm Al @ 60kV
Prąd anodowy	4 / 8 mA
Napięcie lampy RTG	60 / 65 / 70 kV
Czas ekspozycji	0,02–1 sek., skala R'10 i R'20
Odległość źródło-skóra	20 i 30 cm
Napromieniowywany obszar	Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm
Dodatkowe kolimatory	Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm, dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1
Zasilanie	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%
Cykl roboczy	Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.
Ramię aparatu	Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm
Maksymalne przedłużenie ramienia	230 cm od ściany
Certyfikacja	CE 0051, dopuszczenie FDA



STERN WEBER RX DC

aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna

cena katalogowa:
12 000 PLN
 (rata 170 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego


* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Aparat RTG RX DC EXTEND




PRECYZYJNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ

RX DC EXTEND jest najnowszą wersją wysokiej częstotliwości aparatu RTG zaprojektowanego do uzyskiwania dokładnych zdjęć, dzięki niezrównanej równoległości wiązki, otrzymywanej z zamontowanego 30 cm tubusa. Rozwiązania konstrukcyjne, połączone z najnowocześniejszymi technologiami, dostarczają stomatologom bardzo precyzyjne i wszechstronne urządzenie, umożliwiające różnorodną konfigurację, wyposażone w bezprzewodowe sterowanie. Specjalnie stworzona do cyfrowych zdjęć rentgenowskich głowica o stałym potencjale gwarantuje stałą ostrość zdjęć i radykalnie obniża dawki napromieniowania.

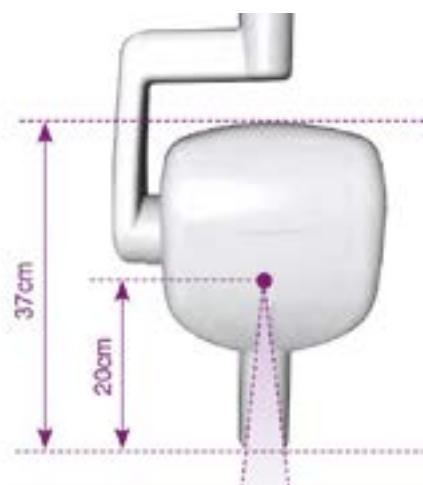

DOSKONAŁA RÓWNOLEGŁOŚĆ

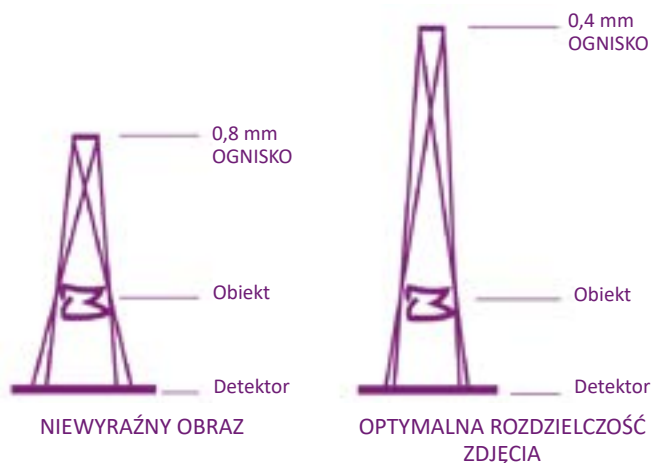

Minimalne napromieniowanie

RX DC, z generatorem o stałej wysokiej częstotliwości, emituje znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi aparatami RTG. Dzięki wysokowydajnemu generatorowi zostaje prawie całkowicie wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie o niskiej energii, a wbudowany 30 cm tubus, dzięki doskonałej równoległości wiązki, pozwala uzyskać lepszej jakości zdjęcia i bardziej dba o zdrowie pacjentów.

Równoległość wiązki aparatu MyRay RX DC EXTEND

Kompaktową głowicę aparatu wyposażono w długi tubus, zapewniający odległość od źródła promieni do powierzchni skóry co najmniej 30 cm, co pozwala uzyskać ostre i bardziej dokładne zdjęcia niż w przypadku tradycyjnych aparatów.



Sterowanie wielokrotnym naświetlaniem

RX DC umożliwia ciągłą pracę w przypadku wielokrotnego naświetlania, podczas pozyskiwania zdjęć pełnego uzębienia. System Dynamic Duty Cycle kontroluje w czasie rzeczywistym i pokazuje na wyświetlaczu pilota temperaturę lampy głowicy.

UNIWERSALNOŚĆ PRZY MONTAŻU I SZEROKI WYBÓR DŁUGOŚCI RAMION

Aparat RTG RX DC EXTEND został wyposażony w lekkie i ergonomiczne ramię. Specjalnie zaprojektowany system sprężyn i hamulców eliminuje możliwość drgań głowicy aparatu podczas ekspozycji. To rozwiązanie gwarantuje stabilną pozycję ramienia.



MYRAY Multi-Mode

W pełni automatyczny wybór różnych kombinacji ustawień napięcia i natężenia prądu, zależnie od wymiarów pacjenta i rejonu jamy ustnej.

Proste, bezprzewodowe sterowanie

Obsługiwany jedną ręką, bezprzewodowy pilot umożliwia sterowanie aparatem z dowolnego miejsca w gabinecie. Nie ma żadnych paneli sterujących zawieszonych na ścianie lub połączeń przewodami, na które musisz uważać. Łatwy w użyciu i wygodny w trzymaniu pilot sterujący zapewnia dostęp do pełnego zakresu intuicyjnych programów ekspozycji, opracowanych do prawidłowego przeprowadzenia procesu wykonania zdjęcia.

To wszystko bez skomplikowanego programowania i paneli przepełnionych przyciskami. RX DC automatycznie dobiera właściwe parametry ekspozycji po wyborze odpowiedniej grupy zębów na sterowniku.



Dane techniczne

Generator	Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo
Częstotliwość robocza	145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)
Ognisko	0,4 mm (IEC 336)
Filtracja całkowita	2,0 mm Al @ 60kV
Prąd anodowy	4 / 8 mA
Napięcie lampy RTG	60 / 65 / 70 kV
Czas ekspozycji	0,02–1 sek., skala R'10 i R'20
Odległość źródło-skóra	20 i 30 cm
Napromieniowywany obszar	Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm
Dodatkowe kolimatory	Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm, dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1
Zasilanie	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%
Cykl roboczy	Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.
Ramię aparatu	Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm
Maksymalne przedłużenie ramienia	230 cm od ściany
Certyfikacja	CE 0051, dopuszczenie FDA



RX DC EXTEND

aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna

cena katalogowa:

14 000 PLN

(rata 200 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE



Strefy z czujnikami dotykowymi

Dotknięcie jednej z 2 stref dotykowych odblokowuje głowicę. Dopóki palce operatora znajdują się w strefie dotykowej głowicę można precyzyjnie i bez wysiłku ustawić w 3 płaszczyznach.

Rewolucyjna technologia HyperSphere wyprzedza dotychczasowe rozwiązania. Głowica umieszczona na łączniku kulowym umożliwia ustawienie w dowolnym położeniu, również pionowym. Automatyczna blokada z włącznikiem dotykowym pozwala na bezwysiłkowe przemieszczanie głowicy przed i po ekspozycji.

Wygodny uchwyt

Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia szybkie i bezwysiłkowe ustawienie głowicy. Smukła obudowa nie zasłania pacjenta i zapewnia komfort podczas codziennej pracy.

Lekki i zwarty

RX DC wyposażony jest w 20 cm tubus zintegrowany z korpusem głowicy. Dzięki temu całość charakteryzuje się lekką i zwartą budową. Unikalna konstrukcja głowicy w połączeniu ze stabilnym, aluminiowym ramieniem umożliwia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie. RX DC wyposażony jest w 10 cm przedłużkę zwiększającą długość tubusa do 30 cm. Zastosowanie przedłużki powoduje automatyczne przeliczenie czasów naświetlania.

Dokładna diagnostyka

RX DC – najnowocześniejszy aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości, skonstruowany przez MyRay, wykorzystuje najnowsze technologie w celu uzyskania najlepszych rozwiązań w dziedzinie radiografii cyfrowej. Uniwersalność połączona z wysoką jakością zdjęć powodują, że RX DC jest aparatem RTG oferującym możliwość precyzyjnej diagnostyki. Wysokie, stałe napięcie głowicy połączone z najmniejszym ogniskiem (0,4 mm) gwarantuje niezmienną ostrość zdjęć.

Bezpieczny dla pacjenta

RX DC, ze stałym wysokim napięciem głowicy RTG, emituje znacząco niższą dawkę promieniowania w porównaniu z tradycyjnymi aparatami. Dzięki generatorowi o wysokiej sprawności zostało prawie całkowicie wyeliminowane najbardziej szkodliwe promieniowanie, a dzięki 30 cm, prostokątnemu tubusowi zminimalizowano rozmiar naświetlanej powierzchni oraz uzyskano równoległość wiązki promieni. Umożliwia to lepszą jakość zdjęć oraz mniejszą szkodliwość dla pacjenta.

Bezprzewodowe sterowanie - pełna kontrola

Bezprzewodowy panel sterujący pozwala na zaprogramowanie aparatu w dowolnym punkcie gabinetu. Nie ma żadnych elementów mocowanych na ścianie oraz płaczących się przewodów. Łatwy w obsłudze i poręczny panel sterujący pozwala na intuicyjne programowanie procesu naświetlania. Żadnego skomplikowanego programowania ani panelu przepełnionego przyciskami. RX DC automatycznie określa dawkę promieniowania po wyborze określonego programu ekspozycji.



We właściwym położeniu

Baza aparatu może być zamontowana w dowolnym położeniu. Lekkie i ergonomiczne, aluminiowe ramię z systemem wyważającym eliminuje ryzyko wibracji głowicy podczas naświetlania.

	Dane techniczne
Generator	Stałonapięciowy, sterowany mikroprocesorowo
Częstotliwość robocza	145 ÷ 230 kHz z samoregulacją (zwykle 175 kHz)
Ognisko	0,4 mm (IEC 336)
Filtracja całkowita	2,0 mm Al @ 60kV
Prąd anodowy	4 / 8 mA
Napięcie lampy RTG	60 / 65 / 70 kV
Czas ekspozycji	0,02–1 sek., skala R'10 i R'20
Odległość źródło-skóra	20 i 30 cm
Napromieniowywany obszar	Okrągły o średnicy: 55 mm i 60 mm
Dodatkowe kolimatory	Prostokątne: 35 x 45 mm, 31 x 41 mm i 22 x 35 mm, dla sensorów o rozmiarze 2 i o rozmiarze 1
Zasilanie	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% lub 230-240Vac ±10%
Cykl roboczy	Praca ciągła z samoregulacją w zakresie 1–90 sek.
Ramię aparatu	Dostępne 3 długości: 40 cm; 60 cm; 90 cm
Maksymalne przedłużenie ramienia	230 cm od ściany
Certyfikacja	CE 0051, dopuszczenie FDA



RX DC HYPERSPHERE

aparat RTG z generatorem wysokiej częstotliwości typu DC – wersja ścienna, możliwość montażu na wybranych modelach unitów

cena katalogowa:
19 000 PLN
 (rata 280 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego
 * Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)



RADIOGRAFIA CYFROWA ZEN-X / STERN WEBER X-VS



Ewolucja technologiczna ukierunkowana na perfekcję, najdrobniejsze szczegóły oraz stałe doskonalenie. Firma CEFLA s.c. zbudowała swoje DNA wokół entuzjazmu dla innowacji i siły prawdziwych nowości. Rygor i precyzja są kluczowymi aspektami każdego nowego wyrobu, a połączone z projektowaniem geometrycznym powodują, że staje się on prawdziwym zwycięzcą.

Wierzymy w elastyczne myślenie, perfekcję prawdziwego talentu, znaczenie konkretnych kroków zmierzających do prawdziwego postępu. Przewidujemy przyszłość dzisiaj, aby zagwarantować bardziej innowacyjne jutro.



I dlatego pojawił się efektywny sensor ZEN-X/ STERN WEBER X-VS.

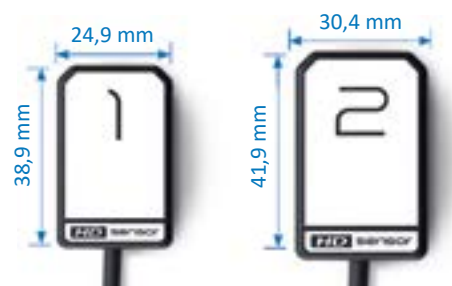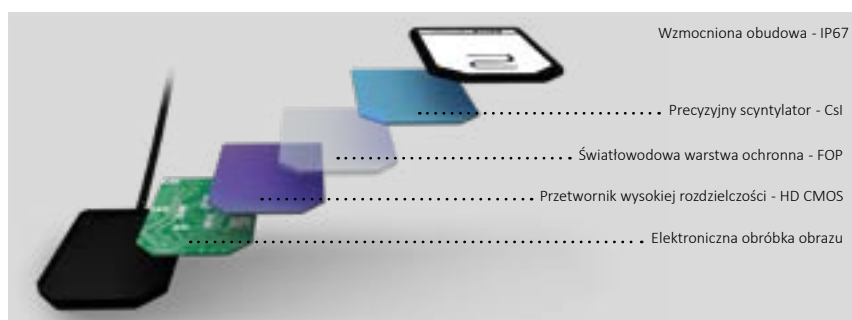**PIĘCIOWARSTWOWY CZUJNIK**

Pięciowarstwowa budowa czujnika zapewnia wysoki kontrast obrazów oraz precyzję szczegółów. Scyntylator cezowo-jodowy (Csl) posiada strukturę mikrokolumnową, która pozwala uzyskać wysoką jakość obrazów – w pierwszej kolejności przechwytuje wiązkę promieni rentgenowskich, a następnie przetwarza je w światło widzialne. Warstwa światłowodowa (Fibre Optics Plate) służy do przesłania obrazu do detektora, odpowiada za wyeliminowanie promieniowania padającego pod innymi kątami oraz chroni detektor przed bezpośrednią penetracją promieniowania rentgenowskiego. Trzecią warstwą jest przetwornik (CMOS HD), który przekształca światło widzialne na cyfrowe obrazy o 16 384 poziomach szarości. Czwarta warstwa przekształca obraz na sygnał USB. Ostatnia warstwa pełni funkcję ochronną.

PODWÓJNY FORMAT

ZEN-X / STERN WEBER X-VS jest dostępny w dwóch rozmiarach. Ergonomiczne czujniki o zaokrąglonych brzegach, dopasowujące się do anatomii jamy ustnej pacjenta, gwarantują niezmienny komfort pozycjonowania. Zredukowane wymiary i maksymalny aktywny obszar zapewniają zaawansowaną diagnostykę radiologiczną.

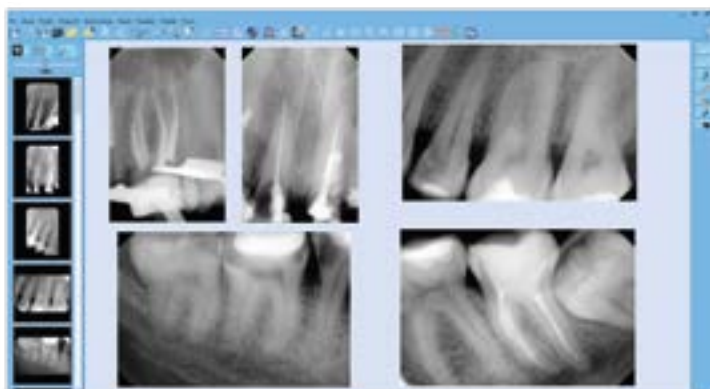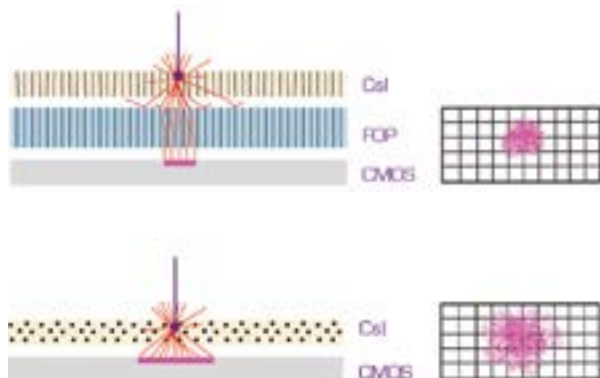

Radiografia cyfrowa Zen-X dostępna jest także w wersji unitowej. Urządzenie Zen-Xi montowane jest wówczas jako szósty instrument przy stoliku lekarza. Opcja dostępna dla wszystkich prezentowanych w katalogu modeli unitów Stern Weber i Mocom oraz wybranych modeli Anthos i Castellini.



Dane techniczne	Rozmiar 1 – normalny	Rozmiar 2 – duży
Wymiary zewnętrzne (mm)	38,9 x 24,9	41,9 x 30,4
Grubość (mm)	5,3	5,7
Matryca (piksele)	1500 x 1000	1700 x 1300
Rozmiar piksela (µm)	20	20
Maksymalna rozdzielczość (lp/mm)	25	25
Głębina poziomów szarości	14-bitowe pozyskiwanie - maksymalnie 16384 poziomów szarości	
Technologia scyntylatora	CsI (Cezowo-jodowy) ze strukturą mikrokolumnową	
Bezpośrednia ochrona przy ekspozycji	FOP (Płytki światłowodowa)	
Stopień ochrony	IP 67 (Zabezpieczony przed infiltracją płynu i pyłu)	
Kompatybilność z generatorami RTG	Dowolne generatory o zakresie 60–70kV, w technologii AC lub DC, z precyzyjnym sterowaniem czasów ekspozycji.	
Podłączenie	Bezpośrednio z komputerem za pomocą portu USB	
Oprogramowanie pozyskujące (dla PC)	iCapture z interfejsem TWAIN	
Oprogramowanie zarządzania obrazami (dla PC)	iRYS (dla PC) z interfejsem DICOM 3.0 z darmową przeglądarką	
Minimalne wymagania dla systemu	Microsoft Windows® 7, 8, 10 – Professional, 11	
Ustawienia wyświetlacza	1280 x 1024; 1344 x 768 lub wyższy, 16 milionów kolorów	
Port	USB 2.0 lub kolejny	
Zasilanie	5 VDC, 500 mA (przez USB)	



ZEN-X / STERN WEBER X-VS system radiografii cyfrowej

cena katalogowa:
16 000 PLN
(rata 230 PLN*)

dla rozmiaru 2 dopłata **+2400 PLN**

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

RADIOGRAFIA CYFROWA ZEN-X E

Zen-X E

Udoskonalony sensor, który wynosi jakość pracy w gabinecie na nowy poziom. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu, wyjątkową łatwość obsługi oraz maksymalny komfort pacjenta.

JAKOŚĆ HD

Bardziej czuły niż inne przewodowe sensory z tej serii, Zen-X E gwarantuje wyjątkowo szczegółowe obrazy.

ERGONOMIA

Zaokrąglone krawędzie i smukła konstrukcja zapewniają komfortowe wprowadzanie sensora do jamy ustnej.



PODŁĄCZ I UŻYWAJ

Pracuj w dowolnym miejscu: 3-metrowy przewód zapewnia maksymalną swobodę ruchu i natychmiastowe podłączenie przez USB.



NIEWIELKA GRUBOŚĆ, DUŻA POWIERZCHNIA AKTYWNA

Dostępny w dwóch rozmiarach, Zen-X E ma optymalne wymiary sensora zarówno dla dorosłych, jak i dzieci dzięki powierzchni aktywnej sięgającej niemal krawędzi. Sensor dopasowuje się do anatomii jamy ustnej, łącząc komfort pacjenta z potrzebą uzyskania wyraźnej diagnostyki, a specjalne pozycjonery dodatkowo zwiększają precyzję badania.



ODPORNY

Certyfikowany w klasie IP68 sensor Zen-X E zapewnia odporność na działanie płynów i pyłu, przewyższającą średnie standardy rynkowe. Warstwa aluminium chroni go przed uderzeniami i przypadkowymi upadkami, podobnie jak specjalna konstrukcja wewnętrznych warstw odpowiedzialnych za konwersję promieniowania RTG na obraz końcowy.



BARDZO DŁUGI PRZEWÓD PLUG & PLAY

3-metrowy przewód zapewnia doskonałą swobodę ruchu. Możesz używać Zen-X E w dowolnym miejscu, korzystając z bezpośredniego połączenia USB z komputerem lub laptopem. Stabilizator umieszczony na przewodzie zmniejsza zużycie energii, utrzymując temperaturę sensora w jamie ustnej pod kontrolą. Co więcej, nie ma potrzeby przechodzenia urządzenia w tryb czuwania ani przerywania pracy.



MYRAY ZEN-X E
system radiografii cyfrowej

cena katalogowa:
16 000 PLN
(rata 230 PLN*)

dla rozmiaru 2 dopłata **+2400 PLN**

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego


* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

RADIOGRAFIA CYFROWA ZEN-X DCIS

Łatwiej się nie da!

Zastosowanie systemu DC[™] (bezpośredniej konwersji) pozwala uzyskać bardzo ostre zdjęcia.

Pozycjonery dołączone w zestawie ułatwiają przeprowadzenie badania. Bezprzewodowy sensor do zdjęć wewnętrznych po pełnym ładowaniu umożliwia rejestrację nawet 140 kolejnych zdjęć (wliczając 40 sekundową przerwę między badaniami).

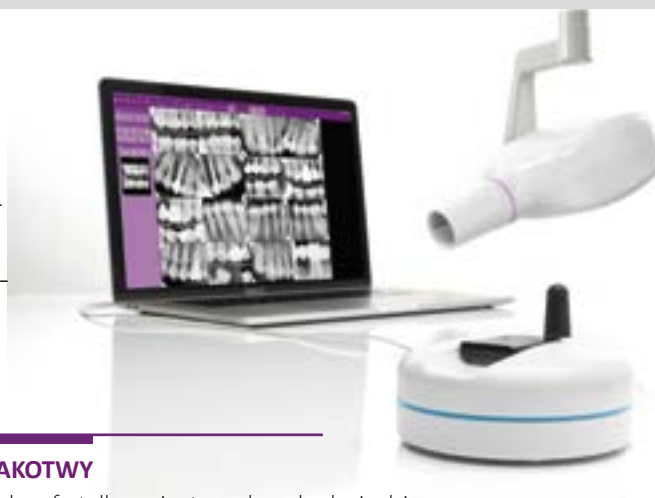

KOMPAKOTWY

Większy komfort dla pacjenta podczas badania dzięki zaokrąglonym krawędziom. Minimalna grubość. Ekstremalnie smukły. Akumulator litowy. Odporny na uszkodzenia.

BEZPRZEWODOWY

Antena do odbioru danych w trybie bezprzewodowym.

WSZYSTKO W JEDNYM

Stacja dokująca służy do przechowywania i ładowania sensora, gdy nie jest używany.

GDZIEKOLWIEK CHCESZ

Umieść stację dokującą na powierzchni roboczej, na biurku lub na ścianie za pomocą specjalnego zestawu mocującego. Dioda LED stanu naładowania będzie zawsze widoczna. Proste i zawsze dostępne połączenie USB.



Certyfikat IP67 - obudowa urządzenia jest pyłoszczelna i wodoodporna.



Radiografia Zen-X DCiS

cena katalogowa:

26 500 PLN

cena promocyjna:

22 500 PLN

(rata 330 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Specyfikacja techniczna

WYMIARY

Rozmiar sensora	2
Wymiary sensora	43,4 mm (wysokość) x 29,5 mm (szerokość)
Grubość sensora	5,2 mm (9,2 mm uwzględniając centralną część obudowy baterii)
Obszar aktywny	35,1 mm x 24,7 mm
Stacja dokująca	100 mm (średnica) x 62 mm (wysokość)
Długość kabla USB	2 m (połączenie stacji dokującej z komputerem)

AKWIZYCJA OBRAZU

Matryca pikseli	1350 x 950 (1 282 500 pikseli)
Detektor	Monokrystaliczny krzem z bezpośrednią konwersją
MTF (Modulation Transfer Function)	> 70% @ 5 lp/mm, > 40% @ 10 lp/mm
Warunki ekspozycji	0.1-0.5 s, 60-70 kV, 6/8 mA, 20 cm (8")
Czas bezprzewodowej transmisji obrazu	Mniej niż 10 s w optymalnych warunkach pracy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SENSORA


Wewnętrzna bateria	Akumulator litowo-jonowy (pojemność 19 mAh)
Stopień ochrony	IP 67 (Gwarancja ochrony przed infiltracją cieczy lub pyłu)
Zintegrowana pamięć RAM	4 MB (maksymalnie 1 zachowany obraz)
Technologia transmisji obrazu	Bezprzewodowy
Zasięg działania bezprzewodowego	Do 2,5 m od stacji dokującej
Kompatybilność z generatorami promieniowania rentgenowskiego	Montaż na ścianie lub wózek (AC i DC): 2-15 mA i 50-75 kV. Przenośny: 2-10 mA i 50-75 kV
Pełny czas ładowania	3,5 godziny (umożliwia rejestrację 140* kolejnych zdjęć, z 40-sekundową przerwą między dwoma badaniami)
Minimalny zalecany czas ładowania	15 minut (umożliwia uzyskanie 19* kolejnych zdjęć, z 40-sekundową przerwą między dwoma badaniami)

WYMAGANIA

Oprogramowanie do akwizycji (dla komputerów PC)	iCapture z dedykowanymi filtrami dla oprogramowania innych firm
Procesor	Intel i5 6-tej generacji lub podobny
RAM	Minimum 4 GB pamięci RAM i 100 GB miejsca na dysku twardym
Wyświetlacz	Rozdzielczość 1920x1080 pikseli i 24-bitowy RGB Full HD (wysoka rozdzielczość)

WYJŚCIA KOMUNIKACYJNE

Port podłączenia stacji dokującej	USB-C
PC/laptop port	USB-A
Zasilanie	+5V ± 10%
Moc wejściowa	2,5 W

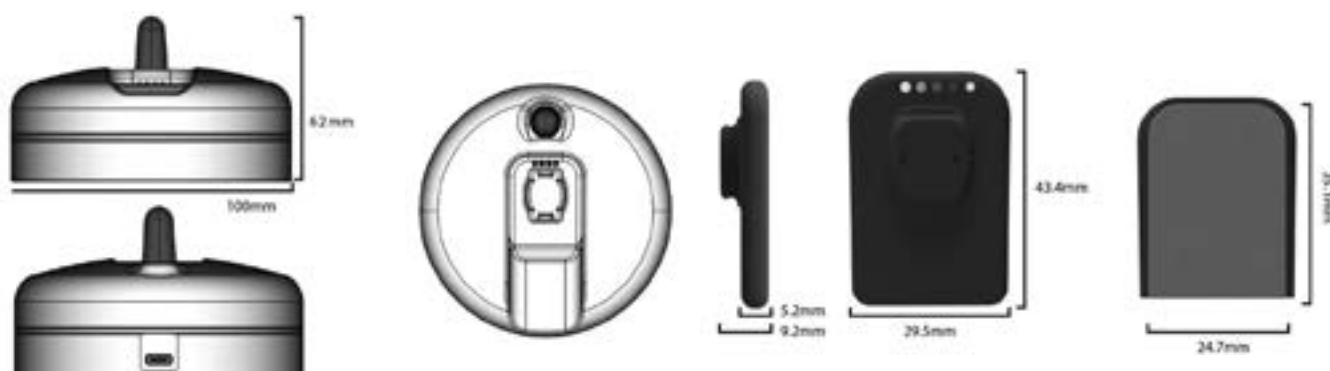

MYRAY – SKANER PŁYT OBRAZOWYCH

Prostota obsługi i wysoka jakość obrazu

Niezawodność diagnozy oraz komfort i łatwość obsługi. MyRay Hy-Scan zapewnia dostęp do niezrównanej technologii cyfrowej, której kluczową cechą jest krótki czas odczytu i wysoka jakość obrazu - wszystko to w jednym, kompaktowym urządzeniu.

Odkryj zastosowany przez MyRay system CR (Computed Radiography), który gwarantuje wygodną obsługę płytek fosforowych. Proste w użyciu urządzenie szybko dostarcza obrazy wewnętrzne o wysokiej rozdzielczości i umożliwia skuteczną diagnozę. Cała powierzchnia płytek obrazowych jest aktywna, a dzięki ich cienkiej warstwie są ergonomiczne i łatwe do ustawienia. Pozwala to zapewnić maksymalny komfort dla każdego pacjenta.

Bezdotykowy system ładowania i odczytywania płytki sprawia, że skanowanie jest jeszcze prostsze. Skaner importuje obraz w ciągu kilku sekund, co pozwala na natychmiastowe wyświetlenie go na dedykowanej aplikacji na iPadzie lub ekranie komputera.



WSZECHESTRONNOŚĆ

Cztery różne rozmiary płytek oraz filtry adaptacyjne do wyświetlania obrazu zapewniają wszechstronność i szeroki zakres diagnostyki.



NIEZAWODNOŚĆ HI-TECH

Technologia Hi.Res (17 l/mm) gwarantuje wysoką rozdzielczość obrazu oraz kontrast zapewniający wiarygodną diagnozę.



ERGONOMIA

Połączenie najlepszej cyfrowej technologii diagnostycznej z zaletami tradycyjnych klisz – jeszcze wyższy komfort i ergonomia pracy.



ŁĄCZNOŚĆ

Współpraca z systemem zarządzania gabinetem. Udostępnianie danych bezpośrednio w DICOM i optymalizacja pracy dla wielu użytkowników.



Rozmiar 0
22 x 31 mm
Piksele 762 x 1024



Rozmiar 1
24 x 40 mm
Piksele 792 x 1321



Rozmiar 2
31 x 41 mm
Piksele 1024 x 1354



Rozmiar 3
27 x 54 mm
Piksele 891 x 1783



MyRay Hy-Scan skaner płyt obrazowych

cena katalogowa:
29 000 PLN
(rata 420 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego
* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

KAMERA STOMATOLOGICZNA C-U2

- sensor HD (16:9), 8 silnych diod LED z optycznym rozpraszaniem
- układ optyczny z 7 wysokiej przejrzystości szklanymi soczewkami F/8, powiększenie 50x
- technologia cyfrowa (Progressive Scan)
- podłączenie USB
- stała ogniskowa - nie wymaga ręcznego ustawiania, a dzięki zakresowi głębokości pola widzenia od 5 do 70 mm, obraz pozostaje ostry w szerokim zakresie
- przycisk wielofunkcyjny - płynne przesuwanie i powiększanie obrazu bez żadnych drgań, uproszczenie panelu sterującego do tylko jednego przycisku
- ergonomiczna końcówka - układ optyczny grubości 9,5 mm, tylko 8 mm od wierzchołka rękojeści
- występuje w wersji montowanej do unitu oraz wolnostojącej



C-U2

wewnętrzna stomatologiczna kamera HD ze złączem USB

cena katalogowa: **8900 PLN**

VISTASCAN MINI - SKANER PŁYT OBRAZOWYCH




Skaner płytek fosforowych z wyświetlaczem dotykowym do formatów wewnętrznych

Skaner płytek fosforowych VISTASCAN MINI VIEW zapewnia użytkownikowi niezwykle intuicyjną, efektywną i oszczędzającą czas digitalizację płytek pamięciowych. Przyczynia się do tego m.in. jego duży wyświetlacz dotykowy, bardzo wygodny w obsłudze. Jego kompaktowość i zintegrowana funkcja WLAN sprawiają, że urządzenie jest wyjątkowo proste w użyciu.

Najważniejsze cechy skanera VISTASCAN MINI VIEW:

- doskonała jakość obrazu
- 5-calowy dotykowy wyświetlacz
- ScanManager - polecenia skanowania można przysyłać do VistaScan Mini View 2.0 z różnych stanowisk roboczych jednocześnie
- do wszystkich formatów wewnętrznych - w rozmiarach od 0 do 4
- bezpieczeństwo dzięki pamięci wewnętrznej
- połączenie z PC za pośrednictwem WLAN/LAN
- możliwość skanowania bez komputera - niezależnie od dostępności sieci
- złącza: USB / sieciowe

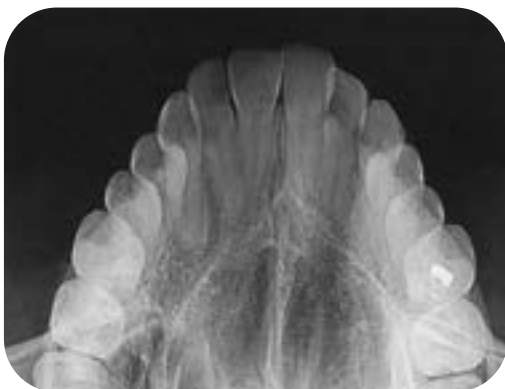

zdjęcia zgryzowe do zdiagnozowania uszkodzeń szczęki, wkliniowanych zębów, cyst i wrzodów



Niewielkie wymiary – wielkie możliwości

Skaner pamięciowych płyt obrazowych VISTASCAN MINI VIEW jest nadzwyczaj łatwy w obsłudze i wymaga zaskakująco niewiele miejsca – można go bezproblemowo umieścić w każdym gabinecie.


Zalety: wykonywanie zdjęć i skanowanie bezpośrednio przy fotelu z pełnym zakresem rozmiarów płytki. Płytki obrazowe wielokrotnego stosowania zostają odczytane z najwyższą precyzją w ciągu kilku sekund.

Bezkompromisowa jakość zdjęcia

VISTASCAN MINI VIEW dzięki technologii PCS jest w stanie dokładnie pokazać ubytki próchnicowe D1 oraz instrumenty endodontyczne aż do ISO 06. Rozdzielczość 22 lp/mm, 16-bitowa skala szarości (65 536 odcieni szarości).

Wszystkie formaty wewnętrzne

VISTASCAN MINI VIEW odczytuje wszystkie wewnętrzne płytki pamięciowe – w rozmiarze od 0 do 4. Ponadto do dyspozycji mamy 100% powierzchni aktywnej.

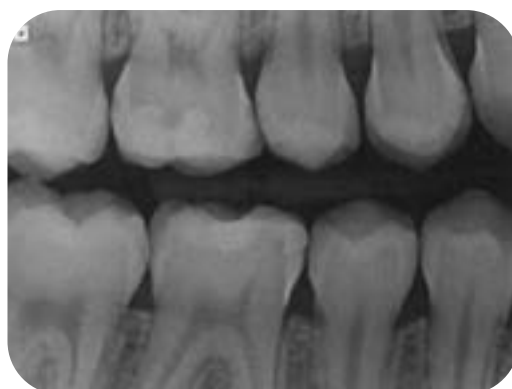

zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe o wysokiej rozdzielczości dla perfekcyjnej diagnozy





VISTASCAN MINI EASY
skaner płyt obrazowych

cena: **32 900 PLN**
(rata 480 PLN*)

VISTASCAN MINI VIEW
skaner płyt obrazowych

cena: **49 500 PLN**
(rata 720 PLN*)


* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

PROXIMA X6 NOWOŚĆ



MyRay Proxima 6 to nowoczesne urządzenie diagnostyczne przeznaczone zarówno do małych gabinetów stomatologicznych, jak i większych klinik. Umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu badań: zdjęć panoramicznych, tomografii CBCT oraz zdjęć cefalometrycznych.

Aparat został wyposażony w system automatycznego doboru dawki promieniowania, dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazów.

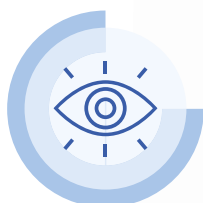

Wszechstronne zastosowanie

Szeroki zakres funkcji i narzędzi dla różnych potrzeb klinicznych.



Zaawansowane oprogramowanie

Intuicyjne oprogramowanie optymalizujące codzienną pracę.



Ergonomia

Funkcjonalny design urządzenia ułatwiający codzienną pracę.



Bezpieczeństwo pacjenta

Szczegółowe i kompleksowe obrazy, zawsze z odpowiednio dobranymi i bezpiecznymi dawkami promieniowania.



FOV 6X6 FOV 11X11 FOV 15X11 DENT
*Opcjonalnie

Zaawansowana technologia 3D

Szeroki zakres dostępnych pól obrazowania (FOV) umożliwia trójwymiarową diagnostykę rentgenowską różnych obszarów anatomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ekspozycji tylko do struktur istotnych klinicznie. Zastosowanie zróżnicowanych protokołów pozwala na precyzyjne dostosowanie dawki promieniowania do rodzaju badania oraz indywidualnych cech pacjenta. Dostępne filtry i funkcje automatyczne wspomagają optymalizację jakości obrazów, poprawiając ich ostrość oraz eliminując artefakty i zakłócenia.

PROXIMA X6

Zoptymalizowane tryby skanowania 3D

Każde pole obrazowania obsługuje trzy tryby skanowania, umożliwiające indywidualne dostosowanie dawki promieniowania w zależności od potrzeb pacjenta oraz wymagań diagnostycznych:



Eco Quality

(tryb niskiej dawki) – minimalna ekspozycja, idealna przy kontrolach pozabiegowych,




Regular Quality

(tryb standardowy) – zrównoważona jakość obrazu, odpowiednia do planowania leczenia,




Best Quality

(tryb wysokiej rozdzielczości) – maksymalna szczegółowość obrazu, umożliwiającą dokładną analizę mikrostruktur.

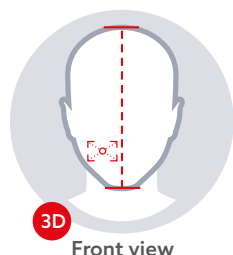

Front view

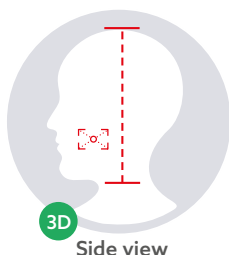



Side view

System Scout View

Umożliwia uzyskanie dwóch zdjęć pacjenta – bocznego i czołowego – przy minimalnej dawce promieniowania. Następnie lekarz może precyzyjnie dostosować obszar skanowania 3D, korzystając z serwomechanizmów sterowanych bezpośrednio z poziomu stanowiska roboczego. Dzięki temu operator może zminimalizować ryzyko konieczności powtórzenia badania.

Filtry AMAR (AutoAdaptive Metal Artifact Reduction)

Filtry te rozpoznają obecność elementów metalowych i generują dodatkowy zestaw obrazów, w których artefakty są zredukowane do minimum. To niezwykle przydatne narzędzie podczas planowania specjalistycznych zabiegów wymagających segmentacji struktur anatomicznych. ***Opcjonalnie**

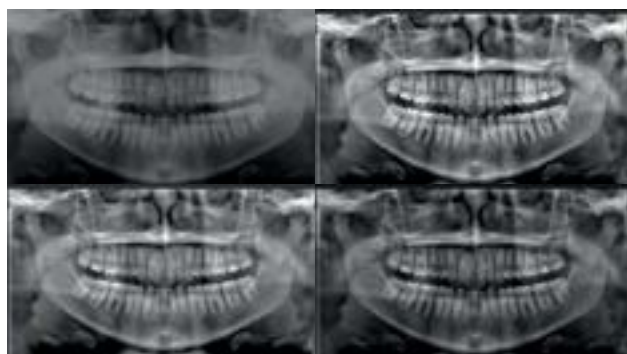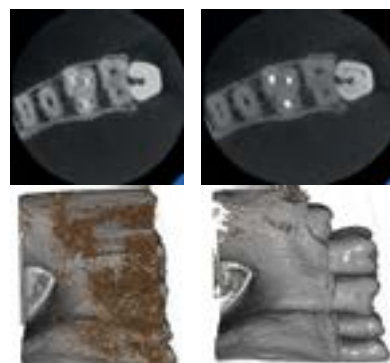

Najwyższy standard obrazowania 2D w technologii NewTom

MyRay Proxima 6 umożliwia wykonywanie zdjęć panoramicznych, stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ), zatok szczękowych, samych zębów bez stawów oraz skrzydłowo-zgryzowych. Szczegółowość uzyskanych obrazów diagnostycznych jest dodatkowo zwiększana dzięki zastosowaniu filtrów, które można z łatwością dostosować do swoich potrzeb za pomocą oprogramowania NeoWise.

PROXIMA X6



Standardowa panorama



Ortogonalna panorama



Panorama pediatryczna



Badanie cefalometryczne

Modułowe ramię do zdjęć cefalometrycznych i obrazów nadgarstka może być montowane po lewej lub prawej stronie aparatu, a w wersji CEPH Ready – również może zostać dodane w późniejszym czasie. W wybranych konfiguracjach możliwe jest korzystanie z jednego czujnika 2D PAN-CEPH do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych.

Komfort pacjentowi podczas badania zapewniają regulowany uchwyt z podparciem czoła oraz boczne pozycjonery w dwóch wariantach – standardowym dla dorosłych i wydłużonym dla dzieci – oba wyposażone w miękkie ochroniacze uszu.



Badanie cefalometryczne w aparacie **MyRay Proxima 6** zostało zoptymalizowane z myślą o dzieciach – minimalizuje narażenie tarczycy na promieniowanie i zapobiega kontaktowi czujnika z barkiem, umożliwiając prawidłowe ustawienie pacjenta w odniesieniu do sklepienia czaszki.

Kluczowe elementy, takie jak panel sterujący, czy klawiatury dotykowe, mogą być montowane po dowolnej stronie.

Oprogramowanie NeoWise zostało zaprojektowane z myślą o usprawnieniu codziennej pracy. Daje możliwość zarządzania i przetwarzania obrazów 2D i 3D w celu uzyskania precyzyjnej diagnozy oraz ułatwienia komunikacji z pacjentem. Oprogramowanie jest intuicyjne w obsłudze, oferuje zaawansowane narzędzia diagnostyczne do planowania leczenia oraz filtry pomagające w odczytywaniu informacji ze zdjęć. **Pozwala na dostosowanie uprawnień i funkcji programu do przypisanej roli w gabinecie.** Z poziomu programu można również zarządzać i konfigurować wszystkie urządzenia zgodnie ze swoimi potrzebami.



PROXIMA X6

Dodatkowe funkcje wspierające codzienną pracę

Wirtualny panel sterowania

Umożliwia operatorowi monitorowanie wszystkich etapów badania bezpośrednio z poziomu komputera, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.



Wirtualny panel sterowania

Umożliwia operatorowi monitorowanie wszystkich etapów badania bezpośrednio z poziomu komputera, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia.



Smart mirror

Dzięki zastosowaniu pięciu różnych kolorów w funkcji **smart mirror** zarówno operator urządzenia, jak i pacjent widzą na bieżąco, jaki jest status badania na każdym jego etapie.



System laserowy do pozycjonowania

Prawidłowe ustawienie stóp pacjenta ma kluczowe znaczenie dla dokładności i powtarzalności badania. System emituje wiązkę laserową na podłogę, która ułatwia pacjentowi zajęcie odpowiedniej pozycji.



Dotykowe przyciski sterujące
Służą do obsługi aparatu. Podczas konfiguracji mogą być zamontowane zarówno po prawej, jak i lewej stronie urządzenia.



Relaksujące oświetlenie ambientowe
Możliwość dostosowania kolorów i poziomu natężenia światła tworzy atmosferę, która sprzyja relaksowi pacjenta podczas wszystkich etapów badania odpowiedniej pozycji.

PROXIMA X6

PROXIMA X6 2D PAN

pantomograf 2D

- + dedykowany komputer z monitorem
- + dotykowy panel sterowania
- + funkcje AI (licencja 1 rok)
- + ambientowe oświetlenie

cena: 79 000 PLN (rata 1150 PLN*)

PROXIMA X6 2D PAN / CEPH

pantomograf 2D z cefalostatem, 1 sensor panoramiczno - cefalometryczny

- + dedykowany komputer z monitorem
- + dotykowy panel sterowania
- + funkcje AI (licencja 1 rok)
- + ambientowe oświetlenie

cena: 109 000 PLN (rata 1580 PLN*)

PROXIMA X6 3D PAN CBCT

tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego

1 sensor (panoramiczny, 3D 11x11)

- + dedykowany komputer z monitorem
- + dotykowy panel sterowania
- + funkcje AI (licencja 1 rok)
- + ambientowe oświetlenie

cena: 169 000 PLN (rata 2450 PLN*)

PROXIMA X6 3D PAN / CEPH CBCT

tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z cefalostatem

2 sensory (panoramiczno - cefalometryczny, 3D 11x11)

- + dedykowany komputer z monitorem
- + dotykowy panel sterowania
- + funkcje AI (licencja 1 rok)
- + ambientowe oświetlenie

cena: 199 000 PLN (rata 2890 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)



PROXIMA X6

Dodatkowe wyposażenie	CENA (PLN)
TMJ Pack (13x6, 13x10, 15x6, 15x11)	30 000
Dopłata do wersji stojącej	3 000
Podstawa umożliwiająca montaż urządzenia bez przykręcania do ściany PAN / CEPH	4 000

Obrazowanie	2D	3D
Rodzaj	Panoramyczne (dorosły, dziecko, ortho), QuickPAN, MultiPAN, Dent, Bitewing, Zatoki (przednie, L, P), ATM (przednie, boczne, obustronne), CEPH (LL, AP-PA, Carpus)	Dent, Zatoki, TMJ, Model Badania ograniczone do obszaru zainteresowania.
(Maksymalna) teoretyczna rozdzielczość na płaszczyźnie pacjenta	PAN : 5.7 lp/mm (pixel 78 µm) BW : 6.6 lp/mm (pixel 77 µm) CEPH : 5.7 lp/mm (pixel 88 µm)	PAN: 5,1 lp/mm (piksel 77 µm) BW: 6,6 lp/mm (piksel 75 µm) CEPH: 5,7 lp/mm (piksel 88 µm) CBCT: 6,25 lp/mm (woksel 80 µm)
Pola obrazowania (L x H) na pacjencie (dorosły i dziecko) [cm]	PAN STD : 27x15.2 - PAN CHILD : 23.5x15.2 DENT (Full) : 26.48x15.2 BITEWING : 22.98x15.2 CEPH LL (full skull): 29.98x22.72	DENT : 6x6, 8x6, 8x8, 10x10, 11x6, 11x8, 11x11 SIN : 8x8, 10x10, 11x8, 11x11 ATM : 10x10, 11x6, 11x11, 13x6*, 13x10*, 15x6*, 15x11* MODEL : 8x8, 10x10, 11x6, 11x8, 11x11
Czas skanowania	PAN: 13.7 s (Ortho); 12.3 s (Standard) ; 6.8 s (Quick) ; 3.2 s (Sin R/L) CEPH LL : 9.9 s (Standard) 3.8 s (Quick)	Super HD: 16.8 s (Best Quality - single scan) Standard: 9.6 s (Regular - single scan) QuickScan: 6.4 s (Low Dose - single scan)

Instalacja

Waga	Podstawowa jednostka 2D: 51 kg Podstawowa jednostka 3D: 56 kg Ramię CEPH z sensorem: 21 kg
------	--

Generator rentgenowski	2D	3D
Typ generatora	DC o stałym potencjale	DC o stałym potencjale
Napięcie anodowe i prąd	60–90 kV (emisja ciągła), 4–15 mA	90 kV (emisja pulsacyjna), 2–16 mA
Ognisko	0,5 mm (IEC 60336)	0,6 mm (IEC 60336)
Zasilanie	2D	3D
Napięcie i częstotliwość	115–240 V, jednofazowe, 50/60 Hz	115–240 V, jednofazowe, 50/60 Hz
Maksymalny prąd roboczy	20 A przy 115 V; 12 A przy 240 V	20 A przy 115 V; 12 A przy 240 V
Prąd w trybie czuwania	1 A przy 115 V; 0,5 A przy 240 V	1 A przy 115 V; 0,5 A przy 240 V
Metoda regulacji	Automatyczna adaptacja napięcia i częstotliwości	Automatyczna adaptacja napięcia i częstotliwości
Detektor	2D PAN & CEPH	3D/PAN
Rodzaj detektora	CMOS (Csi)	IGZO 3D

Ergonomia

Pozycjonowanie pacjenta	Sugestia z wirtualnego panelu sterowania – wyrównanie wspomagane serwomechanizmem, 3 prowadnice laserowe (Klasa 1 – IEC 60825-1) – 3D Scout View.
-------------------------	---

(*) Specyficzne badania stawu skroniowo-żuchwowego (mogą nie obejmować całego uzębienia).

NEWTOM GIANO HR FullView

- **NewTom GIANO HR FullView** to wszechstronny system 2D/3D/ CEPH, który łączy legendarną jakość obrazowania NewTom z najbardziej zaawansowanymi technologiami wspomagającymi pracę kliniczną.
- **Wbudowane algorytmy AI** wspierają analizę obrazów 2D i 3D, ułatwiając interpretację badań panoramicznych, CBCT oraz cefalometrycznych. Inteligentne narzędzia automatycznie wspomagają diagnostykę i usprawniają codzienną pracę lekarza.
- **Zintegrowany skaner twarzy 3D** tworzy realistyczny model twarzy pacjenta i łączy go z danymi CBCT oraz skanami wewnątrzustnymi, tworząc koncepcję „Wirtualnego Pacjenta”.
- **Dotykowy panel sterowania 10"**
Urządzenie wyposażono w dużą, 10-calową konsolę sterującą z intuicyjnym interfejsem graficznym. Panel umożliwia pełną kontrolę nad procesem pozycjonowania i wyboru parametrów badania bezpośrednio przy pacjencie. Duży wyświetlacz pozwala na natychmiastowy podgląd uzyskanego obrazu, co pozwala na szybką ocenę poprawności wykonanego skanu bez konieczności podchodzenia do stacji roboczej.


NE  WISE

NEWTOM GIANO HR FullView



PANORAMA

DC^{III} UltraHD panoramiczne zdjęcia

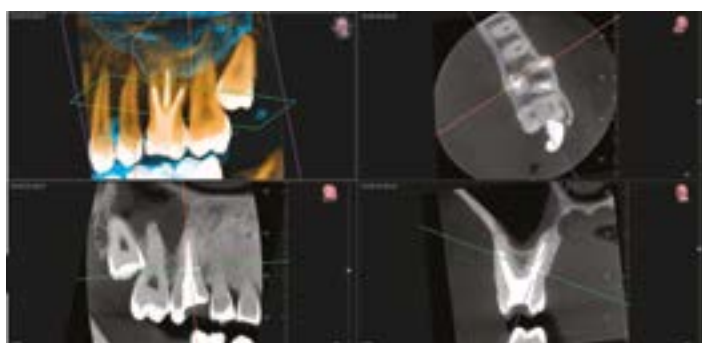

Tryb Endo: voxel 50 µm w FOV 4x4 cm


Dla specjalistów zajmujących się endodoncją, GiANO HR oferuje dedykowany tryb ultra-wysokiej rozdzielczości. Dzięki rozmiarowi voxela wynoszącemu zaledwie 50 µm w polu widzenia 4x4 cm, aparat pozwala na uwidocznienie najdrobniejszych szczegółów anatomicznych, takich jak kanały dodatkowe, obliteracje czy mikropęknięcia korzeni. To najwyższy standard precyzji niezbędny w nowoczesnym leczeniu kanałowym.



CEFAŁO

Automatyczna analiza zdjęć cefalometrycznych



Oprogramowanie urządzenia oferuje przełomową funkcję automatycznej analizy cefalometrycznej. System w ciągu kilku sekund identyfikuje punkty referencyjne i wykonuje pomiary na zdjęciach CEPH, znacząco skracając czas przygotowania planu leczenia ortodontycznego. Dzięki precyzji algorytmów, lekarz otrzymuje gotową analizę, którą może natychmiast zweryfikować i wdrożyć do procesu diagnostycznego.

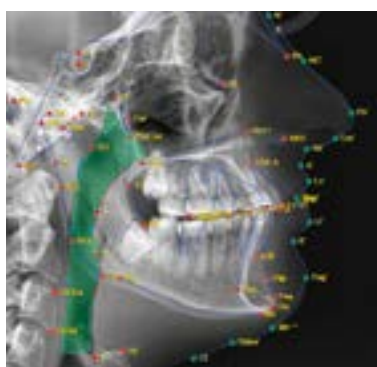


NEWTOM GIANO HR FullView

Zintegrowany skaner twarzy 3D

Funkcja skanera twarzy pozwala na pozyskanie fotorealistycznego modelu 3D tkanek miękkich pacjenta w trakcie jednej rotacji. Integracja skanu twarzy z danymi CBCT oraz skanami wewnątrzustnymi umożliwia stworzenie „Wirtualnego Pacjenta”. Jest to nieocenione narzędzie w planowaniu złożonych zabiegów protetycznych i ortodontycznych, ułatwiające przewidywanie estetycznych efektów leczenia oraz komunikację z pacjentem.

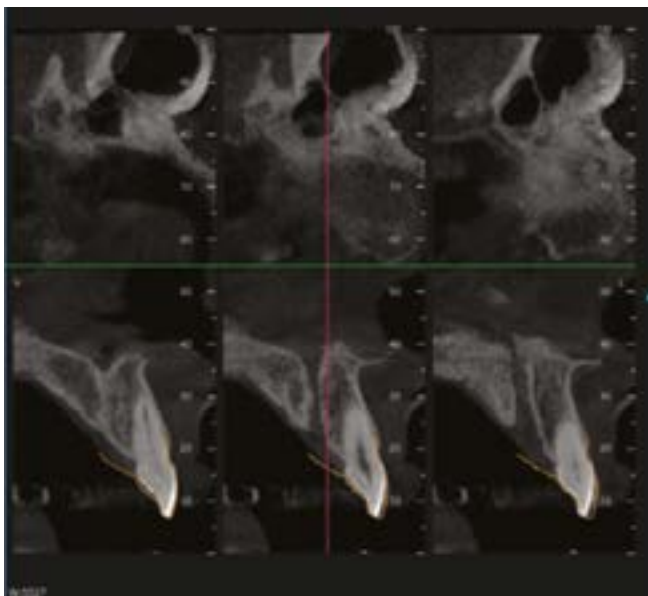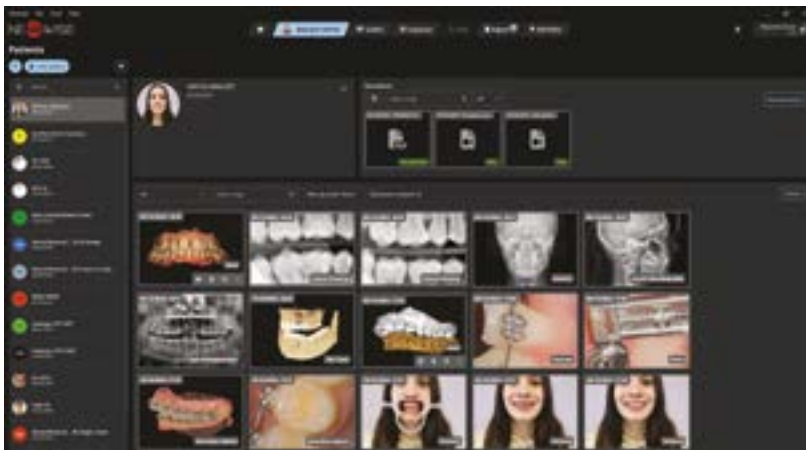

NEWTOM GIANO HR FullView

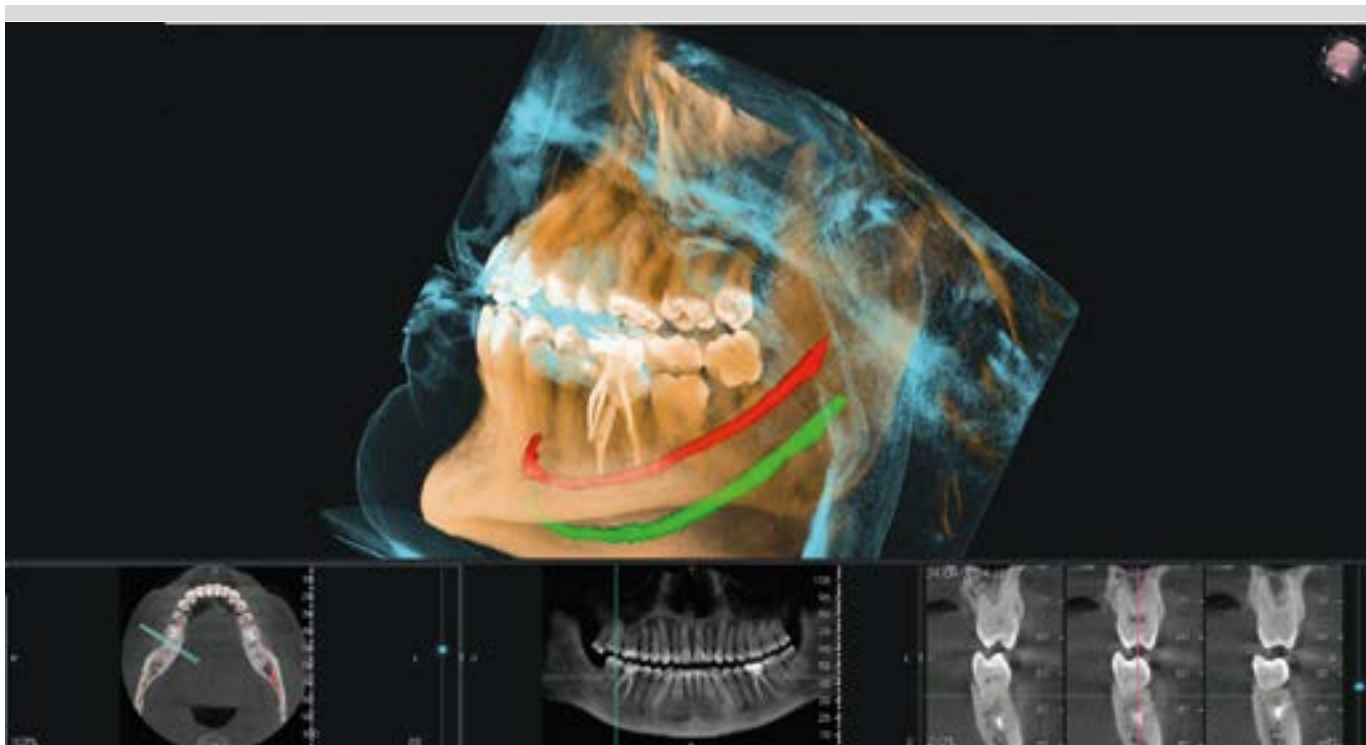


Inteligentne funkcje AI (Sztuczna Inteligencja)

System wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI do automatyzacji najbardziej wymagających etapów pracy.

Dzięki algorytmom AI, oprogramowanie Neowise automatycznie wykrywa struktury anatomiczne oraz zmiany patologiczne, wyznacza łuki zębowe i kanał żuchwy a nawet umożliwia segmentację w 3D.

Technologia SafeBeam™ automatycznie dostosowuje dawkę promieniowania do budowy anatomicznej pacjenta.

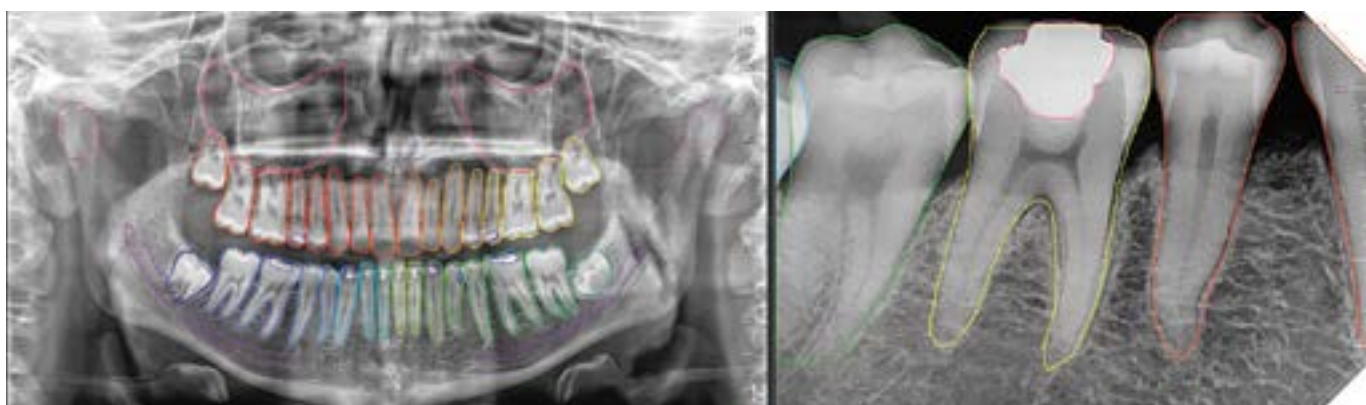

Ambientowe oświetlenie LED

System ambientowego oświetlenia pełni rolę nie tylko estetyczną, ale i funkcjonalną. Wielokolorowe diody LED informują operatora o statusie urządzenia (gotowość, ekspozycja, błąd) poprzez subtelne zmiany barwy światła. Jednocześnie, odpowiednio dobrane oświetlenie wpływa kojąco na pacjenta, redukując stres związany z badaniem i budując nowoczesny wizerunek gabinetu.



DOSTĘPNE WERSJE I CENY

Dodatkowe wyposażenie (przy zakupie z urządzeniem)	CENA (PLN)
Rok licencji AI	4 000
Zestaw z kamerą do pozycjonowania przy badaniach 2D i 3D oraz interkomem	18 000
Pole obrazowania do kręgosłupa szyjnego i ucha środkowego (7x6, 9x9, 9x16)	10 000
Licencja DICOM Storage, Worklist, Query/Retrieve	16 000
Podstawa umożliwiająca montaż urządzenia bez przykręcania do ściany	4 000

Akcesoria do przystawki cefalometrycznej	CENA (PLN)
Pozycjoner do wykonywania zdjęć nadgarstka	1060
Pozycjoner do badań u dzieci w celu redukcji dawki	790

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 2D PAN(pantomograf 2D z najnowszej generacji detektorem bezpośredniej konwersji DC^{III})

+ dedykowany komputer z monitorem

+ funkcje AI (licencja 1 rok)

cena: 119 000 PLN (rata 1730 PLN*)**NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 2D PAN CEPH**(pantomograf 2D z przystawką cefalometryczną oraz dwoma niezależnymi najnowszej generacji detektorem bezpośredniej konwersji DC^{III})

+ dedykowany komputer z monitorem

+ funkcje AI (licencja 1 rok)

+ automatyczna analiza zdjęć cefalometrycznych

cena: 169 000 PLN (rata 2450 PLN*)**NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D**(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z najnowszej generacji detektorem bezpośredniej konwersji DC^{III} oraz skanerem twarzy)

+ dedykowany komputer z monitorem

+ funkcje AI (licencja 1 rok)

+ funkcja skanera twarzy

+ tryb endo 4x4, 5x4 voxel 50 µm

+ dotykowy panel sterowania 10"

+ ambientowe oświetlenie

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 13x10

Pola obrazowania: standardowe

(4x4, 5x4, 6x6, 8x6, 8x8, 10x6, 10x10, 11x8, 13x6, 13x10)

cena: 269 000 PLN (rata 3900 PLN*)**NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 15x16**

Pola obrazowania: standardowe + rozszerzone

(13x16, 15x6, 15x10, 15x16)

cena: 299 000 PLN (rata 4330 PLN*)**NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 17x18**

Pola obrazowania: standardowe + rozszerzone + maksymalne

(17x10, 17x14, 17x18)

cena: 309 000 PLN (rata 4480 PLN*)

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D CEPH

(tomograf 3D z funkcją aparatu pantomograficznego z najnowszej generacji detektorem bezpośredniej konwersji DC^{III} oraz skanerem twarzy)

- + dedykowany komputer z monitorem
- + funkcje AI (licencja 1 rok)
- + funkcja skanera twarzy
- + automatyczna analiza zdjęć cefalometrycznych
- + tryb endo 4x4, 5x4 voxel 50 µm
- + dotykowy panel sterowania 10"
- + ambientowe oświetlenie

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 13x10 CEPH

Pola obrazowania: standardowe

(4x4, 5x4, 6x6, 8x6, 8x8, 10x6, 10x10, 11x8, 13x6, 13x10)

cena: 299 000 PLN (rata 4330 PLN*)

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 15x16 CEPH

Pola obrazowania: standardowe + rozszerzone

(13x16, 15x6, 15x10, 15x16)

cena: 329 000 PLN (rata 4770 PLN*)

NEWTOM GIANO HR FULLVIEW 3D 17x18 CEPH

Pola obrazowania: standardowe + rozszerzone + maksymalne

(17x10, 17x14, 17x18)

cena: 339 000 PLN (rata 4910 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBRAZY	2D	3D
Typ	PAN (Adult, Child), BITEWING, DENT, SIN (Cent, L, R), TMJ (Front, Lat), CEPH (Lateral, AP-PA, Carpus)	MODEL, DENT,SIN, TMJ, AIR, MAXILLO, EAR, SPINE (Cervical)
(Maksymalna) teoretyczna rozdzielczość	PAN: 5.6 lp/mm (pixel 79 µm) BW: 7.6 lp/mm (pixel 66 µm) CEPH: 5.7 lp/mm (pixel 88 µm)	CBCT: 7.4 lp/mm (voxel 68 µm)
Dostępne rozmiary pola obrazowania: (dorosłych i dzieci) (średnica) x (wysokość) w cm	PAN STD: 23.2x12.0 cm PAN CHILD: 17.8x10.7 cm DENT (Full): 13.9x9.3 cm BITEWING: 17.3X6.4 cm CEPH LL (full skull): 25.5x19.6 cm	STANDARDOWA KONFIGURACJA: 6x6; 8x6; 8x8; 10x6; 10x10; 11x8; 13x6; 13x10 ROZSZERZONA KONFIGURACJA: 13x16, 15x6, 15x10, 15x16 MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 17x10, 17x14, 17x18 TRYB ENDO: 4x4, 5x4 TRYB TMJ: 15x6, 15x10 TRYB KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO I UCHA ŚRODKOWEGO: 7x6, 9x9, 9x16
Czas skanowania (typowy)	PAN: 13.9 s (Ortho); 11.8 s (Standard); 6.0 s (Quick); 5.0 s (Sin R/L) CEPH LL: Long 9.02s (Standard); Long 5.14 s (Quick)	Super HD: 24s Standard: 14.4s QuickScan: 6.4s
INSTALACJA		
Waga (kg)	2D podstawowe urządzenie: 152 kg 3D podstawowe urządzenie: 155 kg Ramię CEPH z sensorem: 20 kg	
GENERATOR RTG		
Typ generatora	Stałonapięciowy (DC)	
Napięcie anodowe i prąd anodowy	60-90 kV; 2-16 mA	
Ognisko	0.5 mm (IEC 60336)	
ZASILANIE		
Napięcie Częstotliwość	115 – 240 V jednofazowe 50 / 60 Hz	
Maksymalne, chwilowe skoki napięcia	20A przy 115V; 12A przy 240V	
Pobór prądu w trybie oczekiwania	Około 2 A przy 115 V; Około 1 A przy 240 V	
Metoda regulacji	Automatyczna adaptacja napięcia/częstotliwości	
DETEKTOR	2D (PAN & CEPH)	3D
Typ detektora	CMOS (CsI) lub Direct Conversion (DC ^{III})	IGZO 3D
ERGONOMIA		
Ustawianie pacjenta	Sugestia z wirtualnego panelu sterowania - Pozycjonowanie wspomagane serwomechanizmem, 3 linie laserowe (klasa 1 – IEC 60825-1) - Podgląd 3D Scout View - Kamery pozycjonujące (opcjonalnie)	



Monitor EIZO RadiForce MX243W

Monitor medyczny o przekątnej 24,1" i funkcją kalibracji zgodną ze standardem DICOM Part 14, przeznaczony do wyświetlania obrazów cyfrowych w kolorze i skali szarości na potrzeby diagnozowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Może być wykorzystywany m.in. do przeglądania obrazów diagnostycznych w technikach obrazowania medycznego takich jak TK i MRI. Optymalne wyświetlanie obrazów medycznych DICOM w skali szarości:



Cena monitora: 6000 PLN

- monitor medyczny klasy I,
- optymalne wyświetlanie obrazów medycznych DICOM w skali szarości,
- kalibracja zgodna ze standardem DICOM Part 14, zapewniająca wiarygodne wyświetlanie obrazów z upływem czasu,
- podświetlenie LED gwarantujące niskie zużycie energii i długą żywotność ekranu,
- szeroki ekran do wydajnej pracy,
- minimalne zmiany koloru i kontrastu przy patrzeniu na ekran z boku,
- automatyczna stabilizacja jasności,
- jednolita jasność na całej powierzchni ekranu,
- płynne gradacje – ponad miliard wyświetlanych kolorów,
- predefiniowane tryby pracy do wyświetlania obrazów endoskopowych, CR, CT i MRI.

NEWTOM VGI EVO - pole obrazowania 19x24 cmDostępne z
easycheck**Małe wymiary
– DUŻE MOŻLIWOŚCI**

NEWTOM VGI EVO to czwarta generacja tomografów z serii VGI, które charakteryzują się stosunkowo małymi wymiarami i bardzo wysoką jakością obrazu oraz dużym polem obrazowania. W przedstawianym modelu zastosowano innowacyjny detektor pozwalający na wykonanie pełnego skanu 3D o rozmiarach 24x19 cm przy czasie emisji promieniowania poniżej 1 sekundy.

NEWTOM VGI EVO jako pierwszy tomograf CBCT został wyposażony w funkcję CineX, która umożliwia wykonywanie skopii. Dzięki temu możliwe jest nagranie filmu video z prześwietlenia w trakcie gdy pacjent np. gryzie lub przełyka. Tak nagrany film umożliwia bardzo dokładną ocenę pracy stawów skroniowo-żuchwowych lub pracy przełyku.

Główne cechy tomografu**NEWTOM VGI EVO:**

- zdjęcia wstępne ułatwiające ustawienie pacjenta,
- automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od przezierności tkanek na promieniowanie,
- 16-bitowy detektor (pozyskuje 65 536 odcieni szarości na każdej klatce obrazu),
- obrotowa anoda o bardzo niewielkim ognisku 0,3 mm, które zapewnia wysoką jakość obrazu,
- napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV gwarantujące odpowiednią przenikliwość promieniowania i redukcję zakłóceń od tkanek miękkich,
- 10 różnych obszarów obrazowania podczas jednego obrotu od 19x24 do 5x5 cm,
- czas emisji promieniowania podczas badania 0,9–4,3 s,
- funkcja CineX umożliwiająca nagrywanie filmów z prześwietlenia do 36 sekund,
- funkcja Sharp 2D umożliwia wykonanie podczas jednego badania projekcji panoramicznych oraz cefalo,
- możliwość integracji z systemem PACS i drukarką 3D,
- współpraca z oprogramowaniem do planowania implantacji oraz zabiegów ortognatycznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM VGI EVO

Źródło promieniowania	generator wysokiej częstotliwości, obrotowa anoda			
Ognisko	0,3 mm			
Kontrola ekspozycji	SafeBeam™ - redukovanie promieniowania w zależności od budowy ciała pacjenta			
Sensor	typu Flat Panel z bezpostaciowym krzemem (amorphous silicon)			
Odcienie szarości	16-bit (65 536 odcieni szarości)			
Czas skanu 3D	15 sek. (typowy)			
Czas emisji promieniowania	0,9-4,3 sek.			
Rodzaj obrazowania 3D	pojedynczy skan w technologii wiązki stożkowej (Cone Beam), obrót 360°			
Dostępne pola obrazowania:	tryb skanowania 3D			
średnica x wysokość	Standard	HiRes	Eco	Boosted
24 x 19 cm	●		●	●
16 x 16 cm	●		●	●
15 x 12 cm	●		●	●
15 x 5 cm	●	●	●	●
12 x 8 cm	●	●	●	●
10 x 10 cm	●	●	●	●
10 x 5 cm	●	●	●	●
8 x 8 cm	●	●	●	●
8 x 5 cm	●	●	●	●
5 x 5 cm	●	●	●	●
Możliwy rozmiar woksela - Standard	200-300 µm			
Możliwy rozmiar woksela - HiRes	100-150 µm			
Czas rekonstrukcji	poniżej minuty			
Skanowanie w trybie Sharp 2D	pantomogram oraz Cefalo (AP/PA/LL). Czas emisji 2,4 sek.			
Prześwietlenie w trybie CineX	zdjęcia seryjne w czasie 1-36 sek. przy polu 17x19 cm			
Pozycja pacjenta	stojąca, siedząca, siedząca na wózku inwalidzkim			
Waga	jednostka skanująca 377 kg, skrzynka sterująca 95 kg			
Oprogramowanie	NNT™			
Zasilanie	15A @ 100/115V~, 12.5A @ 200V~, 10A @ 220/230/240V~, 50/60Hz			



NEWTOM VGI EVO

tomograf komputerowy CBCT
 pracujący w pozycji wertykalnej

cena promocyjna: 490 000 PLN
 (rata 7100 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

NEWTOM 5G XL - pole obrazowania 21x19 cm

Dostępne z
easycheck


Najwyższa jakość obrazu przy maksymalnej użyteczności

NewTom 5G XL może być stosowany zarówno w stomatologii, jak i laryngologii, ortopedii czy weterynarii.

Pozycja leżąca pacjenta zmniejsza ryzyko powstania artefaktów ruchowych oraz niweluje konieczność unieruchomienia pacjenta. Jest to istotne w przypadku pacjentów niewspółpracujących, nieprzytomnych lub z urazami w obrębie twarzoczaszki.

Dzięki konstrukcji zbliżonej do konwencjonalnego tomografu, można wykonać tomografię kończyn na potrzeby ortopedii lub stosować urządzenie do badania zwierząt pod narkozą na potrzeby weterynarii.

Model 5G XL został wyposażony w innowacyjne opcje wykonywania klasycznych zdjęć RTG, które można używać do wykonania zdjęcia pod konkretnym kątem (np. RTG nadgarstka, stopy, kolana) lub połączyć je w film wideo z prześwietlenia (np. aby prześledzić pracę stawów skroniowo-żuchwowych podczas otwierania i zamykania ust).



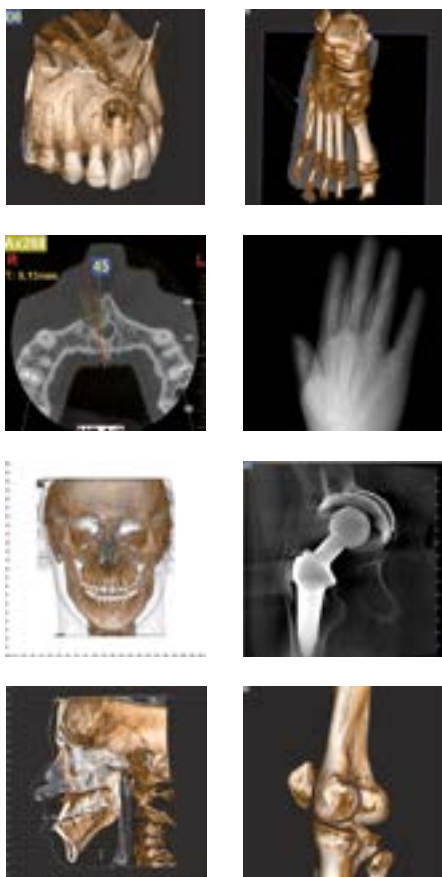


Główne cechy tomografu NewTom 5G XL:

- zdjęcia wstępne ułatwiające pozycjonowanie pacjenta,
- możliwość pozycjonowania za pomocą komputera (nie wymaga podchodzenia do aparatu),
- automatyczny dobór parametrów ekspozycji w zależności od przezierności tkanek na promieniowanie,
- 16-bitowy detektor (pozyskuje 65 536 odcieni szarości na każdej klatce obrazu),
- obrotowa anoda o ogniskowej 0,3 mm gwarantująca wysoką jakość obrazu,
- napięcie na lampie rentgenowskiej 110 kV gwarantuje odpowiednią przenikliwość promieniowania i redukcję zakłóceń od tkanek miękkich,
- 10 różnych obszarów obrazowania podczas jednego obrotu od 21x19 do 6x6 cm,
- możliwość łączenia skanów – maksymalny obszar obrazowania 22x15 cm,
- pełna tomografia przy minimalnym czasie ekspozycji 0,9 s, (maksymalny czas ekspozycji: 5,4 s)
- funkcja CineX - możliwość wykonywania i nagrywania poklatkowych zdjęć RTG z dowolnego kąta (skopia),
- funkcja Ray2D – możliwość wykonywania klasycznych zdjęć RTG,
- możliwość integracji z systemem PACS i drukarką 3D,
- współpraca z oprogramowaniem do planowania implantacji oraz zabiegów ortognatycznych (np. Dolphin 3D, Dolphin 3D Surgery).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM 5G XL

Źródło promieniowania	generator wysokiej częstotliwości, obrotowa anoda			
Ognisko	0,3 mm			
Kontrola ekspozycji	SafeBeam™ - redukowanie promieniowania w zależności od budowy ciała pacjenta			
Sensor	typu Flat Panel z bezpostaciowym krzemem (amorphous silicon)			
Odcienie szarości	16-bit (65 536 odcieni szarości)			
Czas skanu 3D	18 sek. (typowy)			
Czas emisji 3D	0,9-5,4 sek. (pojedynczy skan)			
Uzyskiwanie obrazów 3D	pojedynczy skan w technologii wiązki stożkowej (Cone Beam), obrót 360°			
Pole obrazowania (FOV):	tryb skanowania			
średnica x wysokość	Standard	HiRes	Eco	Boosted
21 x 19 cm	●		●	●
18 x 16 cm	●		●	●
15 x 22 cm eFOV	●		●	●
15 x 12 cm	●		●	●
15 x 5 cm	●	●	●	●
15 x 8 cm	●	●	●	●
10 x 10 cm	●	●	●	●
10 x 5 cm	●	●	●	●
8 x 8 cm	●	●	●	●
8 x 5 cm	●	●	●	●
6 x 6 cm	●	●	●	●
Możliwy rozmiar woksela - Standard	200-300 μm			
Możliwy rozmiar woksela - HiRes	100-150 μm			
Czas rekonstrukcji	poniżej minuty			
Uzyskiwanie obrazu Ray2D	radiografia cyfrowa (pojedynczy strzał, pozycja wybierana przez użytkownika)			
Uzyskiwanie obrazu CineX	radiografia pokłatkowa (1-36 s), pole widzenia 18 x 19 cm (szerokość x wysokość)			
Pozycja pacjenta	siedząca lub leżąca, na wznak, na brzuchu, poz. czasz.-ogon. lub ogon.-czasz.			
Waga	660 kg			
Oprogramowanie	NNT™			
Zasilanie	15A @ 100/115 V~, 12A @ 200 V~, 10A @ 220/230 V~, 8A @ 240 V~, 50/60Hz			

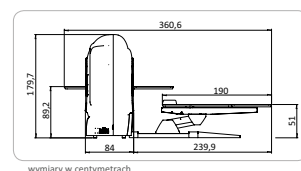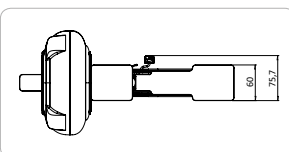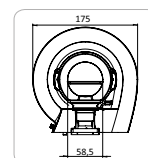

wymiary w centymetrach



NEWTOM 5G XL (wersja DENT) tomograf komputerowy CBCT

cena katalogowa: 740 000 PLN


cena promocyjna: 650 000 PLN
(rata 9400 PLN*)

Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Zobacz więcej Perfekcyjna tomografia

NewTom 7G jest ewolucją pierwszego na świecie tomografu CBCT, którym był model NewTom 9000. Budowę przypomina klasyczny tomograf CT, co daje podobne możliwości – wykonywanie badań w obszarze całego ciała człowieka. W porównaniu z klasycznym tomografem CT, tomografy CBCT cechuje wyższa rozdzielczość, cieńsza warstwa i znacznie mniejsza dawka promieniowania. NewTom 7G doskonale sprawdzi się w stomatologii, chirurgii szczękowotwarzowej, laryngologii, ortopedii oraz przy zastosowaniach weterynaryjnych.

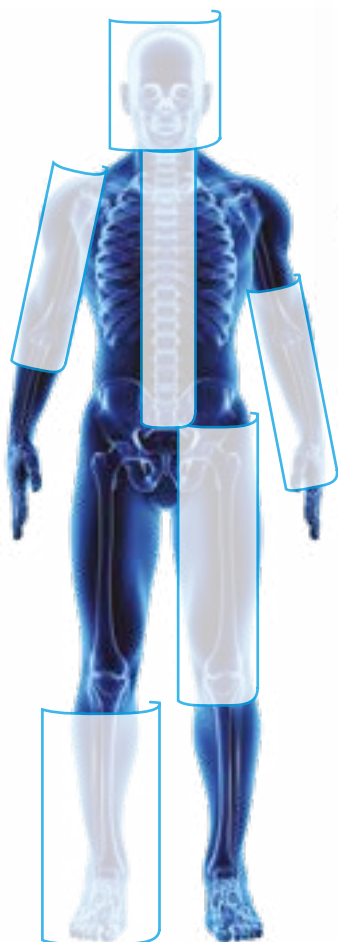

Główne cechy tomografu NewTom 7G:

- pola obrazowania od 4×4 do 29×56 cm w zależności od wersji [średnica x wysokość],
- funkcja Ray2D umożliwiającą wykonywanie statycznych zdjęć RTG 2D dużego obszaru pod różnymi kątami przy minimalnej dawce promieniowania,
- funkcja CineX pozwalającą na nagrywanie dynamicznych badań RTG,
- możliwość wykonania jednego badania dla kompletnej diagnostyki zębów, zatok, stawów skroniowo-żuchwowych, ucha środkowego, dróg oddechowych,
- możliwość generowania pantomogramów i zdjęć cefalometrycznych z tomografii,
- symulacja osadzenia implantów zębowych,
- obliczanie objętości dróg oddechowych,
- czas naświetlania od 1,4 s dla ekstremalnie niskiej dawki.

NEWTOM 7G



ULTRASZCZEGÓŁOWA MULTIDIAGNOSTYKA

Analiza całego ciała.
Obrazowanie 2D i 3D
do 90 μ m, również
ze środkiem kontrastującym.
Redukcja artefaktów
i analiza ruchu.



DOSKONAŁOŚĆ TECHNOLOGII

Generator dużej mocy
(120 kV – 20kW).
Wysoka czułość panelu
3D. Innowacyjne
algorytmy rekonstrukcji
wolumetrycznej.



ERGONOMIA I PRAKTYCZNOŚĆ

Stół w pełni napędzany silnikiem.
10-calowe ekrany dotykowe,
przód i tył. Zoptymalizowany
transfer badań do
certyfikowanego oprogramowania
NNT z przetwarzaniem,
udostępnianiem (RIS/PACS).



MAKSYMALIZACJA KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW

Pacjenci przyjmują
wygodną pozycję na stole.
Dawki promieniowania są
zawsze proporcjonalne
do budowy pacjenta
oraz rodzaju badania.

STOMATOLOGIA, IMPLANTOLOGIA I CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA







Analiza stomatologiczno-szczękowo-
twarzowa oraz obustronne badanie TMJ.
Podwójny widok i analiza symetryczna
stawów skroniowo-żuchwowych. Funkcja
Sharp 2D - tworzy zbiór danych składający
się z obrazów: panoramicznego oraz
bocznego i przednio-tylnego do analizy
CEPH. Chirurgia szczękowo-twarzowa,
planowanie z symulacją implantu
i kontynuacją pooperacyjną.

OTORYNOLARYNGOLOGIA

Analiza objętości ucha i dróg oddechowych.
Dynamiczne badanie ucha wewnętrznego
wzdłuż płaszczyzn nieortogonalnych
w celu zdiagnozowania chorób łańcucha
pęcherzykowego, strzemiączki platina,
kanałów półkolistych oraz przyległych
struktur. Pozycja leżąca pomaga w badaniu
dróg oddechowych i bezdechu sennego.
Oprogramowanie NNT zawiera specjalny
przyrząd do oceny pełnej objętości
w każdym z diagnozowanych badań.

ORTOPEDIA


Badanie kostno-stawowe z widokiem
wielopłaszczyznowym. Oprócz diagnozy
ramienia, biodra, kręgosłupa, małych
kości i stawów, NewTom 7G można
wykorzystać do oceny kończyn. Urządzenie
pozwala również badać stawy w ruchu.
Zaawansowane funkcje oprogramowania
NNT zapewniają dostęp do kompleksowych
raportów. Dostępna jest funkcja analizy
TT-TG w przypadku analizy patologii urazu
kości udowej i rzepek.

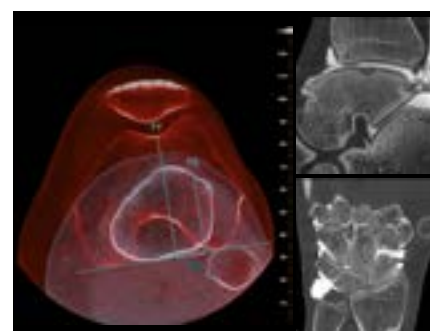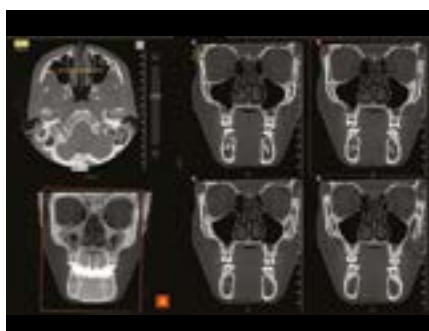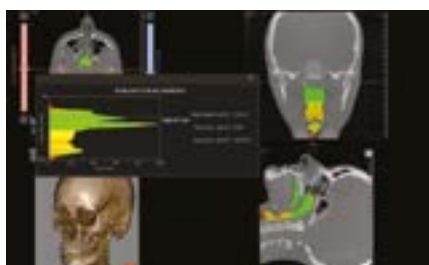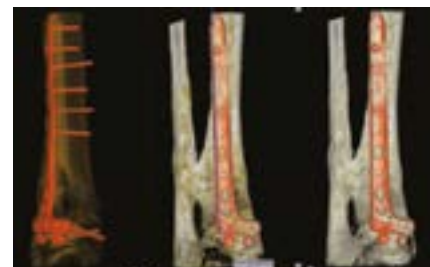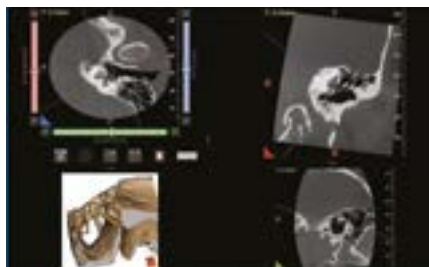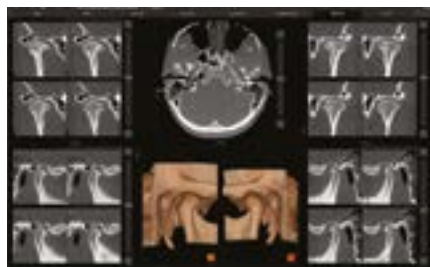

NEWTOM 7G WETERYNARIA

WYBIERZ PERFEKCYJNĄ DOKŁADNOŚĆ

NewTom 7G charakteryzuje zautomatyzowana praca i możliwość dostosowywania protokołów. Korzystaj z zaawansowanych funkcji oprogramowania do przetwarzania obrazu.

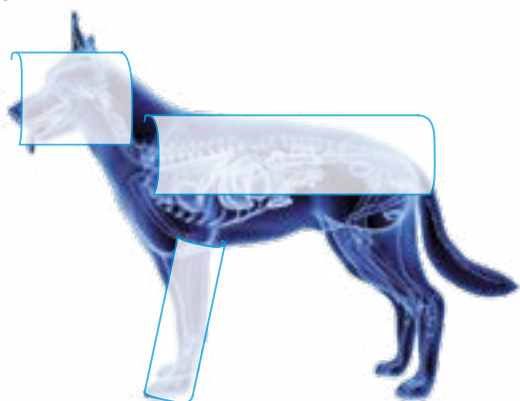

Automatyzmy, oferowane przez NewTom 7G usprawniają pracę oraz ograniczają zniekształcenia, które mogą pojawić się w procedurze ręcznej.

Wprowadzone algorytmy zapewniają w ten sposób najlepsze wyniki w możliwie najkrótszym czasie. Konsole i ekrany dotykowe, w które wyposażone jest urządzenie, wspomagają proces wyrównania pacjenta, jak również wybór parametrów naświetlania oraz pola obrazowania. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania protokołów do konkretnej potrzeby diagnostycznej.

Zaawansowana funkcjonalność oprogramowania NNT zapewnia praktyczność diagnostyczną dla kilku specjalizacji medycznych. Dedykowane okna z łatwym dostępem do rekonstrukcji odpowiadają na potrzeby współczesnej diagnostyki. Wszystkie badania są w pełni kompatybilne z formatem DICOM, mogą być udostępniane przez NNT Viewer lub drukowane w skali 1:1.




NNT: KONFIGUROWALNE I INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE Z DEDYKOWANYM INTERFEJSEM VET

Lekarze mogą uzyskać dostęp do określonych protokołów oraz widok zgodnie z konkretnymi obszarami ciała i wymaganiami diagnostycznymi. Możliwe jest również zaprogramowanie ustawień osobistych do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie.


PANORAMICZNE OBRAZOWANIE STOMATOLOGICZNE

Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja, a także dedykowany interfejs do badania łuków zębowych generuje przekroje poprzeczne i rekonstrukcje osiowe oraz tworzy obrazy porównywalne do panoramicznych badań stomatologicznych. Może również tworzyć konkretne rekonstrukcje dla płaszczyzny czołowej oraz strzałkowej. Dla wszystkich tych obrazów, grubość, jasność i kontrast mogą być ustawiane niezależnie.

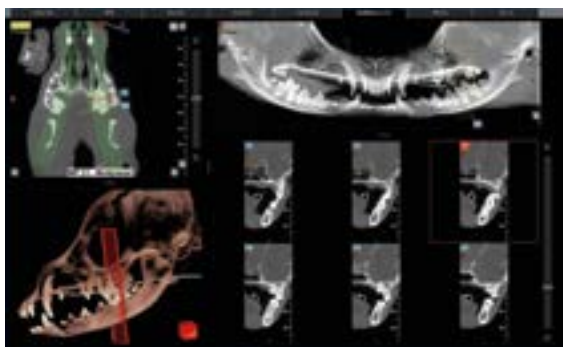


RAPORTOWANIE WIELOPŁASZCZYZNOWE

W zakładce "SLICE" mamy dostęp do danych w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej lub czołowej. Pozwala to na zmianę objętości i orientacji w poszczególnych badaniach - niezależnie na każdej z osi, a także do ustawienia grubości poszczególnych przekrojów. Zaawansowane funkcje NNT ułatwiają raportowanie dzięki szczególnym opcjom przetwarzania i udostępniania danych dla różnych specjalności medycznych. Analiza wielopłaszczyznowa ze spersonalizowaną orientacją umożliwia ocenę obszarów ciała na podstawie badania analizowanego pod różnymi kątami.

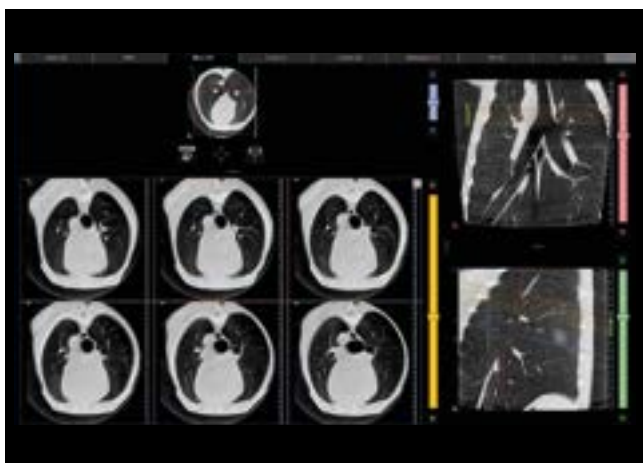

WIDOK I PORÓWNANIE DWUSTRONNE

Oprogramowanie NNT posiada dedykowane okno do obrazowania dwustronnego struktur kostnych, takich jak stawy skroniowo-żuchwowe i mniejsze stawy. Okno podglądu pokazuje obraz osiowy w środku oraz dedykowane rekonstrukcje dla lewej i prawej strony. W dolnym obszarze centralnym wyświetlane są renderingi 3D.

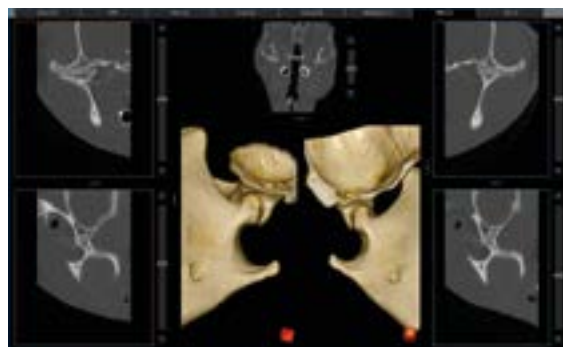

ANALIZA 3D

Prosty interfejs wyświetlacza 3D umożliwia komunikację z właścicielami zwierząt domowych znacznie łatwiej, pozwalając na jasne przedstawienie stanu pacjenta nawet dla osób, które nie są zaznajomione z obrazowaniem radiologicznym. Urządzenie umożliwia na oddzielne lub nałożone obrazowanie tkanek miękkich i tkanek kostnych. Pomiar 3D, symulacja przebiegu dróg oddechowych, narzędzia do cięcia badania w różnych płaszczyznach są również dostępne w celu uzyskania przekrojów objętościowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NEWTOM 7G

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA				
Typ	Generator wysokiej częstotliwości (stały potencjał DC), obrotowa anoda, lampa rentgenowska 20 kW (moc znamionowa)			
Ognisko	0,3 mm - 0,6 mm (IEC 60336)			
Pełna filtracja	21 mm Al eq. @ 70kV (w tym filtracja własna 1 mm Al eq). @ 70kV			
Napięcie na anodzie	70 - 120 kV (zmieniany co 10 kV)			
Bieżące napięcie na anodzie	Ognisko 0.3 mm → 5 - 54 mA (zmieniany co 1 mA) Ognisko 0.6 mm → 55 - 120 mA*(zmieniany co 1 mA) *Maksymalne kV dostępne do użycia może się różnić w zależności od mA			
Maksymalna ciągłość wejściowej mocy anody	120W (120kV; 5mA; 8ms; 17x17; REGULAR)			
SENSOR				
Technologia	Amorficzny silikonowy "flat panel" (Csl)			
Rozmiar piksela	154 μm			
Zakres dynamiki	16 bit (65,536 poziomów szarości)			
POZYSKIWANIE OBRAZÓW 3D				
Obszary anatomiczne w diagnostyce Dorosły - Dziecko	Szyja, głowa: kompleks zębowo-szczękowo-twarzowy, zęby, górna i dolna szczęka, staw skroniowo-żuchwowy (TMJ), ucho, nos i gardło, kręgosłup szyjny. Ciało: odcinki kręgosłupa, kończyny górne (w tym ramię), kończyny dolne (w tym biodro).			
Technologia skanu	Cone Beam TC - Częściowy lub całkowity obrót (360°)			
Kontrola ekspozycji	• Tryb ręczny: wybór parametrów (± 10 kV, ± 1 mA) • Automatyczny tryb SafeBeam™ dostosowuje współczynniki ekspozycji na podstawie budowy ciała pacjenta i obszaru anatomicznego			
Protokół skanowania - dla każdego FOV	Niska dawka (Eco)	Regularny	Podwyższony	Wysoka jakość
Czas skanowania	7,2 s - 10 s	14,4 s	14,4 s - 18 s	19,2 s - 26 s
Czas emisji	1,4 s - 4,6 s	2,8 s - 6,1 s	2,8 s - 6,1 s	3,8 s - 8,8 s
Badanie CBCT	WERSJA STANDARDOWA		WERSJA PLUS	
Dostosowanie FOV (φ) x (H)	ZAWIERA		DODANE	Dodatkowa funkcjonalność
Dodatkowe rozszerzenie FOV	17 x 32* cm	13 x 12 cm	29 x 30* cm	29 x 56* cm
	17 x 22* cm	13 x 8 cm	29 x 17 cm	29 x 43* cm
	17 x 17 cm	13 x 6 cm	29 x 12 cm	21 x 56* cm
	17 x 12 cm	10 x 10 cm	24 x 30* cm	21 x 43* cm
	13 x 32* cm	8 x 8 cm	24 x 17 cm	17 x 62* cm
	13 x 17 cm	8 x 6 cm	21 x 30* cm	17 x 47* cm
	15 x 6 cm	6 x 6 cm	21 x 17 cm	13 x 62* cm
	-	4 x 4 cm	-	13 x 47* cm
Rozdzielczość woksela	Zmienna zgodnie z używanym protokołem skanowania (od 90 μm do 500 μm)			
Czas rekonstrukcji	Mniej niż 1 minuta			
POZYSKIWANIE OBRAZÓW 2D				
Funkcje	Ray2D	CineX	Cine-Scout	
Typ	Pojedyncze zdjęcie rentgenowskie do analizy statycznej	Multi-Shot X-ray, zmienny czas trwania dla analizy dynamicznej		
Opis	Odpowiednik Scout View	Zdalne wykonanie z repozycjonowaniem scout image	Rozpoczęcie badania i wyświetlenie na urządzeniu za pomocą sterowania nożnego i monitora	
Odległość pomiędzy źródłem a odbiornikiem	Fixed 980 mm			
Kąt ekspozycji	Zmienna ±5° (pozycja może być wybrana przez użytkownika)			
Rozmiar (FOV)	30 cm x 30 cm (17 cm x 17 cm)			
Czas skanu	0,015 - 0.6 s	1-36 s @ 25fps	1-36 s @ 12fps	
Czas emisji	0,015 - 0,6 s	0,25 - 9 s	0,18 - 6,48 s	
Automatyczna kontrola ekspozycji	Ręczny wybór parametrów (± 10 kV, ± 1 mA, ±Δt Czas Ekspozycji)	Automatic SafeBeam™	Ręczny wybór parametrów (± 10 kV, ± 1 mA, ±Δt Czas Ekspozycji)	
Maksymalne obciążenie X-ray	72 mAs	777 mAs		
Format obrazu	DICOM / JPEG	DICOM / AVI	DICOM / AVI	
ZASILANIE				
Napięcie/Częstotliwość	230 V ~ (± 10%) 50/60 Hz (± 1%)			
Maksymalna absorpcja mocy	16 A			
Pobór prądu	2 A (tryb stand by)			
Uwagi	Zasilanie inne niż wskazane wymaga użycia adaptera/przetwornicy (brak w zestawie)			

ERGONOMIA

Gantra	Otwór 77 cm (30")
Konsola	2 lub 4 10-calowe pełne ekrany dotykowe, które można ustawić w prawo lub w lewo, z przodu lub z tyłu
Wybór badania	Protokoły można personalizować za pomocą konsoli na komputerze lub ze stacji roboczej PC
Stół pacjenta	220 cm długości, 45 cm szerokości (z miękkim składanym materacem)
Obciążenie stołu pacjenta	215 kg (200 kg pacjent + 15 kg dodatki)
Ustawienie pacjenta	Badania mogą być wykonywane z pacjentem leżącym lub siedzącym z tyłu z wyborem pozycji z konsoli (z głową lub stopami skierowanymi do przodu)
Wyrównanie pacjenta	Wspomaganie: + 3 lasery (klasa 1 - IEC 60825-1) - 3D: 4x Scout View ; Pakiet XF: 4x Scout View - Cinex: 1 ScoutView
Komfort pacjenta	Miękka poduszka pod głowę i opaski stabilizujące oraz inne dedykowane podpory radioprzezroczyste. Zagłówki można regulować w zakresie od 0 do 45°, z podparciem z włókna węglowego i poduszką.
Sterowanie	Sterowanie stołem pacjenta z poziomu konsoli. 3-osiowe, 2-prędkości. Sterowanie: Wzdłużnie: 0 cm - 148 cm Pionowo: 57,5 cm - 88 cm Boczne: -10,8cm - +10,8 cm
Pozostałe funkcje	System monitorowania pacjenta z kamerami wideo i intercomem do obserwacji i komunikacji ze zdalnego stanowiska pracy
Dostępne języki	Wiele języków: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, grecki, polski, fiński, szwedzki, duński, czeski, bułgarski, węgierski, turecki, litewski, ukraiński, rosyjski, chiński.


ŁĄCZNOŚĆ

Połączenie	LAN / Ethernet
Oprogramowanie	NewTom NNT (zgodny z ISDP©10003:2018 zgodnie z EN ISO/IEC17065:2012 - numer certyfikatu 2019003109-1) oraz iPad NNT viewer app (darmowy), STL (RealGUIDE)
Wspierane protokoły	DICOM 3.0, TWAIN, VDDS, CLOUD sharing (RealGUIDE)
DICOM nodes	Zgodność z IHE (Moduł Wydruku; Przekazanie do przechowywania; Dokument SR; Lista robocza MPPS; Pobieranie zapytań)

WYMAGANIA INSTALACYJNE

Elementy	Tomograf	Stół pacjenta
Maksymalne wymiary (dł. x gł. x wys.) razem z opcjonalnymi komponentami	2050 mm x 1070 mm x 2083 mm - (80,7" x 42" x 82")	2200 mm x 888 mm x 895 mm - (86,6" x 34,9" x 35,2")
Wymiary opakowania (L x D x H)	2200 mm x 1417 mm x 2207 mm - (87" x 56" x 87")	2450 mm x 1130 mm x 1100 mm - (96,5" x 44,5" x 43,5")
Waga z opakowaniem	1020 kg (2249 lb)	590 kg (1300 lb)
Dodatki	Cine-Scout Pack (monitor i sterowanie nożne w celu potwierdzenia emisji promieniowania na urządzeniu)	
Minimalne zapotrzebowanie na miejsce	Wymiar rzeczywisty: 3938 mm x 2050 mm (155" x 80.7") Pomieszczenie: 5000 mm x 4000 mm (w przypadku serwisu wymagany dostęp do urządzenia)	
Całkowita waga zainstalowanego urządzenia w komplecie z opcjonalnymi komponentami	1050 kg (2315 lb) wywierane na podłogę w miejscu instalacji urządzenia - określony powyżej	

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

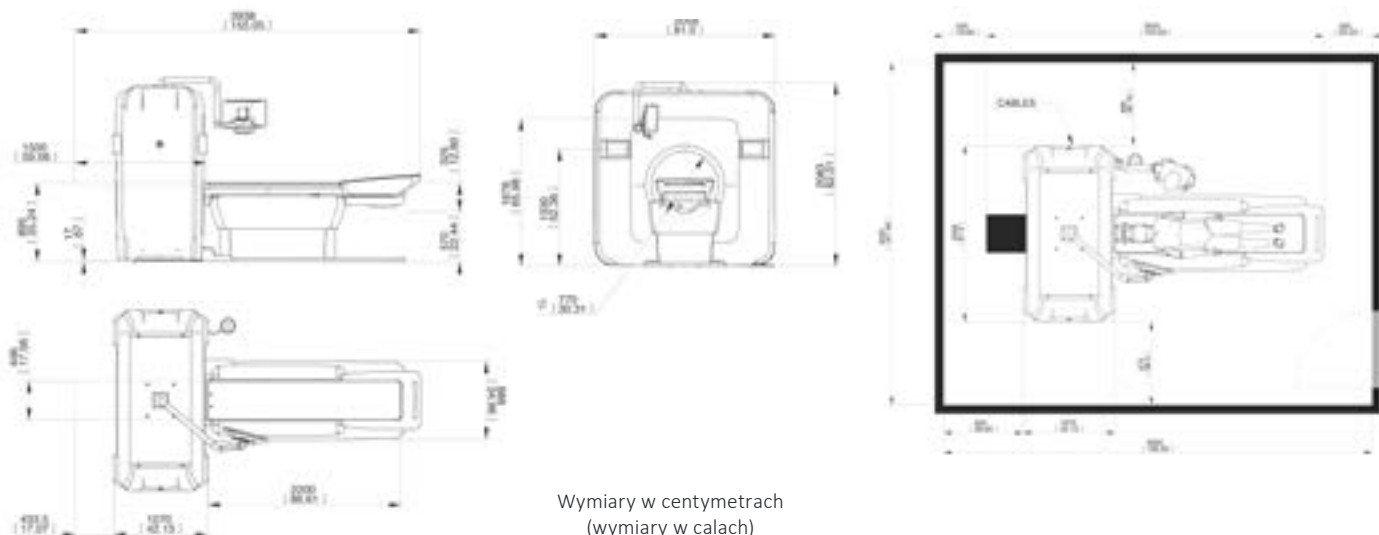

NEWTOM 7G

Wersja STANDARDOWA

cena promocyjna: 750 000 PLN (rata 10850 PLN*)

Wersja PLUS

cena promocyjna: 790 000 PLN (rata 11430 PLN*)



Cena zawiera 2 lata gwarancji oraz 2 lata kontraktu serwisowego

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

Oprogramowanie NeoWise

2D Viewer Możliwość jednoczesnego przeglądania i porównywania wielu obrazów 2D i 3D dowolnego typu zgodnego z przeglądarką. Usprawnia to porównywanie informacji klinicznych i zwiększa możliwości diagnostyczne.

Potężne narzędzia AI, takie jak opatentowana segmentacja anatomiczna i patologiczna zarówno dla obrazów panoramicznych, jak i zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych, stanowią cenne wsparcie dla analiz klinicznych.

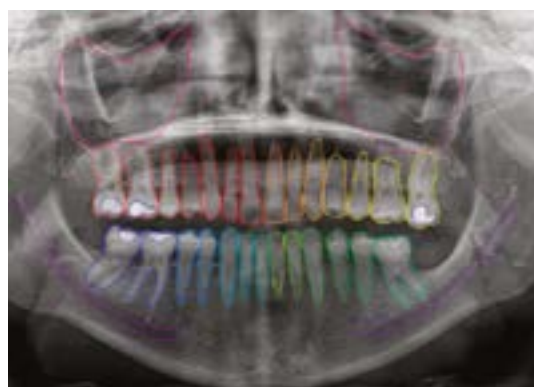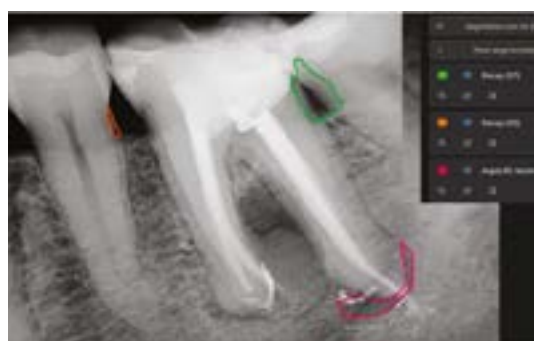

3D Viewer Kompleksowe łączenie danych 3D umożliwia połączone wyświetlanie skanów CBCT,

Facescan i skanów wewnątrzustnych. Specjalne widoki dla endodoncji, implantologii i analizy stawu skroniowo-żuchwowego.

Narzędzie do segmentacji służące do tworzenia modeli powierzchni zębów i modeli łuków.

Śledzenie kanałów korzeniowych, umieszczanie implantów, ocena kąta wprowadzenia i podgląd efektów estetycznych wraz z względną symulacją koron dentystycznych.





3D Viewer

Praktyka oparta na sztucznej inteligencji optymalizuje przepływ pracy, oferując funkcje umożliwiające śledzenie nerwu żuchwowego i łuku panoramicznego, automatyczne dopasowywanie skanu wewnątrzustnego i CBCT oraz segmentację elementów anatomicznych w CBCT.



CEFALOMETRIA Moduł cefalometrii wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego identyfikowania punktów cefalometrycznych i przeprowadzania szczegółowej analizy w zaledwie kilka sekund.



Projekty Osłon Stałych

Jest to dokument dla pracowni RTG lub gabinetu, w którym funkcjonować będzie aparat rentgenowski. Zamieszczone są w nim informacje dotyczące pomieszczeń wraz z opisem osłon stałych takich jak: stropy, ściany, okna i drzwi oraz zasad związanych z ochroną radiologiczną pacjentów i personelu. Projekt Osłon Stałych musi być obligatoriamente zatwierdzony przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006, Dz. U. Nr 180 poz. 1325). Jest on wykonywany również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu lub pracowni RTG.



Mariusz Bożek
Kierownik Komórki
Ochrona Radiologiczna
Inspektor radiologiczny

22 439 95 58
mariusz.bozek
@sternweber.pl

Szkolenia radiologiczne

Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne naszym klientom. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie obsługi oferowanych przez nas urządzeń, zapraszamy do kontaktu z dedykowanym trenerem odpowiedzialnym za szkolenia radiologiczne. Szkolenia są organizowane zarówno w siedzibie Stern Weber Polska jak i na życzenie u klienta w gabinecie.



Maksymilian Gasiński
Elektroradiolog

536 864 610
maksymilian.gasinski
@sternweber.pl

System Zarządzania Jakością

Jest to zbiór dokumentów wymaganych przez Sanepid podczas kontroli oraz w celu uzyskania zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich (Dz. U. 2021 poz. 1667 oraz Dz. U. 2026 poz. 1). Każdy gabinet lub pracownia rentgenowska musi posiadać ustanowiony i wdrożony Program Zapewnienia Jakości wraz z procedurami i instrukcjami, stanowiącą podstawowe źródło informacji o funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej.



Alicja Brylińska
Specjalista ds. Ochrony
Radiologicznej

22 456 70 10
alicja.brylinska
@sternweber.pl

Co to są testy podstawowe?

Testy podstawowe wykonywane powinny być z częstotliwością określoną przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. poz. 2759). Głównym ich celem jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia, w okresie pomiędzy testami specjalistycznymi, oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość badań RTG. Testy podstawowe urządzeń radiologicznych są wykonywane przy użyciu fantomów, przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia do obsługi urządzeń radiologicznych.

TESTY SPECJALISTYCZNE

LABORATORIUM BADAWCZE STERN WEBER POLSKA AB 1541

Dlaczego należy wykonywać Testy Specjalistyczne?

Testy specjalistyczne to szereg testów, które w sposób jednoznaczny określają prawidłowość działania aparatu rentgenowskiego. W ich skład wchodzi testy pozwalające zarówno na ocenę działania lampy rentgenowskiej, jak również parametrów dotyczących geometrii wytwarzanej wiązki promieniowania. Testy te określają także, jaką dawkę pochłonie pacjent w trakcie badania.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym (Dz.U. poz. 2759), testy specjalistyczne aparatów RTG, należy przeprowadzać co najmniej raz w roku w przypadku aparatów do zdjęć panoramicznych, cefalometrycznych, CBCT, oraz raz na dwa lata w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych. Testom specjalistycznym podlegają również medyczne monitory opisowe stosowane w stomatologii. Testy monitorów należy wykonywać raz w roku. Testy Specjalistyczne RTG wykonywać mogą jedynie Laboratoria Badawcze posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025.

Pomiar mocy dawek

W celu uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatów RTG w stomatologii wymagany jest pomiar mocy dawek za osłonami pomieszczeń, w których będą funkcjonować. Usługę pomiarów oferujemy na terenie całego kraju.

Magdalena Klimek
Kierownik
Laboratorium Badawczego

722 027 222
22 439 95 59
magdalena.klimek
@sternweber.pl



Paweł Dziekański
Konsultant ds. technicznych

Testy Specjalistyczne

887 700 004
22 439 95 59
pawel.dziekanski
@sternweber.pl



AB 1541

FANTOM RTG DO TESTÓW PODSTAWOWYCH

Zestaw ProDent jest uniwersalnym zestawem fantomów do przeprowadzania testów podstawowych i akceptacji konwencjonalnych i cyfrowych aparatów RTG stomatologicznych (wewnątrzustnych, panoramicznych i cefalometrycznych).

Za pomocą zestawu ProDent można wykonać następujące badania:

- test powtarzalności ekspozycji / dawki
- rozdzielczość przestrzenna / rozdzielczość dla par linii (prostokątnych, równoległych i obróconych o 45° do linii anoda-katoda)
- rozdzielczość o niskim kontraście

ProDent Intra - urządzenia wewnątrzustne

cena brutto: **2163 PLN**

ProDent All - urządzenia wewnątrzustne, pantomograficzne, cefalometryczne

cena brutto: **3049 PLN**



TESTY PODSTAWOWE MOŻE WYKONYWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY PRACOWNIK GABINETU

NEWTOM VISIOSCAN

ERGONOMIA I DESIGN.

Jeden z najłżejszych
skanerów na rynku.
Poprawia komfort pacjenta
i ułatwia pracę lekarza.

Urządzenie zostało zaprojektowane z dbałością
o najwyższą jakość, co zapewnia niezawodność oraz
precyzyjne wyniki skanowania.

ULTRALEKKI
I WYTRZYMAŁY

Skaner jest wyjątkowo poręczny i łatwy w obsłudze, idealny do codziennej pracy stomatologicznej. Jego odporna na uszkodzenia obudowa gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

ENERGOOSZCZĘDNA
KONSTRUKCJA

Urządzenie w wersji bezprzewodowej może pracować przez 2 godziny na jednym ładowaniu, co pozwala na wykonanie około 60 skanów. Dzięki pojemnej baterii urządzenie może być używane przez cały dzień roboczy, a następnie można je umieścić w stacji ładującej. Skaner VisioScan WL został wyposażony również w baterię rezerwową, która pozwala na wydłużenie czasu pracy. Rączka urządzenia przechodzi w tryb uśpienia, gdy nie jest używana, co pomaga oszczędzać energię. Urządzenie natychmiast się aktywuje, gdy tylko zostanie podniesione.

ŻYROSKOP I DWA PRZYCISKI START/STOP

Funkcje i konstrukcja skanera VISIOScan umożliwiają częściową komunikację i obsługę oprogramowania bez fizycznego kontaktu z komputerem. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu go w żyroskop, który zapewnia szybszą obsługę taką jak przeglądanie, skalowanie i obracanie modeli. W prosty sposób można również uzyskać dostęp do ustawień w menu i innych opcji bez potrzeby dotykania komputera, co zapewnia bardziej higieniczny workflow. Dwustronny przycisk START/STOP umożliwia również płynne przełączanie między skanowanymi obszarami jamy ustnej, poprawiając komfort pracy stomatologa.



KOMFORT DLA PACJENTA I WYGODA DLA LEKARZA

Cały łuk zębowy można zeskanować w zaledwie 20 sekund, co sprawia, że czas skanowania jest krótki i dzięki temu komfortowy dla pacjenta. Do skanera zostały dołączone cztery różne końcówki w dwóch rozmiarach, co pozwala dostosować je do wielkości jamy ustnej pacjenta.

Kończówki skanera można bezpiecznie sterylizować w autoklawie, co gwarantuje najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa.



STACJA ŁADUJĄCA MOŻE BYĆ ZAWIESZONA NA ŚCIANIE

Stacja ładująca urządzenia VISIOScan WL może być zamocowana na ścianie. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

NEWTOM VISIOSCAN



Full Digital Workflow

ViSiOScan może integrować się z urządzeniami CBCT, co pozwala na tworzenie wirtualnych profili pacjentów, cyfrowe projektowanie uśmiechu, analizę zdrowia jamy ustnej oraz podnoszenie poziomu usług oferowanych przez placówkę.

Skaner wewnętrzny **NOWOŚĆ**

- Ultraszybkie skanowanie z najwyższą dokładnością
- Kompaktowy design i zaawansowana ergonomia
- Wytrzymała konstrukcja
- Waga 245 g (z baterią)
- Przyciski po dwóch stronach urządzenia
- Nie wymaga kalibracji
- Całodniowa żywotność baterii (do 2 godzin ciągłego skanowania lub do 60 przypadków)

Podwójne przyciski skanowania

Po obu stronach urządzenia umieszczono dwa przyciski umożliwiające skanowanie. Kiedy przychodzi czas na zmianę kierunku pracy, możesz łatwo obrócić urządzenie i kontynuować skanowanie, naciskając przycisk tym samym palcem. Nie ma potrzeby zapamiętywania, gdzie znajdują się przyciski ani ponownego przekładania końcówki.



Nie wymaga kalibracji

ViSiOScan nie wymaga kalibracji, co eliminuje potrzebę stosowania kosztownego oprzyrządowania i zapobiega jakimkolwiek zakłóceniom w codziennej pracy. Oznacza to, że jest gotowy do precyzyjnego skanowania od razu po wyjęciu z pudełka... i w każdym innym dowolnym momencie!



Zintegrowany żyroskop

Bardziej higieniczny workflow, od początku do końca pracy, bez konieczności dotykania komputera. Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ruchu możesz przeglądać ukończony model, skalować go, obracać w dowolnym kierunku i uzyskiwać dostęp do menu i innych opcji, wykonując określone ruchy skanerem.

RĘKOJEŚĆ	
Waga	245 g
Wymiary (mm)	248 x 48 x 37
Zasilacz	Niewymagany
Zdalne sterowanie	TAK
Przyciski	(Start scan & Mode)
Łączność	Przewodowy/Bezprzewodowy
Baterie	2 sztuki
Ładowanie	System bezprzewodowy wbudowany w podstawę rękojeści (również do akumulatora zapasowego)
Czas pracy pojedynczej baterii	Ponad dwie godziny ciągłego skanowania (około 60 przypadków)
SKANOWANIE	
Dokładność	20 µm
Głębokość akwizycji	18 mm
Pole widzenia (mm)	16 x 14 (z dużą końcówką) 12 x 12 (z małą końcówką)
Kalibracja	Niewymagana
Wymiary końcówki	22 x 18 mm (z dużą końcówką) 18 x 16 mm (z małą końcówką)
Sterylizacja	Możliwość sterylizacji w autoklawie, ponad 60 cykli - 134°C przez 4 minuty
FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
ViSIOScan Connect	Zarządzanie danymi pacjentów i obrazami
ViSIOScan Connect WEB	Platforma internetowa do zarządzania danymi pacjentów i obrazami
Automatyczna synchronizacja w chmurze	TAK
APP Store	Aplikacje kliniczne i komunikacyjne mogą być pobierane, instalowane i aktualizowane
Pozyskiwanie skanów	Oprogramowanie do akwizycji danych z narzędziami klinicznymi (pomiar, rysowanie linii marginesu, kontrola podcięcia itp.)
Sztuczna inteligencja (AI)	TAK (aby usunąć tkanki miękkie lub artefakty ze skanu)
MINIMALNE I ZALECANE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPUTERA PC	
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 10 (Professional 64 bit) i 11
Procesor	LAPTOP: Intel® Core™ i5-11400H 11. generacji lub AMD Ryzen™ 7 5700U (minimum) Intel® Core™ i7-11800H 11. generacji lub AMD Ryzen™ 7 5800H (zalecane) KOMPUTER STACJONARNY: Intel® Core™ i5-10600 10. generacji lub AMD Ryzen™ 5 3600 (minimum) Intel® Core™ i7-10700 11. generacji lub AMD Ryzen™ 7 3700X (zalecane)
RAM	16 GB (minimum), 32 GB (zalecane)
Karta graficzna	LAPTOP: Nvidia GeForce GTX 1660 6 GB (minimum), Nvidia GeForce RTX 2070 Super 8 GB (zalecane) KOMPUTER: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 GB (minimum), Nvidia GeForce RTX 2060 Super 8 GB (zalecane)
Porty	USB 3.2 Gen1 Type-A
Zgodność z normami	IEC60950, IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC)

Zgodnie z obowiązującymi normami, poza obszarami UE dostępność i specyfikacje niektórych produktów i/lub cech mogą się różnić. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielstwem handlowym. Zdjęcia mają charakter poglądowy.



NewTom ViSIOScan WR

Przewodowy skaner wewnętrzny

cena katalogowa: 55 000 PLN
(rata 650 PLN*)



NewTom ViSIOScan WL

Bezprzewodowy skaner wewnętrzny

cena katalogowa: 65 000 PLN
(rata 760 PLN*)

* Stern Weber Kredyt 20% udziału własnego, 96 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

NEWTOM VISIOSCAN - ZESTAW**NOWOŚĆ****ZESTAW ZAWIERA:**

- BEZPRZEWODOWY SKANER WEWNĄTRZYSTNY
- OPROGRAMOWANIE VISIOSCAN CONNECT
- DOTYKOWY MONITOR
- ASYSTOR LORAN MATE (W WERSJI JEZDNEJ)

NEWTOM
CONE BEAM 3D IMAGING**Loran**
everyday passion

Praktyczny, ergonomiczny asystor Loran MATE z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia monitora i wysuwaną półką na klawiaturę. Idealnie sprawdzi się w codziennej pracy stomatologa. To połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Znajduje zastosowanie zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i przenośnych (z uchwytem lub bez). Zapewnia możliwość wykonywania skanów wewnątrzustnych na stojąco i siedząco oraz wygodny dostęp do stanowiska komputerowego zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.

- wysuwana półka na klawiaturę,
- regulowana wysokość,
- możliwość wykonywania skanu wewnątrzustnego na stojąco i siedząco,
- regulowany kąt nachylenia monitora,
- kompaktowe wymiary (54 cm × 83,13 cm × 47,3 cm) plus wysokość wybranego monitora,
- uchwyt z okablowaniem i przepustami kablowymi,
- uchwyt do mocowania monitora,
- komora na jednostkę centralną (CPU),
- podnóżek,
- duże kółka z hamulcami,
- lakierowany na biało.



SKANER BEZPRZEWODOWY	
Waga rękojeści	245 g
Wymiary rękojeści	24,8 cm x 4,8 cm x 3,7 cm
Zasilacz	Stacja ładująca
Zdalne sterowanie	TAK
Przyciski	(Start scan & Mode)
Łączność	Bezprzewodowy
Baterie	2 sztuki
Ładowanie	System bezprzewodowy wbudowany w podstawę rękojeści (również do akumulatora zapasowego)
Czas pracy pojedynczej baterii	Ponad dwie godziny ciągłego skanowania (około 60 przypadków)
Dokładność	20 µm
Głębokość akwizycji	18 mm
Pole widzenia	1,6 cm x 1,4 cm (z dużą końcówką) 1,2 cm x 1,2 cm (z małą końcówką)
ASYSTOR	
Wysokość	83,13 cm
Długość	54 cm
Szerokość	47,3 cm
Materiał	Metal lakierowany
OPROGRAMOWANIE	
ViSIO Scan Connect	Zarządzanie danymi pacjentów i obrazami
ViSIO Scan Connect WEB	Platforma internetowa do zarządzania danymi pacjentów i obrazami
Automatyczna synchronizacja w chmurze	TAK
APP Store	Aplikacje kliniczne i komunikacyjne mogą być pobierane, instalowane i aktualizowane
Pozyskiwanie skanów	Oprogramowanie do akwizycji danych z narzędziami klinicznymi (pomiary, rysowanie linii marginesu, kontrola podcięcia itp.)
Sztuczna inteligencja (AI)	TAK (aby usunąć tkanki miękkie lub artefakty ze skanu)
MONITOR	
Monitory do zastosowań medycznych NEOVO / BARCO *W zależności od dostępności. O więcej szczegółów zapytaj naszego doradcę.	

Komputer dostępny poza zestawem. O więcej szczegółów zapytaj naszego doradcę.



NewTom ViSIO Scan Zestaw

Bezprzewodowy skaner wewnętrzny

cena katalogowa: 49 000 PLN
(rata 710 PLN*)

* Stern Weber Kredyt 10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%

MIKROSKOPY OPERACYJNE Zeiss



EXTARO 300



OPMI PICO

LUPY OPERACYJNE Zeiss



EYE MAG SMART - ramka SPORT



EYE MAG SMART - ramka TYTAN



EYE MAG PRO S



EYE MAG PRO F

OŚWIETLENIE DLA LUP Zeiss



EYE MAG LIGHT II

MIKROSKOP OPERACYJNY ZEISS EXTARO 300

Model mikroskopu operacyjnego Extaro 300 marki Zeiss, to urządzenie, które tworzy wyższy standard na rynku sprzętu optycznego dedykowanego stomatologom.

Firma Zeiss skorzystała nie tylko z własnego doświadczenia, ale także z sugestii i potrzeb swoich klientów.

Dzięki intuicyjnej obsłudze, urządzenie gwarantuje komfort użytkowania, co ułatwia codzienną pracę stomatologów.



PARAMETRY EXTARO 300

- **Zintegrowany VARIOSKOP 230 mm** – obiektyw o zmiennej/ regulowanej ogniskowej (równoważne z dystansem roboczym). Rozwiązanie to zapewnia największy na rynku zakres regulacji odległości od pola zabiegowego, co w praktyce przekłada się na możliwość łatwego dostosowania sprzętu do użytkowników o różnym wzroście oraz większy zakres ruchu w polu zabiegowym. Dotychczas występujące zakresy regulacji ogniskowej to: PICO – 13mm lub 100mm; PROERGO – 200mm

- **Źródło światła TRILED** – zintegrowany moduł oświetlenia pola zabiegowego. Aktualnie oferowane w mikroskopie EXTARO 300 źródło światła jest pierwszym na rynku mikroskopów stomatologicznych korzystającym z technologii TRILED tzn. że końcową barwą oświetlenia uzyskujemy z wymieszania trzech podstawowych barw RGB (Red, Green, Blue). Zastosowanie takiego procesu skutkuje najwierniejszemu odwzorowaniu kolorów oświetlanego obiektu. Temperatura barwowa oświetlenia to 5500 K. Dotychczas stosowane oświetlenie: PICO – halogen, LED; PROERGO: halogen, XENON.

- **Wzmocnione oświetlenie TRILED z LIGHTBOOST** – możliwość podniesienia mocy oświetlenia o 60% w stosunku do standardowej mocy oświetlenia TRILED. Efektem zwiększenia mocy jest wyrównanie natężenia światła z uważanym do tej pory za oświetlenie najsilniejsze, światłem typu XENON.

- **Specjalne filtry światła** – rozwiązania korzystające m.in. z technologii TRILED, umożliwiające diagnostykę i pracę z jeszcze większą precyzją:

- **Filtr/Tryb ZIELONY (standardowy)**

Tryb barwy zielonej wykorzystywany jest do wzmocnienia kontrastu pomiędzy krwią i tkanką, co pozwala je lepiej rozróżnić.

- **Filtr/Tryb POMARAŃCZOWY (standardowy)**

Przeciwpolimeryzacyjny. Hamuje utwardzanie materiałów światło-utwardzalnych

- **Filtr/Tryb TRUELIGHT (specjalny)**

Zarówno **tryb barwy pomarańczowej**, jak i **tryb truelight** (światła naturalnego) zaliczają się do kategorii **trybu opóźnienia utwardzenia**, zapobiegającego przedwczesnej polimeryzacji obecnie powszechnie stosowanych światło-utwardzalnych kompozytów podczas procesu modelowania pod mikroskopem.

W przeciwieństwie do **trybu światła POMARAŃCZOWEGO** tryb **TRUELIGHT** umożliwia zidentyfikowanie odpowiednich tkanek zęba w bardziej naturalnych warunkach światła białego. W przypadku najczęściej stosowanych żywic kompozytowych o typowym układzie fotoinicjującym kamforochinon-amina, tryb **TRUELIGHT** wydłuża czas pracy dwukrotnie w porównaniu z trybem światła białego.

- **Filtr/Tryb NOGLARE (specjalny)**

Tryb ten umożliwia precyzyjną analizę odcieni koloru zęba. Opcja polaryzacji krzyżowej skutecznie tłumi przeszkadzające odbicia światła od powierzchni zęba. Wyeliminowanie oślepiania znacząco pomaga w przypadku, gdy konieczne jest określenie i porównanie prawdziwego koloru.

- **Filtr/Tryb FLUORESCENCE (specjalny)**

Tryb fluorescencyjny przeznaczony jest do stosowania przez lekarzy w stomatologii jako pomoc przy wykrywaniu próchnicy zębów oraz przy odróżnianiu materiału kompozytu żywicznego od naturalnej zębiny i szkliwa.

Wykrywanie próchnicy – wizualna identyfikacja zmian próchnicowych umożliwia niezakłócony przebieg prac podczas opracowywania.

Wykrywanie kompozytu – w przypadku większości żywic kompozytowych różnica pomiędzy kompozytem a otaczającym zębem jest większa w **trybie fluorescencyjnym** niż w przypadku kolorów obserwowanych w świetle. Kontrast ten zapewnia zdecydowanie lepszą identyfikację uzupełnień z kompozytu o barwie zęba.

- **Nowa ergonomia obsługi**

Przy projektowaniu mikroskopu operacyjnego Extaro 300 uwzględniono wymagania użytkowników, co zaowocowało stworzeniem urządzenia obsługiwanego praktycznie jednym palcem. Dzięki intuicyjnej obsłudze, urządzenie gwarantuje komfort użytkowania, co ułatwia codzienną pracę stomatologów.

W zasięgu kciuka użytkownika, którego dłoń jest wsparta na ergonomicznym uchwycie, znajdują się pokręta:

zmiany powiększenia, zmiany położenia ogniskowej (odległości roboczej) oraz jedno centralnie położone pokrętko służące regulacji natężenia światła, włączania i wyłączania filtrów światła.

Zeiss EXTARO 300

Cennik wersji podstawowej i wyposażenia opcjonalnego

**PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE mikroskopu EXTARO 300**

- zintegrowany obiektyw **VARIOSKOP 230** (regulacja ogniskowej w zakresie 200–430mm)
- **5-stopniowy zmieniacz powiększeń** (0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5)
- **ergonomiczna obsługa** w zasięgu jednego palca dla:
 - ✓ oświetlenia,
 - ✓ obiektywu VARIOSKOP,
 - ✓ kamery (w standardzie bez kamery),
 - ✓ filtrów (w standardzie filtr pomarańczowy i zielony),
- zintegrowane **oświetlenie TriLED** (prowadzone światłowodem)
- **tubus uchylny** – regulowany w zakresie 0–180 stopni z okularami 12,5 (opcjonalnie 10x)
- **sprzęgło 120°** (trzęcie, krótkie ramię manewrujące głowicą)
- **statyw: jezdny, ścienny lub sufitowy**
- **pokrowiec**
- komplet osłon obiektywu **VISION GUARD**: pierścień adaptacyjny, osłona

PAKIET BASIC: 107 000 PLN
(rata 1550 PLN*)

zamiana oświetlenia TriLED na TriLED z LightBoost (zwiększenie mocy oświetlenia o 60%)	+ 12 000 PLN
filtr Fluorescence¹	+ 22 000 PLN
filtry TrueLight i NoGlare¹	+ 22 000 PLN
mechaniczny moduł obsługi filtrów (NoGlare, TrueLight, Fluorescent)	+ 6000 PLN
fotoadapter APS-C (dla body aparatów z wymienną optyką – bez lustra, bez pełnej klatki) ²	+ 11 000 PLN
fotoadapter f=340mm (dla body aparatów z wymienną optyką – z lustrem, z pełną klatką) ²	+ 8000 PLN
optyka ukośna ze zintegrowanym dzielnikiem optycznym (50/50 na dwie strony)	+ 15 000 PLN
sprzęgło MORA (uchylność obiektywu na prawo i lewo o 25° nie zmieniająca położenia tubusa)	+ 22 500 PLN
sprzęgło MORA z portem do dokumentacji (na lewą stronę)	+ 25 000 PLN
zamiana tubusa uchylnego na składany (foldable tube) z PROMAG (zmienna f=170/260mm)	+ 13 000 PLN
zamiana soczewek 12,5x standard na 12,5x ze znacznikiem (kółkiem)	+ 1000 PLN
zamiana soczewek 12.5x standard na 10x	+ 0 PLN
zintegrowana kamera FULL HD (1080p) z nagrywaniem poprzez USB	+ 27 000 PLN
zintegrowana kamera FULL HD (1080p) z nagrywaniem poprzez USB i komunikacją Wi-Fi z aplikacją ZEISS Connect (iPad)	+ 33 000 PLN
wygodny uchwyt do transportowania mikroskopu w wersji jezdnej	+ 2000 PLN
 dodatkowa płyta montażowa dla wersji ściennej	+3000 PLN
płyta montażowa dla wersji sufitowej (jako zestaw preinstalacyjny)	+ 4500 PLN

¹ wymaga zastosowania **mechanicznego modułu obsługi filtrów**

² wymaga zastosowania **optyki ukośnej ze zintegrowanym dzielnikiem optycznym lub sprzęgła MORA z portem do dokumentacji**

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

DOSTĘPNE PAKIETY I CENY

Pakiet CLASSIC



**Podstawowe wyposażenie mikroskopu EXTARO 300
+ pakiet CLASSIC:**

- sprzęgło **MORA** (uchylność obiektywu na prawo i lewo o 25° nie zmieniająca położenia tubusa/okularu) z **portem do dokumentacji** (na lewą stronę)
- zintegrowane oświetlenie **TriLED z LightBoost** (zwiększenie mocy oświetlenia o 60%)

PAKIET CLASSIC: 143 000 PLN
(rata 2070 PLN*)

Pakiet PREMIUM



**Podstawowe wyposażenie mikroskopu EXTARO 300
+ pakiet PREMIUM:**

- sprzęgło **MORA** (uchylność obiektywu na prawo i lewo o 25° nie zmieniająca położenia tubusa/okularu)
- zamiana tubusa uchylnego na składany (foldable tube) ze zmienną ogniskową 170/260 (ProMag)
- zintegrowane oświetlenie **TriLED z LightBoost** (zwiększenie mocy oświetlenia o 60%)
- pełna komunikacja:
 - ✓ zintegrowana kamera **FULL HD (1080p)**
 - ✓ wyjście **HDMI**
 - ✓ port **USB** (na potrzeby rejestracji obrazów i filmów)
- **interfejs sieciowy umożliwiający pracę z aplikacją ZEISS Connect (iPad) – łączność Wi-Fi**
 - ✓ sterowanie kamerą, w tym inteligentne nagrywanie
 - ✓ bezpośrednie konsultacje z pacjentami
 - ✓ zarządzanie zasobami medialnymi
 - ✓ regulacja parametrów i edycja obrazów i wideo.

PAKIET PREMIUM: 183 000 PLN
(rata 2650 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

ZEISS OPMI PICO

Nowy, najwyższy standard

OPMI PICO to kompaktowy mikroskop, który idealnie się sprawdza w codziennej praktyce.

Charakteryzuje się elegancką formą, która została uhonorowana nagrodą Red Dot za wysoką jakość projektu i bardzo łatwe w użyciu funkcje. Wystarczy podłączyć kabel i mikroskop OPMI PICO jest gotowy do użycia.

Nie ma żadnych odsłoniętych kabli ani zewnętrznych elementów, które mogłyby utrudnić pracę.

Wszystkie elementy funkcjonalne, takie jak konsola sterowania obrazem wideo, kamera wideo, kable, źródła światła i światłowody zostały całkowicie zintegrowane w mikroskopie.

Większe zaufanie

Dobry obraz może zastąpić tysiąc słów. Wyjaśnij swoją diagnozę, leczenie i jego wyniki pacjentowi, aby zapewnić dokładne zrozumienie korzyści z zabiegu. Wyjaśnienie czynności krok po kroku pozwala zwiększyć poziom zaufania pomiędzy lekarzem a pacjentem – „zobaczyć znaczy uwierzyć”.

Mikroskop OPMI PICO jest wyposażony we wszystkie opcje niezbędne do skutecznej komunikacji, w tym cyfrowe rozwiązania MediLive®, które umożliwiają dokumentowanie pracy przy pomocy nagrań wideo oraz zdjęć. Istnieją również systemy MediLive® pozwalające na edycję, archiwizację i prezentowanie swojej pracy. Istnieją również systemy MediLive® umożliwiające edycję, archiwizację oraz przygotowanie prezentacji wyników pracy zarówno dla całego zespołu, jak i dla lekarza prowadzącego.

Dla lepszej ergonomii

Mikroskop OPMI PICO wyznacza rzeczywisty postęp w zapobieganiu problemom wynikającym z przeciążenia szyi oraz pleców. Sprawdź to na sobie – ten mikroskop umożliwia pracę w komfortowej pozycji, prawidłowej z punktu widzenia ergonomii.

Pięciostopniowa regulacja powiększania zapewnia jasny obraz – od przeglądu pola roboczego, aż do najdrobniejszych szczegółów. Bez względu na obszar obserwacji, lekarz może pozostawać przez cały czas w wyprostowanej pozycji siedzącej.

Dostępne są obiektywy o ogniskowych 200 mm, 250 mm i 300 mm, umożliwiające dokładne dopasowanie mikroskopu do indywidualnej, optymalnej odległości roboczej.

Ergonomicznie zaprojektowane uchwyty są poręczne - dzięki temu umożliwiają łatwe ustawienie mikroskopu OPMI PICO w pożądanej pozycji.



Zeiss OPMI PICO

dostępne wersje

OFERTY SPECJALNE



OPMI PICO
z tubusem uchylnym (0–180°),
wersja jezdna,
oświetlenie LED

cena: **77 000 PLN**
(rata 1120 PLN*)



OPMI PICO
z tubusem uchylnym (0–180°),
wersja jezdna,
oświetlenie LED
+ OBIEKTYW VARIOSKOP 100

cena: **87 000 PLN**
(rata 1260 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)



Sprawdź mikroskopy Zeiss na naszej ekspozycji!

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Stern Weber Polska - na miejscu można zobaczyć mikroskopy Zeiss w różnych konfiguracjach. To doskonała okazja, by przetestować rozwiązania optyczne Zeiss i porównać funkcjonalność poszczególnych modeli. Nasi doradcy chętnie zaprezentują urządzenia oraz odpowiedzą na pytania techniczne i użytkowe.

Ekspozycja Stern Weber Polska
Warszawa, ul. Kosmatki 26

System ZEISS EYE MAG

EYE MAG SMART

Lupy EYE MAG SMART firmy ZEISS pozwalają uzyskać najwyższej jakości obraz przy powiększeniu 2,5x. Niewielki rozmiar oraz duży zakres regulacji sprawiają, że lupy EYE MAG SMART to idealne urządzenie do codziennej pracy, które zawsze powinno być pod ręką stomatologa.



EYE MAG SMART

EYE MAG PRO F

Lupy EYE MAG PRO F firmy ZEISS pozwalają uzyskać najwyższej jakości stereoskopowy obraz przy większych powiększeniach w zakresie od 3,2x do 5x. W rezultacie podnoszą efektywność i poziom jakości zabiegu. Lupy EYE MAG PRO F są dostępne w szerokiej gamie powiększeń i odległości roboczych z możliwością montażu na tytanowych oprawkach okularowych.



EYE MAG PRO F

EYE MAG PRO S

Lupy EYE MAG PRO S firmy ZEISS pozwalają uzyskać najwyższej jakości stereoskopowy obraz przy większych powiększeniach w zakresie od 3,2x do 5x. Są nieodzownym rozwiązaniem, gdy potrzebna jest większa precyzja. Lupy EYE MAG PRO S są dostępne w szerokiej gamie powiększeń i odległości roboczych z możliwością montażu na specjalnym czepcu.



EYE MAG PRO S



Skonfiguruj model wybranej lupy do swoich potrzeb



ZEISS EYE MAG

dostępne wersje



Lupa operacyjna ZEISS EYE MAG SMART – ramka SPORT

System optyczny

Dystans roboczy (mm)	300	350	400	450	550
Powiększenie	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x

cena katalogowa: **5900 PLN**

Lupa operacyjna ZEISS EYE MAG SMART – ramka TYTAN

System optyczny

Dystans roboczy (mm)	300	350	400	450	550
Powiększenie	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x	2,5x

cena katalogowa: **6900 PLN**

Lupa operacyjna ZEISS EYE MAG PRO F

cena katalogowa: **8900 PLN**

System optyczny

Dystans roboczy (mm)	300	300	350	350	400	400	450	450	500	500
Powiększenie	5,0x	4,0x	4,5x	3,6x	4,3x	3,5x	4,0x	3,3x	4,0x	3,2x



Lupa operacyjna ZEISS EYE MAG PRO S

cena katalogowa: **9900 PLN**

System optyczny

Dystans roboczy (mm)	300	300	350	350	400	400	450	450	500	500
Powiększenie	5,0x	4,0x	4,5x	3,6x	4,3x	3,5x	4,0x	3,3x	4,0x	3,2x



Oświetlenie EYE MAG LIGHT II

Przenośny system oświetlenia jest idealnym uzupełnieniem gamy lup EyeMag firmy Zeiss.

cena katalogowa: **4900 PLN**

ZGRZEWARKI MILLSEAL+

Praktyczna zgrzewarka

Dostępne w wersji automatycznej i manualnej zgrzewarki MILLSEAL+ są wygodnym i pewnym narzędziem dla gabinetów dentystycznych. Ergonomiczna budowa oraz, w przypadku wersji automatycznej, przyjazny system sterowania sprawiają, że jest to urządzenie równie proste, jak i praktyczne. Wyposażone w elektroniczny system doboru parametrów zgrzewania (czas i temperatura) obydwa modele umożliwiają wykonywanie zgrzewu o szerokości 12 mm. Wizualne i akustyczne sygnały dostarczają informacji o poprawności przebiegu procesu zgrzewania.



Zgrzewarka manualna Millseal+

W wersji sterowanej ręcznie użytkownik ustawia długość osłonki, odcina ją od rękawa i po włożeniu przeznaczonego do sterylizacji instrumentu zamyka osłonkę poprzez naciśnięcie znajdującej się z prawej strony dźwigni i przytrzymanie jej, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, informujący o zakończeniu zgrzewania. Uchwyty boczne rolek utrzymują osłonkę we właściwym miejscu i zapobiegają przewijaniu się rolki po przyciśnięciu i zgrzewaniu.



Zgrzewarka automatyczna Millseal+ Evo

Automatyczny system zgrzewania umożliwia całkowite przeprowadzenie przygotowania osłonki i jej zgrzanie poprzez naciśnięcie czytelnych przycisków sterujących. Wspomagany dwukierunkowym silnikiem system przesuwu osłonek pozwala na precyzyjny dobór ich długości, dzięki czemu nie marnuje się nawet kawałek folii.

ZGRZEWARKA MANUALNA MILLSEAL+

cena katalogowa: **2500 PLN**

ZGRZEWARKA AUTOMATYCZNA MILLSEAL+ EVO

cena katalogowa: **6900 PLN**

Dane techniczne	Millseal+ Manualna	Millseal+ Evo Automatyczna
Napięcie robocze	220/240 V	220/240 V
Częstotliwość robocza	50/60 Hz	50/60 Hz
Moc nominalna	150 W (0,45 A)	150 W (0,45 A)
Wymiary zewnętrzne bez rolki (SxGxW)	474x374x200 mm	474x374x200 mm
Waga	5 kg	6 kg
Rodzaj zgrzewania	cykl ciągły, temperatura stała	cykl ciągły, temperatura stała
Nominalna temperatura robocza elementu grzejącego	180 °C	180 °C
Wysokość zgrzewu	12 mm	12 mm
Maksymalna szerokość rolki	300 mm	300 mm
Maksymalna średnica rolki	200 mm	200 mm
Materiał zgrzewany	papier/laminat polipropylenowy	papier/laminat polipropylenowy

AUTOKLAWY STERN WEBER I MOCOM

Sprawdzona jakość w odświeżonej odsłonie

W ofercie Stern Weber Polska dostępne są odświeżone wersje autoklawów marek Stern Weber i Mocom – urządzeń, które łączą wysoką jakość wykonania, intuicyjną obsługę i niezawodność w codziennej pracy. Nowe modele zachowują sprawdzone rozwiązania techniczne, a jednocześnie zyskały ulepszoną ergonomię i nowoczesny wygląd.

Autoklawy dostępne w ofercie Stern Weber Polska zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom zarówno małych gabinetów, jak i dużych klinik stomatologicznych. Zapewniają szeroki wybór programów sterylizacji, dostosowanych do różnego rodzaju narzędzi i materiałów, w tym programy szybkiej sterylizacji oraz cykle zgodne z normą EN 13060 (typ B).

Dodatkową przewagą jest łatwość integracji autoklawów Stern Weber z systemami zarządzania gabinetem – zapis i archiwizacja danych z cykli mogą odbywać się na nośniku USB lub w systemie komputerowym. Urządzenia zużywają niewielką ilość wody, co obniża koszty eksploatacji, a jednocześnie mają kompaktowe wymiary.



Stern Weber SW



Stern Weber SW Plus



Stern Weber SW Platinum



Mocom B Classic



Mocom B Futura



Mocom Supreme

AUTOKLAWY STERN WEBER SW

Dostępne z
easycheck**Wszechstronny autoklaw****Gotowy do codziennej pracy!**

Sterylizacja to kluczowy element pracy każdego gabinetu stomatologicznego - wpływa nie tylko na bezpieczeństwo pacjentów, ale i na jakość świadczonych usług.

Autoklaw Stern Weber SW został zaprojektowany tak, by odpowiadać na potrzeby zarówno niewielkich gabinetów, jak i większych placówek stomatologicznych - jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i niezawodny w codziennym użytkowaniu.

Dzięki 3,2-calowemu ekranowi dotykowemu obsługa urządzenia jest intuicyjna, a cały proces sterylizacji - szybszy i bezpieczniejszy. Autoklaw Stern Weber SW można łatwo zintegrować z systemami cyfrowymi, co pozwala na pełną kontrolę i śledzenie cykli dzięki połączeniu Wi-Fi i dedykowanemu oprogramowaniu.

Autoklaw ma nowoczesną, kompaktową obudowę i jest dostępny w trzech wariantach pojemności komory - bez względu na wybór, wymiary zewnętrzne urządzenia pozostają takie same.

Gładkie i łatwe do czyszczenia powierzchnie oraz czytelny ekran sprawiają, że codzienna obsługa urządzenia jest szybka i wygodna. Przemysłowa konstrukcja łączy wygodę użytkowania z wysoką skutecznością procesu sterylizacji. To połączenie funkcjonalności z prostotą, które sprawdza się w codziennej pracy gabinetu.



Dane techniczne	SW-17	SW-22	SW-28
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	46 kg	49 kg	50 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 9 do 13 cykli	Od 8 do 12 cykli	Od 7 do 11 cykli



Trzy warianty pojemności

Autoklaw dostępny jest w wersjach o pojemności 17, 22 i 28 litrów. Niezależnie od wybranego wariantu, urządzenie ma te same wymiary zewnętrzne - pozwala to dopasować autoklaw do potrzeb gabinetu i pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń na blacie roboczym.



Elastyczne opcje załadunku

Modele o pojemności 17 i 22 litrów są wyposażone w pięć tac i mieszczą do trzech pojemników. Wersja 28-litrowa zawiera sześć tac i umożliwia załadunek do czterech pojemników. Opcjonalny uchwyt modułowy pozwala jeszcze lepiej dopasować wnętrze komory do bieżących potrzeb.



Funkcyjny design

Autoklaw został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu – prosty, ergonomiczny kształt ułatwia utrzymanie czystości. Dotykowy ekran to nie tylko wygodna forma obsługi, ale również element, który łatwo dezynfekować. To urządzenie, które łączy estetykę z praktycznym podejściem do higieny.



Intuicyjny ekran dotykowy

Dotykowy ekran 3,2" umożliwia intuicyjne sterowanie całym procesem sterylizacji. Prosty interfejs graficzny ułatwia obsługę i prowadzi użytkownika krok po kroku - od wyboru programu po zakończenie cyklu.



Przypomnienia o testach

Autoklaw automatycznie informuje o konieczności wykonania cyklicznych testów (test próżniowy oraz test Helix/Bowie & Dick). Na ekranie pojawiają się także komunikaty o zbliżających się terminach przeglądów technicznych, co pomaga utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i zapewnić ciągłość pracy w gabinecie.



Opóźniony start

Funkcja opóźnionego startu pozwala ustawić dokładną godzinę rozpoczęcia sterylizacji, co ułatwia organizację pracy. Dzięki opcji dodatkowego suszenia możliwe jest indywidualne wydłużenie czasu suszenia - przydatne przy bardziej wymagających ładunkach.

STERN WEBER SW-17

cena katalogowa: **17 000 PLN** (rata 250 PLN*)

STERN WEBER SW-22

cena katalogowa: **21 000 PLN** (rata 300 PLN*)

STERN WEBER SW-28

cena katalogowa: **26 000 PLN** (rata 380 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

AUTOKLAWY STERN WEBER SW PLUS

Dostępne z
easycheck**Nowoczesne rozwiązania
i pełne bezpieczeństwo**

Autoklaw SW Plus został stworzony z myślą o efektywności. Cykl 134°C trwa tylko 31 minut, a funkcja modułowego suszenia pozwala skrócić czas pracy i zmniejszyć zużycie energii.

Urządzenie posiada wbudowany filtr demineralizujący - dzięki temu można korzystać z wody z kranu, przy jednoczesnym monitorowaniu jej jakości.

Ekran dotykowy ułatwia codzienną obsługę, a dzięki krótkim materiałom wideo dostępnym bezpośrednio na urządzeniu, każdy użytkownik szybko i bez problemu opanuje obsługę autoklawu. Połączenie z internetem (Wi-Fi lub Ethernet) pozwala na bieżące monitorowanie parametrów pracy poprzez aplikację SterilConnect i system MyTrace.

Wysoka wydajność w nowoczesnej formie - prosta obsługa i najwyższe standardy higieny.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby uprościć codzienną obsługę: gładkie powierzchnie ułatwiają czyszczenie. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i dopracowanym funkcjom, każdy etap sterylizacji przebiega sprawnie i zgodnie z procedurami.

Dzięki cyfrowej integracji i pełnej możliwości śledzenia cykli sterylizacji, autoklaw Stern Weber SW Plus pomaga zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i zoptymalizować organizację pracy w gabinecie.



Dane techniczne	SW-17 PLUS	SW-22 PLUS	SW-28 PLUS
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	47 kg	50 kg	51 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 7 do 11 cykli	Od 6 do 10 cykli	Od 5 do 9 cykli



Czas trwania cyklu

Niezawodność podczas codziennej, pracy zapewniają sprawdzone komponenty i dopracowana konstrukcja. System sterowania optymalizuje przebieg cyklu, a funkcja Modular Drying dopasowuje czas suszenia do rodzaju ładunku, skracając całkowity czas cyklu. Pełny cykl typu B może trwać tylko 31 minut.



Konstrukcja z myślą o higienie

Zewnętrzne powierzchnie mają zlicowane łączenia, co ułatwia czyszczenie autoklawu. Szklany ekran dotykowy można dezynfekować.

Panel świetlny umieszczony z przodu urządzenia informuje w czytelny sposób o statusie pracy autoklawu - to połączenie estetyki z codzienną funkcjonalnością.



System uzdatniania wody

Zintegrowany filtr demineralizujący umożliwia korzystanie z wody wodociągowej bez potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń. Rozwiązanie to usprawnia pracę i generuje oszczędności. Czujniki monitorują jakość wody, a komunikaty informują o stanie filtra, co pozwala utrzymać sprawność systemu.



Ekran dotykowy i tutoriale wideo

Ekran dotykowy o przekątnej 5" oraz intuicyjne sterowanie zapewniają prostą nawigację i szybki dostęp do wybranych funkcji. Dostępne tutoriale wideo oraz instrukcja użytkownika pomagają w codziennej pracy i wspierają obsługę urządzenia bez konieczności sięgania po dodatkowe materiały.



Komunikaty o testach

Autoklaw automatycznie informuje o konieczności wykonania cyklicznych testów (test próżniowy oraz test Helix/Bowie & Dick). Na ekranie pojawiają się także komunikaty o zbliżających się terminach przeglądów technicznych, co pomaga utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i zapewnić ciągłość pracy w gabinecie.



Trzy warianty pojemności

Autoklaw dostępny jest w trzech wariantach pojemności – 17, 22 i 28 litrów - przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych. Przemysłowa konstrukcja i kompaktowy rozmiar umożliwiają montaż zarówno na standardowych blatach roboczych, jak i wewnątrz szafek przystosowanych do urządzeń tego typu.

STERN WEBER SW-17 PLUS

cena katalogowa: **20 500 PLN** (rata 300 PLN*)

STERN WEBER SW-22 PLUS

cena katalogowa: **24 500 PLN** (rata 360 PLN*)

STERN WEBER SW-28 PLUS

cena katalogowa: **29 500 PLN** (rata 430 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

AUTOKLAWY STERN WEBER SW PLATINUM

Dostępne z
easycheck**Zaawansowana technologia i intuicyjna obsługa**

Autoklaw Stern Weber SW Platinum zawiera w sobie nowoczesne rozwiązania, które wspierają codzienną organizację pracy w gabinecie.

- Usprawniony przebieg pracy - funkcja suszenia modułowego dostosowuje czas suszenia do rodzaju ładunku, a szybkie cykle skracają czas całego procesu.
- Intuicyjna obsługa i szybki dostęp do informacji - 7-calowy ekran dotykowy zapewnia przejrzysty dostęp do funkcji urządzenia, materiałów wideo i statusu cyklu. Zintegrowany pasek LED informuje o postępie pracy.
- Zaawansowana łączność - wbudowane Wi-Fi i port Ethernet umożliwiają zdalne zarządzanie i pełną identyfikowalność procesów.

Efektywne wykorzystanie wody przy zachowaniu pełnej wydajności i najwyższej jakości procesu sterylizacji

Autoklaw Stern Weber SW Platinum został wyposażony w duży ekran i interfejs zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania. Zastosowane podzespoły i zaawansowane oprogramowanie sterujące zapewniają wysoką efektywność pracy.

SW Platinum może być zasilany zwykłą wodą z sieci, a zastosowany system pozwala odzyskiwać wodę po zakończeniu cyklu i wykorzystywać ją ponownie. Efekt: rozwiązanie to zmniejsza zużycie wody demineralizowanej (niższe koszty) i ogranicza potrzebę jej przechowywania.



Dane techniczne	SW-17 Platinum	SW-22 Platinum	SW-28 Platinum
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	47 kg	50 kg	51 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 7 do 11 cykli	Od 6 do 10 cykli	Od 5 do 9 cykli



Czas trwania cyklu

SW Platinum został zaprojektowany z myślą o ciągłej, intensywnej pracy. Zintegrowany system sterowania automatycznie dopasowuje parametry pracy, a funkcja Modular Drying skraca czas suszenia w zależności od załadunku. Pełny cykl typu B może trwać zaledwie 31 minut.



Pasek LED

Zintegrowany w drzwiach pasek LED informuje o aktualnym etapie cyklu. Dzięki widocznym z daleka sygnałom świetlnym można w prosty sposób monitorować pracę urządzenia – bez potrzeby podchodzenia do panelu.



Ekran z tutorialami wideo

Wyświetlacz o przekątnej 7" i wysokiej rozdzielczości ułatwia obsługę urządzenia. Zamieszczone w pamięci urządzenia krótkie filmy instruktażowe wspierają prawidłowe użytkowanie i konserwację autoklawu.



Kontrola jakości wody

Wbudowany czujnik monitoruje jakość wody i dba o bezpieczeństwo pracy urządzenia, chroniąc jego podzespoły. System na bieżąco sprawdza także stan filtrów, a komunikaty na ekranie informują użytkownika o konieczności ich wymiany.



Filtr demineralizujący

Filtr demineralizujący umieszczony w głównym zbiorniku umożliwia napełnianie urządzenia zwykłą wodą z kranu. Proces filtracji upraszcza codzienną obsługę, a opcjonalne systemy automatycznego napełniania dodatkowo usprawniają pracę z urządzeniem.



Oczyszczanie zużytej wody

Filtr recyrkulacyjny wbudowany w zbiornik wtórny oczyszcza wodę po zakończonym cyklu, umożliwiając jej ponowne użycie. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie aż 50 cykli przy wykorzystaniu jedynie 5 litrów wody.

STERN WEBER SW PLATINUM 17

cena katalogowa: **29 000 PLN** (rata 420 PLN*)

STERN WEBER SW PLATINUM 22

cena katalogowa: **32 000 PLN** (rata 470 PLN*)

STERN WEBER SW PLATINUM 28

cena katalogowa: **36 000 PLN** (rata 530 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC

Dostępne z
easycheck**Pełna funkcjonalność
w zoptymalizowanej formie**

Model B Classic dostępny jest w trzech wariantach pojemności komory oraz z sześcioma opcjami uzupełniania wody. Do wyboru są wersje o pojemności 17, 22 i 28 litrów. Autoklaw Mocom B Classic to uniwersalne rozwiązanie dla każdego gabinetu.

Dostęp do zbiorników znajduje się w górnej części obudowy – umożliwia to łatwe napełnianie wodą demineralizowaną oraz ich czyszczenie.

Wbudowany czujnik kontroluje jakość wody, wspierając prawidłowe działanie urządzenia. Alternatywnie można korzystać z przednich szybkozłączy do napełniania i opróżniania zbiorników.

- Zaawansowana łączność - wbudowane Wi-Fi i port Ethernet umożliwiają zdalne zarządzanie i pełną identyfikowalność procesów.

Wszechstronność i wygoda każdego dnia - nowoczesna konstrukcja i trzy warianty pojemności komory pozwalają dostosować autoklaw do indywidualnych potrzeb.

Autoklaw można łatwo dopasować do różnych potrzeb i stanowisk pracy. Łatwe w czyszczeniu powierzchnie oraz intuicyjny interfejs upraszczają codzienną obsługę. Autoklaw łączy funkcjonalność z prostotą użytkowania, nie tracąc na skuteczności ani jakości procesów sterylizacji.



Dane techniczne	B Classic 17	B Classic 22	B Classic 28
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	46 kg	49 kg	50 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 9 do 13 cykli	Od 8 do 12 cykli	Od 7 do 11 cykli



Różne możliwości załadunku

Warianty o pojemności 17 i 22 litrów są wyposażone w pięć tac i mieszczą do trzech szuflad. Wersja 28-litrowa zawiera sześć tac i umożliwia umieszczenie do czterech szuflad.

Opcjonalny modułowy uchwyt na tace zwiększa elastyczność konfiguracji i pozwala lepiej dopasować sposób załadunku do bieżących potrzeb.



Estetyka i higiena w praktyce

Nowoczesna, a zarazem prosta forma autoklawu łączy estetykę z funkcjonalnością. Elementy zewnętrzne wykonano z materiałów, które ułatwiają dezynfekcję i codzienną konserwację. Szklany ekran dotykowy zapewnia wygodną obsługę przy zachowaniu wysokiego standardu higieny.



Czytelny wyświetlacz

Ekran dotykowy 3,2" zapewnia intuicyjną i wygodną obsługę, umożliwiając łatwe zarządzanie całym procesem sterylizacji. Przejrzysta grafika i proste menu ułatwiają korzystanie z poszczególnych funkcji i usprawniają każdy etap pracy.



Trzy warianty pojemności

Dostępne warianty to 17, 22 i 28 litrów - dzięki temu można dobrać model najlepiej dopasowany do potrzeb gabinetu. Niezależnie od wybranej pojemności, wszystkie wersje mają identyczne wymiary zewnętrzne, co ułatwia montaż (także we wnękach) i pozwala zaoszczędzić miejsce na blacie roboczym.



Identyfikacja użytkownika

Po aktywowaniu funkcji identyfikacji użytkownika dostęp do urządzenia mają wyłącznie upoważnione osoby. Wprowadzenie kodu PIN umożliwia rejestrowanie historii użytkowania, co przekłada się na pełną kontrolę nad przebiegiem pracy. Rozwiązanie to wspiera bezpieczne i zgodne z procedurami użytkowanie autoklawu.



Cykl niestandardowy

Autoklaw umożliwia konfigurację indywidualnego cyklu sterylizacji, dostosowanego do specyficznych potrzeb gabinetu stomatologicznego.

Użytkownik może wybrać parametry spośród dostępnych, zgodnych z obowiązującymi normami wartości, co pozwala zoptymalizować przebieg cyklu.

MOCOM B CLASSIC 17

cena katalogowa: **17 000 PLN** (rata 240 PLN*)

MOCOM B CLASSIC 22

cena katalogowa: **21 000 PLN** (rata 300 PLN*)

MOCOM B CLASSIC 28

cena katalogowa: **26 000 PLN** (rata 380 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

AUTOKLAW MOCOM B FUTURA

Dostępne z
easycheck**Maksimum efektywności.****Praktyczne rozwiązania.**

Zaawansowany autoklaw, który łączy w sobie wszechstronność z łatwością utrzymania higieny. Gładkie, łatwe do czyszczenia powierzchnie, intuicyjny wyświetlacz i zoptymalizowane funkcje zapewniają codzienną wygodę użytkowania, zwiększając skuteczność i jakość procesu sterylizacji.

Zintegrowane funkcje śledzenia procesów i zdalnej obsługi wpisują się w potrzeby gabinetów, które oczekują niezawodności i są nastawione na optymalizację pracy.

Wszystkie autoklawy z serii Futura są wyposażone we wbudowane moduły WiFi i port Ethernet. Po połączeniu z Internetem i aktywowaniu usługi Easy Check możliwe jest zdalne wsparcie techniczne.

Wbudowany system filtracji - pełna wygoda użytkowania

Autoklaw Mocom B Futura został stworzony z myślą zarówno o niewielkich gabinetach, jak i większych placówkach stomatologicznych - jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i niezawodny w codziennym użytkowaniu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych autoklawów, Futura nie wymaga podłączenia do zewnętrznego systemu uzdatniania wody. Dzięki filtrowi demineralizującemu umieszczonemu w głównym zbiorniku, urządzenie można napełniać zwykłą wodą z kranu. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce, uprościć codzienną obsługę i ograniczyć koszty.



Dane techniczne	B Futura 17	B Futura 22	B Futura 28
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	47 kg	50 kg	51 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 7 do 11 cykli	Od 6 do 10 cykli	Od 5 do 9 cykli



Czas sterylizacji pod pełną kontrolą

Wysokiej klasy podzespoły w połączeniu z systemem kontroli optymalizującym każdy etap procesu pozwalają skrócić czas trwania cyklu sterylizacji. Funkcja Modular Drying umożliwia dostosowanie suszenia do ilości wsadu, co dodatkowo przyspiesza cały proces. Pełny cykl klasy B może zająć zaledwie 31 minut.



Filtr demineralizujący

Wbudowany filtr demineralizujący umożliwia zasilanie autoklawu zwykłą wodą z kranu – bez konieczności stosowania zewnętrznych systemów uzdatniania. Czujniki stale monitorują jakość wody demineralizowanej, a użytkownik otrzymuje komunikaty o stanie filtra, zapewniając nieprzerwaną pracę autoklawu.



Nowoczesna konstrukcja

Ograniczona liczba łączów i punktów styku ułatwia utrzymanie higieny. Szklany panel dotykowy łączy wygodę obsługi z możliwością dokładnej dezynfekcji. Charakterystyczny wskaźnik świetlny umieszczony na froncie urządzenia jasno informuje o statusie pracy autoklawu. Po otwarciu drzwi włącza się oświetlenie LED, które doświetla przestrzeń roboczą.



Trzy warianty pojemności

Trzy dostępne warianty pojemności – 17, 22 i 28 litrów – mają identyczne wymiary zewnętrzne, co ułatwia dopasowanie urządzenia do różnych przestrzeni roboczych. Przemysłowa konstrukcja i kompaktowy format pozwalają na montaż zarówno na standardowych blatach, jak i we wnękach meblowych przystosowanych do tego typu urządzeń.



Komunikaty o testach

Obowiązkowe testy (test próżniowy oraz testy Helix/Bowie & Dick) podobnie jak czynności serwisowe, powinny być wykonywane w określonych odstępach czasu. Wbudowany system przypomnień wyświetla komunikaty o konieczności wykonania testów i przeprowadzenia konserwacji, co pozwala zachować ciągłość pracy autoklawu.



Opóźniony start

Funkcja opóźnionego startu umożliwia zaprogramowanie rozpoczęcia cyklu, co pozwala na lepsze zarządzanie pracą urządzenia. Opcja dodatkowego suszenia pozwala dostosować czas suszenia do rodzaju i objętości ładunku.

MOCOM B FUTURA 17

cena katalogowa: **20 500 PLN** (rata 300 PLN*)

MOCOM B FUTURA 22

cena katalogowa: **24 500 PLN** (rata 360 PLN*)

MOCOM B FUTURA 28

cena katalogowa: **29 500 PLN** (rata 430 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

AUTOKLAW MOCOM B SUPREME

Dostępne z
easycheck**Najwyższy
standard sterylizacji**

Mocom Supreme to autoklaw z zamkniętym obiegiem wody, który wykorzystuje wodę z sieci dzięki wewnętrznemu systemowi filtracji umożliwiającemu jej ponowne wykorzystanie w kolejnych cyklach. Takie rozwiązanie ogranicza straty, obniża koszty i znacząco zwiększa efektywność pracy gabinetu. Jednocześnie eliminuje problemy związane z magazynowaniem i dostarczaniem wody demineralizowanej.

W przeciwieństwie do tradycyjnych autoklawów, model Supreme nie wymaga zewnętrznego podłączenia do instalacji wodnej w celu uzdatniania wody. Dzięki filtrowi demineralizującemu umieszczonemu w głównym zbiorniku, urządzenie można napełniać zwykłą wodą z kranu. Zastosowane systemy filtracji zapewniają prostotę obsługi.

Do 50 cykli sterylizacji przy zużyciu jedynie 5 litrów wody z sieci - Prosta obsługa i wysoka wydajność

Urządzenie wykorzystuje zwykłą wodę wodociągową, a następnie odzyskuje ją do ponownego użytku w kolejnych cyklach sterylizacji. Takie rozwiązanie ogranicza zużycie wody, zmniejsza koszty i zwiększa efektywność pracy.

Duży wyświetlacz i przemyślany interfejs użytkownika pozwalają na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Wbudowane tutoriale wideo i sygnalizacja świetlna wspierają operatora na każdym etapie. Wydajne komponenty i zoptymalizowane oprogramowanie przekładają się na stabilną i efektywną pracę.



Dane techniczne	Supreme 17	Supreme 22	Supreme 28
Pojemność	17 l	22 l	28 l
Zasilanie	220/240 V 50Hz 220/230 V 60Hz		
Moc znamionowa	2300 W		
Wymiary zewnętrzne (L x H x D)	500 x 490 x 600 mm		
Wymiary komory (średnica x głębokość)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Waga całkowita	47 kg	50 kg	51 kg
Pojemność zbiornika	6 l		
Liczba cykli przy pełnym zbiorniku	Od 7 do 11 cykli	Od 6 do 10 cykli	Od 5 do 9 cykli

Dostępne z **easycheck**



Ponowne wykorzystanie wody

Filtr recykulacyjny wbudowany w zbiornik wtórny umożliwia demineralizację i oczyszczanie zużytej wody. Dzięki temu może być ona ponownie wykorzystana w kolejnych cyklach sterylizacji. System automatycznie kontroluje poziom wody w zbiorniku zasilającym. Do wykonania 50 cykli potrzeba jedynie 5 litrów wody z sieci – to rekordowo niski poziom zużycia: zaledwie 100 ml na cykl.



Kontrola jakości wody

Wbudowany czujnik na bieżąco monitoruje jakość wody, zapewniając zgodność z wymaganymi parametrami i chroniąc wewnętrzne komponenty urządzenia. Dodatkowo kontroluje stan systemu filtracji. Komunikaty wyświetlane na ekranie informują użytkownika o konieczności wymiany filtrów.



Wymiana filtrów

Łatwy dostęp do zbiorników oraz przemyślana konstrukcja urządzenia sprawiają, że wymiana filtrów przebiega sprawnie i bezproblemowo. Po otrzymaniu komunikatu o konieczności wymiany, użytkownik może skorzystać z instrukcji zawartych w materiałach wideo i samodzielnie przeprowadzić cały proces.



Zintegrowana demineralizacja

Filtr demineralizujący, umieszczony w głównym zbiorniku, umożliwia napełnianie urządzenia zwykłą wodą z kranu. Zintegrowany system filtracji zapewnia wyjątkową łatwość obsługi. Opcjonalnie dostępne są również automatyczne systemy napełniania, które dodatkowo usprawniają obsługę związaną z uzupełnianiem wody.



Krótsze czasy cykli

Wydajne podzespoły i zoptymalizowany system sterowania pozwalają skrócić czas trwania cykli sterylizacji. Funkcja Modular Drying umożliwia dopasowanie długości suszenia do wielkości wsadu, co przekłada się na krótszy czas całkowity cyklu. Pełny cykl B może trwać zaledwie 31 minut.



NFC - Near Field Communication

Wbudowany czytnik NFC upraszcza pracę asysty. Po aktywacji funkcji identyfikacji użytkownika dostęp do urządzenia mają wyłącznie osoby uprawnione. Wystarczy zbliżyć do autoklawu przypisaną kartę NFC, dołączoną do zestawu.

MOCOM SUPREME 17

cena katalogowa: **29 000 PLN** (rata 420 PLN*)

MOCOM SUPREME 22

cena katalogowa: **32 000 PLN** (rata 470 PLN*)

MOCOM SUPREME 28

cena katalogowa: **36 000 PLN** (rata 530 PLN*)

*Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

DOSKONAŁE CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA - MYJNIE TETHYS

Sztuka sterylizacji – Tethys D60



Termodezynyfektory z serii Tethys gwarantują, w sposób całkowicie automatyczny doskonałe czyszczenie przyrządów i znakomite poziomy dezynfekcji, jednocześnie zapewniając pełną ochronę operatora i eliminację błędów proceduralnych. Właściwa regeneracja narzędzi medycznych może zostać osiągnięta poprzez kolejne etapy mycia, dezynfekcji i suszenia z zachowaniem staranności, wydajności i bezpieczeństwa.

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, odpowiadających różnym wymaganiom i optymalnie wykorzystująca dostępną przestrzeń komory dezynfektora. Dezynfektor Tethys można doposażyć opcjonalnie w wózek do obsługi odpowiednich urządzeń.



Specyfikacja

Elektroniczny układ sterowania z mikroprocesorem	Wbudowany zmiękcacz wody, automatyczna regeneracja objętościowa (do 60° F)
16 dostępnych programów, w tym 5 spersonalizowanych	Kondensator parowy – wysokowydajny system ECO SLIM
Wyświetlacz z klawiaturą "soft touch"	Moc podgrzewacza wody (sterowane elektronicznie) – 2,3 kW (wersja jednofazowa) / 6,3 kW (wersja trójfazowa)
System dozowania detergentów i neutralizatorów	Wymiary zewnętrzne (S x G x W) – 600 x 605 x 850 (830 *) mm
Czujnik dozowania detergentów – w standardzie	Wymiary komory (S x G x W) – 520 x 515 x 545 mm
Elektromagnetyczny system zamykania drzwi z automatycznym otwieraniem	Waga – 70 kg
Przechowywanie danych ze 100 ostatnich cykli	Napięcie i moc znamionowa – 1/N/PE 230V ~ 50Hz – 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz – 7,0 kW
Filtr wstępny (klasa C 98%)	Poziom hałasu – <50 dB (A)
Filtr HEPA (klasa S 99,999%)	Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
Normalne zaopatrzenie w zimną wodę (1,5 – 5 barów) możliwość podpięcia pod wodę demineralizowaną	

* wersja do zabudowy

TETHYS D60

cena: **45 000 PLN** (rata 650 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

DOSKONAŁE CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA - MYJNIE TETHYS

Pierwsze urządzenie 4 w 1 – Tethys H10 Plus



- 1 Odkazanie
- 2 Mycie ultradźwiękami
- 3 Dezynfekcja termiczna
- 4 Suszenie

To innowacyjne urządzenie wykonuje wiele czynności, które były robione ręcznie przed sterylizacją, zmniejszając w ten sposób obciążenie personelu. W przypadku Tethys H10 odkazanie, mycie, dezynfekcja i suszenie są wykonywane w jednym szybkim, w pełni automatycznym procesie.

Nowatorska łączność

Tethys H10 umożliwia dostęp do danych roboczych poprzez standardową sieć Ethernet. Dzięki temu dane z wielu urządzeń można archiwizować na jednym komputerze, bez ich fizycznego przenoszenia.

Wszystko pod kontrolą

Tethys H10 posiada wbudowaną pamięć wewnętrzną, w której zapisywane są bezpośrednio w formacie PDF dane wszystkich cykli dezynfekcji.

Certyfikowana rewolucja

Tethys H10 jest spełniającym całkowicie wymagania normy EN ISO 15883-1/2 termicznym dezynfektorem, wykorzystującym w pełni siłę ultradźwięków.

Dane techniczne	
Zasilanie elektryczne	220/240 V - 50 Hz (inne wartości na żądanie)
Moc znamionowa	2300 W
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	470 x 500 x 430 mm
Waga netto	37 kg
Pojemność zbiornika na detergenty	0,7 litra (wystarcza na max. 12 cykli)
Wymiary zbiornika (szer. x gł. x wys.)	224 x 125 x 314 mm
Pojemność nominalna zbiornika	8 litrów
Efektywna pojemność zbiornika	6 litrów
Maksymalne zużycie wody (na cykl)	15 litrów
Maksymalny wsad	2 kg

Opis cyklu	°C	Czas efektywny	Poziom dezynfekcji termicznej (A ₀)	Całkowity czas cyklu
Dezynfekcja D90	90	Mycie 13' Dezynfekcja 5'	3000	35'
Mycie W	45	13'	-	23'
Mycie wstępne	25	6'	-	7'
Dezynfekcja własna D1	80	10' - 20' (przy 80°C)	600 - 1200 (przy 80°C)	Zależnie od ustawień
Dezynfekcja własna D2	90	1' - 10' (przy 90°C)	600 - 6000 (przy 90°C)	
Mycie własne W1	45	13' - 20'	-	

TETHYS H10 cena: **19 900 PLN**
(rata 290 PLN*)

PRZYSTAWKA HMD DO MYCIA KOŃCÓWEK



Dzięki HMD możliwe mycie
(bez ultradźwięków)

- Płukanie
- Suszenie, do 6 rotacyjnych końcówek



Cykl w 34 minuty

TETHYS HMD

cena: **5200 PLN**

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

TURBINY STERN WEBER SILENT POWER EVO



SILENT POWER EVO Miniature

- mała główka
- złącze STERN WEBER

cena katalogowa: 2900 PLN

cena promocyjna:
2590 PLN



SILENT POWER EVO 4L

- główka standard
- złącze STERN WEBER

cena katalogowa: 2260 PLN

cena promocyjna:
1950 PLN



SILENT POWER EVO 2L

- mała główka
- złącze MIDWEST

cena katalogowa: 2700 PLN

cena promocyjna:
2490 PLN

Poziom hałas turbiny
STERN WEBER SILENT POWER EVO



Poziom hałas
innych turbin



Właściwości nowych turbin STERN WEBER SILENT POWER EVO

- ceramiczne łożyska
- główka ze stali nierdzewnej
- chromowana rękojeść
- główka typu „push”
- oświetlenie LED (z wyjątkiem EVO 2)
- średni poziom hałasu 57 dB(A)
- sterylizowalna
- zmywalna w termodezynfektorach
- ciśnienie robocze (bar) 2,7/2,9



ZŁĄCZKA STERN WEBER ze światłem

cena katalogowa: 940 PLN

cena promocyjna: 790 PLN

KĄTNICE I PROSTNICE STERN WEBER GOLDSPEED EVO



cena katalogowa:
5500 PLN

cena promocyjna:
4810 PLN

GOLDSPEED EVO R20-L (20:1)

Do chirurgii i implantologii. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Dla instrumentów o średnicy 2,35 mm. Pojedynczy spray.



cena katalogowa:
2750 PLN

cena promocyjna:
2190 PLN

GOLDSPEED EVO E16 (16:1)

Do endodoncji. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Zmniejszona główka ułatwiająca manewrowanie. Łożyiska ceramiczne.



cena katalogowa:
2750 PLN

cena promocyjna:
2190 PLN

NOWOŚĆ

GOLDSPEED EVO E4 (4:1)

Do endodoncji. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Zmniejszona główka ułatwiająca manewrowanie. Pozwala na leczenie endodontyczne w systemie RECIPROC® oraz użycie zintegrowanego z unitem endometru.



cena katalogowa:
4130 PLN

cena promocyjna:
3100 PLN

GOLDSPEED EVO M5-L (1:5)

Do stomatologii zachowawczej. Kątnica przyspieszająca dedykowana wiertłom turbinowym. Zintegrowane oświetlenie. Średnica główki: 10 mm. Poczworny spray.



cena katalogowa:
3130 PLN

cena promocyjna:
2520 PLN

GOLDSPEED EVO S1 (1:1)

Kątnica bez światła do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Średnica główki: 9,5 mm.



cena katalogowa:
2990 PLN

cena promocyjna:
2290 PLN

GOLDSPEED EVO S1-L (1:1)

Kątnica ze światłem do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Pojedynczy spray. Średnica główki: 9,5 mm.



cena katalogowa:
2500 PLN

cena promocyjna:
2070 PLN

GOLDSPEED EVO D1 (1:1)

Prostnica bez światła do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Pojedynczy spray.



cena katalogowa:
4500 PLN

cena promocyjna:
3340 PLN

GOLDSPEED EVO D1-L (1:1)

Prostnica ze światłem do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie. Pojedynczy spray.

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW METASYS

SSANIE MOKRE



EXCOM hybrid 1s



EXCOM hybrid 1



EXCOM hybrid 2



EXCOM hybrid 5

Metasys



Pompy ssące	liczba stanowisk	cena (PLN)	opis
EXCOM hybrid 1s	1	4300	—
EXCOM hybrid 1	1–2	9400	—
EXCOM hybrid 2	2–3	13000	—
EXCOM hybrid 5	3–5	18000	—
EXCOM hybrid 1 + ECO II	1	12000	pompa EXCOM hybrid 1 + separator amalgamatu ECO II
EXCOM hybrid 2 + ECO II	2–3	14600	pompa EXCOM hybrid 2 + separator amalgamatu ECO II
EXCOM hybrid 5 + ECO II TANDEM	3–5	26500	pompa EXCOM hybrid 5 + separator amalgamatu ECO II TANDEM



EXCOM hybrid 1 + ECO II



ECO II



ECO II TANDEM



ZAWÓR SPLUWACZKOWY

Separatory amalgamatu	liczba stanowisk	cena (PLN)	opis
ECO II (poziom separacji: 99,3%)	1–2	4800	dedykowany pompom: EXCOM hybrid 1s, 1, 2
ECO II TANDEM (poziom separacji: 99,3%)	3–5	8500	dedykowany pompie EXCOM hybrid 5

Akcesoria	cena (PLN)	opis
wymienny zbiornik do separatora ECO II/ECO II TANDEM	2000	—
zawór spluwaczkowy + zawór selekcyjny (Einströmventil + Saugstromventil)	3900	zawór spluwaczkowy stosowany tylko w systemie ssania mokrego w przypadku gdy nie można wykonać kanalizacji do unitu lub stosowana jest pompa mokra z separatorem amalgamatu
zawór selekcyjny (Saugstromventil)	600	—

SSANIE SUCHÉ



VAC 1s



MULTI SYSTEM TYP 1 (MST 1)



COMPACT DYNAMIC

Pompy ssące	liczba stanowisk	cena (PLN)	opis
VAC 1s	1	2600	—

Separatory amalgamatu	cena (PLN)	opis
MULTI SYSTEM TYP 1 (poziom separacji: 98,6%)	10500	sedymentacyjny (grawitacyjny) – do montażu w unicie
MULTI SYSTEM TYP 1, wersja wolnostojąca (poziom separacji: 98,6%)	11900	sedymentacyjny (grawitacyjny) – wersja wolnostojąca
COMPACT DYNAMIC (poziom separacji: 96,4%)	14000	odśrodkowy



COMPACT ECO DYNAMIC



ZESTAW ZŁĄCZEK:
MĘSKA I ŻEŃSKA

Separatory płyn-powietrze	cena (PLN)	opis
MULTI SYSTEM TYP 1 ECO LIGHT	6000	sedymentacyjny (grawitacyjny) - do montażu w unicie
COMPACT ECO DYNAMIC	8700	odśrodkowy

Akcesoria	cena (PLN)	opis
wymienny zbiornik do separatora MULTI SYSTEM TYP 1	250	—
wymienny zbiornik do separatora COMPACT DYNAMIC	250	—
zawór selekcyjny (Saugstromventil)	500	—
zestaw złączy: męska i żeńska	190	kompetybilne z systemem Dürr Dental/Cefla
system selekcyjny S1 (Selektivsystem S1)	4900	—
roczny zestaw serwisowy separatora MULTI SYSTEM TYP 1	550	—
5-letni zestaw serwisowy separatora MULTI SYSTEM TYP 1	1800	—
roczny zestaw serwisowy separatora COMPACT DYNAMIC	1900	—
5-letni zestaw serwisowy separatora COMPACT DYNAMIC	2000	—
roczny zestaw serwisowy separatora płyn-powietrze MULTI SYSTEM TYP 1 ECO LIGHT	550	—

POMPY I KOMPRESORY

Ekom



Kompresory bez obudowy	wydajność (l/min) / ciśnienie robocze (bar)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
DK50-10 Z, 1-cylindrowy, bezelejowy bez osuszacza	75 / 6-8	65	5100	553 x 485 x 350
DK50-10 Z/M, 1-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	70 / 6-8	64	8800	553 x 544 x 350
DK50 2V/M, 2-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	135 / 6-8	69	12500	720 x 460 x 565
Kompresory w obudowie	wydajność (l/min) / ciśnienie robocze (bar)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
DK50-10 S, 1-cylindrowy, bezelejowy bez osuszacza	75 / 6-8	41,5	6300	655 x 580 x 440
DK50-10 S/M, 1-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	58 / 6-8	51,5	11000	655 x 649 x 440
DK50 2VS/M, 2-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	115 / 6-8	53	14000	877 x 560 x 675
Mobilna pompa ssąca	liczba stanowisk	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
DO M (Aspina)	1 (pompa mobilna)	48	7400	860 x 565 x 350



DK50-10 Z/M



DK50 2V/M



DK50-10 S/M



DO M (Aspina)



Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na podzespoły niektórych urządzeń (bez kosztu pracy serwisu) bezpośrednio u producenta.
www.ekom.sk/pl/strefa-ekom/5-letnia-gwarancja



Zeskanuj kod QR

MGF



Kompresor bez obudowy	wydajność (l/min)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
24/10 GENESI M, 2-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	120	65	6900	600 x 420 x 500
Kompresory w obudowie	wydajność (l/min)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
MINI BOX 24/10 GENESI M, 2-cylindrowy, bezelejowy z osuszaczem	120	50	10900	800 x 530 x 500



24/10 GENESI M



MINI BOX 24/10 GENESI M

4TEK



Kompresor bez obudowy	wydajność (l/min) / ciśnienie robocze (bar)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
MIRAGE 100E, 2-cylindrowy, bezolejowy z osuszaczem	100 / 6-8	66	5500	620 x 400 x 522
MIRAGE 130E, 2-cylindrowy, bezolejowy z osuszaczem	130 / 6-8	67	6500	620 x 400 x 522



MIRAGE 100E

Dürr Dental



Kompresory	wydajność (l/min) / ciśnienie robocze (bar)	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
Tornado 1, 1-cylindrowy, bezolejowy z osuszaczem	60 / 6-7,8	64	13700	650 x 490 x 470
Tornado 2, 2-cylindrowy, bezolejowy z osuszaczem	110 / 6-7,8	68	20700	650 x 490 x 470
Pompy ssące mokre	liczba stanowisk	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
VS 300 S	1	63	6900	370 x 310 x 310
VSA 300 S – pompa z separatorem	1 (separacja: 97,5%)	63	19900	480 x 310 x 310
VS 600	2	63	17500	500 x 420 x 410
VS 900 S	3	65	22900	550 x 410 x 420
Separatory amalgamatu (ssanie suche)	poziom separacji	głośność dB (A)	cena (PLN)	wymiary (W x S x G mm)
CA 2	97,9%	56	13900	345 x 300 x 310
CA 4	98,9%	55	19900	410 x 250 x 300

*cena obowiązuje do wyczerpania zapasów



Tornado 1



VS 300 S



CA 2



Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji na podzespoły niektórych urządzeń (bez kosztu pracy serwisu) bezpośrednio u producenta.
www.duerdental.com/pl/PL/serwis/nasz-swiat-serwisu/serwis-produktow



Zeskanuj kod QR


LINIA LOOK

LORAN LOOK – ZESTAW A (stojący na podłodze)

3 moduły szafek – korpus biały, fronty białe z uchwytami, detal (pasek pod blatem) w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

Do wyboru: szafka umywalkowa, szafka z szufladami, szafka z drzwiczkami i półkami, szafka z blatem pod urządzenie wolnostojące.

Blat: Corian z umywalką i manualną baterią do wody, kolor biały z cokołem 12 mm.

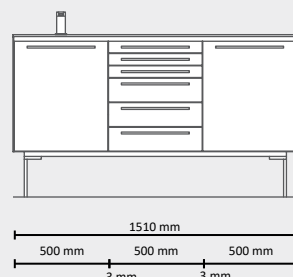**LORAN LOOK – ZESTAW A**

opcja: **asystor LORAN LOOK**


cena katalogowa: **19 500 PLN**
+ 5200 PLN

LORAN LOOK – ZESTAW B (stojący na podłodze)

4 moduły szafek – korpus biały, fronty białe z uchwytami, detal (pasek pod blatem) w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

Do wyboru: szafka umywalkowa, szafka z szufladami, szafka z drzwiczkami i półkami, szafka z blatem pod urządzenie wolnostojące.

Blat: Corian z umywalką i manualną baterią do wody, kolor biały z cokołem 12 mm.

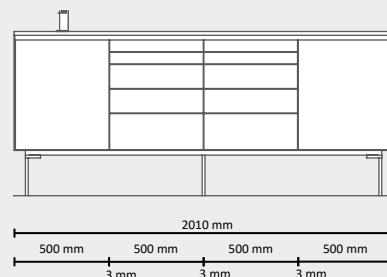**LORAN LOOK – ZESTAW B**

opcja: zamiana jednego modułu szafki na **asystor LORAN LOOK** **+ 2500 PLN**

cena katalogowa: **26 000 PLN**

LORAN LOOK – ASYSTOR

5 szuflad, 5 wkładów

kolorystyka: korpus biały, fronty szuflad białe

szuflady z uchwytami

pasek pod blatem szary-antracyt

płaski blat CORIAN z rączką

asystor LORAN LOOK

opcja: szuflady zamykane i otwierane naciskowo



cena katalogowa: **5200 PLN**
+ 300 PLN

LORAN LOGO – ASYSTOR

mobilny stolik zabiegowy

2 półki z rantami i 1 półka/podstawa

lakierowany - biały

duże kółka z hamulcami

dwa gniazdko 230V

spiralny przewód przyłączeniowy



cena katalogowa: **2200 PLN**

- ✓ Wszystkie meble wykonane są z metalu lakierowanego na kolor biały.
- ✓ Detal kolorystyczny (pasek pod blatem) – według kolornika RAL.
- ✓ Wszystkie szuflady (szafek i asystorów) są wyposażone we wkłady.
- ✓ Istnieje możliwość zamówienia mebli podwieszanych.



LINIA ALA

LORAN ALA 100 z wyposażeniem

(wisząca na ścianie szafka/organizer)

Moduł o długości 100 cm zawierający:

- podajnik do mydła,
- podajnik do ręczników,
- podajnik do serwet,
- 2 x podajnik do rękawiczek,
- podajnik do maseczek,
- podajnik do kubków.

Korpus biały, front w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

LORAN ALA 100 z wyposażeniem

cena katalogowa: **6900 PLN**



LINIA PURA

PURA

CENTRUM STERYLIZACJI



LORAN PURA to profesjonalny zestaw do wyposażenia sterylizatorni. Składa się z wysokiej jakości mebli wykonanych z lakierowanej na biało stali i zintegrowanej z nimi urządzeń:

Zestaw mebli o długości 271 cm, głębokości 64 cm i wysokości 200 cm – rozkład szafek według prezentowanego zdjęcia:

- dół – szafka pojemnościowa o szerokości 50 cm, szafka podzlewowa o szerokości 50 cm, 60 cm przestrzeni do zamontowania termodezynfektora, szafka o szerokości 60 cm na autoklaw, szafka pojemnościowa o szerokości 50 cm
- góra – szafka pojemnościowa o szerokości 150 cm
- panel ochronny z relingiem do podwieszenia akcesoriów: pojemnika na zużyte igły, myjki ultradźwiękowej, podajnika do rękawów
- blat z materiału Corian ze zintegrowanym zlewem i kranem

Wyposażenie:

- autoklaw klasy B STERN WEBER SW-22 PLUS (22 l, wbudowany rejestrator cykli)
- termodezynfektor TETHYS D60 ze wzmocnionym suszeniem
- zgrzewarka MILLSEAL+ (manualna)
- myjka ultradźwiękowa POLSONIC SONIC 3 (z koszem, pokrywą i stojakiem do wiertel)

cena katalogowa: 121 900 PLN

cena promocyjna: 99 000 PLN

rata miesięczna: 1590 PLN

(0% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 3,79%)

KRZESŁO DENTYSTYCZNE ERGONOMIC TASK CHAIR - SUPPORT

Mamy przyjemność przedstawić Państwu jeden z najbardziej wygodnych, funkcjonalnych i zdrowych stołków dentystycznych. Projektantem stołków firmy SUPPORT DESIGN o nazwie Ergonomic Task Chair - SUPPORT (ang. podparcie) jest profesor Bruno Mathsson z Uniwersytetu Chalmers w Göteborgu w Szwecji. Stołki SUPPORT zostały specjalnie zaprojektowane dla stomatologów.

Mając na uwadze dużą liczbę chorób zawodowych dentystów oraz często nienaturalną pozycję pracy, wygodny i ergonomiczny stołek staje się bezcenny. Krzesło SUPPORT eliminuje kłopoty z kręgosłupem. Dźwignia, znajdującą się w łatwo dostępnym miejscu, pozwala nie tylko unieść i opuścić siedzisko stołka, ale również wyregulować kąt oparcia i głębokość pozycji lekarza. Oparcie może być ustawione w funkcji podążania za ruchem pleców operatora (pochylenie w kierunku pacjenta i prostowanie) wraz z płynną zmianą kąta położenia siedziska. Dzięki „kubelkowemu” kształtowi siedziska lekarz siedzi pewnie i nie zsuwa się nawet przy pochyleniu. Oparcie posiada również regulację wysokości. Powyższe cechy pozwoliły na maksymalnie indywidualne określenie pozycji pracy przy fotelu w sposób szybki i wygodny. Dwa rozmiary średnicy podstawy stołka umożliwiają pracę zarówno na godzinie 9., jak i 12. Moment zmęczenia na stołku SUPPORT pojawia się znacznie później niż podczas pracy na tradycyjnym krzesle. Dostępne są również akcesoria do stołków, takie jak: nierdzewne okrągłe oparcie pod stopy, nożny regulator wysokości siedziska i różne rodzaje podłokietników. Na szczególną uwagę zasługuje podłokietnik RELAX, który podtrzymując ramię lekarza pozwala na swobodny ruch w poziomie, redukując jego ciężar do minimum.

Stołki SUPPORT oferowane są z tapicerką skórzaną bądź winylową w 34 kolorach. Stołki SUPPORT zdobyły ogromne uznanie na całym Świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii i Niemczech.



Support

Tapicerka skórzana



Support

Tapicerka winylowa



Support

Tapicerka winylowa



Aktywne oparcie i siedzisko gwarantują optymalne podparcie lędźwiowe w każdej pozycji pracy



Podłokietnik RELAX minimalizuje zmęczenie operatora



Możliwość wyboru wysokości teleskopu

NAJLEPSZY PRZYJACIEL TWOICH PLECÓW

Dlaczego „Support”?



1

Aktywne oparcie stołka gwarantuje optymalne podparcie lędźwiowe w każdej pozycji pracy.

2

Zmiana kąta nachylenia siedziska eliminuje ucisk krawędzią siedziska na naczynia krwionośne nóg.

3

Średnica (62 cm) podstawy stołka pozwala na pracę z boku lub z tyłu pacjenta.

4

Trzy wysokości teleskopu pozwalają na dostosowanie stołka do wzrostu użytkownika.

5

Podłokietniki dostępne w kilku wariantach, podtrzymując ramię operatora, redukują jego ciężar do minimum.

6

Wszystkie funkcje stołka wywołuje się tylko jedną dźwignią.

**Twoje zdrowie
jest najważniejsze!**

krzesła dentystyczne	cena (PLN)
Ergonomic Task Chair - SUPPORT (tapicerka ze sztucznej skóry w kolorze szarym STONE 23-57) PROMOCJA	4200
Ergonomic Task Chair - SUPPORT (tapicerka winylowa lub ze sztucznej skóry)	5400
Ergonomic Task Chair - SUPPORT (tapicerka ze skóry naturalnej)	6600

KRZESŁO DENTYSTYCZNE ERGONOMIC TASK CHAIR - STATERA

Statera **NOWOŚĆ**

Nowatorskie rozwiązanie łączące ergonomię siodła z wygodą użytkowania klasycznego krzesła.



Mechanizm

Trwały metalowy mechanizm, z bezstopniową regulacją pozycji oparcia oraz siedziska. Osobne dźwignie zlokalizowane pod siedziskiem.

Siedzisko i oparcie

Wyposażone w elastyczną gąbkę. Siedzisko z regulacją wysokości i kąta pochylenia. Oparcie z regulacją wysokości i głębokości.

Tapicerka

Dostępna wersja skórzana, winylowa oraz winylowa STERN WEBER. Wyposażona w elastyczną piankę. Obicie można samodzielnie zdjąć.

Teleskop

Dostępny w trzech rozmiarach. Bezobsługowy gazowy siłownik, wypełniony obojętnym azotem.

Kółka

Osadzone na pięcioramiennym metalowym stelażu, cichobieżne kółka. Wymienne, wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Krzesło może posiadać oparcie: OBŁE podpierające plecy lub CORE+ obejmujące dodatkowo talię. Jest także dostępne bez oparcia w formie taboretu.

POŁĄCZENIE TRADYCYJNEGO KRZESŁA I SIODŁA

Statera to najnowsza propozycja szwedzkiego producenta ergonomicznych krzeseł Support Design. Opatentowane siedzisko zaprojektowano z myślą o długim siedzeniu w wymagających warunkach. Siedzisko zawiera cechy siodła sprzyjające zachowaniu poprawnej postawy, przy jednoczesnej wygodzie klasycznego krzesła. Pomaga użytkownikowi zająć pozycję zmniejszającą napięcie statyczne szyi, ramion i pleców.

Regulacja położenia siedziska i oparcia odbywa się niezależnie i bezstopniowo. Każda ruchomość zwalniana osobną i łatwo dostępną dźwignią. Mechanizm, tapicerka i układ jezdy są najwyższej jakości co zapewnia komfortowe, bezawaryjne i długie użytkowanie.

Do wyboru są dwa rodzaje oparcia oraz kolor tapicerki.

Dostępna jest również nożna dźwignia zmiany wysokości.

W razie potrzeby, w każdej chwili istnieje możliwość doposażenia krzesła w stałe lub dynamiczne podłokietniki lub podpory łokci znane z krzeseł asystenckich.



Specyfikacja techniczna

Wysokość siedziska	regulowana: 41-56 / 49-68 / 57-81 cm (patrz tabela poniżej)
Głębokość i szerokość siedziska	34x40 cm
Wymienne kółka	Tak
Średnica podstawy	50 cm
Rodzaje obicia	Skóra skandynawska lub winyl
Wymienne obicie	Tak
Waga	9 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg

Dostępne akcesoria (opcje)

Cena

Okrągła metalowa obręcz / podpora stóp	700
Nożny regulator wysokości siedziska	900
Tapicerowany podłokietnik asystencki SWING	1800/2500 (skóra)
Tapicerowany podłokietnik asystencki SWING MINI	1800/2500 (skóra)
Podłokietnik aktywny RELAX	1500 (sztuka)
Para podłokietników stałych FIXED	1700 (para)

Dostępne rozmiary teleskopów

Wzrost użytkownika	Teleskop	Wysokość siedziska
< 165 cm	4FH	41-56 cm
165 – 185 cm	4C	49-68 cm
> 185 cm	4A	57-81 cm

krzesła dentystyczne

cena (PLN)

ERGONOMIC TASK CHAIR - STATERA (tapicerka 121 szary antracyt Stern Weber) PROMOCJA	5200 4200
ERGONOMIC TASK CHAIR - STATERA (tapicerka winylowa kolor do wyboru)	4200
ERGONOMIC TASK CHAIR - STATERA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber do wyboru)	5200

SIODŁA DENTYSTYCZNE

Od lat użytkownicy na całym świecie cieszą się z licznych korzyści płynących z ergonomicznego siedzenia na stołkach typu siodło. Siodła firmy Support Design ułatwiają utrzymanie prawidłowej postawy i są stworzone dla profesjonalistów, którzy chcą zmniejszyć zmęczenie i potencjalne niedogodności towarzyszące długim zabiegom.

Classic



Advanced



Classic

Model ten sprzyja utrzymaniu zdrowej postawy, tworząc pomiędzy kręgosłupem a biodrami kąt rozwarty, pomagając w ten sposób zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa.

Advanced

Siodło wyposażone jest we wcięcie w przednim łuku. Wersja ta została opracowana w celu zmniejszenia dystansu w ustawieniu "nożycowym" zespółu.

Lite



Lite Advanced



Lite

Opracowany na bazie Classic model Lite dysponuje mniejszą średnicą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję pracy drobniejszym użytkownikom. Odpowiedni szczególnie dla użytkowników niższego wzrostu.

Lite Advanced

Siodło wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk. Lite Advanced dysponuje mniejszą średnicą siedziska, pozwalając utrzymać wygodną pozycję pracy drobniejszym użytkownikom.

Lite Hybrid



Lite Hybrid Advanced



Lite Hybrid

Opracowany na bazie Lite model ten posiada specjalną sprężynę, umieszczoną pod siedziskiem, która umożliwia jego ruch we wszystkich kierunkach. Podąża ono za ciałem użytkownika wzmacniając mięśnie odcinka lędźwiowego. Wysokość siedziska regulowana podnośnikiem nożnym.

Lite Hybrid Advanced

Model ten posiada technologię identyczną z Lite Hybrid. Siedzisko zamontowane na sprężynie podąża za ciałem użytkownika wzmacniając mięśnie odcinka lędźwiowego. Wyposażone jest z przodu w wycięcie w kształcie litery V, minimalizujące nieprzyjemny ucisk.

siodła dentystyczne	cena (PLN)
Ergonomic Task Chair - CLASSIC (tapicerka winylowa)	3500
Ergonomic Task Chair - CLASSIC (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4200
Ergonomic Task Chair - ADVANCED (tapicerka winylowa)	3700
Ergonomic Task Chair - ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4500
Ergonomic Task Chair - LITE (tapicerka winylowa)	3400
Ergonomic Task Chair - LITE (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	3900
Ergonomic Task Chair - LITE ADVANCED (tapicerka winylowa)	3700
Ergonomic Task Chair - LITE ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	4500
Ergonomic Task Chair - LITE HYBRID (tapicerka winylowa)	4600
Ergonomic Task Chair - LITE HYBRID (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5400
Ergonomic Task Chair - LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka winylowa)	4800
Ergonomic Task Chair - LITE HYBRID ADVANCED (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5600

TABORETY I KRZESŁA DENTYSTYCZNE

Prisma



Jest to najbardziej kompaktowy taboret z oferty firmy Support Design. Jego niewielki rozmiar umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie go w miejscu pracy. Regulowanie wysokości odbywa się przy użyciu dźwigni umieszczonej pod płaskim siedziskiem.

Taburett



Model ten jest połączeniem kompaktowego designu z wysoce komfortowym siedziskiem pozwalającym na osiągnięcie zdrowej, naturalnej pozycji kręgosłupa w czasie pracy. Krzesiśko może być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez regulację kąta nachylenia oraz wysokości siedziska.

Akka



Krzesiśko to jest połączeniem tradycyjnego wyglądu z nowoczesnym i ergonomicznym designem. Regulacja wysokości, a także kątów oparcia oraz siedziska pozwala na ustawienie optymalnej pozycji. Wygodne oparcie w połączeniu z nieznacznie wyprofilowanym siedziskiem zapewnia komfortową pracę.

taborety i krzesła dentystyczne	cena (PLN)
Ergonomic Task Chair - PRISMA (tapicerka winylowa)	2200
Ergonomic Task Chair - PRISMA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	2900
Ergonomic Task Chair - TABURETT (tapicerka winylowa)	3200
Ergonomic Task Chair - TABURETT (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	3900
Ergonomic Task Chair - AKKA (tapicerka winylowa)	3700
Ergonomic Task Chair - AKKA (tapicerka skórzana lub tapicerka Stern Weber)	5000

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

RELAX



SWING



**SWING
MINI**



akcesoria do krzeseł, siodeł i taboretów dentystycznych	cena (PLN)
podłokietnik RELAX z regulowaną wysokością i zakresem ruchu w poziomie	1500 (sztuka)
tapicerowany podłokietnik asystencki SWING	1800/2500 (skóra)
tapicerowany podłokietnik asystencki SWING MINI	1800/2500 (skóra)
podparcie lędźwiowe CORE+	1200/1700 (skóra)
podparcie lędźwiowe MINI	MINI lub OVAL 1200/1700 (skóra)
okrągła metalowa obręcz / podpora stóp	700
nożny regulator wysokości siedziska	900



SYSTEMY OŚWIETLENIOWE D-TEC

Czy wiesz, że...

- Człowiek odbiera oczami 80% wszystkich bodźców. Oświetlenie oddziałuje na Ciebie bardziej, niż to sobie wyobrażasz. W przypadku stomatologów nie może być kompromisu w ich najważniejszym narzędziu pracy - wzroku.
- W przypadku Twojej profesji występuje specyficzny problem - wzrok musi nieustannie przystosowywać się do silnego oświetlenia lampy operacyjnej oraz słabszego lamp zewnętrznych.

- Zaleca się aby te różnice natężenia światła nie były większe niż 5:1.
- W północnych częściach naszego globu wydajność pracy w miesiącach zimowych spada o 12% z powodu mniejszej ilości światła.

Dlatego oświetlenie miejsca pracy jest bardzo ważnym elementem wpływającym na efektywność oraz dobre samopoczucie.

D-TEC

BEZKOMPROMISOWE SYSTEMY OŚWIETLENIOWE DLA STOMATOLOGÓW

Charakterystyka techniczna

- wysokie natężenie oświetlenia
- optymalna barwa światła – światło dzienne 4000-6500 K RA85-93
- filtr IR redukujący emisję ciepła
- brak efektu stroboskopowego
- światło wysokiej częstotliwości bez efektu migotania
- brak pól magnetycznych
- płynna regulacja natężenia światła (standard w czterech modelach, w pozostałych jako opcja)
- możliwość oświetlania światłem odbitym
- konstrukcja zapewniająca prostą obsługę oraz łatwą wymianę żarówek
- klasa bezpieczeństwa IP20
- zawiesia linkowe
- mała waga
- akrylowa obudowa



Struktura nośna wykonana jest z lekkich, wysokiej jakości profili aluminiowych. W wyposażeniu znajdują się nieoślepiające, bezcieniowe żarówki oraz dyfuzor nakierowujący strumień światła na miejsce pracy. Akrylowa, górna osłona jest wyposażeniem standardowym. Wersja z oświetleniem bezpośrednim jest dostępna na zamówienie.

Prosta instalacja

Cztery zawiesia linkowe z automatycznymi blokadami można ustawić w dowolnym punkcie obwodu obudowy.

LAMPY D-TEC – DOSTĘPNE WERSJE I CENY

Produkt	Moc światła	Jasność	Wymiary	Waga	Cena	Zdjęcie produktu
BRITE TRITON D	LED 159 W	3450 lux/1,2 m	1200 x 390 x 45 mm	7 kg	8900 PLN	
	Nowy model TRITON wykorzystuje oświetlenie LED zarówno w zakresie barwy światła chłodnej (białej), jak i ciepłej (żółtej). Do urządzenia dołączony jest bezprzewodowy sterownik umożliwiający płynną regulację natężenia obu barw.					

Produkt	Moc światła	Jasność	Wymiary	Waga	Cena	Zdjęcie produktu
BRITE TETRON	LED 212 W	4550 lux/1,2 m	1200 x 550 x 45 mm	11 kg	12 900 PLN	
	Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła.					

Produkt	Moc światła	Jasność	Wymiary	Waga	Cena	Zdjęcie produktu
BRITE DUO	LED 170 W	3850 lux/1,2 m	1200 x 650 x 45 mm	2 x 5 kg	12 900 PLN	
	Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła.					

Produkt	Moc światła	Jasność	Wymiary	Waga	Cena	Zdjęcie produktu
CLAIR	LED 104 - 216 W	3000 lux/1,2 m	1530 x 670 x 59 mm	16,3 kg	15 900 PLN	
	Wykorzystuje oświetlenie LED z płynną zmianą natężenia światła, możliwością dynamicznej regulacji barwy światła (ciepłe/zimne – opcja + 1500 PLN) oraz oświetleniem sufitowym (opcja + 700 PLN).					

Produkt	Moc światła	Jasność	Wymiary	Waga	Cena	Zdjęcie produktu
LEAF	LED 115 - 168 W	3000 lux/1.2 m	1190 x 638 x 51 mm	12 kg	21 900 PLN	
	Innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe. Optymalna wydajność świetlna, precyzyjne odwzorowanie barw, harmonijne dopasowanie do przestrzeni. Technologia SunLike LED – redukuje emisję światła niebieskiego, naśladując naturalne spektrum blasku słonecznego, współczynnik CRI 98. Zdrowsze i bardziej komfortowe warunki oświetleniowe. Zaawansowana regulacja barwy światła. Możliwość dostosowania do każdej sytuacji – od tonacji uspokajających po energetyzujące.					

SYSTEMY OŚWIETLENIOWE LAKO GABINET

GABINET W NAJLEPSZYM ŚWIECLE



komfort pracy



brak zmęczenia

CRI > 94

idealne parametry
techniczneprojekt oświetlenia
zgodny z normami

Właściwe oświetlenie gabinetu stomatologicznego to niezwykle wymagające zadanie. Właściwie dobrane światło znacząco **podnosi komfort pracy** lekarza i całego zespołu, **zmniejsza ryzyko błędów oraz chroni zdrowie** pracowników i pacjentów. Liderem w tej dziedzinie jest LAKO – polska, rodzinna firma produkcyjna, która z sukcesem oświetla placówki stomatologiczne w całej Europie. Oprawy LAKO gwarantują **idealną barwę światła i najwyższy poziom odwzorowania kolorów, a także zapobiegają nadmiernemu zmęczeniu wzroku, bólowi głowy i efektowi olśnienia**. Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy, którymi powinno odznaczać się oświetlenie stomatologiczne najwyższej jakości.

TEMPERATURA BARWOWA I WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW (CRI>94)



5.000 K



4.000 K



4.000 K

Z analizy potrzeb naszych klientów jednoznacznie wynika, że **idealnym wyborem dla gabinetu stomatologicznego jest temperatura barwowa 5000K połączona ze wskaźnikiem oddawania barw CRI≥94**. Światło o takich parametrach doskonale imituje naturalne światło dzienne – nie tylko wspiera koncentrację i redukuje zmęczenie podczas wielogodzinnej pracy, ale przede wszystkim zapewnia wierne odtworzenie kolorów. Dzięki temu praca staje się niezwykle precyzyjna, a ryzyko błędów – zminimalizowane.

BRAK EFEKTU OLŚNIENIA (UGR<19)



mniej wytężony wzrok



doskonała ergonomia



Brak efektu olśnienia znacząco podnosi komfort przebywania w gabinecie – zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Parametr ten opisuje **współczynnik UGR**. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych materiałów oprawy **LAKO** charakteryzują się wartością **UGR<19**, co gwarantuje pełny komfort widzenia bez uczucia oślepiania.

LAMPY LAKO – NASZE WSPÓLNE REALIZACJE



LAMPY LAKO – DOSTĘPNE WERSJE I CENY

Charakterystyka techniczna modelu DLN A 950 PEND:

- idealne parametry dla stomatologii: oddawanie barw CRI>94, barwa światła 5000K,
- technologia eliminująca ośnienie,
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora,
- montaż: oprawa zwieszana (istnieje możliwość wyboru również oprawy w wersji nastropowej i dostropowej),
- wysokość: 12 cm, średnica: 95 cm,
- źródło światła: energooszczędne źródła LED,
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
- oprawa z atestem higienicznym PZH
- możliwość sterowania natężeniem – opcja DALI



DLN A 950 PEND CENA: 5850 PLN

Charakterystyka techniczna modelu SK ULTRA SLIM PEND:

- idealne parametry dla stomatologii: oddawanie barw CRI>94, barwa światła 5000K, technologia eliminująca ośnienie,
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora,
- montaż: oprawa zwieszana (istnieje możliwość wyboru również oprawy w wersji nastropowej i dostropowej),
- wysokość: 5,5 cm, długość 120 cm, szerokość 90 cm,
- źródła światła: energooszczędne źródła LED,
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
- oprawa z atestem higienicznym PZH
- możliwość sterowania natężeniem – opcja DALI



SK US PEND CENA: 4150 PLN

Charakterystyka techniczna modelu RING SUPER SLIM 1200:

- idealne parametry dla stomatologii: oddawanie barw CRI>94, barwa światła 5000K
- technologia eliminująca ośnienie,
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora,
- montaż: oprawa zwieszana,
- wysokość: 8 cm, średnica rekomendowana nad unit stomatologiczny to 120 cm (dostępna również średnica 100cm),
- źródła światła: energooszczędne źródła LED,
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
- oprawa z atestem higienicznym PZH,
- możliwość sterowania natężeniem – opcja DALI



RING SUPER SLIM CENA: 6520 PLN

Cechy charakterystyczne opraw DENTAL WAVE:

- idealne parametry dla stomatologii: oddawanie barw CRI>94, barwa światła 5000K
- konstrukcja poprawiająca ergonomię pracy lekarza oraz asysty,
- unikatowy design,
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora,
- źródła światła: energooszczędne źródła LED,
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
- pomysł i projekt koncepcyjny Dental Wave: arch. Grzegorz Woronowicz Romident
- wsparcie koncepcyjne: dr hab. Dominika Drezner - Ilczuk
- opracowanie techniczne: zespół LAKO
- oprawa z atestem higienicznym PZH,
- możliwość sterowania natężeniem – opcja DALI



DENTAL WAVE CENA: 11 300 PLN